

Cupon pentru ciorapi

Cupon pentru ciorapi

Modelul dvs. personalizat este acum disponibil!

ofa bamberg

Pentru a repetarea comenzii la următoarea dvs. achiziție să decurgă simplu și fără complicații, găsiți în partea din stânga **cuponul dvs. personal pentru ciorapi** cu toate informațiile importante. Pur și simplu trageți, lipiți și păstrați într-un loc sigur.

Cu cele mai bune gânduri,  
**Echipa Ofa Bamberg**

Prospectul pentru mașina dvs. de spălat:



### Cum să spălați corect ciorapii compresivi

**Vă rugăm să spălați ciorapii Lastofa Forte pe față și ciorapii Lastofa Extra pe dos și să nu utilizați balsam de rufe!**

- Ciclu de spălare pentru rufe delicate
- Nu utilizați înălbitori
- Uscați cu grijă
- Nu călcați
- Nu curățați chimic

#### Spălarea

- produs adecvat pentru utilizarea imediată
- recomandare: a se spăla înainte de prima purtare
- spălare zilnică manuală (max. 40 °C) sau în mașina de spălat, cu ciclul de spălare pentru rufe delicate
- separat, cu detergenți pentru rufe delicate (de ex. „Detergent special Ofa Clean”), nu utilizați balsam de rufe
- clătiți bine, centrifugați ușor, dar nu stoarceți
- uscați pe un prosop la aer sau în uscătorul de rufe, la programul pentru rufe delicate, nu îi călcați niciodată cu fierul de călcat și nu îi uscați pe calorifer sau la soare

#### Compoziția materialului

Materialele utilizate sunt poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și bumbac (Baumwolle) sau lână merinos (Merinowolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapul dvs. se află toate datele concrete.

#### Îngrijire

- păstrați ciorapii uscați, pe cât posibil în ambalajul original, protejați împotriva razelor directe ale soarelui și a căldurii
- aveți grijă ca ciorapii cu benzi adezive cu strat de silicon să nu intre în contact cu solvenți, unguente, creme și geluri de duș emoliente deoarece acestea ar putea deteriora permanent adezivitatea
- acordați atenție îngrijirii regulate a picioarelor și purtați încălțăminte corespunzătoare
- formarea de scame (Pilling) este normală în cazul textilelor și nu constituie un motiv de reclamație
- nu reparați singuri deteriorările, ci aduceți ciorapii înapoi la furnizorul specializat de la care i-ați achiziționat

#### Scopul propus

Ciorapii compresivi sunt utilizați în tratamentul afecțiunilor flebologice și limfologice ale brațelor și picioarelor, precum și în cazul lipedemelor. În funcție de indicațiile medicului, se vor folosi produse diferite.

#### Principiul activ al ciorapilor compresivi medicinali

În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea sângelui este accelerată, microcirculația din țesuturi este îmbunătățită, iar fluxul limfatic este sporit.

#### Informații importante

- ciorapii compresivi trebuie purtați numai după ce v-ați consultat cu medicul dvs.
- purtarea zilnică și controalele medicale periodice asigură succesul tratamentului
- distribuirea și sfaturile cu privire la îmbrăcarea corectă a ciorapilor trebuie oferite de personalul de specialitate, instruit din punct de vedere medical
- în caz de dureri acute ale picioarelor sau de reacții cutanate, adresați-vă imediat medicului
- schimbarea periodică a poziției benzilor adezive poate preveni iritațiile cutanate
- în caz de probleme de calitate și reclamații, adresați-vă furnizorului dvs. specializat

pentru furnizorul specializat: date despre ciorapi pentru arhive de către dvs.

www.ofta.de  
export@ofta.de  
Fax + 49 951 6047-186  
Tel. + 49 951 6047-777  
D-96052 Bamberg  
Lubanger 20  
**Ofa Bamberg GmbH**

ofta bamberg

### Facem tot posibilul – ca să vă simiți bine în pielea dumneavoastră!

Modelele dvs. personalizate de la Ofa corespund, de exemplu, celor mai riguroase cerințe la nivel mondial de calitate și testare pentru ciorapi de compresie medicali (RAL-GZ 387/1) și sunt conforme cu standardul Öko-Tex Standard 100 care prevede utilizarea de materiale și vopsele fără grad de risc.

Certificările periodice efectuate de institute de testare independente documentează manipularea responsabilă a produselor noastre.

Cu modelele dvs. personalizate de la Ofa, aveți posibilitatea să purtați rezultatul unor cercetări și evoluții îndelungate. Prelucrarea atență și nivelul ridicat de calitate sunt asigurate și controlate prin utilizarea celei mai moderne tehnologii.

de la Casa Ofa Bamberg

### Calitate de top

**Indicații (a se vedea și Directiva Medicală privind Tratatamentul Compresiv AWMF 037/005, versiunea 12/18)**

– ameliorarea simptomelor venoase și îmbunătățirea calității vieții în cazul afecțiunilor venoase cronice

– prevenția și tratamentul edemelor venoase

– prevenția și tratamentul modificărilor de origine venoasă a tegumentelor

– eczeme și pigmentări

– dermatoză postdecoză și atrofie albă

– tratamentul și ameliorarea durerilor în cazul Ulcus cruris venosum și proflaxia recidivelor

– tratamentul Ulcus cruris arterial și venos (a se vedea și contraindicațiile!)

– varicoză

– fază inițială de după tratamentul varicozei

– insuficiență venoasă funcțională

– malformații venoase

– tromboză venoasă

– starea de după tromboză

– sindrom posttrombotic

– proflaxia trombozei în cazul pacienților mobili

– limfedeme

– edeme în sarcină

– edeme posttraumatice/postoperatorii

– edeme ciclice idiopatice

– lipedeme în cursul sindromului

– congestii în urma imobilizării (sindrom de sindrom de

– congestii în urma imobilizării (sindrom de sindrom de

– edeme aparute în urma expunerii profesionale (profesii care presupun statul în picioare sau șezutul pe durate mari de timp)

– edeme cauzate de medicamente, atunci când

– cesteia nu pot fi schimbate

– obținute cu insuficiență venoasă funcțională

– dematoze inflamatorii ale picioarelor

– greeță, amețeli și senzație de congestie în sarcină

– stare după arsuri

– tratamentul cicatricilor

**Contraindicații absolute:**

– boala arterială periferică occluzivă în stadiu avansat

– insuficiență cardiacă decompensată

– flebită septică

– phlegmasia corulie dolens

– tratamentul Ulcus cruris arterial și venos (a se vedea și contraindicațiile!)

– dermatoze umede

– alergice la materialele din care sunt fabricați ciorapii compresivi

– tulburări senzoriale grave ale extremității

– neuropatie periferică în stadiu avansat (de ex., diabet zaharat)

– poliartrită cronică

**In cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.**

**⚠️ Riscuri și efecte adverse**

– în cazul pielii sensibile, ciorapii compresivi pot provoca mâncărimi și alte probleme ale pielii.

– Prin urmare, se recomandă o igienă adecvată a tegumentelor.

– În cazul în care apar următoarele simptome: dvs. în cazul în care apar următoarele simptome:

**Contraindicații relative:**

– dermatoze umede

– alergice la materialele din care sunt fabricați ciorapii compresivi

– tulburări senzoriale grave ale extremității

– neuropatie periferică în stadiu avansat (de ex., diabet zaharat)

– poliartrită cronică

**In cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.**

**⚠️ Riscuri și efecte adverse**

– în cazul pielii sensibile, ciorapii compresivi pot provoca mâncărimi și alte probleme ale pielii.

– Prin urmare, se recomandă o igienă adecvată a tegumentelor.

– În cazul în care apar următoarele simptome: dvs. în cazul în care apar următoarele simptome:

**Obligația de notificare**

– Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

– Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

**Eliminarea**

– Vă rugăm ca la finalul duretei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

**Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.**

**Garantie**

– Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție.

– Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

**Eliminarea**

– Vă rugăm ca la finalul duretei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

**Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.**

**Garantie**

– Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție.

– Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

**Eliminarea**


– Vă rugăm ca la finalul duretei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

**Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.**


**Garantie**

– Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție.

– Conținutul produselor este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare de către mai mulți pacienți, trebuie să se asigure că fiecare pacient este informat în mod adecvat și că produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

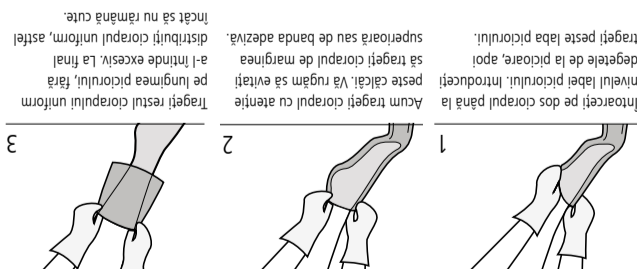

Instrucțiuni de îmbrăcare a ciorapilor cu vârf închis

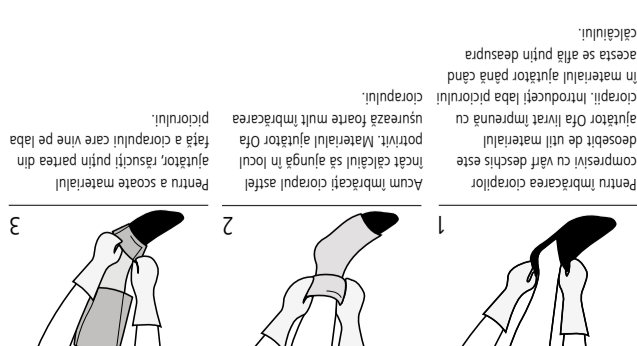

Instrucțiuni de îmbrăcare a ciorapilor cu vârf deschis

ofta bamberg



Rev. 1/04/21