

# الجوارب المصنعة حسب احتياجاتك بين يديك!

## إيصال الجوارب

## إيصال الجوارب

لتسهيل إجراءات إعادة طلب روثنتك التالية وتبسيطها، **سوف تجد إيصال الجوارب الشخصي** مع جميع المعلومات ذات الصلة على الجانب الأيسر. ما عليك سوى نزعه، وضعها معًا وخبزنها جيدًا.

مع أطيب التحيات  
**Ofa Bamberg**

تعليمات بشأن الغسالة:

### الجوارب الطبية الضاغطة **اغسل بشكل جيدًا**

**رجاء تدوير Lastofa Forte إلى اليمين أو غسل جوارب Lastofa Extra مع جعل الجانب الداخلي للخارج مع تجنب استخدام مُنعم أقمشة!**

- دورة غسيل هادئة
- لا تستعمل مبيضات
- تجفيف لطيف
- لا يُكوى
- لا يُنظف كيميائيًا

**للفصل**  
- مناسب للاستخدام القوي  
- نصيحة: يرجى الغسل قبل ارتدائه لأول مرة.  
- الغسل اليومي (٤٠ درجة مئوية بحد أقصى)، باليد أو دورة بسيطة في الغسالة  
- اغسل بشكل منفصل مع منظفات بسيطة (مثل "منظف Ofa Clean خاص")،  
- لا تستخدم مُنعم أقمشة  
- اشطف جيدًا وقم بالتدوير برفق  
- تجنب العصر  
- يُجفف بالهواء باستخدام منشفة أو في دورة بسيطة بالمجفف، مع تجنب الكي أو التجفيف على السخان أو في الشمس.

**تركيبة الخامة**  
يستخدم مادة البولي أميد (Polyamid) والإيلاستين (Elastan) (Baumwolle) و القفن (Elastan) (Merinowolle). للحصول على بيانات محددة، يرجى الرجوع إلى الملصق النسيجي المُثبت في الجورب الخاص بك.

**نهتم برعايتك**  
- يُجفف، بشكل مثالي، في العبوة الأصلية مع الحماية من ضوء الشمس المباشر والحرارة  
- لا تسمح بلامسة الجوارب ذات الأشرطة اللاصقة المغطاة بالنسليكون للمذيبات، والمراهم، والكريمات ولوشن التزطيب، حيث قد تتضرر خاصية اللصق بشكل دائم.  
- انتبه إلى العناية المنتظمة بالرجلين وارتداء أحذية مناسبة.  
- العقد الليفية هي أمر عادي مع الأنسجة وليست سببًا للشكوى.  
- تجنب إصلاح الضرر اللاحق بالجوارب بنفسك لكن يجب عليك إعادتها إلى المورد الذي قمت بشراء الجوارب منه

**الغرض من الاستخدام**  
تستخدم الجوارب الضاغطة في علاج أمراض الأوردة والأمراض اللمفاوية في الذراعين والساقين وكذلك الوذمات. يتم استخدام منتجات مختلفة اعتمادًا على نوعي الاستخدام.

**آلية عمل الجوارب الضاغطة الطبية**  
يفضل المنتجات المصممة وفقًا لدواعي الاستعمال المعنية والضغط المحكوم، يتم تسريع عودة الدم وتحسين دوران الأوعية الدقيقة في الأنسجة وزيادة التدفق الليمفاوي.

**تعليمات هامة**  
- يرجى ارتداء الجوارب الضاغطة فقط بعد استشارة طبيب.  
- الارتداء اليومي والفحوصات المنتظمة تضمن نجاح العلاج  
- يجب أن يقدم الموظفون المدربون طيبًا النصيحة حول كيفية ارتداء الجوارب بشكل صحيح  
- في حالة وجود ألم حاد في الساق أو تفاعلات مع البشرة، يرجى استشارة الطبيب على الفور.  
- تحريك الشريط بانتظام بعض الشيء، يمكن أن يمنع التهاب البشرة.  
- إذا واجهت مشكلات في الجودة أو كانت لديك مشكلات، فيرجى الاتصال بالمورد المتخصص.

المورد المتخصص: معلومات للجوارب اللطيفة

Laubanger 20  
D-96052 Bamberg  
+ 49 951 6047-777 هاتف  
+ 49 951 6047-186 فاكس  
expott@ofa.de  
www.ofa.de

ofa bamberg

### إنتاج وتصنيع الجوارب في ألمانيا




تصنيع الجوارب في ألمانيا  
100 Standard-Text-Ox, GZ 387/11  
تصنيع الجوارب في ألمانيا  
100 Standard-Text-Ox, GZ 387/11

تصنيع الجوارب في ألمانيا  
100 Standard-Text-Ox, GZ 387/11  
تصنيع الجوارب في ألمانيا  
100 Standard-Text-Ox, GZ 387/11

تصنيع الجوارب في ألمانيا  
100 Standard-Text-Ox, GZ 387/11



تعليمات الطريقة الصحيحة

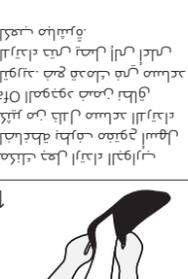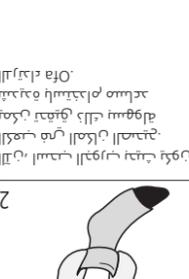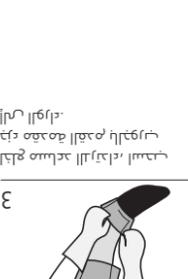

تعليمات الطريقة الصحيحة