

The background of the entire page is a complex, abstract pattern of thin, light gray lines. These lines radiate from several points, creating a star-like or sunburst effect. The lines are of varying lengths and curves, giving the background a dynamic, organic feel.

Gebrauchsanleitung

Instructions for use

ofa[®] basic

Die **ökonomische**
medizinische Kompression

ofa[®]

Ofa – mehr als 90 Jahre Leidenschaft
für die Gesundheit.

**Ofa ist einer der führenden deutschen
Hersteller medizinischer Kompressions-
strümpfe und Bandagen.**

Und das nicht ohne Grund. Denn seit der
Firmengründung im Jahr 1928 hat Ofa einen
ganz klaren Anspruch an seine Produkte:
maximalen Komfort bei optimaler Wirksamkeit.

Neben einer großen Auswahl an Kompressions-
strümpfen bietet Ofa auch ein umfangreiches
Sortiment an Bandagen und Orthesen. Vorbeu-
gende Gesundheitsprodukte, darunter Vital- und
Reisestrümpfe der Marke Gilofa, runden das
Produktportfolio ab.



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

wir freuen uns, dass Sie sich für Kompressionsstrümpfe von Ofa entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Produktinformationen sorgfältig durch. Für eine optimale Wirksamkeit Ihrer Kompressionstherapie!

Zweckbestimmung

Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödem eingesetzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

Wirkprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

Wichtige Hinweise

Tragen Sie medizinische Kompressionsstrümpfe nur nach ärztlicher Rücksprache. Durch tägliches Tragen und regelmäßige ärztliche Kontrollen sichern Sie den Erfolg Ihrer Behandlung! Die Abgabe der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen. Ihr Fachhändler berät Sie auch, wie Sie Ihre Kompressionsstrümpfe richtig anziehen. Sollten beim Tragen akute Beinschmerzen oder Hautirritationen auftreten, holen Sie sich bitte unverzüglich ärztlichen Rat ein. Hautreaktionen im Bereich von Haftbändern kann vorgebeugt werden, indem das Haftband im Laufe eines Tages mehrmals leicht versetzt wird. Sollen die Strümpfe in Kombination mit anderen medizinischen Hilfsmitteln getragen werden, klären Sie dies bitte ärztlich ab. Wir prüfen unsere Produkte im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung. Sollten Sie dennoch Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Reparieren Sie Schäden nicht selbst, sondern bringen Sie den Strumpf zu dem Fachhändler zurück, bei dem er gekauft wurde. Faserknötchen, die sich durch Reibung

an anderen Kleidungsstücken bilden können, mindern die Qualität des Strumpfes nicht.

Pflegehinweise

Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch geeignet. Wir empfehlen, es vor dem ersten Tragen zu waschen. Danach bitte täglich von Hand oder im Schonwaschgang Ihrer Maschine waschen. Waschen Sie die Strümpfe separat mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler (z. B. Ofa Clean Spezialwaschmittel) bei maximal 40° C und spülen Sie sie gut aus. Die Strümpfe können schonend geschleudert werden, bitte wringen Sie sie aber nicht aus. Trocknen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners, aber legen Sie sie nicht auf die Heizung oder in direktes Sonnenlicht. Bügeln Sie die Strümpfe niemals. Um die Wirksamkeit Ihrer Strümpfe zu erhalten, verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin oder Weichspüler. Diese Substanzen greifen das Gestrick an. Kompressionsstrümpfe sind weitgehend unempfindlich gegen Fette und Öle, sollten aber nicht mit

Indikationen (siehe auch Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, Stand 12/18)

- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Ekzem und Pigmentierung
- Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
- Therapie und Schmerzreduktion bei Ulcus cruris venosum, auch Rezidivprophylaxe
- Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
- Venöse Malformationen
- Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Lymphödem
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatisches/postoperative Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödem ab Stadium II
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paren- und Teilparen der Extremität)
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)

- Medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist
- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Kontraindikationen**Absolute Kontraindikationen:**

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft: ABI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder tcPO₂ < 20 mmHg Fußrücken)
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Zu beachtende Risiken (Therapieentscheidung unter Nutzen/ Risiko-Abwägung)

- Nässende Dermatosen
- Unverträglichkeiten auf Kompressionsstrumpfmaterialeien
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)
- Chronische Polyarthrit

Bei Nichtbefolgung dieser Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.**Risiken und Nebenwirkungen**

Medizinische Kompressionsstrümpfe können Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen. Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie ärztlich abklären: Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Fragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch

zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Nicht als Mangel gelten leichte Farbabweichungen, die aufgrund des individuellen Färbeprozesses entstehen können. Entsprechende Ware ist somit von Umtausch und Rücksendungen ausgeschlossen. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Salben in Kontakt kommen. Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern sollten generell nicht mit Lösungsmitteln, Salben, rückfettenden Waschlotionen und Körpercremes in Berührung kommen. Die Haftfähigkeit der Haftbänder kann sonst dauerhaft beeinträchtigt werden (auch Beinbehaarung und trockene Haut können die Funktion der Haftbänder einschränken). Lagern Sie die Strümpfe trocken und geschützt vor Sonne und Hitze, möglichst in der Originalverpackung.

Bitte auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

-  Schonwaschgang
-  Nicht bleichen
-  Schonend trocknen
-  Nicht bügeln
-  Nicht chemisch reinigen


Materialzusammensetzung

Verwendet werden Polyamid, Elastan und bei einigen Produkten Baumwolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingenähten Textiletikett.

Anziehtipps

Ziehen Sie die Strümpfe gleich frühmorgens nach dem Aufstehen an, solange Ihre Beine noch frei von Schwellungen sind. Bitte ziehen Sie den Kompressionsstrumpf nicht am Abschluss- oder Hafrand nach oben, sondern streifen Sie ihn mit den Händen von unten nach oben. Um das Anziehen zu erleichtern und das Gestrick zu schonen, empfiehlt es sich, Haushalts-Gummihandschuhe zu tragen. Schmuck und lange Fingernägel können den Strumpf beschädigen. Achten Sie bitte auch auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk. Fragen Sie in Ihrem medizinischen Fachhandel nach den Ofa Grip Spezial-Handschuhen und den praktischen Ofa An- und Ausziehhilfen für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Spitze.

Anziehenanleitung, geschlossene Spitze

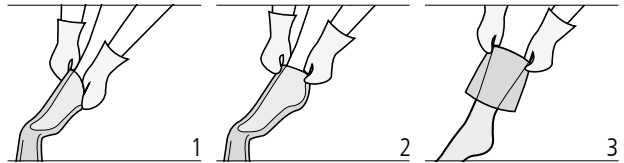

Zum Anziehen wenden Sie den Strumpf bis zum Fuß auf Links. Streifen Sie das Fußteil über die Zehen und anschließend über den Spann.

Ziehen Sie nun das Beinteil vorsichtig über die Ferse. Bitte vermeiden Sie es dabei, den Strumpf am Abschluss- oder Hafrand hochzuziehen.

Streifen Sie den restlichen Strumpf gleichmäßig hoch, ohne ihn zu überdehnen. Zum Schluss verteilen Sie den Strumpf am Bein, bis er faltenfrei anliegt.

Anziehenanleitung, offene Spitze



Das Anziehen Ihrer Kompressionsstrümpfe mit offener Spitze erleichtern Sie sich wesentlich mit der mitgelieferten Ofa-Anziehhilfe (100% Polyester). Schlüpfen Sie mit dem Fuß so in die Anziehhilfe, dass diese bis kurz über die Ferse reicht.

Nun ziehen Sie den Strumpf so weit an, dass die Ferse an der richtigen Stelle sitzt. Mit der Ofa-Anziehhilfe ist dies ganz leicht.

Zum Ausziehen der Anziehhilfe stülpen Sie den Vorfußteil des Strumpfes zurück.

Dann ziehen Sie die Anziehhilfe nach vorne über die Zehenspitzen heraus.

Anschließend wird der Vorfußteil des Strumpfes wieder ordnungsgemäß nach vorne gerollt. Dann streifen Sie den restlichen Strumpf gleichmäßig hoch, ohne ihn zu überdehnen. Zum Schluss verteilen Sie den Strumpf am Bein, bis er faltenfrei anliegt.

Dear User,

we are delighted that you have chosen Ofa compression stockings and thank you for putting your trust in us. Please take a moment to read through this product information carefully. For optimal compression therapy effectiveness!

Intended use

Compression stockings are used to treat phlebological and lymphological arm and leg conditions, as well as lipoedema. Different products are used depending on the indication.

Effective principle of medical compression stockings

Products tailored to the respective indication and controlled pressure accelerate blood reflux, improve microcirculation in the tissue and increase lymph flow.



Important information

Only wear compression stockings after consultation with your doctor. Wearing your stockings daily and holding regular consultations with your doctor will ensure successful treatment! The stockings must be obtained from a medically trained specialist retailer. Your specialist retailer will also advise you on how to put the compression stockings on correctly. If you experience leg pain or skin irritation while wearing these stockings, please consult your doctor immediately. You can prevent skin reactions in the area around the grip tops by slightly adjusting the grip tops several times during the day. Please contact your doctor about wearing the stockings in combination with using other medical devices. We test our products within the scope of a comprehensive quality assurance. However, if you still have cause for complaint, please contact your specialist retailer. Do not attempt to perform repairs yourself. Return stockings to the specialist retailer who sold them to you. Any pilling of the material that may arise due to friction with other garments will not reduce the stocking's quality.

Care instructions

The product is suitable for immediate use. We recommend washing the product before wearing it for the first time. Then wash daily by hand or on a delicate fabric program. Wash the stockings separately with mild detergent without fabric softener (e.g. Ofa Clean special detergent) at a maximum temperature of 40 °C and rinse them well. The stockings can be spun gently, but do not wring them out. Dry your compression stockings in air or in a dryer on a gentle cycle. Do not place them on a heater or in direct sunlight. Never iron the stockings. To maintain the effectiveness of your stockings, please do not use chemical cleaning agents, petrol, or fabric softeners. These substances damage the knitted fabric. Compression stockings are largely resistant to fats and oils, but should not come into contact with ointments. Stockings with silicone-coated grip tops should generally not come into contact with solvents, ointments, re-greasing washing lotions and body creams.

Indications (see also AWMF Medical Compression Therapy Guideline 037/005, Version 12/18)

- Improvement of venous symptoms and quality of life with chronic venous diseases
- Prevention and treatment of venous oedema
- Prevention and treatment of venous skin alterations
- Eczema and pigmentation
- Lipodermatosclerosis and atrophie blanche
- Therapy and pain reduction for venous leg ulcers, including relapse prevention
- Treatment of arterial and venous leg ulcers (see contraindications!)
- Varicose veins
- Initial phase after treatment for varicose veins
- Functional venous insufficiency
- Venous malformations
- Venous thrombosis
- Condition after thrombosis
- Post-thrombotic oedema
- Thrombosis prophylaxis in mobile patients
- Lymphoedema
- Oedema in pregnancy
- Post-traumatic/post-operative oedema
- Cyclic idiopathic oedema
- Stage II lipoedema and above
- Venous stasis resulting from immobility (arthrogenic congestive syndrome, paresis, and partial paresis of the extremity)
- Occupation-related oedema (occupations involving long periods of standing and sitting)

- Medication-related oedema, if change of medication not possible
- Obesity with functional venous insufficiency
- Inflammatory dermatoses of the legs
- Nausea, dizziness, and congestion complaints during pregnancy
- Condition after burns
- Scar treatment

Contraindications

Absolute contraindications:

- Advanced peripheral arterial occlusive disease (if any of the following values apply: ABPI < 0.5, ankle arterial pressure < 60 mmHg, toe pressure < 30 mmHg or $TcPO_2$ < 20 mmHg on instep)
- Congestive heart failure
- Septic phlebitis
- Phlegmasia cerulea dolens

Risks to be considered (therapy decision to be made based on benefit/risk assessment)

- Weeping dermatoses
- Allergies to compression stocking materials
- Severe sensitivity disorders of the extremity
- Advanced peripheral neuropathy (e.g. diabetes mellitus)
- Chronic polyarthritis

No liability is accepted if these contraindications are not observed.

Risks and side effects

Medical compression stockings can cause skin necrosis and pressure damage to the peripheral nerves. Patients with sensitive skin may experience itching and skin irritation when using compression stockings. Adequate skin care is therefore recommended.

If you suffer the following symptoms, please take off the stockings immediately and discuss further treatment with your doctor: blue or white coloration of the toes, sensations of discomfort and numbness, increasing pain, shortness of breath and sweating, acute movement restrictions.

Warranty

The shelf life of medical compression stockings is limited to 3 years when properly stored. Added to this is the wearing time, which is a maximum of 6 months with regular use and proper care. After this period, the products are excluded from the warranty. Defects attributable to normal wear and tear or improper use are not covered by the guarantee. Improper use also includes any subsequent modification to the product that has not been carried out by the manufacturer.

Slight colour deviations, which may arise due to the individual dyeing process, are not considered to be a defect. Corresponding goods are therefore excluded from exchanges and returns. The product is intended for use by a single patient. If it is passed on to other persons for reuse, the manufacturer's product liability is no longer valid.

Disposal

After the end of the usage period, please dispose of the product in accordance with local regulations.

Manufacturing reporting

Due to legal requirements, patients and users are obliged to report immediately any serious incidents which have occurred in connection with the product and which have resulted in, or could have led to a significant deterioration in the state of health or to death to the manufacturer and the competent national authority (in Germany BfArM).

Otherwise, the adhesive strength of the grip tops could be permanently impaired (leg hair and dry skin can also limit the function of the grip tops). Store the stockings in a dry place away from sun and heat, in the original packaging if possible.

Please wash inside out and do not use fabric softener!

-  Wash on a delicate or gentle cycle
-  Do not bleach
-  Dry gently and carefully
-  Do not iron
-  No chemical dry cleaning


Material composition

Polyamide (Polyamid), elastane (Elastan) and, for some products, cotton (Baumwolle) is used. Please refer to the textile label sewn into your stocking for the precise details.

Tips for putting the stockings on

Put on the stockings first thing in the morning after getting up, as long as your legs are free from swelling. Please do not pull the compression stockings up by the edge or the grip top, instead, slide it upwards with your hands. We recommend wearing household rubber gloves to make it easier to put on the stockings and to protect the knitted fabric. Jewellery and long fingernails can damage the stockings. Please also pay attention to regular foot care and proper footwear. Ask your medical retailer about Ofa Grip special gloves and the practical donning and doffing aids for open and closed toe compression stockings.

How to put them on, closed toe

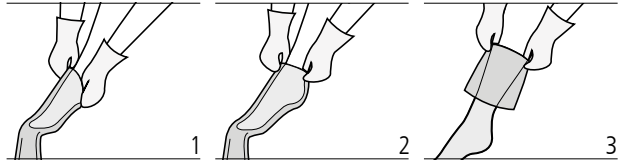

To put the stockings on, turn it inside out as far as the foot. Slip the foot section over your toes and then over the instep.

Now carefully pull the leg section over your heel. Please avoid pulling up the stockings at the end or grip top.

Pull the rest of the stockings up evenly without overstretching it. Finally, adjust the stockings on the leg until there are no wrinkles.

How to put them on, open toe



Putting on your open toe compression stockings is much easier with the supplied Ofa dressing aid (100% polyester). Slip your foot into the dressing aid so that it reaches just above the heel.

Now pull the stockings on until the heel is in the right place. This is very easy with the Ofa dressing aid.

To take out the dressing aid, pull back the forefoot section of the stockings.

Pull the dressing aid out over the tip of your toes.

Then carefully roll back the forefoot section of the stocking again. Then pull the rest of the stocking up evenly without overstretching it. Finally, adjust the stockings on the leg until there are no wrinkles.

Sayın kullanıcı,

Ofa kompresyon çoraplarını tercih ettiğiniz ve bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Kompresyon tedavinizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen bu ürün bilgilerini dikkatle okuyun.

Kullanım amacı

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklardaki flebolojik ve lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

Tıbbi kompresyon çoraplarının etki şekli ilgili endikasyona ve kontrollü basınca göre ayarlanmış ürünlerle kan dolaşımı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artar.

▲ Önemli bilgiler

Medikal kompresyon çoraplarını mutlaka doktorunuza danıştıktan sonra kullanın. Kompresyon çoraplarınızı her gün giymeniz ve düzenli tıbbi kontroller yaptırmanız, tedavinizin başarılı olmasını sağlar! Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmektedir. Medikal ürün satıcınız, kompresyon çoraplarınızı nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede de bulunacaktır. Çoraplarınızı giydiğinizde akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın. Yapışkan bantların temas ettiği bölgelerde cilt reaksiyonlarını önlemek için bantları gün boyunca birkaç kez hafifçe hareket ettirin. Çorapların diğer medikal yardımcı araçlarla birlikte giyilmesi gerekiyorsa lütfen bu konuda tedaviyi uygulayan doktora danışın. Ürünlerimizi, kapsamlı kalite güvence sürecimiz dahilinde test ederiz. Şikayetiniz olursa lütfen medikal ürün satıcınızla iletişime geçin. Hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız medikal ürün satıcısına geri götürün. Diğer giysilerle sürtünmeden dolayı oluşabilecek lif toprakları, çorabın kalitesini olumsuz yönde etkilemez.

Bakım

Ürün hemen kullanıma uygundur. İlk kullanımdan önce yıkamanızı tavsiye ederiz. Ardından her gün elle veya makinenizin hassas ayarında yıkayın. Çorapları yumuşatıcı içermeyen bir hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin Ofa Clean özel deterjan) maksimum 40 °C'de ayrı yıkayın ve iyice durulayın. Çoraplar makinenin hassas sıkma ayarıyla sıkılabilir, ancak elle burularak sıkılmamalıdır. Kompresyon çoraplarınızı kurutucunuzun hassas ayarında havayla kurutabilirsiniz, ancak bir ısıtıcının üzerine koymayın veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Çorapları asla ütulemeyin. Çoraplarınızın etkisini korumak için lütfen hiçbir kimyasal temizlik maddesi, benzin veya yumuşatıcı kullanmayın. Bu maddeler örme kumaşa zarar verir. Kompresyon çorapları katı ve sıvı yağlardan büyük ölçüde etkilenmez, ancak merhemlerle temas etmemelidir. Genel bir kural olarak, silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar çözücüler, merhemler, nemlendirici yıkama losyonları ve vücut kremleri ile temas etmemelidir.

Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tıbbi Kompresyon Tedavisi önermesine de bakın)

- Venöz semptomların ve kronik venöz hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
- Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
- Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve tedavisi
- Egzama ve pigmentasyon
- Dermatitopikleroz ve beyaz atrofi
- Nüksün önlenmesi dahil olmak üzere venöz bacak üsülerinde tedavi ve ağrı azaltma
- Arteriyel ve venöz bacak üsülerinin tedavisi (bkz. Kontrendikasyonları!)
- Varis
- Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
- Fonksiyonel venöz yetmezlik
- Venöz malformasyonlar
- Venöz tromboz
- Tromboz sonrası durum
- Posttrombotik sendrom
- Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
- Lenfödem
- Hamilelikte ödem
- Travma sonrası/ameliyat sonrası ödem
- Sıklikli diyetopatik ödem
- 2. evreden itibaren lipödem
- Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan konjesyon durumları (artrojenik konjesyon sendromu, ekstremitelerde parez ve kısmi parez)
- Meslek kaynaklı ödem (ayakta, oturanak yapılan işler)

- Değişiklik mümkün değilse ilaca bağlı ödem
- Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde adipozite
- Bacaklarda litlihaplı dermatoz
- Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve konjesyon şikayetleri
- Yanık sonrası durum
- Yara izi tedavisi

Kontrendikasyonlar**Mutlak kontrendikasyonlar:**

- İleri periferik arter hastalığı (bu parametrelere göre geçerli olduğunda: ABPI < 0,5, ayak bileği atardamar basıncı < 60 mmHg, ayak parmağı basıncı < 30 mmHg veya TcPO2 < 20 mmHg ayağın üst kısmı)
- Dekompense kalp yetmezliği
- Septik fliet
- Phlegmasia coerulea dolens

Dikkat edilmesi gereken riskler (fayda/ risk değerlendirmesine dayalı tedavi kararı)

- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemelerine karşı intolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.**▲ Riskler ve yan etkiler**

Medikal kompresyon çorapları, periferik sinirlerde cilt nekroza ve basınç hasarına neden olabilir. Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir.

Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorapları hemen çıkarın ve tedaviye devam edip edilemeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Garanti

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Buna ek olarak kullanımı süresi, düzenli kullanımı ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanımı nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonradan yapılan

değişiklikler de usulüne aykırı kullanımı olarak kabul edilir. Bireysel boyama işlemi nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif renk sapmaları bir kusur olarak kabul edilmaz. İlgili ürünler bu nedenle değişim ve iade kapsamı dışındadır. Ürün, tek bir hastanın tedavisi için tasarlanmıştır. Yeniden kullanımı için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölgenizdeki yönetimeklere uygun olarak bertaraf edin.

Bildirim sorumluluğu

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuç veya ölüme yol açan ya da uyabilecek, ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle yükümlüdür.

türkçe

Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma gücü kalıcı olarak kaybolabilir (bacak kılı ve kuru cilt de yapışkan bantların işlevini sınırlandırabilir). Çorapları kuru ve mümkünse orijinal ambalajında güneşten ve ısıdan koruyarak saklayın.

Lütfen ters çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

-  Hassas ayarda yıkayın
-  Ağartıcı kullanmayın
-  Nazikçe kurutun
-  Ütülemeyin
-  Kuru temizleme yapmayın

Malzeme bileşimi

Poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı ürünlerde pamuk (Baumwolle) kullanılmaktadır. Spesifik bilgiler, çorabınıza dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

Giyme önerileri

Çorapları sabah kalktığınızda, bacaklarınız henüz şişmemişken giyin. Lütfen kompresyon çorabını üst kısmından veya yapışkan kenarından çekmeyin, ellerinizle aşağıdan yukarıya doğru kaydırın. Örne kumaşı kolayca giymek ve korumak için ev tipi lastik eldiven giymenizi tavsiye ederiz. Takı ve uzun tırnaklar çoraba zarar verebilir. Lütfen düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye de dikkat edin. Medikal ihtisas mağazalarında Ofa Grip özel eldiven ve kompresyon çorapları için açık ve kapalı burunlu pratik Ofa giyme ve çıkarma yardımcılarını talep edin.

Giyme talimatları, kapalı burun



Giymek için çorabı ayak kısmına kadar ters çevirin. Ayak bölümünün ayak parmaklarınızın ve ardından ayağınızın üstüne çekin.

Bacak bölümünü dikkatlice topuğunuzun üzerinden çekin. Lütfen çorabı ucundan veya yapışkan kenardan yukarı çekmeyin.

Çorabın kalan kısmını germeden eşit bir şekilde çekin. Son olarak çorabı kırışksız hale gelinceye kadar bacağınızın üzerinde dağıtın.

Giyme talimatları, açık burun



Açık burunlu kompresyon çorabınızı giymek, çorap ile birlikte gönderilen Ofa-giyme yardımcısı (% 100 polyester) ile çok daha kolaydır. Ayağınızı, giyme yardımcısı topuğun hemen üstüne gelecek şekilde yardımcının içinden geçirin.

Çorabı, topuk doğru yerde olacak şekilde çekin. Ofa giyme yardımcısı ile bunu yapmak çok kolaydır.

Giyme yardımcısını çıkarmak için çorabın ön ayak kısmını geri çekin.

Ardından giyme yardımcısını ayak parmaklarınızın üzerinden öne doğru çekin.

Çorabın ön ayak kısmı daha sonra tekrar düzgün bir şekilde ileri doğru çekilebilir. Sonra çorabın kalan kısmını fazla esnetmeden eşit bir şekilde yukarı çekin. Son olarak çorabı kırışksız hale gelinceye kadar bacağınızın üzerinde dağıtın.

نصائح للارتداء

قم بارتداء الجوارب في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ، طالما أن ساقيك لا تزالان خاليتين من التورمات. يرجى عدم سحب الجوارب الضاغطة من الحافة اللاصقة أو حافة النهاية، بل قم بفرد يديك من أسفل للأعلى. لتسهيل الارتداء والحفاظ على القماش المحبوك، نوصي بارتداء قفازات مطاطية منزلية، المجوهرات والأظافر الطويلة يمكن أن تتسبب في تلف الجوارب. يرجى أيضا مراعاة العناية المنتظمة بالقدم وارتداء الأحذية المناسبة. أسأل في المتجر المتخصص في بيع الأدوات الطبية عن قفازات Ofa Grip الخاصة وكذلك أدوات المساعدة العملية من Ofa للارتداء والخلع للجوارب الضاغطة ذات الأصابع المفتوحة والمغلقة.

وإلا فيمكن أن تتضرر قوة لصق الأشرطة اللاصقة بشكل دائم (يمكن لشعر الساق والجلد الجاف أيضا أن يحد من وظيفة الأشرطة اللاصقة). قم بتخزين الجوارب جافة مع حمايتها من الشمس والحرارة، وفي العبوة الأصلية قدر الإمكان.

يرجى الغسل بالمقلوب وعدم استخدام منعم الأقمشة!

-  دورة غسيل هادئة
-  لا تستعمل مبيضات
-  تجفيف لطيف
-  لا تكوي
-  لا تغطف كيماويا

تعليمات الارتداء، الطرف المغلق



قم بفرد الجزء المتبقي من الجوارب بالتساوي للأعلى دون الإفراط في الشد. وأخيرا، قم بتوزيع مساحات الجوارب على الساق حتى يصبح خاليا من التجاعيد.


قم الآن بسحب جزء الساق بعناية فوق كعبك. يرجى عندئذ تجنب شد الجوارب للأعلى من الحافة اللاصقة أو حافة النهاية.

للارتداء، اقلب الجوارب من الداخل للخارج حتى القدم. قم بفرد جزء القدم فوق أصابع قدمك ثم فوق مشط القدم.

تركيبية الخامة

تستخدم مادة البولي أميد (Polyamid) والإيلاستين (Elastan) ويستخدم القطن (Baumwolle) في بعض المنتجات. للحصول على بيانات محددة، يرجى الرجوع إلى الملصق النسيجي الملتصق في الجوارب الخاص بك.

تعليمات الارتداء، الطرف المفتوح

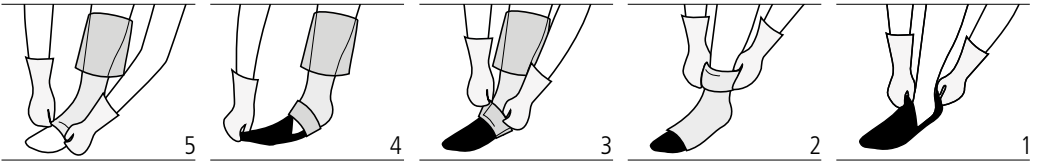

وبعد ذلك، يتم لف جزء مقدمة القدم بالجوارب للامام بشكل صحيح مرة أخرى. ثم قم بفرد بقية أجزاء الجوارب بالتساوي للأعلى دون إفراط في الشد. وأخيرا، قم بتوزيع مساحات الجوارب على الساق حتى يصبح خاليا من التجاعيد.

ثم اسحب مساعد الارتداء إلى الامام فوق أطراف أصابع قدمك.

لخلع مساعد الارتداء، اسحب جزء مقدمة القدم بالجوارب إلى الوراء.

الآن، اسحب الجوارب بحيث يكون الكعب في المكان الصحيح. يمكن تحقيق ذلك بسهولة شديدة باستخدام مساعد الارتداء Ofa.

يمكنك ارتداء الجوارب الضاغطة ذات الأصابع المفتوحة بسهولة أكبر باستخدام أداة المساعدة على الارتداء Ofa الموزعة (100% بوليستر). ضع قدمك في مساعد الارتداء حتى يصل إلى أعلى الكعب مباشرة.

العربية

عزيزي المستخدم،

يسعدنا أنك اخترت الجوارب الضاغطة Ofa ونشركك على الثقة التي وضعناها فيها. يرجى قضاء بعض الوقت لقراءة معلومات المنتج بعناية، من أجل الحصول على الفعالية المثلى للعلاج بالضغط!

الغرض من الاستخدام

تستخدم الجوارب الضاغطة في علاج أمراض الأوردة والأمراض اللمفاوية في الذراعين والساقين وكذلك الوذمات الشحمية. يتم استخدام منتجات مختلفة اعتماداً على دواعي الاستعمال.

آلية عمل الجوارب الضاغطة الطبية

بفضل المنتجات المصممة وفقاً لدواعي الاستعمال المعنية والضغط المحكوم، يتم تسريع عودة الدم وتحسين دوران الأوعية الدقيقة في الأنسجة وزيادة التدفق الليمفاوي.

إرشادات مهمة

لا تقم بارتداء الجوارب الضاغطة الطبية إلا بعد استشارة طبيبك. يمكنك ضمان نجاح علاجك من خلال ارتدائها يومياً وإجراء فحوصات طبية منتظمة! يجب تسليم الجوارب من قبل متخصصين فحريين طبيًا. سوف يقدم لك الموزع المتخصص النصيحة أيضاً بشأن كيفية ارتداء الجوارب الضاغطة بشكل صحيح. إذا كنت تعاني من ألم حاد في الساق أو تهيج في الجلد أثناء ارتدائها، فيرجى استشارة الطبيب على الفور. يمكن منع حدوث تفاعلات جلدية في منطقة الأشرطة اللاصقة عن طريق إزاحة الشريط اللاصق قليلاً عدة مرات خلال اليوم. إذا كان سيتم ارتداء الجوارب مع أدوات مساعدة طبية أخرى، فيرجى مناقشة ذلك مع طبيبك. نختبر منتجاتنا في إطار برنامج شامل لضمان الجودة. وإذا كان لا يزال لديك شكوك، فيرجى الاتصال بالموزع المتخصص. لا تقم بإصلاح التلفيات بنفسك، بل أعد الجوارب إلى الموزع المتخصص الذي تم شراؤه منه. عقيدات الألياف التي يمكن أن تتشكل بسبب الاحتكاك بالملابس الأخرى لا تقلل من جودة الجورب.

إرشادات العناية

المنتج مناسب للاستخدام الفوري. ننصح بغسله قبل ارتدائه لأول مرة. وبعد ذلك، يرجى الغسل يدوياً كل يوم أو بالدورة الهادئة للغسالة. اغسل الجوارب بمفردها بمنظف خفيف بدون استخدام منعم للأقمشة (مثل منظف Ofa Clean الخاص) بحد أقصى 40 درجة مئوية وقم بشطفها جيداً. يمكن عصر الجوارب بالتدوير في الغسالة برفق، لكن من فضلك لا تعصرها يدوياً. قم بتجفيف الجوارب الضاغطة في الهواء على الدورة الهادئة لمجففك، لكن لا تضعها على المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر. ولا تقم أبداً بكي الجوارب. للحفاظ على فعالية الجوارب الخاصة بك، يرجى عدم استخدام مواد التنظيف الكيميائية أو البترين أو منعمات الأقمشة. لأن هذه المواد تهاجم النسيج المحبوك. الجوارب الضاغطة غير حساسة تجاه الدهون والزيوت إلى حد كبير، ولكن لا ينبغي أن تتلامس مع المراهم. كقاعدة عامة، يجب ألا تتلامس الجوارب ذات الأشرطة اللاصقة المطلية بالسيليكون مع المذيبات والمراهم ومستحضرات الغسيل المرطبة وكريمات الجسم.

دواعي الاستعمال (انظر أيضاً توجيه العلاج الطبي بالضغط رقم AWMF 037/005 إصدار 18/12)

- تحسين الأعراض الوريدية وجودة الحياة عندما يتعلق الأمر بأعراض وريدية مزمنة
- الوقاية والعلاج من الوذمة الوريدية
- الوقاية والصنع من التغيرات الجلدية الوريدية
- الكبرما والتصلب
- التصلب الجلدي والضمور اللبني
- علاج وتقليل الألم في تقرحات الساق الوريدية، والوقاية من التئاسك أيضاً
- علاج تقرحات الساق الشريانية والوريدية (انظر موانع الاستعمال!)

- الدوالي
- المرحلة الأولى بعد علاج الدوالي
- الضمور الوريدي الوطيفي
- التشنجات الوريدية
- التنخر الوريدي
- الحالة بعد تنخر الدم
- متلازمة ما بعد التنخر
- الوقاية من التنخر مع الأمراض المتكررين
- الوذمات اللمفية
- الوذمات في الحمل
- وذمات ما بعد الإمبابه / ما بعد الحرجة
- وذمات دورية معقولة السبب
- الوذمات الشحمية من المرحلة الثانية
- حالات الاحتقان نتيجة عدم الحركة (متلازمة الاحتقان اللمفي)، والتشلل جزئي، والتشلل الجزئي في الأطراف)
- الوذمات المرتبطة بالوظيفة (وظائف تتطلب الوقوف أو الجلوس)

- الوذمات الناتجة عن استخدام الأدوية إذا لم يكن تغييرها ممكناً
- السمنة مع قصور وريدي وظيفي
- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغليان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج الذباب

موانع الاستعمال

موانع الاستعمال النهائية:

- مرض الشرايين المحيطية المتقدم (في حالة انطباق أحد القدمين)
- أحد القدمين > 30 سم رتفي) أو ضغط الأوكسجين عبر الجلد < 20 TPO2
- قصور القلب اللقفاوض
- التهاب الوريدي الوبائي
- التهاب الوريدي الفركي المولم
- الحطاري التي يجب وضعها في العتبار (يستند القرار العلاجي إلى تقييم الموانع/المخاطر)
- التهاب الجلدي الباز
- عدم تحمل مواد الجورب الضاغط
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل لداء السكري)
- التهاب المفاصل المزمن

سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع موانع الاستعمال هذه

المخاطر والآثار الجانبية

- يمكن أن تسبب الجوارب الطبية الضاغطة تحزاً في الجلد، وتلفاً بالأعصاب الطرفية ناجفاً عن الضغط. يمكن أن تسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث ككة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة للبشرة.

في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج. تكون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتشنج، بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد وتقرير، تغيير حاد في الحركة.

الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة بـ 3 سنوات إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت الترداء، وهو 6 أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والفعالية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات من الضمان.

ونشكل أساساً بين الضمان لا بعد سارتا في الحالات التي تظهر بها عيوب واضحة قصور ناتجة عن التآكل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضاً التغييرات الناتجة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة.

لا تغير الاندراجات الطبية في اللوب، والتي قد تتسبأ بسبب عملية التصنيع الفردية، عيوباً. ولذلك تستثنى التسعة ذات الصلة من الضمان والريعاء. المنتج مخصص لعلاج مريض واحد فقط. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه، فسوف تنتفي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام المفترض، يرجى التخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية.

ضرورة التبليغ

بموجب اللوائح القانونية، يتعين على المرضى والمستخدمين إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا، المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية "BfArM") على الفور بالوحدات الخطيرة التي حدثت ارتباطاً بالمنتج، والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور خبر في الحالة الصحية أو الوفاة.

Größentabelle¹

1 Größentabelle (Serienanfertigung)
Table of sizes (series production)
Ölçü tablosu (seri üretim)
جدول مقاسات (إنتاج تسلسلي)

2 Umfangmaße (cm)
Circumference dimensions (cm)
Çevre ölçüleri (cm)
محيط الجوارب (سم)

3 Längenmaße (cm)
Length dimensions (cm)
Uzunluk ölçüleri (cm)
مقاييس الطول (سم)

4 Fußlänge bei geschlossener Spitze (Schuhgröße)
Foot length with closed toe (shoe size)
Burunlu ayak ölçüsü (ayakkabı numarası)
طول القدم بالجوارب ذي الطرف المغلق (مقاس الحذاء)

5 kurz
short
kısa
قصير

6 lang
long
uzun
طويل

7 mit Haftband
with grip tops
yapışkan bant ile
بشريط لاصق


8 weite Ausführung
wide model
geniş model
تصميم واسع

Länge³ **ℓK**
kurz 69–78 cm
lang 78,1–88 cm
Schrittlänge

Länge³ **ℓG**
kurz 65–74 cm
lang 74,1–84 cm

Länge³ **ℓD**
kurz 34–38 cm
lang 38,1–43 cm

Fußlänge⁴ bei
geschlossener Spitze
kurz⁵ 22,5–25,9 cm
(Schuhgröße 36–40)
lang⁶ 26–29,5 cm
(Schuhgröße 41–45)

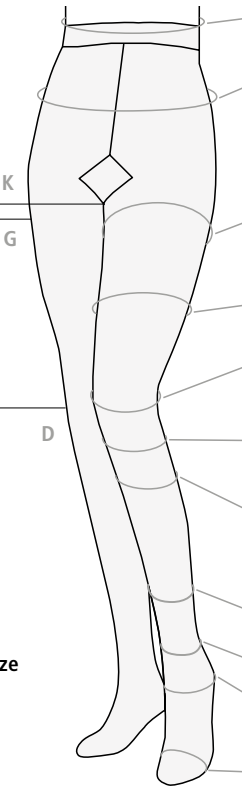

Umfang ² (cm)	I	II	III	IV	V	VI
cT	62 – 84	67 – 89	74 – 98	80 – 102	85 – 108	90 – 115
cH	71 – 95	76 – 100	84 – 116	90 – 127	98 – 137	105 – 148
cG für AG weit ^{7,8}	51 – 60	54 – 63	58 – 68	63 – 74	67 – 79	71 – 88
cG für AG ⁷	44 – 53	46 – 56	50 – 60	53 – 64	57 – 70	61 – 80
cG für AT	42 – 55	44 – 58	48 – 62	50 – 67	53 – 73	56 – 80
cF für AG weit ^{7,8}	47 – 55	49 – 58	53 – 62	56 – 66	58 – 69	59 – 71
cF	39 – 47	41 – 50	45 – 54	46 – 57	47 – 60	49 – 62
cE	28 – 36	32 – 40	34 – 42	36 – 46	38 – 49	40 – 52
cD für AD weit ⁸	32 – 36	34 – 40	36 – 43	39 – 48	41 – 51	43 – 54
cD	29 – 32	30 – 35	32 – 38	33 – 42	35 – 45	37 – 48
cC für AD weit ⁸	32 – 37	35 – 41	38 – 45	40 – 49	42 – 52	44 – 55
cC	28 – 33	31 – 36	32 – 39	35 – 43	37 – 46	39 – 49
cB ₁ für AD weit ⁸	25 – 29	27 – 31	29 – 33	32 – 36	34 – 39	38 – 43
cB ₁	24 – 27	25 – 29	27 – 31	29 – 33	31 – 36	35 – 40
cB	19,5 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
cY	26 – 30	27 – 32	29 – 34	30 – 37	32 – 39	33 – 41
cA	19,5 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33



CE Kennzeichnung; Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen
CE marking; confirmation of compliance with EU requirements
CE işareti; AB gerekliliklerine uygunluğun teyidi
علامة CE: تأكيد المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.



Zertifiziert nach RAL-GZ 387 - medizinisch wirksame Kompression.
Certified according to RAL-GZ 387 – medically effective compression
RAL-GZ 387 sertifikalı - tıbbi etkili kompresyon.
معتمد وفقاً لمعيار RAL-GZ 387 - ضغط طبي فعال



Schadstoffgeprüft nach Öko-Text Standard 100
Tested for harmful substances according to OEKO-TEX® Standard 100
Öko-Text Standard 100'e göre zararlı madde testi yapılmıştır
تم اختباره للتأكد من خلوه من الملوثات وفقاً لمعيار OEKO-TEX



Katalognummer
Catalogue number
Katalog numarası
رقم الكتالوج



Eindeutige Produktidentifizierung
Unique Device Identification
Ürünün kesin olarak tanımlanması
الهوية الفريدة للمنتج



Chargenbezeichnung
Batch code
Parti adı
اسم الدفعة



Medizinprodukt
Medical device
Medikal ürün
منتج طبي



Gebrauchsanweisung beachten
Consult instructions for use
Kullanım talimatlarına uyun
اتبع تعليمات الاستخدام



Achtung
Caution
Dikkat
انتبه



Zur Wiederverwendung an einem
einzelnen Patienten
For single patient multiple use
Tek bir hastada tekrar kullanım için
استعمالها مرة أخرى على نفس المريض



Hersteller
Manufacturer
Üretici
الشركة المصنعة



Herstellungsdatum
Date of manufacture
Üretim tarihi
تاريخ الصنع



Naturkautschuklatex ist enthalten
Contains natural rubber latex
Doğal kauçuk lateksi içerir
يحتوي على لاتكس المطاط الطبيعي



Vor Sonnenlicht schützen
Keep away from sunlight
Güneş ışığından koruyun
حفظ بعيداً عن أشعة الشمس



Trocken aufbewahren
Keep dry
Kuru bir yerde saklayın
يخزن في مكان جاف



Verwendbar bis
Use-by date
Son kullanma tarihi
صالحة حتى

Umfrage

Kundenzufriedenheit

Ihre persönlichen Erfahrungen mit unseren Produkten sind uns wichtig. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um den von Ihnen gekauften Artikel zu beurteilen. Ihre Rückmeldung hilft uns, unsere Produkte zu Ihrer Zufriedenheit weiter zu entwickeln.

Sie können an der Umfrage teilnehmen, indem Sie die angehängte Postkarte ausfüllen. Alternativ können Sie die Fragen online unter **kundenzufriedenheit.ofa.de** beantworten. Zur Umfrage gelangen Sie auch mit dem unten stehenden **QR-Code**. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail mit weiteren Anregungen an **kontakt@ofa.de** senden.

Vielen Dank.

Ihr Ofa Qualitätsmanagement



ofa[®]

Ofa Bamberg GmbH



Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-333
Fax + 49 951 6047-180
vertriebsinnendienst@ofa.de
www.ofa.de

Ofa Austria

Wasserfeldstr. 20
A-5020 Salzburg
Tel. + 43 662 848707
Fax + 43 662 849514
kundenservice@ofaaustria.at
www.ofaaustria.at



**OEKO
TEX[®]**
**STANDARD
100**

**95.0.1594
Hohenstein**