



Notas para lavar en lavadora:



Las medias de compresión cómo lavar correctamente

Las Lastofa Forte se deben lavar del haz y las Lastofa Extra, del revés. Nunca se debe usar suavizante.

- Ciclo de lavado delicado
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

Lavado

- Las medias están preparadas para usarse directamente
- Se recomienda lavarlas antes de usarlas por primera vez
- Se deben lavar a diario (a máx. 40 °C) a mano o en el ciclo de lavado delicado de la lavadora
- Lávelas por separado con un detergente suave (como el detergente especial Ofa Clean) y no utilice suavizante
- Enjuáguelas bien y use un centrifugado suave, pero no las retuerza para escurrirlas
- Seque las medias al aire sobre una toalla o en el ciclo de ropa delicada de la secadora, pero no las coloque sobre un radiador ni las exponga a luz solar

Composición de los materiales

Se fabrican con poliamida (Polyamid), elastano (Elastan) y algodón (Baumwolle) o lana merina (Merinowolle). Puede obtener los datos concretos en la etiqueta textil que va cosida en la media.

Cuidado

- Guarde las medias en un lugar seco protegido de la luz solar directa y el calor, preferiblemente en el envase original
- Las medias con bandas adherentes recubiertas de silicona no deben entrar en contacto con disolventes, ungüentos, lociones de lavado hidratantes ni cremas corporales para evitar que las bandas adherentes pierdan su adherencia
- Asegúrese de cuidar regularmente sus pies y mantener su calzado impecable
- Los nódulos de fibra son habituales en este tipo de prendas y no son motivo de reclamación
- Si las medias presentan daños, no debe repararlas por su cuenta. Debe acudir al distribuidor especializado donde las compró

Finalidad

Las medias de compresión se utilizan para el tratamiento de afecciones flebológicas y linfológicas de los brazos y las piernas, así como para casos de lipedema. Dependiendo de la indicación, se usan diferentes productos.

Principio de funcionamiento de las medias de compresión medicinales

Mediante productos adaptados a la indicación correspondiente y con presión controlada, se acelera el reflujo sanguíneo, se mejora la microcirculación del tejido y aumenta el flujo linfático.

Indicaciones importantes

- Use las medias de compresión solo después de consultar a su médico
- Utilícelas a diario y sométase a controles médicos para garantizar que el tratamiento surte efecto
- Solo especialistas con formación médica pueden suministrar estas medias y dar consejos para ponérselas correctamente
- Si al usarlas siente un dolor agudo en las piernas o se le irrita la piel, consulte de inmediato a un médico
- Cambie ligeramente la posición de las bandas adherentes con cierta frecuencia para evitar irritaciones en la piel
- Si la calidad del producto no es la esperada o desea presentar una reclamación, póngase en contacto con su distribuidor especializado



Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20
D-96052 Bamberg

Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186

export@ofa.de
www.ofa.de

Para el distribuidor especializado: datos de las medias para el almacenamiento

Declaración obligatoria
La legislación obliga a los pacientes y a los usuarios a notificar inmediatamente al fabricante y a la autoridad nacional competente (BfArM en el caso de Alemania) cualquier incidente grave relacionado con el producto que haya causado o pudiera haber causado un deterioro significativo del estado de salud o la muerte.

Eliminación
Al final de su vida útil, deseche el producto de acuerdo con la normativa local.

Garantía
La vida útil de las medias de compresión medicinal, si se almacenan adecuadamente, está limitada a 3 años. A esto se le añade el tiempo de uso: si se usan de forma regular y se cuidan adecuadamente, no puede superar los 6 meses. Una vez transcurrido este plazo, los productos quedarán excluidos de la garantía. En principio, se excluyen de la garantía los defectos que se produzcan por el desgaste normal o el uso indebido. Se considera también uso indebido cualquier modificación posterior del producto que no haya sido realizada por la empresa fabricante. El producto está diseñado para el tratamiento de un solo paciente. Si se entrega a otras personas para su reutilización, el fabricante queda liberado de cualquier responsabilidad sobre el producto.

Contraindicaciones absolutas:
– Enfermedad obstructiva arterial periférica avanzada
– Insuficiencia cardíaca descompensada
– Flebitis séptica
– Flegmasia cerulea dolens
– Infección y tratamiento de alteraciones cutáneas venosas
– Ecema y pigmentación
– Dermatitis posdebridada y atrofia blanca
– Tratamiento y reducción del dolor en Ulcus cruris
– Profilaxis de la trombosis en pacientes móviles
– Linfedema
– Edema durante el embarazo
– Edema posttraumático/postoperatorio
– Edema idiopático cíclico
– Lipedema a partir del estadio II
– Estados congestivos a causa de la inmovilidad (síndrome congestivo artrogénico, parésias y parésias parciales de la extremidad)
– Edema causado por el trabajo (empleos que exijan estar mucho tiempo de pie o sentado)

Contraindicaciones relativas:
– Derramatosís hinchada
– Intolerancia a los materiales de las medias de compresión
– Trastornos graves de la sensibilidad en la extremidad (Neuropatía periférica avanzada (por ejemplo, diabetes mellitus)
– Poliartritis crónica

Riesgos y efectos secundarios
En caso de piel sensible, las medias de compresión pueden causar picor y problemas cutáneos. Por lo tanto, se recomienda un cuidado adecuado de la piel.
Riesgos y efectos secundarios
Si presenta los siguientes síntomas, quitese inmediatamente las medias y consulte con su médico sobre la continuación del tratamiento: coloración azul o blanca de los dedos de los pies, trastornos de la sensibilidad y entumecimiento, aumento del dolor, dificultad para respirar y sudoración, limitación aguda del movimiento.

Contraindicaciones, la empresa declara cualquier responsabilidad.
En caso de incumplimiento de estas contraindicaciones, la empresa declara cualquier responsabilidad sobre el producto.


Indicaciones (consulte también la guía Terapias de compresión medicinal AWMF 037/005, de 12/18)
– Mejora de los síntomas venosos y la calidad de vida en las enfermedades venosas crónicas
– Prevención y tratamiento de edemas venosos
– Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas venosas
– Ecema y pigmentación
– Dermatitis posdebridada y atrofia blanca
– Tratamiento y reducción del dolor en Ulcus cruris
– Profilaxis de la trombosis en pacientes móviles
– Linfedema
– Edema durante el embarazo
– Edema posttraumático/postoperatorio
– Edema idiopático cíclico
– Lipedema a partir del estadio II
– Estados congestivos a causa de la inmovilidad (síndrome congestivo artrogénico, parésias y parésias parciales de la extremidad)
– Edema causado por el trabajo (empleos que exijan estar mucho tiempo de pie o sentado)

Indicaciones (consulte también la guía Terapias de compresión medicinal AWMF 037/005, de 12/18)
– Prevención y tratamiento de edemas venosos
– Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas venosas
– Ecema y pigmentación
– Dermatitis posdebridada y atrofia blanca
– Tratamiento y reducción del dolor en Ulcus cruris
– Profilaxis de la trombosis en pacientes móviles
– Linfedema
– Edema durante el embarazo
– Edema posttraumático/postoperatorio
– Edema idiopático cíclico
– Lipedema a partir del estadio II
– Estados congestivos a causa de la inmovilidad (síndrome congestivo artrogénico, parésias y parésias parciales de la extremidad)
– Edema causado por el trabajo (empleos que exijan estar mucho tiempo de pie o sentado)

Calidad superior
con el sello de Ofa Bamberg
Los productos a medida de Ofa son resultado de muchos años de investigación y desarrollo. Empleamos tecnología de vanguardia para garantizar y controlar que la fabricación se realiza de forma cuidadosa y que ofrecemos un alto nivel de calidad. Las certificaciones periódicas de los institutos de pruebas independientes demuestran que tratamos nuestros productos con responsabilidad. Los productos a medida de Ofa cumplen las normativas de calidad y pruebas para medias de compresión medicinales más exigentes del mundo (RAL-GZ 387/1), así como la norma Oko-Tex Standard 100, que garantiza el uso de materiales y tintes inofensivos para la salud.

Nos esforzamos al máximo para que siempre ande con buen pie.
De la vuelta a la mitad de la media empezando por el lado del hombro. Utilice la media empujando por el brazo hasta llegar a la axila. Suba la media sin tirar del borde superior o del borde de la banda adherente y sin estirarla mano. La media por encima de la mano.

Instrucciones para colocar las medias de brazo
Coloque la media de manera uniforme por todo el brazo hasta llegar a la axila. Suba la media sin tirar del borde superior o del borde de la banda adherente y sin estirarla en exceso.

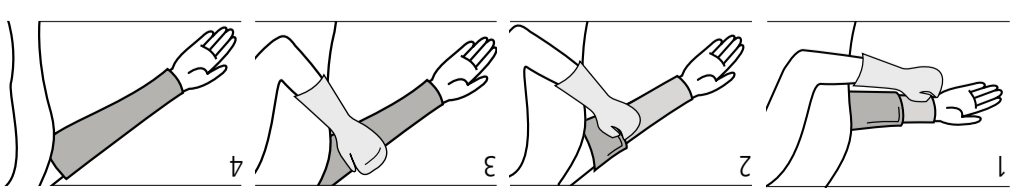

Delice la media por el brazo de manera uniforme hasta que no queden arrugas. Es fundamental que no queden arrugas para evitar estrangulaciones.