



gilofa®

**Kompressive Vital- und
Reisestrümpfe**

Support and travel stockings
Calze di sostegno e da viaggio

Gebrauchsanleitung
Instructions for use

Umfrage

Kundenzufriedenheit

Ihre persönlichen Erfahrungen mit unseren Produkten sind uns wichtig. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um den von Ihnen gekauften Artikel zu beurteilen. Ihre Rückmeldung hilft uns, unsere Produkte zu Ihrer Zufriedenheit weiter zu entwickeln.

Unter **kundenzufriedenheit.ofa.de** haben wir einige Fragen an Sie. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail mit Ihren Anregungen an **kontakt@ofa.de** senden.

Vielen Dank.
Ihr Ofa Qualitätsmanagement

Inhalt

| | | |
|----|------------|-------|
| DE | deutsch | 04–05 |
| EN | english | 06–07 |
| FR | français | 08–09 |
| NL | nederlands | 10–11 |
| IT | italiano | 12–13 |
| ES | español | 14–15 |
| PT | português | 16–17 |
| EL | ελληνικά | 18–19 |
| TR | türkçe | 20–21 |
| CS | česky | 22–23 |
| PL | polski | 24–25 |
| LV | latviešu | 26–27 |
| ET | eesti | 28–29 |
| LT | lietuvių | 30–31 |
| RO | română | 32–33 |
| SL | slovenski | 34–35 |
| HU | magyar | 36–37 |
| BG | български | 38–39 |
| DA | dansk | 40–41 |
| SV | svenska | 42–43 |
| FI | suomi | 44–45 |
| IS | íslenska | 46–47 |
| HR | hrvatski | 48–49 |
| BS | bosanski | 50–51 |
| SR | srpski | 52–53 |
| RU | русский | 54–55 |
| UK | українська | 56–57 |
| AR | العربية | 58–59 |
| HE | עברית | 60–61 |
| KA | ქართული | 62–63 |
| JP | 日本語 | 64–65 |
| ZH | 中文 | 66–67 |
| KO | 한국어 | 68–69 |
| MN | монгол | 70–71 |

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, in den Gilofa Vital- und Reisestrümpfen steckt die jahrzehntelange Erfahrung aus der Entwicklung medizinischer Kompressionsstrümpfe. Sie haben sich für ein hochwertiges Gesundheitsprodukt entschieden. Neben dem medizinischen Aspekt achten wir bei Gilofa besonders auf den Tragekomfort. Gilofa Strümpfe fühlen sich angenehm an, sind bequem und sehen gut aus. So lebt man gern gesünder. Ob auf Reisen, beim Sport oder einfach nur, weil Sie sich auch im Alltag etwas Gutes tun wollen.

⚠ Wichtige Hinweise

Die Abgabe der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen. Ihr Fachhändler berät Sie auch, wie Sie Ihre Strümpfe richtig anziehen. Sollten beim Tragen akute Beinschmerzen oder Hautirritationen auftreten, suchen Sie bitte unverzüglich den Arzt auf. Hautreaktionen im Bereich von Haftbändern kann vorgebeugt werden, indem das Haftband im Laufe eines Tages mehrmals leicht versetzt wird. Sollen die Strümpfe in Kombination mit anderen medizinischen Hilfsmitteln getragen werden, besprechen Sie dies bitte mit dem behandelnden Arzt. Wir prüfen unsere Produkte im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung. Sollten Sie dennoch Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Reparieren Sie Schäden nicht selbst, sondern bringen Sie den Strumpf zu dem Fachhändler zurück, bei dem er gekauft wurde. Faserknötzchen, die sich durch Reibung an anderen Kleidungsstücken bilden können, mindern die Qualität des Strumpfes nicht.

Gewährleistung

Die Haltbarkeit von kompressiven Strümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 5,5 Jahre begrenzt. Bei regelmäßiger Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege garantieren wir für 6 Monate die optimale kompressive Wirkung. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Das Produkt ist für einen Anwender vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Wirkprinzip kompressiver Strümpfe

Der von unten nach oben abnehmende Druckverlauf fördert die Durchblutung und unterstützt das Venensystem.

Indikationen / Zweckbestimmung

Schwere- und Müdigkeitsgefühl in den Beinen. Zur Prophylaxe gegen venöse Beinbeschwerden und Reisethrombose bei Venengesunden. Im Zweifel, ob bei Ihnen eine behandlungsbedürftige Venenerkrankung vorliegt, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Kontraindikationen

- fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- dekompensierte Herzinsuffizienz
- septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Zu beachtende Risiken:

- ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit des Kompressionsstrumpfmaterials
- schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)
- primär chronische Polyarthritiden

Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt.

⚠ Risiken und Nebenwirkungen

Bei empfindlicher Haut kann es unter kompressiven Strümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen. Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und vor weiterer Nutzung mit einem Arzt sprechen: Blau oder Weißfärbung der Zehen, Missemmpfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Pflegehinweise

Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch geeignet. Wir empfehlen, es vor dem ersten Tragen zu waschen. Danach bitte täglich von Hand oder im Schonwaschgang Ihrer Maschine waschen. Waschen Sie die Strümpfe separat mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler (z. B. „Ofa Clean Spezialwaschmittel“) bei maximal 40°C und spülen Sie sie gut aus. Die Strümpfe können schonend geschleudert werden, bitte wringen Sie sie aber nicht aus. Trocknen Sie Ihre Strümpfe an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners, aber legen Sie sie nicht auf die Heizung oder in direktes Sonnenlicht. Bügeln Sie die Strümpfe niemals.

Um die Wirksamkeit Ihrer Strümpfe zu erhalten, verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin oder Weichspüler. Diese Substanzen greifen das Gestrick an. Kompressive Strümpfe sind weitgehend unempfindlich gegen Fette und Öle, sollten aber nicht mit Salben in Kontakt kommen. Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern sollten generell nicht mit Lösungsmitteln, Salben und rückfettenden Waschlotionen und Körpercremes in Berührung kommen. Die Haftfähigkeit der Haftbänder kann sonst dauerhaft beeinträchtigt werden. Lagern Sie die Strümpfe trocken und geschützt vor Sonne und Hitze möglichst in der Originalverpackung.

Bitte auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

- Schonwaschgang
- Nicht bleichen
- Schonend trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen

Anziehtipps

Streifen Sie Ihre Strümpfe/Strumpfhose vorsichtig von unten nach oben am Bein hoch und ziehen Sie sie nicht am Abschlussrand nach oben. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen durch Schmuck oder lange Fingernägel.

Materialzusammensetzung

gilofa®

mit Baumwolle

50 % Baumwolle
40 % Polyamid
10 % Elastan

gilofa®

mit Aloe Vera

Hautpflege inklusive. Spezielle Mikrokapseln geben die Aloe Vera Extrakte kontrolliert an die Haut ab; über 100 Wäschen lang.
42 % Polyamid (Mikrofaser mit Aloe Vera)
35 % Polyamid
15 % Baumwolle
8 % Elastan

gilofa® fine

52 % Polyamid
(mit Mandel- und Wildrosenöl)
48 % Elastan

gilofa® style

52 % Polyamid (Mikrofaser)
29 % Elastan
19 % Polyamid

Dear User,

Gilofa support and travel stockings are the result of decades of experience in the development of medical compression stockings. You have decided to choose a high quality health product. In addition to medical aspects, with Gilofa we pay particular attention to the wearing comfort. Gilofa stockings feel pleasant, are comfortable to wear and attractive in appearance. Healthy living made easy. Whether travelling, participating in sports or simply because you wish to do yourself some good in everyday life.

⚠ Important information

The stockings must be obtained from a medically trained specialist retailer. Your retailer will also advise you on how to correctly put on your stockings. If you experience leg pain or skin irritation while wearing these stockings, please consult your doctor immediately. You can prevent skin reactions in the area around the grip tops by slightly adjusting the grip tops several times during the day. Please contact your doctor about wearing the stockings in combination with using other medical devices. We test our products within the scope of a comprehensive quality assurance. However, if you still have cause for complaint, please contact your specialist retailer. Do not attempt to perform repairs yourself. Return the stockings to the specialist retailer who sold them to you. Any pilling of the material that may arise due to friction with other garments will not reduce the stocking's quality.

Warranty

The lifetime of compressive stockings is limited to 5.5 years when stored properly. With regular use and proper care, we guarantee optimal compressive effect for 6 months. After this period, the products are excluded from the warranty. Defects attributable to normal wear and tear or improper use are not covered by the guarantee. Improper use also includes any subsequent modification to the product that has not been carried out by the manufacturer. The product is intended for single use only. If it is passed on to other persons for reuse, the manufacturer's product liability is no longer valid.

Effective principle of compressive stockings

The pressure decreases from the bottom to the top and promotes blood circulation and supports the venous system.

Indications / Intended use

Feeling of heaviness and tiredness in the legs. Prophylactic effect against vein complaints and deep vein thrombosis caused by prolonged travel in people with healthy veins. Consult your doctor if in doubt as to whether there is any indication of venous disease that requires treatment.

Contraindications

- advanced peripheral arterial occlusive disease.
- congestive heart failure
- septic phlebitis
- Phlegmasia cerulea dolens

Risks to consider:

- marked weeping dermatoses
- allergies to compression stocking materials
- severe sensitivity disorders of the extremity
- advanced peripheral neuropathy (e.g. diabetes mellitus)
- primary chronic polyarthritis

If you have any questions, please ask your doctor.

⚠ Risks and side effects

Patients with sensitive skin may experience itching and skin irritation when using compressive stockings. Adequate skin care is therefore recommended. If you suffer the following symptoms, please take off the stockings immediately and consult your doctor before continuing using them: blue or white coloration of the toes, sensations of discomfort and numbness, increasing pain, shortness of breath and sweating, acute movement restrictions.

Disposal

After the end of the usage period, please dispose of the product in accordance with local regulations.

Mandatory reporting

Due to legal regulations within the EU, patients and users are obligated to report any serious events with the use of a medical device to both the manufacturer and the competent national authority (in Germany BfArM) without any delay.

Care instructions

The product is suitable for immediate use. We recommend washing the product before wearing it for the first time. Then wash daily by hand or on a delicate fabric program. Wash the stockings separately with mild detergent without fabric softener (e.g. "Ofa Clean special detergent") at a maximum temperature of 40°C and rinse them well. The stockings can be spun gently, but do not wring them out. Dry your stockings in air or in a dryer on a gentle cycle. Do not place them on a heater or in direct sunlight. Never iron the stockings.

To maintain the effectiveness of your stockings, please do not use chemical cleaning agents, petrol, or fabric softeners. These substances damage the knitted fabric. Compressive stockings are largely resistant to fats and oils, but should not come into contact with ointments. Stockings with silicone-coated grip tops should generally not come into contact with solvents, ointments and re-greasing washing lotions and body creams. Otherwise, the adhesion of the grip tops could be permanently impaired. Store the stockings in a dry place away from sun and heat, in the original packaging if possible.

Wash inside out and do not use fabric softener!

-  Wash on a delicate or gentle cycle
-  Do not bleach
-  Dry gently and carefully
-  Do not iron
-  No chemical dry cleaning

Tips for donning the stockings

Carefully pull your stockings/tights up your leg from the bottom to the top, do not pull them up from the top edge. Please avoid any damage that could be made by jewellery or long fingernails.

Material composition

gilofa®

with cotton

50% cotton
40% polyamide
10% elastane

gilofa®

with aloe vera

Continuous skin care. Special microcapsules dispense in a controlled manner the aloe vera extracts to the skin for more than 100 washings.
42% polyamide (microfibre with aloe vera)
35% polyamide
15% cotton
8% elastane

gilofa® fine

52% polyamide
(with almond oil and wild rose oil)
48% elastane

gilofa® style

52% polyamide (microfibre)
29% elastane
19% polyamide

Chère utilisatrice, cher utilisateur,

Les bas de maintien et de voyage Gilofa sont le résultat de plusieurs décennies d'expérience dans le développement de bas de contention médicaux. Vous avez choisi un produit médical de qualité supérieure. Outre l'aspect médical, chez Gilofa, nous accordons une attention toute particulière au confort de nos bas. Les bas Gilofa sont beaux, doux au toucher et confortables. Pour un meilleur bien-être au quotidien. Que ce soit en voyage, pour le sport ou simplement parce que vous recherchez un meilleur bien-être au quotidien.

⚠ Remarques importantes

Les bas ne peuvent être délivrés que par un personnel médical professionnel formé. Votre détaillant vous expliquera aussi comment bien mettre vos bas. En cas de douleur aiguë ou d'irritations de la peau dues au port des bas, consultez immédiatement un médecin. Il est possible de prévenir les réactions cutanées dans la zone des bandes adhésives en déplaçant légèrement la bande adhésive plusieurs fois par jour. Demandez l'avis de votre médecin traitant avant de porter les bas avec d'autres dispositifs médicaux. Nous contrôlons nos produits dans le cadre d'une assurance qualité globale. Toutefois, si vous avez des réclamations, veuillez vous adresser à votre détaillant. En cas de détérioration des bas, ne les réparez pas vous-mêmes, mais rapportez-les au détaillant chez qui vous les avez achetés. Les bouloches qui peuvent se former par frottement sur d'autres pièces de vêtement ne réduisent pas la qualité du bas.

Garantie

La durée de conservation des bas de contention est limitée à 5,5 ans dans des conditions de stockage correctes. En cas d'utilisation régulière et de soins adéquats, nous garantissons une compression optimale pendant 6 mois. À expiration de ce délai, les produits sont exclus de toute garantie. Sont fondamentalement exclus de la garantie les dysfonctionnements résultant d'une usure ordinaire ou d'une utilisation inadéquate. Relève de l'utilisation inadéquate toute modification ultérieure du produit qui n'a pas été réalisée par le fabricant. Le produit est destiné à être utilisé par une seule personne. S'il est transmis à des tiers pour être réutilisé, la responsabilité du fabricant ne pourra plus être mise en cause.

Principe de fonctionnement des bas de contention

La pression, qui diminue vers le haut, favorise la circulation sanguine et fortifie le système veineux.

Indications/usage prévu

Sensation de lourdeur et de fatigue dans les jambes. Pour la prévention des affections veineuses des jambes et des thromboses liées aux voyages chez les personnes sujettes aux troubles veineux. En cas de doute sur la présence d'un trouble veineux nécessitant un traitement, veuillez consulter votre médecin.

Contre-indications

- artériopathie périphérique avancée
- insuffisance cardiaque décompensée
- phlébite septique
- phlébite bleue

Risques à prendre en compte :

- dermatoses suintantes étendues
- intolérance à l'une des matières de la composition des bas de contention
- graves troubles sensoriels des extrémités
- neuropathie périphérique avancée
(ex. diabète sucré)
- polyarthrite chronique primaire

En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

⚠ Risques et effets secondaires

En cas de peau sensible, des démangeaisons et des problèmes de peau peuvent survenir sous les bas de contention. C'est pourquoi il est recommandé de prodiguer des soins cutanés adéquats. Si les symptômes suivants apparaissent, retirez immédiatement les bas et discutez de la poursuite du traitement avec votre médecin : Coloration bleue ou blanche des orteils, paresthésies et sensations d'engourdissement, douleurs croissantes, essoufflement et sueurs, limitations aiguës de la mobilité.

Élimination

À l'issue de la durée d'utilisation, veuillez éliminer le produit selon les réglementations locales.

Obligation de déclaration

En raison de réglementations légales, en vigueur dans l'UE, les patients et utilisateurs sont tenus de communiquer immédiatement au fabricant ou à l'administration nationale compétente (BfArM en Allemagne) tout incident grave survenu lors de l'utilisation d'un dispositif médical.

Conseils d'entretien

Le produit convient à une utilisation immédiate. Nous recommandons de les laver avant la première utilisation. Ensuite, laver quotidiennement à la main ou en utilisant le programme lavage délicat de votre machine. Lavez les bas séparément avec un détergent spécifique sans adoucissant (ex. lessive spéciale « Ofa Clean ») à 40 °C maximum, et rincez-les bien. Vous pouvez essorer doucement les bas mais veillez à ne pas les tordre. Séchez vos bas à l'air ou en utilisant le programme doux de votre sèche-linge mais ne les exposez pas à la chaleur ni à la lumière directe du soleil. Ne repassez jamais les bas.

Pour préserver l'efficacité de vos bas, n'utilisez jamais de produit nettoyant chimique, essence ou adoucissant. Ces substances attaquent la trame. Les bas de contention sont dans une large mesure insensibles aux huiles et aux graisses, mais ils ne doivent pas entrer en contact avec des pommades. Les bas avec bandes adhésives recouvertes de silicone ne doivent généralement pas entrer en contact avec des solvants, des pommades, des lotions nettoyantes nourrissantes ni des crèmes corporelles. Sinon, l'adhérence des bandes adhésives peut s'en trouver durablement détériorée. Stockez les bas secs et à l'abri du soleil et de la chaleur, de préférence dans leur emballage d'origine.

Conseils pour l'enfilage des bas de contention

Tirez délicatement vos bas/collants le long de votre jambe, du bas vers le haut, en évitant de les tirer par la bordure de raccordement. Faites attention de ne pas les endommager avec des bijoux ou des ongles longs.

Composition de la matière

gilofa®

contient du coton

50 % coton
40 % polyamide
10 % élasthanne

gilofa®

avec aloe vera

Contient un soin de la peau. Des microcapsules spéciales délivrent à la peau des extraits d'aloe vera de manière contrôlée ; efficacité sur plus de 100 lavages.

42 % polyamide (microfibre avec aloe vera)
35 % polyamide
15 % coton
8 % élasthanne

gilofa® fine

52 % polyamide (à l'huile d'amande douce et l'huile de rose musquée)
48 % élasthanne

gilofa® style

52 % polyamide (microfibre)
29 % élasthanne
19 % polyamide
16 % élasthanne

Veuillez laver à l'envers et ne pas utiliser d'adoucissant !

-  Lavage délicat
-  Pas d'agent blanchissant
-  Séchage délicat
-  Pas de repassage
-  Pas de nettoyage à sec

Beste gebruiker,

In de Gilofa reis- en steunkousen schuilt tientallen jaren ervaring uit de ontwikkeling van medische compressiekousen.

U hebt gekozen voor een hoogwaardig gezondheidsproduct. Naast het medische aspect letten wij bij Gilofa speciaal op het draagcomfort. Gilofa kousen voelen aangenaam aan, zijn comfortabel en zien er goed uit. Zo leef je met plezier gezonder. Op reis, bij het sporten of gewoon omdat u ook in het dagelijks leven goed voor uzelf wilt zorgen.

Belangrijke informatie

De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold vakpersoneel. Uw vakhandelaar zal u ook instructies geven over hoe u de kousen moet aantrekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u tijdens het dragen last krijgt van acute pijn in de benen of van huidirritatie. Huidreacties in het gebied van de antislipboorden kunnen worden voorkomen door de antislipboord in de loop van de dag meerdere keren iets te verschuiven. Bespreek het met uw behandelend arts als u de kousen wilt gebruiken in combinatie met andere medische hulpmiddelen. We testen onze producten als onderdeel van een uitgebreide kwaliteitsborging. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar. Herstel eventuele schade niet zelf, maar breng de kous terug naar de vakhandelaar waar u hem hebt gekocht. Als de stof gaat pillen, bijvoorbeeld door wrijving tegen andere kledingstukken, wordt de kwaliteit van de kous niet minder.

Garantie

De houdbaarheid van compressiekousen is beperkt tot 5,5 jaar indien ze correct worden bewaard. Bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging garanderen wij voor 6 maanden het optimale compressieve effect. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage resp. oneigenlijk gebruik zijn principeel uitgesloten van de garantie. Onder oneigenlijk gebruik vallen ook latere wijzigingen aan het product die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor één gebruiker. Als het voor hergebruik wordt doorgegeven aan andere personen, vervalt de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Werkingsprincipe van compressieve kousen

Het van beneden naar boven afnemende drukverloop bevordert de doorbloeding en ondersteunt het veneuze systeem.

Indicaties / beoogd gebruik

Zwaar en vermooid gevoel in de benen. Als profylaxe tegen veneuze beenklachten en reizigerstrombose bij mensen met gezonde bloedvaten. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of u een aandoening aan de bloedvaten hebt die behandeld moet worden.

Contra-indicaties

- Gevorderd perifeer arterieel vaatlijden
- Gedecompenseerd hartfalen
- Septische flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

In acht te nemen risico's:

- Geprononceerde vochtige dermatosen
- Onverdraagzaamheid van het compressiekousmateriaal
- Ernstige sensibiliteitsstoornissen van de ledematen
- Gevorderde perifere neuropathie (bijv. diabetes mellitus)
- Primair chronische polyarthritis

Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Risico's en bijwerkingen

Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder compressieve kousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen. Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en met een arts te spreken voordat u de kousen verder gebruikt: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibiliteitsstoornissen, een doof gevoel, toenemende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht

Op grond van wettelijke voorschriften binnen de EU zijn patiënten en gebruikers verplicht om ieder ernstig incident bij het gebruik van een medisch hulpmiddel onmiddellijk te melden aan zowel de fabrikant als de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

Verzorgingsinstructies

Het product is geschikt voor direct gebruik. We raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt. Was ze daarna dagelijks met de hand of op het fijnwasprogramma van uw wasmachine. Was de kousen apart met een wasmiddel voor de fijne was zonder wasverzachter (bijv. "Ofa Clean speciaal wasmiddel") op maximaal 40 °C en spoel ze goed uit. De kousen kunnen voorzichtig worden gecentrifugeerd, maar wring ze niet uit. Laat uw kousen aan de lucht drogen of gebruik het programma voor de fijne was van uw droger, maar plaats ze niet op de verwarming en stel ze niet bloot aan direct zonlicht. U mag de kousen nooit strijken.

Om de effectiviteit van uw kousen te behouden, mag u geen chemische reinigingsmiddelen, benzine of wasverzachter gebruiken. Deze stoffen tasten het materiaal van de kousen aan. Compressieve kousen zijn grotendeels ongevoelig voor vetten en oliën, maar mogen niet in aanraking komen met zalven. Kousen met siliconen-antislipboorden mogen over het algemeen niet in aanraking komen met oplosmiddelen, zalven en vochtinbrengende waslotions en lichaamscremes. Anders kan de grip van de antislipboorden blijvend worden aangestast. Bewaar de kousen droog en beschermd tegen zon en hitte, indien mogelijk in de originele verpakking.

Binnenste/buiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

-  Fijne was
-  Niet bleken
-  Voorzichtig drogen
-  Niet strijken
-  Niet chemisch reinigen

Aantrektips

Schuif uw kousen/panty voorzichtig van beneden naar boven over het been omhoog en trek de kous/panty niet aan de bovenkant omhoog. Voorkom beschadigingen door sieraden of lange nagels.

Materiaalsamenstelling

gilofa®

met katoen

50% katoen
40% polyamide
10% elastaan

gilofa®

met aloë vera

Inclusief huidverzorging. Speciale microcapsules geven de aloë-vera-extracten gecontroleerd aan de huid af; meer dan 100 wasbeurten lang.
42% polyamide (microvezel met aloë vera)
35% polyamide
15% katoen
8% elastaan

gilofa® fine

52% polyamide (met amandel- en wilderozenolie)
48% elastaan

gilofa® style

52% polyamide (microvezel)
29% elastaan
19% polyamide

Gentile utente,

le calze Gilofa di sostegno e da viaggio sono il risultato di decenni di esperienza nello sviluppo di calze a compressione medica. Ha scelto un prodotto sanitario di alta qualità. Oltre all'aspetto medico, noi di Gilofa prestiamo particolare attenzione al comfort. Le calze Gilofa sono confortevoli, comode e hanno un bell'aspetto. Così si vive in maniera più sana. Per i viaggi, l'attività sportiva o semplicemente perché si desidera qualcosa di buono per se stessi nella vita quotidiana.

⚠ Note importanti

Le calze devono essere fornite da personale specializzato. Il Suo rivenditore La consiglierà anche su come indossare correttamente le calze. Se durante l'uso di questo prodotto dovessero manifestarsi dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, consulti immediatamente il medico. Le reazioni cutanee nella zona delle balze elastiche possono essere evitate spostando leggermente la balza più volte nel corso della giornata. Consulti il medico se le calze devono essere indossate in combinazione con altri dispositivi medici. Testiamo i nostri prodotti come parte di un sistema completo di garanzia della qualità. Nonostante ciò, qualora si verificassero problemi, contatti il Suo rivenditore. Non tenti di riparare eventuali danni, restituisca le calze al rivenditore presso cui sono state acquistate. I nodini di fibre che potrebbero formarsi a causa dell'attrito con altri capi non riducono la qualità della calza.

Garanzia

La durata di conservazione delle calze a compressione è limitata a 5,5 anni, se conservate correttamente. Con un uso regolare e una cura adeguata, garantiamo un effetto di compressione ottimale per 6 mesi. Dopo questo periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti alla normale usura o all'uso improprio. L'uso improprio comprende anche eventuali successive modifiche del prodotto che non siano state effettuate dal produttore. Il prodotto è destinato a un solo utente. Se viene trasmessa ad altre persone per il riutilizzo, la responsabilità del produttore decade.

Principio di funzionamento delle calze

a compressione

Il gradiente di pressione, che diminuisce dal basso verso l'alto, favorisce la circolazione del sangue e sostiene il sistema venoso.

Indicazioni/destinazione d'uso

Sensazione di pesantezza e stanchezza alle gambe. Per la profilassi contro i disturbi venosi alle gambe e la trombosi da viaggio nelle persone con problemi vascolari. In caso di dubbi in relazione all'effettiva presenza di una patologia vascolare che richiede un trattamento, consulti il Suo medico.

Controindicazioni

- Malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica
- Flegmasia cerulea dolens

Rischi da considerare:

- dermatosi essudanti marcate
- incompatibilità con il materiale delle calze a compressione
- gravi disturbi della sensibilità dell'arto
- neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete mellito)
- poliartrite cronica primaria

In caso di dubbi, si rivolga al Suo medico.

⚠ Rischi ed effetti collaterali

In caso di pelle sensibile, le calze a compressione graduata possono causare prurito e problemi cutanei. Quindi si raccomanda un'adeguata cura della pelle. In caso dei seguenti sintomi, rimuova immediatamente le calze e discuta con il Suo medico dell'eventuale opportunità della prosecuzione dell'utilizzo: Colorazione blu o bianca delle dita dei piedi, sensazioni di disestesia e intorpidimento, aumento del dolore, dispnea e attacchi di sudorazione, compromissione acuta del movimento.

Smaltimento

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.

Obbligo di notifica

In conformità alle disposizioni di legge dell'UE, i pazienti e gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi incidente grave durante l'utilizzo di un dispositivo medico sia al produttore che all'autorità nazionale competente (in Germania BfArM).

Istruzioni per la cura

Il prodotto è adatto per un uso immediato. Si consiglia di lavarlo prima di indosarlo per la prima volta. In seguito lavare ogni giorno a mano o in lavatrice con ciclo di lavaggio delicato. Lavare le calze separatamente con un detersivo delicato senza ammorbidente (ad es. detergente speciale Ofa Clean) ad una temperatura massima di 40 °C e risciacquare bene. Le calze possono essere centrifugate delicatamente, ma non strizzarle. Asciugare le calze all'aria o in asciugatrice con ciclo delicato, ma non metterle sul termosifone né esporle alla luce diretta del sole. Non stirare mai le calze.

Per mantenere l'efficacia delle calze, non utilizzare detergenti chimici, benzina o ammorbidente per tessuti. Queste sostanze attaccano il tessuto a maglia. Le calze a compressione sono in gran parte indifferenti ai grassi e agli oli, ma non devono entrare in contatto con gli unguenti. Le calze con balza elastica siliconata devono in genere non entrare in contatto con solventi, unguenti, lozioni detergenti sebo-restitutive e creme per il corpo. In caso contrario, l'adesione della balza elastica potrebbe essere compromessa in modo permanente. Conservare le calze asciutte e protette dal sole e dal calore, se possibile nella confezione originale.

Accorgimenti per indossarle

Far scivolare delicatamente le calze/collant sulla gamba dal basso verso l'alto senza tirarle dal bordo superiore. Evitare danni causati da gioielli o unghie lunghe.

Composizione del materiale

gilofa®

con cotone

50% cotone
40% poliammide
10% elastan

gilofa®

con aloe vera

Cura della pelle inclusa. Speciali microcapsule erogano estratti di aloe vera alla pelle in modo controllato; per oltre 100 lavaggi.
42% poliammide (microfibra con aloe vera)
35% poliammide
15% cotone
8% elastan

gilofa® fine

52% poliammide (con olio di mandorle e di rosa)
48% elastan

gilofa® style

52% poliammide (microfibra)
29% elastan
19% poliammide

Lavare al rovescio e non utilizzare ammorbidente!

-  Ciclo di lavaggio delicato
-  Non candeggiare
-  Asciugare delicatamente
-  Non stirare
-  Non lavare a secco

Estimada usuaria, estimado usuario:

El diseño de las medias de viaje y descanso Gilofa se basa en décadas de experiencia en el desarrollo de medias de compresión medicinales. Usted ha elegido un producto sanitario de alta calidad. Aparte de las cuestiones médicas, prestamos especial atención a la comodidad de uso de Gilofa. Las medias Gilofa tienen un tacto agradable, son cómodas y bonitas. Así da gusto vivir más sano. Viajando, haciendo deporte o simplemente porque quiere hacer algo bueno por usted en la vida diaria.

⚠ Notas importantes

Solo especialistas con formación médica pueden suministrar estas medias. Su distribuidor especializado también le aconsejará sobre cómo ponerse correctamente las medias. Si al usarlas siente un dolor agudo en las piernas o se le irrita la piel, consulte de inmediato a un médico. Las reacciones cutáneas en la zona de las bandas adherentes se pueden prevenir cambiando ligeramente de posición la banda adherente varias veces al día. Si las medias se van a usar en combinación con otros productos médicos, consúltelo con el médico responsable. Probamos nuestros productos en el marco de una garantía de calidad integral. Si, aun así, tiene una reclamación, póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si las medias tienen daños, no las repare usted mismo/a. Le recomendamos que las lleve al distribuidor especializado a quien las compró. Los nódulos de fibra que puedan formarse por la fricción con otras prendas de vestir no reducen la calidad de las medias.

Garantía

La vida útil de las medias de compresión, si se almacenan adecuadamente, está limitada a 5,5 años. Con un uso regular y cuidados adecuados, garantizamos un efecto de compresión óptimo durante 6 meses. Una vez transcurrido este plazo, los productos quedarán excluidos de la garantía. En principio, se excluyen de la garantía los defectos que se produzcan por el desgaste normal o el uso indebido. Se considera también uso indebido cualquier modificación posterior del producto que no haya sido realizada por la empresa fabricante. El producto está previsto para un solo usuario. Si se entrega a otras personas para

su reutilización, el fabricante queda liberado de cualquier responsabilidad sobre el producto.

Principio de funcionamiento de las medias de compresión

El cambio de presión, que disminuye de abajo arriba, activa la circulación sanguínea y ayuda al sistema venoso.

Indicaciones/Finalidad

Sensación de pesadez y cansancio en las piernas. Para la prevención de problemas venosos de las piernas y síndrome de la clase turista en personas con venas sanas. Si cree que puede tener una enfermedad venosa que requiera tratamiento, consulte a su médico.

Contraindicaciones

- Enfermedad obstructiva arterial periférica avanzada
- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Flebitis séptica
- Flegmasia cerúlea dolens

Riesgos que se deben tener en cuenta:

- Dermatosis húmedas pronunciadas
- Intolerancia al material de la media de compresión
- Trastornos graves de la sensibilidad en la extremidad
- Neuropatía periférica avanzada (por ejemplo, diabetes mellitus)
- Poliartritis crónica primaria

En caso de duda, consulte a su médico.

⚠ Riesgos y efectos secundarios

En caso de piel sensible, las medias de compresión pueden causar picor y problemas cutáneos. Por lo tanto, se recomienda un cuidado adecuado de la piel. Si presenta los siguientes síntomas, quítese inmediatamente las medias y consulte con su médico antes de seguir utilizándolas: coloración azul o blanca de los dedos de los pies, trastornos de la sensibilidad y entumecimiento, aumento del dolor, dificultad para respirar y sudoración, limitación aguda del movimiento.

Eliminación

Al final de su vida útil, deseche el producto de acuerdo con la normativa local.

Declaración obligatoria

La legislación de la UE obliga a los pacientes y a los usuarios a notificar inmediatamente al fabricante y a la autoridad nacional competente (BfArM en el caso de Alemania) cualquier incidente grave que se haya producido al usar un producto sanitario.

Instrucciones de cuidado

El producto está preparado para usarse directamente. Sin embargo, se recomienda lavar el producto antes de usarlo por primera vez. Luego, lávelo todos los días a mano o en el ciclo de lavado delicado de la lavadora. Lave las medias por separado con un detergente suave, pero sin suavizante (por ejemplo, el "detergente especial Ofa Clean"), a una temperatura máxima de 40 °C, y aclárelas bien. Las medias se pueden centrifugar suavemente, pero no se pueden retorcer para escurrirlas. Seque sus medias al aire o en el ciclo de ropa delicada de su secadora, pero no las coloque sobre la calefacción ni las exponga a luz solar directa. Nunca planche las medias.

Para mantener la eficacia de sus medias, no utilice detergentes químicos, gasolina ni suavizante. Estas sustancias debilitan la tela de punto. Las medias de compresión soportan bastante bien grasas y aceites, pero no deben entrar en contacto con ungüentos. En general, las medias con bandas adherentes recubiertas de silicona no deben entrar en contacto con disolventes, ungüentos, lociones de lavado hidratantes ni cremas corporales. De lo contrario, la adherencia de las bandas adherentes puede perderse permanentemente. Almacene las medias secas y protegidas del sol y del calor, en el envase original si es posible.

Recomendaciones de uso

Deslice la media/panti con cuidado de abajo arriba a lo largo de la pierna, y no tire de ella hacia arriba desde el borde superior. Evite dañarla con joyas o uñas largas.

Composición de los materiales

gilofa®

con algodón

50 % algodón
40 % poliamida
10 % elastano

gilofa®

con aloe vera

Cuidado de la piel incluido. Microcápsulas especiales distribuyen los extractos de aloe vera sobre la piel de forma controlada; duran más de 100 lavados.

42 % poliamida (microfibra con aloe vera)
35 % poliamida
15 % algodón
8 % elastano

gilofa® fine

52 % poliamida (con aceite de almendras y rosa mosqueta)
48 % elastano

gilofa® style

52 % poliamida (microfibra)
29 % elastano
19 % poliamida

¡Lavar del revés y sin suavizante!

-  Ciclo de lavado delicado
-  No usar lejía
-  Secar a baja temperatura
-  No planchar
-  No lavar en seco

Cara utilizadora, caro utilizador,
as meias de viagem e utilização diária
Gilofa beneficiam de décadas de experiência
no desenvolvimento de meias clínicas de
compressão. Escolheu um produto de cuidados
de saúde de alta qualidade. Além do aspeto
médico, damos especial atenção ao conforto
de utilização das Gilofa. As meias Gilofa são
agradáveis, confortáveis e elegantes. Assim dá
gosto ter uma vida saudável. Quer esteja a viajar,
a praticar desporto ou simplesmente porque quer
tirar o máximo partido do dia-a-dia.

⚠ Instruções importantes

A distribuição das meias tem de ser feita por
pessoal especializado com formação clínica.
O seu revendedor especializado também o
aconselhará sobre a maneira correta de calçar as
meias. Caso ocorram dores agudas nas pernas
ou irritação cutânea durante a utilização, consulte
imediatamente o médico. Reações cutâneas
na área das faixas adesivas podem ser evitadas
deslocando ligeiramente a faixa adesiva várias
vezes ao longo do dia. Caso seja necessário usar
as meias em conjunto com outros dispositivos
médicos, aconselhe-se junto do seu médico.
Testamos os nossos produtos no âmbito de um
controlo de qualidade abrangente. Caso, apesar
de tudo, tenha alguma reclamação, dirija-se ao
seu revendedor especializado. Não tente reparar
qualsquer danos; devolva a meia ao revendedor
especializado a quem a comprou. Pequenos bor-
botos, resultantes da fricção com outras peças
de roupa, não afetam a qualidade das meias.

Garantia

A vida útil das meias de compressão, em
condições de armazenamento corretas, é de
5,5 anos. Com utilização regular e cuidado
adequado, garantimos um efeito de compressão
ideal durante 6 meses. No fim deste prazo os
produtos deixam de estar abrangidos pela
garantia. Essencialmente, são excluídos da
garantia defeitos resultantes do desgaste
normal ou de uma utilização incorreta. A
utilização incorreta inclui também alterações
posteriores ao produto, que não tenham sido
realizadas pelo fabricante. O produto destina-se
a um utilizador. Caso seja transmitido a outra
pessoa para reutilização, a responsabilidade do
fabricante caduca.

Princípio de atuação das meias de compressão

A distribuição da pressão, decrescente de baixo
para cima, promove a circulação sanguínea e
auxilia o sistema venoso.

Indicações/finalidade

Fadiga nas pernas ou sensação de pernas
pesadas. Para prevenção de problemas venosos
nas pernas e trombose venosa em pacientes
saudáveis. Se tiver dúvidas sobre a necessidade
de tratamento da sua doença venosa, consulte
o seu médico.

Contraindicações

- Doença arterial periférica avançada
- Insuficiência cardíaca descompensada
- Flebite séptica
- Flegmasia cerulea dolens

Riscos a considerar:

- Dermatoses húmidas intensas
- Intolerância aos materiais das meias de
compressão
- Perturbações severas de sensibilidade
da extremidade
- Neuropatia periférica avançada
(p. ex., Diabetes mellitus)
- Poliartrite crónica primária

Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

⚠ Riscos e efeitos secundários

Em caso de pele sensível, pode ocorrer comichão
e problemas de pele por baixo das meias
de compressão. Por isso são recomendados
cuidados de pele adequados. Caso ocorram os
sintomas seguintes, descalçar imediatamente as
meias e consultar o médico para decidir sobre
a continuidade da utilização: Dedos arroxeados
ou brancos, sensações anormais e de dormência,
dores crescentes, falta de ar e suores, limitações
agudas dos movimentos.

Eliminação

Após o fim do prazo de utilização, elimine o
produto em conformidade com as normas locais.

Dever de notificação

Tal como exigido por lei na UE, os doentes e utilizadores têm o dever de comunicar imediatamente, ao fabricante ou às autoridades nacionais competentes (na Alemanha, a BfArM, instituto federal de medicamentos e dispositivos médicos), quaisquer ocorrências graves relacionadas com a utilização de um dispositivo médico.

Instruções de manutenção

O produto destina-se a uma utilização cuidada. É recomendável lavá-lo antes da primeira utilização. Em seguida, lavar diariamente à mão ou à máquina no ciclo para roupa delicada. Lave as meias separadamente com um detergente suave e sem amaciador (p.ex. detergente especial "Ofa Clean"), a uma temperatura máxima de 40 °C e enxague bem. As meias podem ser centrifugadas com cuidado, mas não devem ser torcidas. Seque as suas meias ao ar ou no ciclo para roupa delicada da máquina de secar, mas não as coloque sobre um aquecimento, nem exponha à luz solar direta. Nunca passe as meias a ferro.

Para preservar a eficácia das suas meias, não utilize produtos químicos de limpeza, benzina ou amaciador. Essas substâncias danificam a malha. As meias de compressão são geralmente resistentes a gorduras e óleos, mas não devem entrar em contacto com cremes. Meias com faixas adesivas revestidas a silicone não devem entrar em contacto com solventes, cremes, loções gordas e leites corporais. Caso contrário, a aderência das fitas adesivas pode ficar permanentemente comprometida. Garde as meias bem secas e protegidas do sol e do calor, se possível na embalagem original.

Lavar do avesso e não utilizar amaciador!

-  Ciclo para roupa delicada
-  Não branquear
-  Secar no ciclo para roupa delicada
-  Não passar a ferro
-  Não limpar com produtos químicos

Dicas para calçar as meias

Calce cuidadosamente as meias/collants, de baixo para cima, e não as puxe para cima pela extremidade. Evite danos causados por joias ou unhas compridas.

Composição do material

gilofa®

Com algodão

50% algodão
40% poliamida
10% elastano

gilofa®

Com aloé vera

Cuidado da pele incluído. As microcápsulas especiais libertam os extractos de aloé vera para a pele de forma controlada, ao longo de mais de 100 lavagens.

42 % poliamida (mictofibra com aloe vera)
35% poliamida
15% algodão
8% elastano

gilofa® fine

52% poliamida (com óleo de amêndoia e óleo de rosa selvagem)
48% elastano

gilofa® style

52% poliamida (microfibra)
29% elastano
19 % poliamida

Αγαπητοί χρήστες,

Οι κάλτσες υποστήριξης και ταξιδιού Gilofa είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών εμπειρίας στην ανάπτυξη ιατρικών καλτσών συμπίεσης. Αποφασίσατε να επιλέξετε ένα προϊόν υγείας υψηλής ποιότητας. Εκτός από την ιατρική πλευρά, με την Gilofa, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση χρήσης. Οι κάλτσες Gilofa έχουν ευχάριστη αίσθηση, είναι άνετες στη χρήση και ελκυστικές στην εμφάνιση. Η υγειεινή διαβίωση γίνεται εύκολη. Είτε ταξιδεύετε, είτε γυμνάζεστε, είτε απλά επειδή θέλετε να κάνετε καλό στον εαυτό σας στην καθημερινότητα.

⚠ Σημαντικές υποδείξεις

Οι κάλτσες πρέπει να παρέχονται από ιατρικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο τοπικός έμπορος θα σας δείξει επίσης πώς να φοράτε σωστά τις κάλτσες σας. Αν κατά τη χρήση παρουσιαστούν οξείς πόνοι στα πόδια ή δερματικοί ερεθισμοί, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. Μπορείτε να μετατοπίσετε ελαφρώς το πλαισίο επικόλλησης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την πρόληψη ενδεχόμενων δερματικών αντιδράσεων στην περιοχή των πλαισίων επικόλλησης. Εάν θα πρέπει να φορέστε τις κάλτσες σε συνδυασμό με άλλα ιατρικά βοηθήματα, παρακαλούμε να το συζητήσετε με τον θεράποντα ιατρό. Ελέγχουμε τα παρεχόμενα προϊόντα μας στα πλαίσια ενός εκτενούς ελέγχου ποιότητας. Ωστόσο, αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα, απευθυνθείτε στον τοπικό έμπορο. Μην επισκευάζετε τις ζημιές μόνοι σας. Σε περίπτωση ζημιών επιστρέψτε τις κάλτσες στον τοπικό έμπορο, από τον οποίο τις αγοράσατε. Οι κόμποι των ινών που μπορούν να δημιουργηθούν από την τριβή με άλλα ρούχα δεν μειώνουν την ποιότητα των καλτσών.

Παροχή εγγύησης

Ο χρόνος διατήρησης των ιατρικών καλτσών συμπίεσης περιορίζεται σε 5,5 χρόνια, εφόσον η αποθήκευση γίνεται με σωστό τρόπο. Το μέγιστο αποτέλεσμα συμπίεσης ανέρχεται σε 6 μήνες με τακτική χρήση και σωστή φροντίδα. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η εγγύηση των προϊόντων παύει να ισχύει. Κατά κανόνα, από την εγγύηση εξαιρούνται τα ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή σε λανθασμένη χρήση. Η λανθασμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης τη μεταγενέστερη τροποποίηση του προϊόντος, η οποία δεν έχει διεξαχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το προϊόν προορίζεται για χρήση από έναν και μόνο ασθενή. Αν το προϊόν δοθεί σε άλλα

άτομα και επαναχρησιμοποιηθεί, τότε η εγγύηση του κατασκευαστή παύει να ισχύει.

Βασικές αρχές για τις κάλτσες συμπίεσης

Η πίεση μειώνεται από κάτω προς τα επάνω, με αποτέλεσμα να προάγεται η κυκλοφορία του αίματος και να υποστηρίζεται το φλεβικό σύστημα.

Ενδείξεις / Προβλεπόμενη χρήση

Αίσθημα βάρους και κόπωσης στα πόδια. Πρόληψη των φλεβικών ενοχλήσεων και της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης που προκαλείται από παρατεταμένα ταξίδια σε άτομα με υγιές φλεβικό σύστημα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν υπάρχει ένδειξη φλεβικής νόσου που απαιτεί θεραπεία.

Αντενδείξεις

- προχωρημένη περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσος
- συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- σηπτική φλεβίτιδα
- Phlegmasia coerulea dolens (κυανή επώδυνη φλεγμονή)

Κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

- έντονες εξιδρωματικές δερματοπάθειες
- δυσανεξία σε υλικά καλτσών συμπίεσης
- βαριές αισθητηριακές διαταραχές στο άκρο
- προχωρημένη περιφερική νευροπάθεια (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης)
- πρωτοπαθής χρόνια πολυαρθρίτιδα

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

⚠ Κίνδυνοι και παρενέργειες

Σε περίπτωση ευαίσθητου δέρματος, μπορεί να προκληθεί κνημός και δερματικά προβλήματα κάτω από τις κάλτσες συμπίεσης. Για αυτόν το λόγο, συνιστούμε την επαρκή φροντίδα του δέρματος. Αν εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα, βγάλτε αμέσως τις κάλτσες και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν συνεχίσετε τη χρήση τους: Μελανές ή λευκές αποχρώσεις στα δάχτυλα, αίσθημα δυσφορίας και αίσθηση μουδιάσματος, πόνοι αυξανόμενης έντασης, δύσπνοια και εφίδρωση, σημαντικοί περιορισμοί στην κίνηση.

Απόρριψη

Μετά το τέλος της διάρκειας χρήσης, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Υποχρέωση δήλωσης

Λόγω των νομικών διατάξεων εντός της Ε.Ε., οι ασθενείς και οι χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν αμέσως στον κατασκευαστή και στους αρμόδιους εθνικούς φορείς (στη Γερμανία, στον φορέα BfArM) τα εμφανιζόμενα σοβαρά περιστατικά από τη χρήση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Υποδείξεις φροντίδας

Το προϊόν ενδείκνυται για άμεση χρήση. Σας συνιστούμε να πλένετε το προϊόν προτού το φορέσετε για πρώτη φορά. Κατόπιν πρέπει να το πλένετε καθημερινά στο χέρι ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του πλυντηρίου σας. Οι κάλτσες πρέπει να πλένονται ξεχωριστά με απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα και χωρίς μαλακτικό (π.χ. με το ειδικό απορρυπαντικό Ofa Clean) σε μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ενώ πρέπει να ξεπλένονται καλά. Μπορείτε να στύψετε απαλά τις κάλτσες, αλλά όχι τελείως.

Στεγνώνετε τις κάλτσες σε εξωτερικό χώρο ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του στεγνωτηρίου σας, αλλά μην τις τοποθετείτε πάνω σε θερμαντικά σώματα και μην τις εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Απαγορεύεται ρητά να σιδερώνετε τις κάλτσες.

Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των καλτσών, μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μέσα, βενζίνη ή μαλακτικό. Αυτές οι ουσίες διαβρώνουν το πλεχτό ύφασμα. Οι κάλτσες συμπίεσης δεν είναι ευαίσθητες σε λίπη και λάδια, αλλά δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με αλοιφές. Οι κάλτσες με πλαϊσια επικόλλησης με επίστρωση σιλικόνης δεν θα πρέπει, γενικά, να έρχονται σε επαφή με διαλυτικά μέσα, αλοιφές, ενυδατικές λοσιόν καθαρισμού και κρέμες σώματος. Σε διαφορετική περίπτωση, η ικανότητα πρόσφυσης των πλαισίων επικόλλησης μπορεί να μειωθεί ανεπανόρθωτα. Αποθηκεύτε τις κάλτσες σε στεγνό μέρος, το οποίο προστατεύεται από τον ήλιο και τη ζέστη, ιδανικά στην αρχική συσκευασία τους.

Παρακαλούμε πλένετε τις κάλτσες γυρισμένες ανάποδα και μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό!

Συμβουλές πώς να φορέσετε τις κάλτσες

Απαγορεύεται να τραβάτε τις κάλτσες συμπίλεσης προς τα επάνω από το πλαίσιο κλεισίματος ή επικόλλησης, αλλά πρέπει να τις τεντώνετε με τα χέρια από κάτω προς τα επάνω. Τα κοσμήματα και τα μακριά νύχια των χεριών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις κάλτσες.

Σύνθεση υλικού

gilofa®

από βαμβάκι

50 % βαμβάκι

40% πολυαμίδιο

10% ελαστάνη

gilofa®

με αλόγο βέρα

Συνεχής φροντίδα του δέρματος. Ειδικές μικροκάψουλες διανέμουν με ελεγχόμενο τρόπο τα εκχυλίσματα αλόγης βέρα στο δέρμα για περισσότερες από 100 πλύσεις.

42 % πολυαμίδιο (μικροΐνες με αλόγο βέρα)

35 % πολυαμίδιο

15 % βαμβάκι

8 % ελαστάνη

gilofa® fine

52 % πολυαμίδιο (με αμυγδαλέλαιο και έλαιο άγριου τριαντάφυλλου)

48 % ελαστάνη

gilofa® style

52 % πολυαμίδιο (μικροΐνες)

29 % ελαστάνη

19 % πολυαμίδιο

-  Λειτουργία πλύσης ευαίσθητων ρούχων
-  Μην λευκαίνετε
-  Στεγνώνετε απαλά
-  Μην σιδερώνετε
-  Μην εκτελείτε χημικό καθαρισμό

Sayın kullanıcı,

Gilofa seyahat ve destek çorapları, tıbbi kompresyon çoraplarının geliştirilmesinde onlarca yıllık deneyimin ürünüdür. Yüksek kaliteli bir tıbbi ürünü tercih ettiniz.

Ürünümüzün tıbbi özelliklerin yanı sıra, kullanım rahatlığı da Gilofa için son derece önemlidir. Gilofa çorapları rahat hissettirir, konforludur ve estetik görünür. Daha sağlıklı yaşamınızı sağlar. Seyahatlerde, spor yaparken ya da sadece günlük yaşamda kendinize bir iyilik yapmak istediğinizde kullanın.

⚠ Önemli bilgiler

Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmelidir. Tıbbi ürün satıcınız, çorabınızı nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede de bulunacaktır. Çoraplarınızı giydiğinizde akut bacak ağrısı veya cilt tahrizi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın. Yapışkan bantların temas ettiği bölgelerde cilt reaksiyonlarını önlemek için bantları gün boyunca birkaç kez hafifçe hareket ettirin. Çorapların diğer medikal yardımcı araçlarla birlikte giyilmesi gerekiyorsa lütfen bu konuda tedaviyi uygulayan doktora danışın. Ürünlerimizi, kapsamlı kalite güvence sürecimiz dahilinde test ederiz. Şikayetiniz olursa lütfen tıbbi ürün satıcınızla iletişime geçin. Hasarları kendi başına onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün. Diğer giysilerle sürtünmeden dolayı oluşabilecek lif topakları, çorabın kalitesini olumsuz yönde etkilemez.

Garanti

Kompresyon çoraplarının ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 5,5 yıldır. Düzenli kullanım ve usulüne uygun bakım ile 6 ay boyunca optimum kompresyon etkisi garanti edilir. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonrasında yapılan değişiklikler de usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. Ürün tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

Kompresyon çorapların etki prensibi

Aşağıdan yukarıya doğru azalan basınç dağılımı kan dolaşımını hızlandırır ve toplardamar sistemini destekler.

Endikasyonlar/kullanım amacı

Bacaklarda ağrılık ve yorgunluk hissi. Sağlıklı toplardamarlara sahip kişilerde venöz bacak rahatsızlıklarına ve derin ven trombozuna karşı önlem amacıyla. Tedavi gerektiren bir venöz rahatsızlığını olup olmadığına dair herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen doktorunuza danışın.

Kontrendikasyonlar

- ileri periferik arter hastalığı
- dekompanse kalp yetmezliği
- septik flebit
- phlegmasia cerulea dolens

Dikkate alınması gereken riskler:

- belirgin eksüdatif dermatozlar
- kompresyon çorabı malzemesine karşı hassasiyet
- ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- ileri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- primer kronik poliartrit

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması durumunda lütfen doktorunuza danışın.

⚠ Riskler ve yan etkiler

Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorabı hemen çıkarın ve kullanmaya devam etmeden önce doktorunuza danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölginizdeki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Bildirim zorunluluğu

AB bünyesindeki yasal düzenlemeler nedeniyle hastalar ve kullanıcılar, tıbbi cihazların kullanımıyla ilgili ciddi vakaları hem imalatçı firmaya hem de sorumlu ulusal otoriteye (Almanya'da BfArM) bildirmekle yükümlüdür.

Bakım

Ürün hemen kullanıma uygundur. İlk kullanımdan önce yıkamanızı tavsiye ederiz. Ardından her gün elle veya makinenizin hassas ayarında yıkayın. Çorapları yumuşatıcı içermeyen bir hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin Ofa Clean özel deterjan) maksimum 40°C' de ayrı yıkayı ve iyice durulayın. Çoraplar makinenin hassas sıkma ayarıyla sıkılabilir, ancak elle burularak sıkılmamalıdır. Çoraplarınızı havayla veya kurutucunuzun hassas ayarında kurutabilirsiniz, ancak bir ıstıçının üzerine koymayın veya doğrudan güneşi ışığına maruz bırakmayın. Çorapları asla ütülemeyin.

Çoraplarınızın etkisini korumak için lütfen hiçbir kimyasal temizlik maddesi, benzin veya yumuşatıcı kullanmayın. Bu maddeler örme kumaşa zarar verir. Kompresyon çorapları katı ve sıvı yağılardan büyük ölçüde etkilenmez, ancak merhemlerle temas etmemelidir. Genel bir kural olarak, silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar çözüçüler, merhemler, nemlendirici yıkama losyonları ve vücut kremleri ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak bozulabilir. Çorapları kuru ve mümkünse orijinal ambalajında güneşten ve ısından koruyarak saklayın.

Lütfen ters yüz ederek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

-  Hassas ayarda yıkayın
-  Ağartıcı kullanmayın
-  Nazikçe kurutun
-  Ütülemeyin
-  Kuru temizleme yapmayın

Giyme önerileri

Çorabınızı/külotlu çorabınızı bacağınızda aşağıdan yukarıya doğru dikkatle çekin ve kenarlarından tutarak çekmeyin. Lütfen ürünün takılar veya uzun tırnaklar nedeniyle zarar görmemesine özen gösterin.

Malzeme bileşimi

gilofa®

pamuk içerir

%50 pamuk
%40 polyamid
%10 elastan

gilofa®

aloe vera içerir

Ürün özelliklerine cilt bakımı da dahildir. Özel mikrokapsüller, 100'den fazla yıkama sonrasında bile aloe vera özütlərini kontrollü bir şekilde cilde dağıtır.
%42 polyamid (aloe vera içeren mikrofiber)
%35 polyamid
%15 pamuk
%8 elastan

gilofa® fine

%52 polyamid (badem yağı ve yabani gül yağı içerir)
%48 elastan

gilofa® style

%52 polyamid (mikrofiber)
%29 elastan
%19 polyamid

Vážená uživatelko, vážený uživateli, podpůrné a cestovní punčochy Gilofa jsou výsledkem desítek let zkušeností s vývojem zdravotních kompresních punčoch. Zakoupili jste velmi kvalitní zdravotní produkt. Ve společnosti Gilofa se snažíme, aby produkty byly nejen zdraví prospěšné, ale také se pohodlně nosily. Punčochy Gilofa jsou příjemné na těle, pohodlné a dobře vypadají. S nimi je snadné žít zdravěji. Ať už jste na cestách, sportujete nebo jen proto, že chcete pro své zdraví v každodenním životě udělat něco prospěšného.

⚠ Důležité pokyny

Punčochy musí vydávat odborný personál se zdravotnickým vzděláním. Odborný prodejce vám také vysvětlí, jak se punčochy správně nasazují. Pokud se během používání objeví akutní bolesti dolních končetin nebo podráždění kůže, ihned vyhledejte lékaře. Kožním reakcím v oblasti lepících pásků lze zabránit jejich opakovaným přesouváním během dne. Budete-li chtít punčochy nosit v kombinaci s jinými zdravotnickými pomůckami, poradte se o tom s ošetřujícím lékařem. Své produkty testujeme v rámci komplexního zajištění kvality. Pokud byste i přesto narazili na problémy vyžadující reklamací, obraťte se prosím na odborného prodejce. Poškození neopravujte sami, ale přineste punčochu odbornému prodejci, u kterého jste ji koupili. Otírání o jiné oděvy může vést ke žmolkovatění, které však nenarušuje kvalitu punčochy.

Záruka

Při správném skladování vydrží kompresní punčochy 5,5 roku. Při pravidelném používání a příči dle doporučení garantujeme optimální kompresní účinek 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit. Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem. Produkt je určen pouze pro jednoho uživatele. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Princip fungování kompresních punčoch

Zdola nahoru se snižující působení tlaku napomáhá prokrvení a podporuje žilní systém.

Indikace / účel

Pocit těžkosti a únavy v nohou. Jako prevence proti žilním problémům u nohou a cestovní trombóze u lidí se zdravým žilním systémem. Pokud si nejste jistí, zda netrpíte žilním onemocněním, které by vyžadovalo léčbu, poradte se se svým lékařem.

Kontraindikace

- pokročilé periferní cévní onemocnění
- dekompenzovaná srdeční nedostatečnost
- septická flebitida
- phlegmasia coerulea dolens

Může hrozit riziko:

- dermatózy s výraznou sekrecí
- nesnášenlivost materiálu kompresních punčoch
- těžké poruchy citlivosti končetiny
- pokročilá periferní neuropatie (např. diabetes mellitus)
- primární revmatoidní artritida

V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

⚠ Rizika a vedlejší účinky

U citlivé pokožky se může pod kompresními punčochami objevit svědění a kožní problémy. V takovém případě je doporučována adekvátní kožní terapie. U následujících příznaků je nutné punčochy ihned sejmout a před jejich dalším použitím se poradit s lékařem: modré nebo bílé zbarvení nehtů, brnění a necitlivost, zhoršující se bolesti, dýchavčnost a pocení, akutní omezení pohybu.

Likvidace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Podle právních předpisů v rámci EU jsou pacienti a uživatelé povinni hlásit každý závažný incident týkající se použití zdravotnického prostředku jak výrobcu, tak příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro zdravotnické prostředky (v Německu BfArM).

Pokyny k péči

Produkt je určen k okamžitému použití. Doporučujeme jej před prvním použitím vyprat. Poté jej denně perte ručně nebo v pračce pomocí programu na jemné látky. Punčochy perte samostatně v šetrném pracím prášku bez aviváže (např. speciální prací prášek Ofa Clean) při teplotě do 40 °C. Dobře je vymáchejte. Punčochy lze nechat opatrně vyždímat v pračce, nežďimejte je však ručně. Vysušte je na vzduchu nebo použijte šetrný program sušičky. Nedávejte je však na topení ani na přímé sluneční světlo. Nikdy punčochy nežehlete.

Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, benzín ani aviváž, abyste udrželi účinnost punčoch. Tyto látky poškozují pleteninu. Kompresní punčochy jsou odolné vůči tukům a olejům, nesmí však přijít do kontaktu s mastmi. Punčochy se silikonem potaženými lepicími páskami nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly, mastmi, hydratačními mýdly a tělovými krémy. Mohlo by dojít k trvalému snížení účinnosti lepicích pásek. Punčochy uchovávejte v suchu, chráňte je před slunečním světlem a horlkem, ideálně v původním obalu.

Perte prosím naruby a nepoužívejte aviváž.

-  Program na jemné látky
-  Nepoužívejte bělidlo
-  Sušte šetrně
-  Nežehlete
-  Nečistěte chemicky

Tipy pro nasazení

Punčochy či punčochové kalhoty postupně natahuje na nohu zdola nahoru. Netahejte je za horní lem. Zabraňte poškození šperky nebo dlouhými nehty.

Materiálové složení

gilofa®

s podílem bavlny

50 % bavlna
40 % polyamid
10 % elastan

gilofa®

s aloe vera

Pečují o pokožku. Speciální mikrokapsle postupně uvolňují extrakt aloe vera, který vydrží více než 100 vyprání.
42 % polyamid (mikrovlákno s Aloe Vera)
35 % polyamid
15 % bavlna
8 % elastan

gilofa® fine

52 % polyamid (s mandlovým a růžovým olejem)
48 % elastan

gilofa® style

52 % polyamid (mikrovlákno)
29 % elastan
19 % polyamid

Drodzy Użytkownicy!

Pończochy Gilofa Vital i pończochy podróżne są wynikiem dziesięcioleci doświadczeń w rozwoju medycznych pończoch uciskowych. Zdecydowaliście się na produkt wysokiej jakości. Oprócz kwestii medycznych, w przypadku Gilofa szczególnie przywiązujemy wagę do komfortu noszenia. Skarpetki długie Gilofa czują się przyjemne, wygodne i estetyczne. Dzięki temu żyje się zdrowiej. Czy to w podróży, czy to podczas uprawiania sportu, czy też po prostu, aby było wygodnie na co dzień.

⚠ Ważne wskazówki

Pończochy powinny być wydawane przez specjalistyczny personel dysponującym przeszkoleniem medycznym. Twój wyspecjalizowany sprzedawca doradzi Ci również, jak prawidłowo zakładać pończochy. Jeżeli podczas noszenia wystąpią ostre bóle nóg lub podrażnienia skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Reakcjom skórnym w okolicach taśm podtrzymujących można zapobiec, nieznacznie zmieniając położenie taśmy podtrzymującej kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli pończochy mają być noszone w połączeniu z innymi pomocami medycznymi, należy omówić to z lekarzem prowadzącym. Nasze produkty są kontrolowane w ramach kompleksowego procesu zapewniania jakości. Jeżeli jednak mimo to pojawi się powód do reklamacji, prosimy zwrócić się do sprzedawcy. Uszkodzeń nie należy naprawiać samodzielnie; pończochę należy odnieść do sprzedawcy, u którego została zakupiona. Drobne kuleczki, które powstają wskutek ocierania o inne części garderoby, nie mają wpływu na jakość pończoch.

Gwarancja

Okres trwałości pończoch uciskowych jest ograniczony do 5,5 roku, jeżeli są one prawidłowo przechowywane. Przy regularnym stosowaniu i właściwej pielęgnacji gwarantujemy optymalny efekt kompresji przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu gwarancja udzielana na produkt traci ważność. Zasadniczo gwarancja nie obejmuje wad, które są skutkiem normalnego zużycia lub stosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się również samodzielne modyfikowanie cech produktu, bez skorzystania z pomocy producenta w tym zakresie. Produkt jest przeznaczony dla jednego użytkownika.

Jeśli zostanie on przekazany innym osobom do ponownego wykorzystania, odpowiedzialność producenta za produkt wygasła.

Zasada działania pończoch uciskowych

Ciśnienie zmniejsza się od dołu do góry i wspomaga krążenie krwi oraz układ żylny.

Wskazania / Przeznaczenie

Uczucie ciężkości i zmęczenia w nogach. W profilaktyce przeciwko chorobom żylnym kończyn dolnych i zakrzepicy żyłnej u osób zdrowych. W razie wątpliwości, czy choroba żylna wymaga leczenia, zapytaj swojego lekarza.

Przeciwwskazania

- Zaawansowana choroba tętnic obwodowych
- Dekompensacja niewydolności serca
- Septyczne zapalenie żył
- Bolesny obrzęk siniczny (phlegmasia coerulea dolens)

Względne przeciwwskazania:

- Wysiękowe zmiany skórne
- Nadwrażliwość na materiały użyte w pończochach uciskowych
- Poważne zaburzenia czucia w obrębie kończyn
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. w przebiegu cukrzycy)
- Przewlekłe zapalenie wielostawowe

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

⚠ Zagrożenia i działania niepożądane

W przypadku skóry wrażliwej stosowanie pończoch uciskowych może powodować swędzenie i problemy skórne. Zaleca się odpowiednią pielęgnację skóry. W przypadku poniższych objawów należy niezwłocznie zdjąć pończochy i skonsultować możliwość kontynuowania terapii z lekarzem: sine lub białe zabarwienie palców stóp, uczucie dyskomfortu lub odrętwienia, następujące dolegliwości bólowe, spłycenie oddechu i nadmierna potliwość, dotkliwe ograniczenie zdolności ruchowej.

Utylizacja

Po upływie okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami.

Obowiązek zgłaszania niebezpiecznych przypadków

Przepisy ustawowe zobowiązują pacjentów i użytkowników do niezwłocznego zgłaszania do producenta i właściwych organów krajowych (w Niemczech BfArM) wszelkich poważnych zdarzeń w związku ze stosowaniem produktu, tj. zdarzeń, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Produkt nadaje się do użycia natychmiast po rozpakowaniu. Zalecamy jednak wypranie przed założeniem po raz pierwszy. Następnie prać codziennie — ręcznie lub w pralce automatycznej, nastawiając cykl do tkanin delikatnych. Pończochy należy prać osobno, używając środków piorących do tkanin delikatnych (np. Ofa Clean) w temperaturze maks. 40°C oraz starannie wypłukać po praniu. Można nastawić wirowanie z niewielką prędkością, ale nie wolno wyżymać pończoch. Pończochy uciskowe należy suszyć na powietrzu albo w suszarce bębnowej, stosując program do tkanin delikatnych. Nie wolno suszyć na kaloryferze lub w pełnym słońcu. Pończochy nie wolno prasować.

Aby pończochy zachowały swoją skuteczność, nie wolno stosować chemicznych środków piorących, benzyny ani płynu do płukania tkanin. Zawarte w nich substancje niszczą włókna tkaniny. Pończochy uciskowe są w dużej mierze niewrażliwe na działanie tłuszczy i olejów, nie powinny mieć jednak styczności z wszelkiego rodzaju maśćami. Zasadniczo pończochy z taśmami podtrzymującymi pokrytymi warstwą silikonu nie powinny mieć styczności z rozpuszczalnikami, maśćami, natłuszczającymi tonikami do mycia i kremami do ciała. W przeciwnym razie może dojść do trwałego ograniczenia przyczepności taśm podtrzymujących. Pończochy należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed światłem słonecznym i wysokimi temperaturami, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Prać po wywróceniu na lewą stronę. Nie używać płynu do płukania!

-  Cykl prania do tkanin delikatnych
-  Nie stosować wybielaczy
-  Suszenie jak w przypadku tkanin delikatnych
-  Nie prasować
-  Nie czyścić chemicznie

Instrukcja zakładania

Ostrożnie wciągnąć górną część pończochy przez pięć. Unikać przy tym pociągania za koniec pończochy z taśmą podtrzymującą. Należy unikać uszkodzeń spowodowanych przez biżuterię lub długie paznokcie.

Skład materiałowy

gilofa®

z bawełną

50% bawełna
40% poliamid
10% elastan

gilofa®

z Aloe Vera

Pielęgnacja skóry. Specjalne mikrokapsułki wydzielają aloes w sposób kontrolowany do skóry; wytrzymałość ponad 100 prań.
42% poliamid (mikrowłókna z Aloe Vera)
35% poliamid
15% bawełna
8% slastan

gilofa® fine

52% poliamid
(olej migdałowy i olej z dzikiej róży)
48% elastan

gilofa® style

52% poliamid (mikrofibra)
29% elastan
19 % poliamid

Cienījamā lietotāja, godātais lietotāj!

Gilofa ārstnieciskās zeķes un zeķes ceļojumiem ir izstrādātas, balstoties uz gadu desmitiem ilgu pieredzi kompresijas zeķu izstrādē. Jūs esat izvēlējies augstas kvalitātes veselības produktu. Papildus medicīniskajam aspektam uzņēmums Gilofa pievērš īpašu uzmanību valkāšanas ērtībai. Gilofa zeķes ir patīkamas saskarē, ēertas un labi izskatās. Tā ikvienam patīk dzīvot veselīgākam. Neatkarīgi no tā, vai ceļojat, nodarbojaties ar sportu vai tikai tāpēc, ka vēlaties ikdienas dzīvi padarīt sev patīkamāku.

⚠ Svarīgas norādes

Zeķes jāizsniedz medicīniski apmācītam personālam. Specializētais izplatītājs konsultēs, kā pareizi uzvilk šīs zeķes. Ja valkāšanas laikā rodas akūtas sāpes kājās vai ādas kairinājums, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Ādas reakcijas saturošās lentes apvidū var novērst, vairākas reizes dienā nedaudz mainot tās atrašanās vietu. Ja zeķes jālieto kopā ar citiem medicīniskiem palīglīdzekļiem, lūdzu, konsultējieties par to ar savu ārstu. Mēs pārbaudām savus izstrādājumus visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas ietvaros. Ja tomēr rodas kādas sūdzības, lūdzu, vērsieties pie sava specializētā izplatītāja. Patstāvīgi nelabojiet bojājumus, bet gan atdodiet zeķi specializētajam izplatītājam, pie kura to iegādājties. Šķiedru mezgliņi, kas var veidoties, beržoties gar citiem apģērba gabaliem, nemazina zeķes kvalitāti.

Garantija

Pareizi uzglabājot, kompresijas zeķu izturības termiņš nepārsniedz 5,5 gadus. Regulāri lietojot un pareizi kopjot, mēs garantējam optimālu kompresijas iedarbību vismaz 6 mēnešus. Pēc šī perioda beigām uz izstrādājumiem garantija neattiecas. Garantija parasti neattiecas uz bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma vai nepareizas lietošanas dēļ. Nepareiza lietošana ietver arī turpmāku izstrādājuma pārveidošanu, ko nav veicis ražotājs. Izstrādājums ir paredzēts vienam lietotājam. Ja tas tiek nodots izmantošanai citām personām, izbeidzas ražotāja atbildība par izstrādājumu.

Kompresijas zeķu iedarbības princips

Spiediena iedarbība, kas samazinās no apakšas uz augšu, veicina asinsriti un atbalsta venozo sistēmu.

Indikācijas/paredzētais mērķis

Smaguma un noguruma sajūta kājās. Profilaksei pret vēnu kāju problēmām un ceļojumu trombozi cilvēkiem ar veselām vēnām. Ja jums ir šaubas par to, vai jums ir kāda vēnu saslimšana, kurai nepieciešama ārstēšana, lūdzu, jautājiet savam ārstam.

Kontrindikācijas:

- progresējoša perifērās artērijas bloķejoša slimība
- dekompensēta sirds mazspēja
- septisks flebits
- Phlegmasia coerulea dolens

Apsveramie riski:

- izteiktas sulojošas dermatozes
- kompresijas zeķu materiāla nepanesamība
- smagi ekstremitāšu jutības traucējumi
- progresējoša perifēra neiropātija (piemēram, cukura diabēts)
- primārs hronisks poliartrīts

Šaubu gadījumā konsultējieties ar savu ārstu.

⚠ Riski un blaknes

Jutīgas ādas gadījumā zem kompresijas zeķēm var rasties nieze un ādas problēmas. Tādēļ ieteicama atbilstoša ādas kopšana. Ja rodas tālāk norāditie simptomi, lūdzu, nekavējoties novelciet zeķes un pirms to atkārtotas lietošanas konsultējieties ar ārstu: zila vai balta kāju pirkstu krāsa, izmaiņas jutībā un nejutīgums, sāpes, kas pastiprinās, elpas trūkums un svīšana, akūti kustību ierobežojumi.

Utilizācija

Pēc izmantošanas laika beigām, lūdzu, utilizējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ziņošanas pienākums

Atbilstoši ES likumdošanai pacientiem un lietotājiem ir pienākums ziņot par katra nopietnu gadījumu, kas saistīts ar medicīniskās ierīces lietošanu, gan ražotājam, gan atbildīgajai valsts iestādei (Vācijā — BfArM).

Norādes par kopšanu

Izstrādājums ir piemērots tūlītējai lietošanai. Mēs iesakām to izmazgāt pirms pirmās valkāšanas reizes. Pēc tam, lūdzu, mazgājiet katru dienu ar rokām vai veļasmašinā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas režīmu. Mazgājiet zeķes atsevišķi, izmantojot mazgāšanas līdzekli smalkveļai bez veļas mīkstinātāja (piemēram, Ofa Clean speciālo mazgāšanas līdzekli), temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C, un rūpīgi izskalojiet tās. Zeķēm drīkst izmantot centrifūgas saudzējošu režīmu, bet, lūdzu, neizgrieziet tās. Žāvējiet zeķes, izkarot tās vai izmantojot žāvētāja saudzīgo ciklu, bet nenovietojiet zeķes uz sildķermēniem vai tiešos saules staros. Negludiniet zeķes.

Lai saglabātu zeķu iedarbību, lūdzu, neizmantojiet ķīmiskus tīrišanas līdzekļus, benzīnu vai veļas mīkstinātājus. Šīs vielas bojā adījumu. Kopumā šīs zeķes neietekmē taukielas un eļļa, tomēr tām nevajadzētu nonākt saskarē ar ziedēm. Zeķes, kurām ir ar silikonu pārklātas saturošās lentes, nedrīkst nonākt saskarē ar šķidinātājiem, ziedēm, kā arī taukojošiem mazgāšanas losjoniem un ķermeņa krēmiem. Pretējā gadījumā saturošās lentes izturība var pastāvīgi pasliktināties. Uzglabājiet zeķes sausā vietā, kas aizsargāta no saules un karstuma iedarbības, vēlams, oriģinālajā iepakojumā.

Lūdzu, mazgājiet, izgriežot uz kreiso pusī un neizmantojot veļas mīkstinātāju!

Padomi uzgērbšanā

Uzmanīgi velciet zeķes/zeķbikses pa kāju no apakšas uz augšu un nestiepiet tās uz malām. Lūdzu, izvairieties no rotaslietu vai garu nagu radītiem bojājumiem.

Materiāla sastāvs

gilofa®

ar kokvilnu

50 % kokvilna
40 % poliamīds
10 % elastāns

gilofa®

ar alveju

Iekļauts kopšanas līdzeklis. Īpašas mikrokapsulas normētā veidā izklāj alvejas ekstraktus uz ādas; vairāk nekā 100 mazgāšanas reižu.
42% poliamīds (mikrošķiedras ar alveju)
35 % poliamīds
15 % kokvilna
8 % elastāns

gilofa® fine

52% poliamīds (ar mandeļu un mežrozišu eļļu)
48 % elastāns

gilofa® style

52 % poliamīds (mikrošķiedras)
29 % elastāns
19 % poliamīds



Saudzējošs mazgāšanas režīms



Nebalinet



Žāvējiet saudzīgi



Negludiniet



Netiriet ķīmiski

Hea kasutaja,

Gilofa vitaal- ja reisisukkades peitub aastakümnete pikkune kogemus meditsiiniliste kompressioonsukkade arendamisel. Olete otsustanud körgkvaliteetse tervisetoote kasuks. Lisaks meditsiinilisele aspektile pöörame Gilofa puhul eriti tähelepanu kandmismugavusele. Gilofa sukad tunduvad jalas meeldivad, mugavad ja näevad head välja. Nii saab meelsasti tervislikumalt elada. Üksköik, kas reisil, sportides või lihtsalt seepärast, et soovite ka igapäevaelus enda jaoks midagi head teha.

⚠ Olulised märkused

Sukkade väljastamine peab toimuma meditsiiniliselt koolitatud erialapersonali poolt. Teie edasimüüja annab teile ka nõu, kuidas sukk õigesti jalga panna. Kui teil tekib kandmisel äge jalavalu või nahärritus, pöörduge kohe arsti poole. Kinnitusribade piirkonna nahareaktsioone saab vältida, kui kinnitusriba päeva jooksul mitu korda pisut liigutada. Kui sukk tuleb kanda koos teiste meditsiiniliste abivahenditega, siis konsulteerige palun raviarstiga. Testime oma tooteid tervikliku kvaliteedi tagamise osana. Kui teil on siiski kaebusi, pöörduge edasimüüja poole. Ärge parandage kahjustusi ise, vaid viige sukk tagasi edasimüüjale, kellelt selle ostssite. Kiudosakesed, mis võivad tekkida muude rõivaste vastu hõordumisest, ei halvenda suka kvaliteeti.

Garantii

Kompressioonsukkade kõlblikkusaeg on nõuetekohase säilitamise korral kuni 5,5 aastat. Regulaarse kasutamise ja nõuetekohase hoolduse korral garanteerime optimaalse kompressiivse toime 6 kuusks. Pärast seda perioodi toodete garantii ei kehti. Defektidele, mille põhjus võib olla tavaline kulumine või valesti kasutamine, garantii põhimõtteliselt ei kehti. Valesti kasutamine hõlmab ka toote hilisemaid muudatusi, mida tootja ei ole teinud. Toode on ette nähtud ühele kasutajale. Kui see antakse teistele inimestele korduskasutamiseks, siis tootja garantii ei kehti.

Kompressioonsukkade toimepõhimõte

Altpoolt ülespoole vähenev surve soodustab verevarustust ja toetab veenisüsteemi.

Näidustused / sihtotstarve

Raskus- ja väsimustunne jalgades. Tervete veenidega inimestele profülaktikaks venoossete jalavaevuste ja reisitromboosi vastu. Kaatluse korral, kas Teil esineb ravi vajav veenihaigus, küsige palun oma arstilt.

Vastunäidustused

- kaugelearenenud perifeersete arterite haigus
- dekompenseerunud südamepuudulikkus
- septiline flebiit
- Phlegmasia coerulea dolens

Tähelepanu vajavad riskid:

- välja kujunenud märguvad dermatosoosid
- kompressioonsuka materjali talumatus
- jäsemete raskded
- tundlikkushäired
- kaugelearenenud perifeerne neuropaatia (nt diabetes mellitus)
- primaarne krooniline polüartriit

Kaatluse korral küsige palun oma arstilt.

⚠ Ohud ja kõrvaltoimed

Tundliku nahaga võib kompressioonsukkade all tekkida sügelus ja nahaprobleemid. Seetõttu on soovitatav adekvaatne nahahooldus. Järgmiste sümpтомite ilmnemisel eemaldage sukad viivitamatult ja konsulteerige arstiga enne edasist kasutamist: Varvaste muutumine siniseks või valgeks, ebatalvased aistingud ja tuimus, suurenev valu, õhupuuodus ja higistamine, olulised liikumispiirangud.

Utiliseerimine

Kasutusaja lõppedes utiliseerige toode vastavalt kohalikele eeskirjadale.

Aruandlusnõue

Elis kehtivate seaduslike eeskirjade töttu on patsiendid ja kasutajad kohustatud teavitama igast meditsiiniseadme kasutamisega seotud raskekujulisest intsidendist nii tootjale kui ka vastutavale riigiasutusele (Saksamaal BfArM, föderaalne ravimite ja meditsiiniseadmete instituut).

Hooldusjuhised

Toode sobib kohe kasutamiseks. Soovitame enne esmakordset kandmist pesta. Seejärel peske iga päev kätsi või masina õrna pesu programmiga. Peske sukki eraldi ilma pesupehmendita õrnatoimelise pesuvahendiga (nt Ofa Cleani spetsiaalne pesuvahend) temperatuuril kuni 40°C ja loputage põhjalikult. Sukki võib kergelt tsentrifuugida, kui ärge väänake neid välja. Kuivatage kompressioonsukki õhu käes või kuivatis õrna programmiga, kuid ärge asetage neid küttekehadele ega otsese päikesevalguse� kätte. Ärge sukki mitte kunagi triikige.

Sukkade töhususe säilitamiseks ärge kasutage keemilisi puastusvahendeid, bensiini ega pesupehmendeid. Need ained kahjustavad kootud kangast. Kompressioonsukad ei ole üldiselt rasva ja öli suhtes tundlikud, kuid need ei tohiks salvidega kokku puutuda. Silikoontattega kinnitusribadega sukad ei tohiks üldjuhul kokku puutuda lahustite, salvide, niisutavate pesemisvedelike ega kehakreemidega. Kinnitusribade nakkumisvõime võib muidu püsivalt kahjustuda. Hoidke sukki kuivas kohas päikese ja kuumuse eest kaitstult ja võimaluse korral originaalkendis.

Palun peske pahempidi ja ärge kasutage pesupehmendit!

-  Õrna pesu programm
-  Mitte valgendada
-  Kuivatada õrnalt
-  Mitte triikida
-  Mitte keemiliselt puastada

Kandmise soovitused

Tömmake oma sukad/sukkpuksid ettevaatlikult alt üles jalga ning ärge tömmake neid üles servast. Palun vältige ehetest või pik Kadest küün test tingitud kahjustusi.

Materjali koostis

gilofa®

puuvillaga

50 % puuvilla
40 % polüamiidi
10 % elastaani

gilofa®

aloe veraga

nahahooldus sealhulgas. Spetsiaalsed mikrokapslid annavad aloe vera ekstrakte kontrollitult nahale; üle 100 pesukorra.
42 % polüamiidi (aloe veraga mikrokiud)
35 % polüamiidi
15 % puuvilla
8 % elastaani

gilofa® fine

52 % polüamiidi (mandli ja metsiku roosi õliga)
48 % elastaani

gilofa® style

52 % polüamiidi (mikrokiud)
29 % elastaani
19 % polüamiidi

Gerb. naudotojau,

kompresinės ir kelioninės kojinės „Gilofa“ yra pagamintos remiantis dešimtmečių patirtimi kuriant medicinines kompresines kojines.

Jūs pasirinkote aukštos kokybės sveikatos stiprinimo produktą. Be medicinio poveikio, „Gilofa“ yra itin patogios dėvėti. „Gilofa“ kojinės yra malonios liesti, patogios dėvėti ir gerai atrodo. Jums patiks gyventi sveikiau. Nesvarbu, ar keliaujate, ar sportuojate, ar tiesiog norite gyventi sveikiau kasdien.

⚠ Svarbios pastabos

Kaip dėvėti kojines, turi pristatyti kvalifikuoti specialistai. Jūsų specialistas taip pat patars, kaip tinkamai užsimauti kojines. Jei mūvėdami jaučiate ūmų kojų skausmą ar odos sudirginimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Odos reakcijos lipnių juostelių srityje galima išvengti, kelis kartus per dieną šiek tiek perklijuojant lipnį juostelę. Su Jus gydančiu gydytoju pasitarkite, ar reikia mūvėti kojines naudojant kitas pagalbines medicinos priemones. Mes išbandome savo gaminius dėl visapusiško kokybės užtikrimo. Jei vis tiek turite kokių nors nusiskundimų, kreipkitės į platintoją. Netaisykite pažeidimų patys, bet grąžinkite atsargas pardavėjui, iš kurio įsigijote. Pluošto mazgeliai, kurie gali susiformuoti dėl trinties su kitais drabužiais, nesumažina kojinių kokybės.

Garantija

Tinkamai laikomų kompresinių kojinių tinkamumo laikas yra iki 5,5 metų. Reguliariai naudojant ir tinkamai prižiūrint, užtikriname optimalų kompresinį poveikį 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui, gaminiams garantija netaikoma. Defektams, atsiradusiems dėl iprasto nusidėvėjimo ar netinkamo naudojimo, garantija paprastai netaikoma. Netinkamas naudojimas taip pat apima vėlesnį gaminio modifikavimą, kurio neatliko gamintojas. Gaminys skirtas vienam naudotojui. Jei jis perduodamas kitiems asmenims naudoti pakartotinai, gamintojo garantija gaminui nebetaikoma.

Kompresinių kojinių veikimo principas

Slėgio kreivė, kuri mažėja iš apačios į viršų, skatina kraujotaką ir palaiko sveiką venų sistemą.

Indikacijos / paskirtis

Kojų sunkumo ir nuovargio jausmas. Profilaktikai kojų venų ir trombozės keliaujant problemoms spręsti. Jei abejojate, ar sergate venų liga, kurią reikia gydyti, kreipkitės į gydytoją.

Kontraindikacijos

- Progresavusi periferinių arterijų liga
- Dekompensuotas širdies nepakankamumas
- Septinis flebitas
- Phlegmasia coerulea dolens

Rizika, į kurią reikia atsižvelgti:

- Žymus šlapiasis dermatitas
- Kompresinių kojinių medžiagos nesuderinamumas
- Sunkūs sensoriniai galūnių sutrikimai
- Progresavusi periferinė neuropatija (pvz., cukrinis diabetas)
- Pirminis lėtinis poliartritas

Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją.

⚠ Rizika ir šalutinis poveikis

Mūvint kompresines kojines, jautriai odai gali būti sukeltas niežėjimas ir odos problemų. Todėl rekomenduojama tinkamai prižiūrėti odą. Jei jaučiate šiuos simptomus, prieš vėl mūvėdami kojines, nedelsdami jas nusimaukite ir pasitarkite su gydytoju: pamélé ar pabalę kojų pirštai, nemalonūs pojūčiai ir tirpimas, didėjantis skausmas, dusulys ir prakaitavimas, ūmūs ribotas judrumas.

Šalinimas

Pasibaigus naudojimo laikui, išmeskite gaminį laikydamiesi vietinių taisyklių.

Reikalavimas teikti ataskaitas

Remiantis ES teisiniais reglamentais, pacientai ir naudotojai privalo pranešti gamintojui ir atsakingai nacionalinei institucijai (Vokietijoje BfArM) apie kiekvieną rimbą incidentą, susijusį su medicininės priemonės naudojimu.

Priežiūros instrukcijos

Preparatas tinkamas naudoti nedelsiant. Rekomenduojame išskalbtį prieš devintą pirmą kartą. Paskui kiekvieną dieną skalbkite rankomis arba skalbyklėje nustatę švelnaus skalbimo ciklą. Kojines skalbkite atskirai švelniu plovikliu be minkštiklio (pvz., specialiu plovikliu „Ofa Clean“) ne didesnėje kaip 40 °C temperatūroje ir gerai išskalaukite. Kojines galima švelniai susukti, tačiau nerekomenduojama jų gręžti. Kojines sausinkite oru naudodami švelnų džiovinimo ciklą, tačiau nedékite jų ant šildytuvo ir nedžiovinkite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kojinių niekada nelyginkite.

Norédami išlaikyti kojinių efektyvumą, nenaudokite cheminių valymo priemonių, benzino ar minkštiklių. Šios medžiagos kenkia megztam audiniui. Kompresinės kojinės dažniausiai atsparios riebalams ir alyvai, tačiau neturėtų liestis su tepalais. Kojinės su silikonu padengtomis lipniomis juostomis neturėtų liestis su tirpikliais, tepalais, drékinamaisiais prausimosi losjonais ir kūno kremai. Priešingu atveju lipdukai gali nebelpoti visam laikui. Laikykite kojines sausas ir apsaugotas nuo saulės bei karščio, jei įmanoma, originalioje pakuočėje.

Skalbkite išvertę ir nenaudokite audinių minkštiklio!

- Švelnus skalbimo ciklas
- Nebalinkite balikliu
- Švelniai nusausinkite
- Negalima lyginti
- Nevalykite sausai

Patarimai, kaip apsimauti kojines

Atsargiai traukite kojines / pédkelnes ant kojos iš apačios į viršų ir netraukite jų už kraštų. Maudamiesi kojines būkite be papuošalų ir atsargiai elkitės turėdami ilgus nagus, kad nepažeistumėte kojinių.

Medžiagų sudėtis

gilofa®

su medvilne

50 % medvilnė
40 % poliamidas
10 % elastanas

gilofa®

su alaviju

Suteikiama ir odos priežiūra. Specialios mikrokapsulės kontroliuojamai išleidžia alavijo ekstrakto ant odos; 100 plovimų.
42 % poliamido (mikropluoštas su alavijais)
35 % poliamidas
15 % medvilnė
8 % elastanas

gilofa® fine

52 % poliamidas (su migdolų ir rožių aliejumi)
48 % elastanas

gilofa® style

52 % poliamidas (mikropluoštas)
29 % elastanas
19 % poliamidas

Stimate utilizator,

ciorapii de susținere și de călătorie Gilofa sunt rezultatul a zeci de ani de experiență în dezvoltarea de ciorapi compresivi medicinali. V-ați decis pentru un produs de sănătate de înaltă calitate. Pe lângă aspectul medical, firma Gilofa acordă o atenție deosebită confortului la purtare. Ciorapii Gilofa se simt plăcut pe piele, sunt confortabili și arată bine. Viața sănătoasă este astfel o plăcere. În călătorii, la sport sau, pur și simplu, pentru că vreți să faceți ceva bun pentru dumneavoastră în viața de zi cu zi.

⚠ Indicații importante

Ciorapii trebuie furnizați de personal de specialitate instruit în domeniul medical. Comerçantul specializat vă va arăta cum să îmbrăcați corect ciorapii. În cazul în care, atunci când purtați ciorapii, apar dureri acute la nivelul picioarelor sau iritații ale pielii, vă rugăm să consultați imediat la medic. Reacțiile cutanate în zona benzilor adezive pot fi prevenite prin schimbarea poziției benzii adezive de mai multe ori pe parcursul zilei. În cazul în care purtați ciorapii în combinație cu alte mijloace auxiliare medicale, vă rugăm să discutați acest lucru cu medicul curant. Ne testăm produsele în cadrul unui proces cuprinzător de asigurare a calității. În cazul în care aveți totuși reclamații, vă rugăm să vă adresați comerciantului specializat. Nu remediați dumneavoastră defectele, ci returnați ciorapul comerciantului specializat de la care l-ați cumpărat. Biluțele de scame care se pot forma prin frecarea de alte articole de îmbrăcăminte nu reduc calitatea ciorapului.

Garanție

Durata de viață a ciorapilor compresivi este limitată la 5,5 ani, în condiții de depozitare corespunzătoare. În cazul utilizării regulate și întreținerii adecvate, garantăm efectul compresiv optim timp de 6 luni. După încheierea acestei perioade, garanția produselor se anulează. În principiu, sunt excluse de la garanție defecte cauzate de uzura normală sau de utilizarea necorespunzătoare. Utilizarea necorespunzătoare include și modificarea ulterioară a produsului, care nu este efectuată de firma producătoare. Produsul este prevăzut pentru un utilizator. Dacă produsul este transmis unei alte persoane, garanția producătorului pentru produs se anulează.

Principiul de acționare al ciorapilor compresivi

Presiunea care scade de jos în sus stimulează circulația sanguină și susține sistemul venos.

Indicații/utilizarea prevăzută

Senzatia de picioare grele și obosite Pentru profilaxia afecțiunilor venoase la nivelul picioarelor și a trombozei de călătorie la persoanele cu vene sănătoase. În cazul în care aveți îndoieri dacă aveți sau nu o boală venoasă care necesită tratament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Contraindicații

- ocluzie arterială periferică avansată
- insuficiență cardiacă decompensată
- flebită septică
- Phlegmasia coerulea dolens

Riscuri de avut în vedere:

- dermatoză umedă pronunțată
- incompatibilitatea materialului ciorapilor de compresie
- tulburări grave de sensibilitate la nivelul extremităților
- neuropatie periferică avansată (de ex. diabetes mellitus)
- poliartrită cronică primară

În cazul în care aveți îndoieri, adresați-vă medicului dumneavoastră.

⚠ Riscuri și reacții adverse

În cazul pielii sensibile, ciorapii compresivi pot provoca măncăriri și probleme dermatologice. De aceea, se recomandă îngrijirea corespunzătoare a pielii. În cazul în care apar următoarele simptome, vă rugăm să scoateți imediat ciorapii și să discutați cu medicul utilizarea în continuare a acestora: culoare albastră sau albă a degetelor de la picioare, tulburări senzoriale și amorteașă, dureri tot mai mari, dispnee și transpirație, restricții de mișcare acute

Eliminarea

La finalul duratei de utilizare, vă rugăm să eliminați produsul conform prevederilor locale.

Obligația de raportare

Conform reglementărilor legale din cadrul UE, pacienții și utilizatorii sunt obligați să raporteze imediat orice incident grav în timpul utilizării unui dispozitiv medical atât producătorului, cât și autorității naționale competente (în Germania, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM/Institutul Federal pentru Medicamente și Dispozitive Medicale).

Instrucțiuni de întreținere

Produsul este prevăzut pentru utilizarea imediată. Vă recomandăm să-l spălați înainte de prima purtare. După aceea, vă rugăm să spălați produsul zilnic de mână sau la mașină, la programul pentru rufe delicate. Spălați ciorapii separat cu un detergent pentru țesături fine fără balsam (de ex. „Ofa Clean Spezialwaschmittel”) la maxim 40 °C și clătiți bine. Ciorapii pot fi centrifugați ușor, însă nu trebuie storsi. Uscați ciorapii la aer sau cu programul pentru țesături fine al uscătorului, însă nu îi așezați pe calorifer sau în lumina solară directă. Nu călați niciodată ciorapii.

Pentru a păstra eficacitatea ciorapilor dum-neavoastră, vă rugăm să nu folosiți detergenti chimici, benzină sau balsam de rufe. Aceste substanțe atacă țesătura. Ciorapii compresivi sunt în mare măsură insensibili la grăsimi și uleiuri, însă nu ar trebui să intre în contact cu unguente. Ciorapii cu benzi adezive cu film de silicon nu ar trebui, în general, să intre în contact cu solventi, unguente și loțiuni de spălare și creme de corp hidratante. În caz contrar, aderența benzilor adezive poate fi afectată permanent. Depozitați ciorapii într-un loc uscat, protejați de lumina soarelui și de căldură, pe cât posibil, în ambalajul original.

Sfaturi pentru îmbrăcare

Trageți cu grijă ciorapii/dresul de jos în sus pe picior și nu îi/îl trageți în sus de marginea superioară. Vă rugăm să evitați deteriorările din cauza bijuteriilor sau a unghiilor lunghi.

Compoziția materialului

gilofa®

cu bumbac

50 % bumbac
40 % poliamidă
10 % elastan

gilofa®

cu aloe vera

Îngrijește pielea. Microcapsule speciale eliberează extracte de aloe vera controlat pe piele; peste 100 de spălări.

42 % poliamidă (microfibra cu aloe vera)
35 % poliamidă
15 % bumbac
8 % elastan

gilofa® fine

52 % poliamidă
(cu ulei de migdale și de măceșe)
48 % elastan

gilofa® style

52 % poliamidă (microfibra)
29 % elastan
19 % poliamidă

Vă rugăm să spălați ciorapii pe dos și să nu folosiți balsam de rufe!

-  Ciclu de spălare delicat
-  A nu se folosi înălbitor
-  Uscare delicată
-  A nu se călca
-  A nu se curăță chimic

Dragi uporabnik/-ca,
v podpornih in potovalnih nogavicah Gilofa so združene desetletne izkušnje iz razvijanja medicinskih kompresijskih nogavic. Izbrali ste kakovosten zdravstveni izdelek. V podjetju Gilofa pozornost ne posvečamo le medicinskemu vidiku, temveč tudi udobju med nošenjem. Nogavice Gilofa so prijetne na otip, udobne za nošenje in lepega videza. Tako boste živeli bolj zdravo. Naj bo na potovanjih, med športom ali v vsakdanjem življenju, ko boste želeli narediti nekaj dobrega za sebe.

⚠ Pomembni napotki

Nogavice nabavite v specializirani prodajalni, kjer vam bo strokovno usposobljeno osebje svetovalo glede ustreznega oblačenja. Vaš specializiran prodajalec vam bo tudi svetoval, kako pravilno obleči nogavice. Če med nošenjem nogavic občutite akutno bolečino v nogah ali draženje kože, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Kožne reakcije na območju oprjemalnih trakov lahko preprečite tako, da večkrat dnevno spremenite položaj traka. Če boste nogavice nosili skupaj z drugim medicinskim pripomočkom, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom. Vse svoje izdelke preizkušamo v okviru celovitega zagotavljanja kakovosti. Če kljub temu niste zadovoljni z izdelkom, se obrnite na svojega prodajalca. Poškodb ne popravljajte sami, ampak nogavice vrnite prodajalcu, pri katerem ste jih kupili. Vozlički iz vlaken, do katerih lahko pride zaradi trenja z drugimi kosi oblačil, ne vplivajo na kakovost nogavic.

Garancija

Obstojnost kompresijskih nogavic je ob pravilnem shranjevanju omejena na 5,5 let. Pri redni uporabi in pravilni negi zagotavljamo optimalni kompresijski učinek za 6 mesecev. Ko poteče to obdobje, za izdelke ni več mogoče uveljavljati garancije. Garancija ne velja za škodo, ki je posledica običajne obrabe oziroma nepravilne uporabe. Kot neustrezna uporaba se upoštevajo tudi vse naknadne spremembe izdelka, ki jih ni izvedel proizvajalec. Izdelek je predviden za enega uporabnika. Če se izdelek preda drugi osebi za ponovno uporabo, garancija proizvajalca preneha veljati.

Način delovanja kompresijskih nogavic

Tlak, ki je od spodaj navzgor vse manjši, spodbuja prekrvavitev in je v pomoč žilnemu sistemu.

Indikacije/namen uporabe

Občutek težkih in utrujenih nog. Za primarno preventivo proti venskim težavam nog in potovalni trombozi pri ljudeh z zdravimi venami. Če ste v dvomih, ali imate bolezen ven, ki zahteva zdravljenje, se posvetujte z zdravnikom.

Kontraindikacije

- Napredna bolezen perifernih arterij
- Dekompenzirano srčno popuščanje
- Septični flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Tveganja, ki jih je treba upoštevati:

- Izrazite dermatoze z izcedki
- Preobčutljivost na material kompresijskih nogavic
- Hude motnje občutenja okončin
- Napredna periferna nevropatija (npr. diabetes mellitus)
- Primarni kronični poliartritis

V primeru dvomov se posvetujte z zdravnikom.

⚠ Tveganja in neželeni učinki

Pri občutljivi koži lahko kompresijske nogavice povzročijo srbenje in težave s kožo. Za preprečevanje teh težav priporočamo ustrezno nego kože. Pri naslednjih simptomih takoj sletec nogavice in se pred ponovno uporabo pogovorite z zdravnikom: modra ali bela barva prstov na nogah, neobičajni občutki in odrevenelost, naraščajoča bolečina, težko dihanje in znojenje, akutne omejitve gibanja.

Odstranjevanje

Po koncu življenjske dobe izdelek zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi.

Obveznost prijave

Zaradi zakonskih predpisov v EU morajo bolniki in uporabniki proizvajalca in pristojne nacionalne organe (v Nemčiji BfArM, Zvezni inštitut za zdravila in medicinske izdelke) nemudoma obvestiti o vseh resnih incidentih pri uporabi medicinskega izdelka.

Navodila za nego izdelka

Izdelek je primeren za takojšnjo uporabo. Priporočamo, da ga pred prvo uporabo operete. Nato jih vsak dan umivajte ročno ali s programom za občutljivo perilo. Nogavice operite ločeno z detergentom za občutljiveje tkanine brez mehčalca (npr. posebni detergent Ofa Clean) pri največ 40 °C in jih dobro sperite. Nogavice lahko daste v stroj na nežno centrifugo, vendar jih ne ožemajte. Nogavice sušite na zraku ali v sušilcu s programom za občutljiveje tkanine. Nogavic ne smete sušiti na grelnih napravah ali neposredni sončni svetlobi. Nogavic nikoli ne likajte.

Da bi ohranili učinkovitost svojih nogavic, ne uporabljajte kemičnih čistil, bencina ali mehčalcev. Te snovi lahko poškodujejo pletenko tkanino. Kompresijske nogavice so pretežno neobčutljive na maščobe in olja, vendar ne smejo priti v stik z mazili. Nogavice z oprijemalnimi trakovi s prevleko iz silikona praviloma ne smejo priti v stik s topili, mazili, navlaženimi losjoni in kremami za telo. Ti lahko imajo trajni vpliv na oprijemalne lastnosti trakov. Nogavice hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred sončno svetlobo in vročino, in po možnosti v originalni embalaži.

Nasveti za oblačenje

Nogavice/hlačne nogavice z rokami previdno potiskajte od spodaj navzgor ob nogi in jih ne vlecite navzgor za rob. Preprečite poškodbe zaradi nakita ali dolgih nohtov.

Sestava materiala

gilofa®

z bombažem

50 % bombaž
40 % poliamid
10 % elastan

gilofa®

z aloe vero

Istočasna nega kože. Posebne mikrokapsule nadzorovano sproščajo izvleček aloe vere v kožo; več kot 100 pranj.
42 % poliamid (mikrovlakna z aloe vero)
35 % poliamid
15 % bombaž
8 % elastan

gilofa® fine

52 % poliamid (z mandljevim oljem in oljem divje vrtnice)
48 % elastan

gilofa® style

52 % poliamid (mikrovlakna)
29 % elastan
19 % poliamid

Vedno perite obrnjeno navzven in ne uporabljajte mehčalca!

-  Program za občutljive tkanine
-  Beljenje ni dovoljeno
-  Sušenje v bobnastem sušilniku pri nižji temperaturi
-  Likanje ni dovoljeno
-  Kemično čiščenje prepovedano

Kedves Felhasználó,

a Gilofa Vital és Travel harisnyák az orvosi kompressziós harisnyák fejlesztése terén szerzett több évtizedes tapasztalat eredményei. Kiváló minőségű egészségügyi terméket választott. Az orvosi szempontok mellett a Gilofánál különös figyelmet fordítunk a viselési kényelemre. A Gilofa harisnyák kellemes érzést nyújtanak, kényelmesek és jól néznek ki. Így szívesen él egészségesben. Akár utazik, akár sportol, vagy egyszerűen csak szeretne valami jót tenni magáért a minden napokban.

⚠ Fontos tudnivalók

A harisnya kiadásához egészségügyi szakemberre van szükség. A szakkereskedő a harisnya megfelelő felhúzásával kapcsolatban is tanácsokkal látja el Önt. Haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát, ha használat közben heveny lábfájdalom vagy bőrirritáció lép fel. A tapadószalag környékén megelőzhető a bőrreakció, ha a tapadószalagot napközben többször áthelyezi. Ha a harisnyát más orvoso segédeszközökkel együtt viselné, kérjük, konzultáljon erről a kezelőorvosával. Átfogó minőségbiztosítási ellenőrzésnek vetjük alá termékeinket. Ha ennek ellenére is panasza van, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. Amennyiben a termék sérült, ne próbálja megjavítani, vigye vissza a harisnyát abba a szakkereskedésbe, ahol vásárolta. A más ruhadarabokhoz való súrlódás miatt kialakuló rostcsomók nem befolyásolják a harisnya minőségét.

Garancia

Megfelelő tárolás esetén a gyógyászati kompressziós harisnyák eltarthatósága 5,5 év. Rendszeres használat és megfelelő ápolás mellett 6 hónapig garantáljuk az optimális kompressziós hatást. Ezen időszak letelte után a termékre nem vonatkozik garancia. A normál elhasználódásra vagy nem rendeltetésszerű használatra visszavezethető hibák alapvetően kizárták a garanciát. A nem rendeltetésszerű használat magában foglalja a termék utólagos átalakítását is, amelyet nem a gyártó hajtott végre. A termék egy felhasználó számára készült. A gyártó termékfelelősséget kizárá, ha másoknak továbbadják azt újrafelhasználás céljából.

A kompressziós harisnyák működési elve

Az alulról felfelé csökkenő nyomásgradiens elősegíti a vérkeringést és támogatja a vénás rendszert.

Javallatok / rendeltetés

Nehézség és fáradtságérzet a lábakban. Vénás lápanaszok és utazási trombózis elleni profilaxisra vénásan egészséges személyeknél. Ha kétségei vannak afelől, hogy kezelést igénylő vénabetegsége van-e, kérdezze meg kezelőorvosát.

Ellenjavallatok

- előrehaladott perifériás artériás elzáródásos betegség
- dekompenzált szívelégtelenség
- szeptikus phlebitis
- phlegmasia coerulea dolens

Kockázatok, amiket figyelembe kell venni:

- jellegzetes nedvedző dermatózisok
- intolerancia a kompressziós harisnya anyagával szemben
- a végtagok súlyos érzékenységi rendellenességei
- előrehaladott perifériás neuropátia (pl. diabetes mellitus)
- elsődleges krónikus poliartritisz

Ha kétségei vannak, kérdezze meg kezelőorvosát.

⚠ Kockázatok és mellékhatások

Érzékeny bőr esetén a kompressziós harisnya alatt előfordulhat viszketés és egyéb bőrprobléma. Ezért megfelelő bőrápolást javaslunk. Ha az alábbi tüneteket észleli, azonnal vegye le a harisnyát, és konzultáljon orvossal a további használat előtt: A lábujjak kék vagy fehér elszíneződése, szokatlan érzés és zsibbadás, fokozódó fájdalom, légszemj és verejtékezés, akut mozgási nehézség.

Ártalmatlanítás

Kérjük, a helyi előírások szerint gondoskodjon a termék hasznos élettartamának lejártakor annak ártalmatlanításáról.

Bejelentési kötelezettség

Az EU-n belüli jogi szabályozás miatt a betegek és a felhasználók kötelesek azonnal jelenteni az orvostechnikai eszköz használata során bekövetkezett súlyos eseményeket mind a gyártónak, mind az illetékes nemzeti hatóságnak (Németországban a BfArM, Szövetségi Gyógyszerügyi és Orvostechnikai Intézet).

Kezelési útmutató

A termék használatra kész állapotban található. Javasoljuk, hogy első használat előtt mosza ki a terméket. Mossa ezután naponta kézzel vagy mosogépben, kímélő programon. Mossa a harisnyát külön, finom mosószerrel, öblítőszer nélkül (pl. Ofa Clean speciális mosószerrel) legfeljebb 40 °C-on és öblítse ki alaposan. A harisnya alacsony fokozaton centrifugálható, azonban kérjük, ne csavarja ki. Hagyja megszárudni a levegőn vagy tegye a szárítógépbe kímélő programon, de ne helyezze közvetlenül a fűtőtestre és ne tegye ki közvetlen napfénynek. Soha ne vasalja ki a harisnyát.

A harisnya hatékonyságának megőrzése érdekében kérjük, ne használjon kémiai vegyszereket, benzint vagy öblítőszert. Ezek az anyagok roncsolják a szöveget. A kompressziós harisnyák nagymértékben ellenállók a zsírokkal és olajokkal szemben, azonban a kenőcsököt kerülni kell. A szilikonnal ellátott tapadószalaggal rendelkező harisnyák alapvetően nem érintkezhetnek oldószerrel, kenőccsel, zsírpótló hatású mosakodókrémmel és testápolóval. Ellenkező esetben a ragasztószalagok tapadása tartósan károsodhat. A harisnyát száraz, napsütéstől és hőtől védett helyen tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásában.

Viselési tanácsok

A harisnyát/harisnyanadrágot óvatosan húzza fel a lábán alulról felfelé, és ne húzza fel a zároszegélynél. Kérjük, kerülje az ékszerek vagy hosszú körmök okozta sérülésekét.

Anyagösszetétel

gilofa®

pamuttal

50 % pamut
40 % poliamid
10 % elasztán

gilofa®

Aloe verával

bőrápoló hatással. A speciális mikrokapszulák ellenőrzött módon juttatják az aloe vera kivonatokat a bőrbe; több mint 100 mosásig.
42 % poliamid (mikroszál aloe verával)
35 % poliamid
15 % pamut
8 % elasztán

gilofa® fine

52 % poliamid (mandula és vadrózsa olajjal)
48 % elasztán

gilofa® style

52 % poliamid (mikroszál)
29 % elasztán
19 % poliamid

Kérjük, kifordítva mossa és ne használjon öblítőt!

-  Kímélő mosás
-  Ne használjon fehérítőt
-  Kíméletesen szárítsa
-  Ne vasalja
-  Ne tisztítsa vegyi úton

Драги потребителите,
чорапите с вътреиздигащ ефект и за пътуване Gilofa са резултат от десетилетния опит в разработването на медицински компресивни чорапи. Вие сте избрали висококачествен продукт за здраве. Наред с медицинския аспект при Gilofa ние обръщаме особено внимание на комфорта при носене. Чорапите Gilofa са приятни на допир, удобни са и изглеждат добре. Те ще направят Вашия начин на живот по-здравословен. Не забравяйте да съхранявате чорапите си във възможността им да са използвани отново.

Важни указания

Чорапите трябва да се предоставят от медицински обучен квалифициран персонал. Вашият специализиран търговец ще Ви консултира как да обувате правилно чорапите. Ако при носенето се появят остри болки в краката или кожни раздразнения, не забавяйте да се обратите към лекар. Кожните реакции в зоната на придръжките ленти могат да се предотвратят чрез неколкократно леко преместване на придръжката лента в рамките на деня. Ако чорапите се носят в комбинация с други медицински помощни средства, обсъдете това с лекуващия лекар. Ние не съветваме нашите продукти в рамките на обширно осигуряване на качеството. Ако въпреки това имате оплаквания, се обрънете към Вашия специализиран търговец. Не поправяйте повредите сами, а върнете чорапите на специализирания търговец от когото сте ги закупили. Топчетата, които се образуват поради триенето в други дрехи, не намаляват качеството на чорапите.

Гаранция

При правилно съхранение годността за употреба на компресивните чорапи е ограничена до 5,5 години. При редовна употреба и надеждна поддръжка гарантираме оптимално компресивно действие за 6 месеца. След изтичане на този срок продуктите се изключват от гаранцията. По принцип от гаранцията са изключени дефекти, които се дължат на обикновено износване и неправилна употреба. Към неправилната употреба спада също допълнителната промяна на продукта, която не е извършена от фирмата производител. Продуктът е предвиден за един потребител. Ако продуктът бъде предаден за повторно използване на други

хора, отговорността на производителя за продукта изгаря.

Принцип на действие на компресивните чорапи

Намаляващото от долу нагоре налягане стимулира кръвообращението и подпомага венозната система.

Показания / предназначение

Чувството на тежест и умора в краката. За профилактика против оплаквания във връзка с вените на краката и венозна тромбоза при пътуване при хора без венозни заболявания. Ако се колебаете дали имате венозно заболяване, което се нуждае от лечение, попитайте Вашия лекар.

Противопоказания

- напреднала периферна артериална болест
- декомпенсирана сърдечна недостатъчност
- септичен флебит
- Phlegmasia coerulea dolens

Рискове, които трябва да се вземат предвид:

- изразени мокрещи дерматози
- неподходяща към материала на компресивните чорапи
- тежки смущения в чувствителността на крайниците
- напреднала периферна невронатия (например Diabetes mellitus)
- първичен хроничен полиартрит

Ако се колебаете, попитайте Вашия лекар.

Рискове и странични действия

При чувствителна кожа под компресивните чорапи могат да възникнат сърбеж и кожни проблеми. Затова се препоръчва адекватна грижа за кожата. При следните симптоми не забавяйте да се обратите към лекар: сърбеж и изпотяване на краката, неприятни усещания и безчувственост, засилващи се болки, увесисто дишане и изпотяване, остри ограничения на движението.

Изхвърляне

След края на продължителността на използване изхвърлете продукта съгласно разпоредбите на място.

Задължение за уведомяване

Съгласно закононосите разпоредби в рамките на ЕС пациентите и потребителите са длъжни незабавно да уведомят, както производителя, така и компетентния национален орган (в Германия BfArM, Федерален институт за лекарствени средства и медицински изделия) за всеки сериозен инцидент във Връзка с употребата на медицинско изделие.

Указания за поддръжка

Продуктът е подходящ за незабавна употреба. Препоръчваме да го изпремете преди първата употреба. След това изпремете ежедневно на ръка или на щадяща програма за пране в пералня. Изпремете чорапите отдельно с перилен препарат за фино пране без омекотител (например специален перилен препарат Ofa Clean) на максимум 40°C и ги изплаквайте добре. Чорапите могат да се центрофугират щадящо, но не ги изцеждайте. Сушете чорапите на въздуха или с щадящата програма на Вашата сушилня, но не ги поставяйте върху парното или на директна слънчева светлина. Никога не гладете чорапите.

За да се запази ефективността на чорапите, не използвайте химически почистващи препарати, бензин или омекотител. Тези субстанции увредят тъканта. Компресивните чорапи до голяма степен са нечувствителни спрямо греси и масла, но не бива да влизат в контакт с мехлеми. Чорапите с придръжки ленти със силikonово покритие като цяло не трябва да влизат в контакт с разтворители, мехлеми и обратно омаляващи миешки лосиони и кремове за мяло. В противен случай способността за придръжане на придръжките ленти може трайно да се наруши. Съхранявайте чорапите на сухо и защитено от слънце и горещина място, по възможност в оригиналната опаковка.

Да се пере наопаку и да не се използва омекотител!

Съвети за обуване

Пригладете Вашите чорапи/Вашия чорапогащник внимателно от долу нагоре по крака и не ги ги/го дърпайте нагоре за завършващия край. Избягвайте повреди поради бижута или дълги нокти на ръцете.

Състав на материала

gilofo

с памук

50 % памук
40 % полиамид
10 % еластан

gilofo

с аloe вера

Включително грижа за кожата. Специални микрокапсули контролирано отдават на кожата екстракт от аloe вера; в продължение на повече от 100 пранета.
42 % полиамид (микроблакна с аloe вера)
35 % полиамид
15 % памук
8 % еластан

gilofo fine

52 % полиамид (с масло от бадем и гува роза)
48 % еластан

gilofo style

52 % полиамид (микроблакна)
29 % еластан
19 % полиамид

Щадяща програма за пране

-  Да не се избелва
-  Да се суши щадящо
-  Да не се глади
-  Да не се гава на химическо чистене

Kære bruger

I Gilofas rejse- og støttestrømper er der investeret årtiers erfaring fra arbejdet med at udvikle medicinske kompressionsstrømper. Du har valgt et helseprodukt af høj kvalitet. Samtidig med det medicinske aspekt lægger vi hos Gilofa også vægt på bærekomforten. Det føles behagligt at have Gilofa strømper på, de er bekvemme, og så ser de godt ud. Så er det let at leve sundt. På rejser, til sport, eller blot fordi du vil gøre noget godt for dig selv i dagligdagen.

⚠️ Vigtige anvisninger

Udlevering af strømperne skal ske gennem medicinsk uddannet fagpersonale. Din specialforhandler kan også rådgive dig med hensyn til, hvordan strømpen tages på korrekt. Skulle der opstå akutte smerter i benet eller hudirritationer, mens du har strømpen på, skal du straks tage kontakt til egen læge. Hudreaktioner i områder, hvor de selvsiddende kanter sidder, kan forebygges ved, at kanten i løbet af en dag flere gange flyttes lidt. Hvis strømperne skal bæres i kombination med andre medicinske hjælpemidler, skal du drøfte dette med den behandelnde læge. Vi tester vores produkter inden for rammerne af en omfattende kvalitetssikring. Skulle du alligevel have reklamationer, bedes du henvende dig til din specialforhandler. Forsøg ikke selv at reparere skader, men tag strømpen med tilbage til den specialforhandler, hvor du købte den. Fiberknuder, der kan opstå som følge af friktion mod andre beklædningsgenstande, forringer ikke strømpens kvalitet.

Garanti

Holdbarheden for kompressionsstrømper er ved passende opbevaring begrænset til 5,5 år. Ved regelmæssig brug og korrekt pleje garanterer vi en optimal kompressiv virkning i 6 måneder. Efter udløbet af denne frist er produkterne ikke længere omfattet af garantien. Som udgangspunkt er mangler, der skyldes almindelig slitage eller uhensigtsmæssig brug, ikke omfattet af garantien. Under uhensigtsmæssig brug regnes også forandring af produktet efter købet, når denne ikke er foretaget af fremstillingsvirksomheden. Produktet er egnet til én bruger. Bliver det givet videre til andre med henblik på genbrug, ophører fabrikantens produktgaranti.

Sådan virker medicinske

kompressionsstrømper

Det trykforløb, der aftager nedefra og op, er befordrende for blodgennemstrømningen og understøtter venesystemet.

Indikationer / Anvendelsesformål

En følelse af tyngde og træthed i benene. Forebyggende i forhold til benproblemer og reisetrombose hos personer med ellers raske ben. Tag kontakt til egen læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en behandlingskrævende venesygdom.

Kontraindikationer

- Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom
- Dekompenseret hjertefunktionsinsufficiens
- Septisk flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Risici der skal holdes øje med:

- Udrægdede løbende dermatoser
- Intolerance i forhold til materialerne i kompressionsstrømperne
- Svære følsomhedsforstyrrelser i ekstremiteten
- Fremskreden perifer neuropati (f.eks. diabetes mellitus)
- Primær, kronisk polyarthritis

I tvivlstilfælde bør du tage kontakt til egen læge.

⚠️ Risici og bivirkninger

Ved følsom hud kan der under kompressionsstrømperne opstå kløe og hudproblemer. Derfor kan en tilstrækkelig hudpleje i høj grad anbefales. Ved følgende symptomer bør du omgående tage strømperne af og rådføre dig med din læge angående fortsættelsen af terapien: Tærne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedeture, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

Bortskaffelse

Efter brug bør produktet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for affaldssortering.

Anmeldelsespligt

I henhold til EU-lovgivning er patienter og brugere forpligtede til straks at indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med anvendelsen af produktet til såvel producenten som den ansvarlige, nationale myndighed (i Tyskland BfArM).

Anvisninger til vask og pleje

Strømperne kan tages i brug med det samme. Vi anbefaler at vaske dem, før de tages på første gang. Vask det derefter i hånden eller på skånevask i vaskemaskinen. Vask strømperne separat med et mildt vaskemiddel uden skyllemiddel (f.eks. Ofa Clean specialvaskemiddel) ved maksimalt 40 °C, og skyl dem grundigt. Strømperne kan centrifugeres forsigtigt, men må ikke vrides. Lad dine kompressionsstrømper lufttørre, eller tør dem på skåneprogram i tørretumbleren, men læg dem ikke på radiatoren eller i direkte sol. Strømperne må ikke stryges.

For at bevare dine strømpers virkning skal du undlade at bruge kemiske rengøringsmidler, benzin eller skyllemiddel. Disse substanser skader det strikkede stof. Kompressionsstrømper er i stor udstrækning ikke sensitive over for fedt og olier, men bør dog ikke komme i kontakt med salver. Strømper med selvstændende, silikonebelagte kanter bør generelt ikke komme i kontakt med oplosningsmidler, salver, fugtgivende vaskelotioner og kropscremer. Kanternes klæbeevne kan ellers svækkes permanent. Strømperne bør opbevares tørt og beskyttet mod sol og varme, om muligt i originaletabellen.

Vaskes med vrangen uudad, og brug ikke skyllemiddel!

-  Skånevask
-  Må ikke bleges
-  Tørres på skåneprogram
-  Må ikke stryges
-  Tåler ikke kemiskrensning

Sådan tages strømperne på

Stryg forsigtigt strømpen/strømpebukserne på nedfra og op langs med benet, og undgå at trække den/dem op ved kantningen. Forsøg at undgå skader, der kan opstå, når man tager strømperne på med lange negle eller smykker på fingrene.

Materiale sammensætning

gilofa®

med bomuld

50 % bomuld
40 % polyamid
10 % elastan

gilofa®

med aloe vera

Hudpleje inkluderet. Særlige mikrokapsler afgiver på en kontrolleret måde udtrækkene fra aloe vera til huden; over mere end 100 vaske.
42 % polyamid (mikrofiber med aloe vera)
35 % polyamid
15 % bomuld
8 % elastan

gilofa® fine

52 % polyamid (med mandel- og vildroseolie)
48 % elastan

gilofa® style

52 % polyamid (mikrofiber)
29 % elastan
19 % polyamid

Bästa användare!

Med Gilofa rese- och stödstrumpor får du flera decenniers erfarenhet av medicinska kompressionsstrumpor. Du har valt en hälsoprojekt av hög kvalitet. Förutom den medicinska aspekten, lägger vi på Gilofa stort fokus på att de ska vara sköna att bära. Strumpor från Gilofa är sköna mot huden, bekväma att ha på sig och ser snygga ut. Det gör det lättare att leva hälsosammare. Oavsett om du är på resande fot, sportar eller bara vill göra dig själv något gott i ditt vardagliga liv.

⚠️ Viktig information

Försäljningen av strumporna ska göras av medicinskt utbildad vårdpersonal. Butiken kan också ge dig råd om hur du tar på dig strumporna på rätt sätt. Om akuta bensmärkor eller hudirritationer skulle uppstå när du använder dem ska du omedelbart uppsöka läkare. Hudreaktioner i anslutning till häftbanden kan förebyggas genom att häftbandet justeras lätt flera gånger under dagen. Om strumporna ska användas tillsammans med andra medicinska hjälpmittel ska du kontakta din behandlade läkare. Vi kontrollerar våra produkter genom en omfattande kvalitetssäkring. Om du ändå skulle ha klagomål ska du vända dig till din återförsäljare. Reparera inte själv skador utan ta med strumpan till den butik där du köpte strumpan. Noppor som uppstår på grund av friktion mot andra plagg påverkar inte strumpans kvalitet negativt.

Garanti

Vid korrekt förvaring håller medicinska kompressionsstrumpor i upp till 5,5 år. Vid regelbunden användning och korrekt skötsel garanterar vi optimal komprimerade verkan under 6 månader. När denna tidsfrist gått ut gäller inte längre garantin för produkten. Fel som beror på normalt slitage resp. felaktig användning undantas alltid från garantin. Förändringar av produkten i efterhand, som inte genomförs av tillverkaren, anses som felaktig användning. Produkten är avsedd för en användare. Om produkten överlämnas till och återanvänds av andra personer gäller inte tillverkarens produktansvar.

Så fungerar kompressionsstrumpor

Trycket avtar nerifrån och upp, vilket främjar blodgenomflödet och stöttar vensystemet.

Indikationer/avsedd användning

Tunga och trötta ben. Profylaktiskt mot venösa benproblem och resetrombos för personer med friska veneer. Kontakta din läkare om du lider av en vensjukdom som kräver behandling.

Kontraindikationer

- Framskriden perifer artärsjukdom
- Dekompenserad hjärtsvikt
- Septisk flebit
- Phlegmasia cerulea dolens

Risker att ta hänsyn till:

- Vätskande dermatoser
- Överkänslighet mot materialet i kompressionsstrumporna
- Svåra sensibilitetsstörningar i extremiteten
- Framskriden perifer neuropati (t.ex. diabetes mellitus)
- Primär kronisk polyartrit

Kontakta din läkare om du är osäker.

⚠️ Risker och biverkningar

Känslig hud kan reagera med kläda och hudproblem under de komprimerande strumporna. Därför rekommenderas lämplig hudvård. Vid följande symptom ska strumporna omedelbart tas av och en läkare kontaktas gällande fortsatt användning: blå- eller vittfärgade tår, obehag och domningar, tilltagande smärta, andfåddhet och svettningar, akuta rörelsehinder.

Avfallshantering

Efter användningsperioden ska produkten avfallshanteras enligt lokala bestämmelser.

Anmälningsplikt

Utifrån lagstiftning inom EU är patienter och användare skyldiga att omedelbart anmäla alla allvarliga incidenter under användning av medicinska produkter till både tillverkaren och ansvariga nationella myndigheter (BfArM i Tyskland).

Skötselråd

Produkten är redo att användas direkt. Vi rekommenderar att du tvättar den innan du använder den första gången. Därefter bör du tvätta den dagligen för hand eller på ett skonsamt program i tvättmaskinen. Tvätta strumporna separat med fintvättmedel utan sköljmedel (t.ex. Ofa Clean specialtvättmedel) på max 40 °C och skölj noga. Strumporna kan centrifugeras försiktigt men vrid inte ur dem. Lufttorka strumporna eller torka dem i ett skonsamt program i torktumlaren, men lägg dem inte på ett värmeelement eller i direkt solljus. Använd aldrig ett strykjärn på strumporna.

För att bevara strumpornas effekt får inga kemiska rengöringsmedel, bensin eller sköljmedel användas. Dessa ämnen angriper det stickade tyget. Komprimerande strumpor tål för det mesta fetter och oljor, men ska inte komma i kontakt med salvor. Strumpor med silikonhäftband får aldrig komma i kontakt med lösningsmedel, salvor samt återfettande tvättlotioner och kroppskrämer. Fästförmågan hos häftbanden kan i så fall försämras permanent. Förvara strumporna torrt och skyddade mot sol och värme, helst i originalförpackningen.

Tvätta från avigsidan och använd inget sköljmedel!

-  Skonsamt tvättprogram
-  Blek ej
-  Skonsamt torkprogram
-  Stryk ej
-  Ej kemtvätt

Så här tar du på strumporna

Dra försiktigt strumporna/strumpbyxorna nerifrån och upp över benet. Dra inte strumporna uppåt i kanten. Var försiktig så att inte strumporna skadas av smycken eller naglar.

Materialsammansättning

gilofa®

med bomull

50 % bomull
40 % polyamid
10 % elastan

gilofa®

med aloe vera

Hudvård på köpet. Speciella mikrokapslar avger kontrollerat ett extrakt av aloe vera till huden - räcker mer än 100 tvättar.
42 % polyamid (mikrofiber med aloe vera)
35 % polyamid
15 % bomull
8 % elastan

gilofa® fine

52 % polyamid (med mandel- och vildrosolja)
48 % elastan

gilofa® style

52 % polyamid (mikrofibrer)
29 % elastan
19 % polyamid

Hyvä käyttäjä,

Gilofa-matka- ja tukisukat ovat tulos vuosikymmenten kokemuksesta lääkinnällisten kompressiosukkien valmistuksesta. Olet hankkinut korkealuokkaisen terveystuotteen. Gilofa-sukan valmistuksessa on huomioitu lääketieteellisten näkökohtien lisäksi erityisesti käyttömukavuus. Gilofa-sukat tuntuват miellyttäviltä, niitä on mukava käyttää ja ne ovat tyylikkäät. Näin terveydestä huolehtiminen on ilo! Voit käyttää sukkia matkustamassa, urheillessa tai arjessa tukemaan terveytäsi.

⚠ Tärkeitä ohjeita

Sukkien myyjän tulee olla terveydenhuollon ammattilainen. Myyjä neuvo sinua myös sukkien pukemisessa. Jos sukkia käytetään ilmenee akuutteja jalkakipuja tai ihoärsyystä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Resorireunojen lähellä ilmeneviä ihoreaktioita voidaan välttää siirtämällä resorireunaa päivän mittaan hieman eri kohtaan. Jos sukkia käytetään yhdessä muiden lääkinnällisten apuvälineiden kanssa, keskustele asiasta hoitavan lääkärin kanssa. Tarkastamme tuotteemme kattavin laadunvarmistustoimin. Jos sinulla on silti huomautettavaa, ota yhteys sukkien myyjään. Älä korjaa vaurioita itse, vaan toimita sukat takaisin myyjälle, jolta ne ostit. Sukkien laatua eivät heikennä langansäikeet, joita voi muodostua hankauksessa muiden vaatekappaleiden kanssa.

Takuu

Kompressiosukkien käyttöikä on 5,5 vuotta, kun niitä säilytetään asianmukaisissa oloissa. Kun sukkia käytetään säännöllisesti ja niitä huolletaan asianmukaisesti, takaame, että niiden puristusvaikutus säilyy hyvinä 6 kuukautta. Tämän ajan kuluttua tuotteen takuu on umpeutunut. Takuun piiriin eivät kuulu tavallisesta kulumisesta tai virheellisestä käytöstä johtuvat puutteet. Virheellistä käyttöä on myös tuotteen jälkkikäteen tehty muokkaus, jota valmistaja ei ole tehnyt. Tuote on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttäväksi. Jos sitä halutaan käyttää toisellekin potilaalle, valmistajan tuotetakuu raukeaa.

Kompressiosukkien toimintaperiaate

Alhaalta ylös vähenevä paine edistää verenkiertoa ja tukee verisuonijärjestelmää.

Käyttöaiheet ja -tarkoitus

Painavilta ja väsyneiltä tuntuvat jalat. Verisuoniperäisten jalkavaivojen ehkäisyyn ja verisuonitautien yhteydessä matkustamisen aiheuttamien veritulppien estämiseen. Jos epäilet, että sinulla on hoitoa vaativa verisuonisairaus, ota yhteyttä lääkäriin.

Vasta-aiheet

- pitkälle edennyt raajojen valtimosairaus
- kompensoimaton sydämen vajaatoiminta
- septinen laskimotulehdus
- phlegmasia coerulea dolens.

Huomioitavat riskit:

- etenevät vetistävät dermatootsit
- yliherkkyyks kompressiosukan materiaaleille
- raajojen vaikeat tuntohäiriöt
- pitkälle edennyt perifeerinen neuropatia (esim. diabetes mellitus)
- primaari krooninen moniniveluhdus.

Jos epäilet jotain riskiä, kysy lääkäristä.

⚠ Riskit ja haittavaikutukset

Kompressiosukkien käyttö voi aiheuttaa herkän ihan kutinaa ja iho-ongelmia. Niihin suositellaan vastaavia ihanhoitomenetelmiä. Jos havaitaan seuraavia oireita, sukat on riisuttava heti ja käytön jatkamisesta on keskusteltava lääkärin kanssa: varpaiden sininen tai valkoinen väri, tuntohäiriöt ja puutumisen tunne, yltyvät kivut, hengästys ja hikoilu, akuutit liikerajoitukset.

Hävittäminen

Hävitä tuote käyttöön jälkeen paikallisten määräysten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus

EU:n laki velvoittaa potilaat ja käyttäjät ilmoittamaan lääketieteellisen tuotteen käytön yhteydessä ilmenneistä vaaratilanteista valmistajalle sekä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle (Saksassa BfArM) välittömästi.

Huolto-ohjeet

Tuotetta voi käyttää heti. Suosittelemme pesemään sen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese sukat sen jälkeen päivittäin käsin tai hienopesussa. Pese sukat erillään hienopesuaineella ilman huuhteluainetta (esim. Ofa Clean -erikoispesuaineella) enintään 40 °C:ssa ja huuhtele huolellisesti. Linkous matalalla nopeudella sopii sukille, mutta älä väänä niitä kuivaksi. Kuivata sukat pyykinarulla tai kuivausrummun hienopyykille tarkoitettulla ohjelmalla, mutta älä ripusta niitä lämmityslaitteen lähelle tai suoraan auringonvaloon. Älä koskaan silitä sukkia.

Jotta sukkien tehokkuus säilyisi, älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, bensiiniä tai huuhteluaineita. Nämä aineet vaurioittavat neulosta. Kompressiosukat kestävät rasvoja ja öljyjä hyvin, mutta niitä ei tulisi päästää kosketukseen salvojen kanssa. Silikonipäällysteisillä resorireunoilla varustettuja sukkia ei tule tavallisesti päästää kosketuksiin liuottimien, salvojen, kosteuttavien suihkusaippuoiden tai kosteusvoiteiden kanssa. Ne voivat pysyvästi heikentää resorireunoja. Säilytä sukat kuivassa sekä auringolta ja kuumuudelta suojaattuna mieluiten alkuperäispakkauksessa.

Pese nurin käännettyinä, äläkä käytä huuhteluainetta!

-  Hienopesu
-  Ei saa valkaista
-  Varovainen kuivaus
-  Ei saa silittää
-  Ei kemiallista pesua

Pukemisvinkkejä

Pue sukka/sukkahousut varovasti alhaalta jalkaa pitkin ylös. Älä vedä sukkaa reunasta ylöspäin. Korut ja pitkät sormenkynnet voivat vahingoittaa sukkaa: ole varovainen.

Materiaalit

gilofa®

sis. puuvillaa

50 % puuvillaa
40 % polyamidia
10 % elastaania

gilofa®

sis. aloe veraa

Hoitaa ihoa. Aloe vera -uute leviää iholle tasaisesti erityisten mikrokapselien kautta. Kestää yli 100 pesua.

42 % polyamidia (aloe veraa sisältävä mikrokuidu)
35 % polyamidia
15 % puuvillaa
8 % elastaania

gilofa® fine

52 % polyamidia (manteli- ja villiruusuöljyä)
48 % elastaania

gilofa® style

52 % polyamidia (mikrokuituja)
29 % elastaania
19 % polyamidia

Kæri notandi,

Gilofa ferða- og stuðningssokkar eru afrakstur áratuga reynslu í þróun stuðningssokka. Þú hefur fest kaup á hágæða heilsuvöru. Auk þess að hafa heilsu í fyrirrúmi, hugsum við sérstaklega um þægindi. Gilofa sokkar eru þægilegir á fæti, henta vel og eru smekklegir. Auðveldur heilbrigður lífstíll. Gilofa sokkarnir auka lífsgæði hvort sem er á ferðalagi, við íþróttaiðkun eða hversdagslega.

⚠ Mikilvægar upplýsingar

Sokkana þarf að kaupa hjá sérhæfðum söluaðila með þekkingu á svíði lækninga. Söluaðilinn mun einnig leiðbeina þér hvernig eigi að fara í sokkana. Ef fram kemur verkur í fótlegg eða erting í húð meðan sokkarnir eru notaðir þarf að hafa strax samband við lækninn. Þú getur komið í veg fyrir viðbrögð í húðinni á svæðinu í kringum efstu teygjuna á sokkunum með því að hagræða henni lítillega nokkrum sinnum á dag. Ráðfærðu þig við læknini um að nota þessa sokka með öðrum lækningataækjum. Við prófum vörurnar okkar með alhliða gæðaeftirlit að leiðarljósi. En ef þú hefur samt einhverjar athugasemdir fram að færa, skaltu hafa samband við söluaðila vörunnar. Ekki reyna að gera við sokkana. Skilið sokkunum til söluaðila sem seldi þá. Hnökrar sem verða vegna núnings við annan fatnað draga ekki úr gæðum sokkanna.

Ábyrgð

Endingartími stuðningssokka er 5,5 ár þegar þeir eru geymdir með réttum hætti. Við venjulega notkun og rétta meðferð ábyrgjumst við bestu stuðningsáhrif í 6 mánuði. Eftir þann tíma fellur ábyrgðin úr gildi. Ábyrgðin gildir ekki vegna skemmda sem verða við venjulegt slit eða óeðlilega notkun. Óeðlileg notkun nær einnig til breytinga á vörunni gerðar af öðrum en framleiðanda. Varan er einnota. Ef hún er fengin öðrum til endurnotkunar fellur ábyrgð framleiðanda úr gildi.

Svona virka stuðningssokkarnir

Þrýstingurinn minnkar neðan frá og upp, auðveldar blóðflæði og styður við bláæðakerfið.

Ábendingar / Tilgangur

Þyngsli og þreytutilfinning í fótleggjum. Dregur úr hættu á æðavandamálum og ferðablóðtappa hjá þeim sem eru með heilbrigðar æðar. Ef þú telur þig mögulega vera með æðasjúkdóm sem gæti þurft meðhöndlun, skaltu hafa samband við lækni.

Frábendingar

- langt genginn teppusjúkdómur í slagæðum útlíma.
- ómeðhöndluduð hjartabilun
- sýkingarbláæðabólga
- blámaleggur

Áhættuþættir sem þarf að hafa í huga:

- mikið seytandi húðsjúkdómar
- ósamrýmanleiki við efní í sokkunum
- alvarleg næmisröskun í útlimum
- miklir taugakvillar í útlimum (t.d. við sykursýki)
- frumkomin langvinn fjölliðagigt

Ef spurningar vakna skal hafa samband við lækninn.

⚠ Áhættuþættir og aukaverkanir

Viðkvæm húð getur leitt til kláða og ertingar í húð við notkun stuðningssokka. Þess vegna er viðeigandi umhirða húðar ráðlöögð. Ef þú ert með eftirfarandi einkenni skaltu strax fara úr sokkunum og hafa samband við lækninn áður en notkun er halddið áfram: bláar eða hvítar tær, óþægindi og doði, aukinn sársauki, mæði og svitamyndun, mikil hreyfiskerðing.

Förgun

Í lok notkunartímans skal farga vörunni í samræmi við reglur á hverjum stað.

Tilkynningaskylda

Vegna lagareglina Evrópusambandsins er sjúklingum og notendum skylt að tilkynna allar alvarlegar aukaverkanir með notkun lækningatækis bæði til framleiðanda og þar til bærs yfirvalds (í Þýskalandi er það eftirlitsstofnun með lyfjum og lækningatækjum (BfArM)) án tafar.

Meðhöndlun

Varan er tilbúin til notkunar. Við mælum með að þvo vörðuna fyrir fyrstu notkun. Síðan skal þvo hana daglega í höndum eða á stillingu fyrir viðkvæman þvott. Þvoið sokkana sér með mildri sápu án mykkingarefnis (t.d. „Ofa Clean special detergent“) við 40°C hámarkshita og vindið vel. Vinda má sokkana varlega í vél en ekki snúa upp á þá. Þurrkið sokkana við loft eða á stillingu fyrir viðkvæman þvott í þurrkara. Þá má ekki setja á ofn eða í beint sólarljós. Það má aldrei strauja sokkana.

Til að viðhalda virkni sokkanna má ekki nota kemisk hreinsiefni, bensín eða mykkingarefni. Þessi efni skemma prjónaefnið. Stuðningssokkar verða ekki fyrri skemmdum vegna fitu og olíu en ættu ekki að komast í snertingu við smyrslí. Sokkar með silíkonhúðuðum límborða eiga almennt ekki að komast í snertingu við leysiefni, smyrslí og feitar hreinsilausnir og húðkrem. Það getur skemmt varanlega límeiginleika límborða. Geymið sokkana á þurrum stað fjarri sólarljósi og hita, í upprunalegum umbúðum ef hægt er.

Þvoið á röngunni og notið ekki mykkingarefni!

-  Þvoið á stillingu fyrir viðkvæman þvott
-  Ekki nota bleikiefni
-  Þurrkið varlega
-  Má ekki strauja
-  Má ekki fara í efna- eða þurrhreinsun

Ráð til að fara í sokkana

Dragið sokkinn/sokkabuxurnar varlega upp fótlegginn neðan frá og upp, ekki toga í frá efstu brún. Forðast skal skemmdir sem geta orðið vegna skartgripa eða langra fingurnagla.

Efni

gilofa®

með bómull

50% bómull
40% pólýamíð
10% elastan

gilofa®

með aloe vera

Samfelld húðumhirða. Sérstök örhyldi gefa frá sér aloe vera efni til húðarinnar og þola meira en 100 þvotta.

42% pólýamíð (örtrefjar með aloe vera)
35% pólýamíð
15% bómull
8% elastan

gilofa® fine

52% pólýamíð (með möndluolíu og villirósaolíu)
48% elastan

gilofa® style

52% pólýamíð (örtrefjar)
29% elastan
19% pólýamíð

Draga korisnice, dragi korisniče,
iza čarapa Gilofa za potporu i putovanja
stoji desetljećima dugo iskustvo u razvoju
medicinskih kompresivnih čarapa. Odlučili ste
se za visokokvalitetan zdravstveni proizvod.
Pored medicinskog aspekta u tvrtki Gilofa
posebno vodimo računa o udobnosti nošenja.
Čarape Gilofa ugodne su, udobne i dobro
izgledaju. Uz njih se rado živi zdravije. Na
putovanju, tijekom bavljenja sportom ili
jednostavno zato što se svaki dan želite
osjećati dobro.

⚠ Važne napomene

Čarape mora propisati medicinski školovano
stručno osoblje. Vaš specijalizirani trgovac
također će Vam dati savjet kako ćete pravilno
oblacići čarape. Ako bi se tijekom nošenja
javili akutni bolovi u nogama ili iritacije kože,
molimo odmah se obratite liječniku. Kožne
reakcije u području samoprianjajućih traka
mogu se spriječiti tako da tijekom dana više
puta malo premjestite samoprianjajuću traku.
Ako čarape trebate nositi u kombinaciji s
drugim medicinskim pomagalima, zatražite
savjet o tome od svojeg liječnika. Svoje
proizvode provjeravamo u sklopu opsežnog
osiguranja kvalitete. Ako usprkos tome
imate reklamacije, molimo obratite se
svom specijaliziranom trgovcu. Nemojte
sami popravljati štete, nego vratite čarapu
specijaliziranom trgovcu od kojeg ste je kupili.
Čvorići na vlaknima, koji mogu nastati trenjem
o druge odjevne predmete, ne umanjuju
kvalitetu čarape.

Jamstvo

Rok trajanja kompresivnih čarapa pri
propisnom je skladištenju ograničen na
5,5 godina. Pri redovnoj uporabi i uz pravilnu
njegu jamčimo 6 mjeseci optimalnog
kompresivnog učinka. Nakon isteka ovog roka
na proizvode se više ne primjenjuje jamstvo.
Iz jamstva su načelno izuzeti nedostaci koji se
mogu svesti na uobičajeno trošenje, odnosno
nepropisnu upotrebu. U nepropisnu upotrebu
također se ubraja naknadna izmjena proizvoda
koju nije provela tvrtka proizvođača. Proizvod
je namijenjen uporabi kod samo jednog
korisnika. Ako se prosljedi drugim osobama
radi daljnog korištenja, jamstvo na proizvod
proizvođača prestaje vrijediti.

Način djelovanja kompresivnih čarapa

Pritisak se smanjuje odozdo prema gore,
potiče cirkulaciju krvi i podupire venski sustav.

Indikacije / Namjena

Osjećaj težine i umora u nogama. Profilaktički
učinak protiv ozljeda vena na nogama i
duboke venske tromboze uzrokovane dugim
putovanjem u osoba sa zdravim venama.
Obratite se svom liječniku ako sumnjate da
imate venušku bolest koja zahtijeva liječenje.

Kontraindikacije

- Uznapredovala periferna arterijska okluzivna
bolest
- Dekompenzirana srčana insuficijencija
- Septički flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Rizici na koje treba obratiti pozornost:

- Izražene vlažne dermatoze
- Nepodnošljivost materijala od kojih su
napravljene kompresivne čarape
- Teški poremećaji osjeta u ekstremitetu
- Uznapredovala periferna neuropatija
(npr. diabetes mellitus)
- Primarni kronični poliartritis

U slučaju sumnje obratite se svom liječniku.

⚠ Rizici i nuspojave

Kod osjetljive kože može ispod kompresivnih
čarapa doći do svrbeža i kožnih problema.
Stoga preporučujemo adekvatnu njegu kože.
U slučaju sljedećih simptoma molimo odmah
skinite čarape i porazgovarajte s liječnikom
prije nastavka uporabe: Pojava plave ili bijele
boje na nožnim prstima, parestezije i utrnulost,
pojačavanje bolova, kratak dah i znojenje,
akutna ograničenja pokreta.

Zbrinjavanje

Nakon isteka roka upotrebe molimo zbrinite
proizvod u skladu s lokalnim propisima.

Obveza prijavljivanja

Temeljem zakonskih propisa u EU bolesnici i korisnici dužni su odmah prijaviti svaki ozbiljan incident prilikom primjene medicinskog proizvoda proizvođaču i nadležnom službenom tijelu (u Njemačkoj BfArM, Savezni institut za lijekove i medicinske proizvode).

Upute za održavanje

Proizvod je prikladan za trenutačnu upotrebu. Preporučujemo da ga operete prije prvog nošenja. Molimo da ga nakon toga svakodnevno perete ručno ili u perilici rublja na programu za osjetljivo rublje. Čarape perite zasebno deterdžentom za osjetljivo rublje bez omekšivača (npr. „specijalni deterdžent Ofa Clean“) na maksimalno 40 °C i dobro ih isperite. Čarape se mogu nježno centrifugirati, ali molimo nemojte ih cijediti žmikanjem. Čarape sušite na zraku ili u sušilici na programu za osjetljivo rublje, ali nemojte ih odlagati na grijalicu ili na izravno sunčevu svjetlo. Nikada nemojte glaćati čarape.

Kako biste sačuvali učinkovitost čarapa, molimo nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje, benzin ili omekšivač. Ove tvari nagrizaju pletivo. Kompresivne čarape uvelike su otporne na masti i ulja, ali ne bi smjele doći u kontakt s ljekovitim mastima. Čarape sa silikonskim samoprianjajućim trakama načelno ne bi smjele doći u kontakt s otapalima, ljekovitim mastima, hidratantnim losionima za pranje i kremama za tijelo. U suprotnom se može trajno umanjiti sposobnost držanja samoprianjajućih traka. Čarape čuvajte na suhom mjestu te zaštićene od sunca i topline po mogućnosti u originalnom pakiranju.

Molimo prati preokrenuto i ne koristiti omekšivač!

- Program za osjetljivo rublje
- Ne izbjeljivati
- Sušiti na programu za osjetljivo rublje
- Ne glaćati
- Ne kemijski čistiti

Savjeti za oblačenje

Čarape / hulahopke pažljivo navucite na nogu odozdo prema gore, ali nemojte ih vući prema gore držeći za gornji rub. Izbjegavajte oštećenja uzrokovana nakitom ili dugim noktima.

Sastav materijala

gilofa®

s pamukom

50 % pamuk
40 % poliamid
10 % elastan

gilofa®

s aloe verom

uključena njega za kožu. Posebne mikrokapsule na kontroliran način otpuštaju ekstrakte aloe vere na kožu; tijekom više od 100 pranja.

42 % poliamid (mikrovlakna s aloe verom)
35 % poliamid
15 % pamuk
8 % elastan

gilofa® fine

52 % poliamid (s uljem badema i divlje ruže)
48 % elastan

gilofa® style

52 % poliamid (mikrovlakna)
29 % elastan
19 % poliamid

Poštovani korisnici,

Gilofa vitalne čarape i čarape za putovanje temelje se na desetljećima iskustva u razvoju medicinskih kompresivnih čarapa. Odabrali ste visokokvalitetni zdravstveni proizvod.

Osim medicinskog aspekta, mi u kompaniji Gilofa posebnu pažnju poklanjamo udobnosti nošenja. Gilofa čarape prijatne su na dodir, udobne i dobro izgledaju. Tako se rado živi zdravije. Svejedno da li putujete, bavite se sportom ili samo zato što želite učiniti nešto dobro za sebe u svakodnevnom životu.

⚠ Važne napomene

Čarape moraju propisati medicinski obučeni stručnjaci. Vaš specijalizovani prodavač također će vas posavjetovati kako pravilno navući čarape. Ako prilikom nošenja osjetite akutne bolove u nogama ili iritaciju kože, odmah se obratite ljekaru. Reakcije kože u regiji ljepljivih traka mogu se spriječiti laganim pomicanjem ljepljive trake više puta tokom dana. Ako se čarape trebaju nositi u kombinaciji s drugim medicinskim pomagalima, razgovarajte o tome s ordinirajućim lekarom. Naše proizvode testiramo u okviru sveobuhvatnog osiguranja kvaliteta. Ako uprkos tome imate pritužbe, obratite se svom specijalizovanom prodavaču. Ne popravlјajte oštećenja sami, već odnesite čarape specijalizovanom prodavaču od kojeg su kupljene. Grudice vlakana koje se mogu stvoriti uslijed trenja sa drugim odjevnim predmetima ne smanjuju kvalitet čarapa.

Garancija

Rok trajanja kompresivnih čarapa ograničen je na 5,5 godina ako se pravilno skladište. Uz redovnu upotrebu i pravilnu njegu garantujemo optimalan učinak kompresije tokom 6 mjeseci. Po isteku ovog vrijemena proizvodi će biti isključeni iz garancije. Nedostaci koji mogu nastati usled ubičajenog trošenja ili nepravilne upotrebe u osnovi su isključeni iz garancije. Nepravilna upotreba uključuje i naknadne modifikacije proizvoda koje nije izvršio proizvođač. Proizvod je predviđen za jednog korisnika. Ako se proizvod ustupi drugoj osobi na ponovnu upotrebu, proizvođačeva odgovornost za proizvod prestaje da važi.

Princip djelovanja kompresivnih čarapa

Tok kompresije, koja se smanjuje odozdo prema gore, potiče cirkulaciju krvi i podržava sistem vena.

Indikacije / namjena

Osjećaj težine i umora u nogama. Za profilaksu protiv tegoba u nogama zbog vena i tromboze kod putovanja kod ljudi sa zdravim venama.

Ako sumnjate da imate bolest vena koja zahtijeva liječenje, pitajte svog ljekara.

Kontraindikacije

- uznapredovala periferna arterijska okluzivna bolest
- dekompenzovana insuficijencija srca
- septički flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Rizici koje treba uzeti u obzir:

- izražene vlažne dermatoze
- nekompatibilnost materijala kompresivnih čarapa
- teška senzitivnost ekstremiteta
- uznapredovala periferna neuropatija (kao npr. kod Diabetes mellitus)
- primarni hronični poliartritis

Ako sumnjate, pitajte svog ljekara.

⚠ Rizici i nuspojave

Kod osjetljive kože mogu se pojaviti svrbež i problemi sa kožom ispod kompresivnih čarapa. Stoga se preporučuje odgovarajuća njega kože. U slučaju pojave sljedećih simptoma, odmah skinite čarape i posavjetujte se s ljekарom o nastavku korištenja: Plava ili bijela boja nožnih prstiju, parestezije i utrnulost, pojačani bol, otežano disanje i znojenje, akutna ograničenja kretanja.

Odlaganje

Po završetku korištenja odložite proizvod u skladu sa lokalnim propisima.

Obaveza izvještavanja

Zbog zakonskih propisa unutar EU, pacijenti i korisnici dužni su prijaviti svaki ozbiljan incident koji uključuje upotrebu medicinskog proizvoda, kako proizvođaču, tako i nadležnom državnom tijelu (u Njemačkoj BfArM, Savezni zavod za lijekove i medicinske proizvode).

Preporuke za održavanje

Proizvod je odmah pogodan za upotrebu. Preporučujemo da čarape operete prije prvog nošenja. Nakon toga perite svakodnevno ručno ili na finom programu mašine. Čarape operite odvojeno sa blagim deterdžentom bez omekšivača (npr. specijalni deterdžent „Ofa Clean“) na najviše 40°C i dobro isperite. Čarape se mogu lagano zavrtati, ali nemojte ih cjediti preteranim uvrтанjem. Čarape osušite na vazduhu ili na finom programu sušilice, ali ih nemojte stavljati na radijatore ili izlagati direktnom sunčevom svjetlu. Nikada ne peglajte čarape.

Kako biste održali efikasnost vaših čarapa, nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, benzin ili omekšivače. Ove supstance oštjećuju pletenu tkaninu. Kompresivne čarape uglavnom nisu osjetljive na masti i ulja, ali ne bi trebale doći u kontakt sa kremama. Čarape sa ljepljivim trakama presvućenim silikonom generalno ne bi trebale doći u kontakt sa rastvaračima, kremama, hidratantnim losionima za pranje i kremama za tijelo. U protivnom se može trajno oslabiti prijanjanje ljepljivih traka. Čarape čuvajte suve i zaštićene od sunca i vrućine u originalnom pakovanju, ako je moguće.

Čarape perite izvrnute i nemojte koristiti omekšivač!

-  Fin program pranja
-  Ne izbjeljivati
-  Fin program sušenja
-  Ne peglati
-  Bez hemijskog čišćenja

Savjeti za navlačenje

Pažljivo povucite svoje čarape/štramble uz nogu odozdo prema gore i nemojte ih vući za završni rub prema gore. Vodite računa da ih ne oštetite nakitom ili dugim noktima.

Sastav materijala

gilofa®

s pamukom

50 % pamuk
40 % poliamid
10 % elastan

gilofa®

s aloa verom

Uključena njega kože. Posebne mikrokapsule kontrolisano otpuštaju ekstrakte aloe vere na kožu; preko 100 pranja.
42 % poliamid (mikrovlakana s aloa verom)
35 % poliamid
15 % pamuk
8 % elastan

gilofa® fine

52 % poliamid
(s uljem badema i divlje ruže)
48 % elastan

gilofa® style

52 % poliamid (mikrovlakna)
29 % elastan
19 % poliamid

Poštovana korisnice, poštovani korisniče, u Gilofa potpornim i putnim čarapama krije se višedecenijsko iskustvo razvoja medicinskih kompresivnih čarapa. Odlučili ste se za visokokvalitetan zdravstveni proizvod. Pored medicinskog aspekta, kompanija Gilofa posebno vodi računa o udobnosti pri nošenju. Gilofa čarape su prijatne, udobne i dobro izgledaju. Zahvaljujući tome ljudi rado žive zdravije koristeći ih, bez obzira na to da li su na putovanjima, bave se sportom ili jednostavno žele da u svojoj svakodnevici učine nešto dobro za sebe.

Važne napomene

Terapiju kompresivnim čarapama može propisati samo medicinski obučeno osoblje. Vaš specijalizovani trgovac će vam takođe pružiti savete o pravilnom navlačenju čarapa. Ako tokom nošenja osetite akutne bolove u nogama ili iritaciju kože, odmah se obratite lekaru. Reakcije na koži u predelu lepljivih traka mogu se sprečiti neznatnim pomeranjem lepljive trake nekoliko puta u toku dana. Ako čarape treba da nosite u kombinaciji sa drugim medicinskim pomagalima, posavetujte se o tome s lekarom. Svoje proizvode testiramo u sklopu sveobuhvatnog programa osiguranja kvaliteta. Ako i dalje imate pritužbi, obratite se svom specijalizovanom trgovcu. Ne popravljajte oštećenja sami, već odnesite čarape specijalizovanom trgovcu kod koga ste ih kupili. Grudvice vlakana koje se mogu stvoriti usled trenja sa drugim odevnim predmetima ne umanjuju kvalitet čarapa.

Garancija

Trajanost kompresivnih čarapa je ograničena na 5,5 godina pri pravilnom skladištenju. U slučaju redovne primene i pravilnog održavanja garantujemo optimalno kompresivno dejstvo tokom 6 meseci. Nakon ovog perioda prestaje garancija na proizvode. Garancija po pravilu ne obuhvata nedostatke koji mogu nastati usled uobičajenog habanja ili nepravilne upotrebe. Nepravilnom upotrebom se smatraju i naknadne modifikacije proizvoda koji nije izvršio proizvođač. Predviđeno je da proizvod upotrebljava jedan korisnik. Garancija proizvođača prestaje ustupanjem proizvoda drugim osobama na ponovnu upotrebu.

Princip rada kompresivnih čarapa

Pritisak se smanjuje odozdo nagore, čime se podstiče cirkulacija i podupire venski sistem.

Indikacije / namena

Osećaj težine i umora u nogama. Služe kao profilaksu za venske tegobe u nogama i putničku trombozu kod osoba sa zdravim venama. Ako imate nedoumica o tome da li bolujete od bolesti vena koju je potrebno lečiti, obratite se svom lekaru.

Kontraindikacije:

- uznapredovala periferna arterijska okluzivna bolest,
- dekompenzovana srčana insuficijencija,
- septični flebitis,
- Phlegmasia coerulea dolens.

Rizici o kojima treba voditi računa:

- izražene sekretovine dermatoze,
- osetljivost prema kompresionom materijalu čarapa,
- teški poremećaji osetljivosti ekstremiteta,
- uznapredovala periferna neuropatija (npr. kod dijabetesa melitusa),
- primarni hronični poliartritis.

Ako imate nedoumice, posavetujte se s lekarom.

Rizici i neželjeni efekti

Kod osoba sa osetljivom kožom ispod kompresivnih čarapa može doći do svraba i problema sa kožom. Zbog toga se preporučuje odgovarajuća nega kože. U slučaju pojave sledećih simptoma, odmah skinite čarape i posavetujte se sa lekarom pre nego što nastavite da ih koristite: plava ili bela boja prstiju na nogama, paretezije i utruulost, rastući bol, otežano disanje i znojenje, akutna ograničenja u kretanju.

Odlaganje

Odložite proizvod na kraju korisnog veka u skladu s lokalnim propisima.

Obaveza izveštavanja

Na osnovu zakonskih propisa u EU pacijenti i korisnici dužni su da sve ozbiljne incidente do kojih dođe pri korišćenju medicinskog proizvoda prijave i proizvođaču i nadležnom nacionalnom regulatornom telu (u Nemačkoj je to Savezni institut za lekove i medicinske proizvode (BfArM, nem. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)).

Uputstva za održavanje

Proizvod se može odmah koristiti. Preporučujemo da operete čarape pre prvog nošenja. Zatim svakodnevno perite čarape ručno ili mašinski, programom za nežni veš. Čarape perite odvojeno blagim deterdžentom bez omekšivača (npr. specijalnim deterdžentom Ofa Clean) na najviše 40°C i dobro ih isperite. Čarape se mogu nežno centrifugirati, ali ih nemojte cediti uvrtaњem. Čarape osušite na vazduhu ili mašinski, programom sušenja za nežni veš. Nemojte ih stavljati na radijatore ni izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nikada ne peglajte čarape.

Kako biste sačuvali efikasnost čarapa, nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, benzin ni omekšivače. Ove supstance agresivno deluju na pletivo. Kompresivne čarape uglavnom nisu osetljive na masti i ulja, ali ne bi smeće doći u dodir sa kremama. Čarape sa lepljivim trakama presvućenim silikonom ne bi trebalo da dolaze u dodir sa rastvaračima, kremama, hidratantnim losionima za pranje i kremama za telo. U suprotnom može doći do trajnog gubitka lepljivosti traka. Čarape skladištitе suve i zaštićene od sunca i topote, po mogućству u originalnom pakovanju.

Čarape perite izvrnute i ne koristite omekšivač!

-  Fini program pranja
-  Ne izbeljuite
-  Fini program sušenja
-  Ne peglajte
-  Nije dozvoljeno hemijsko čišćenje

Saveti za navlačenje

Pažljivo navucite čarape/hulahopke od ozdo nagore uz nogu i ne vucite ih za završni rub. Vodite računa da ih ne oštetite nakitom i dugim noktima.

Sastav materijala

gilofa®

s pamukom

50% pamuk
40% poliamid
10% elastan

gilofa®

s aloe verom

Dodata neguju kožu. Specijalne mikrokapsule kontrolisano ispuštaju ekstrakte aloe vera u kožu tokom perioda od preko 100 pranja.
42% poliamid (mikrovlakna s aloe verom)
35% poliamid
15% pamuk
8% elastan

gilofa® fine

52% poliamid
(s bademovim uljem i uljem divlje ruže)
48% elastan

gilofa® style

52% poliamid (mikrovlakna)
29% elastan
19% poliamid

Уважаемый пользователь!

При создании дорожных и компрессионных чулок Gilofa использован многолетний опыт разработки компрессионных чулок медицинского назначения. Вы выбрали высококачественное изделие, способствующее здоровью. Наряду с медицинским аспектом мы уделяем особенное внимание комфорту при ношении изделий Gilofa. Чулки Gilofa создают приятное ощущение, удобно сидят на ногах и хорошо выглядят. Ваш образ жизни станет более здоровым. Всегда — путешествуете ли вы, занимаетесь спортом или просто хотите улучшить свою повседневную жизнь.

⚠ Важные указания

Специалисты, занимающиеся продажей чулок, должны иметь медицинское образование. В специализированном магазине вас также проконсультируют, как правильно надевать чулки. Если при ношении чулок возникнет острые боли в ногах или раздражения кожи, нужно немедленно обратиться к врачу. Кожные реакции в области резинок можно предотвратить, слегка изменяя положение резинок несколько раз в течение дня. При необходимости использования чулок вместе с другими медицинскими средствами проконсультируйтесь с лечащим врачом. Вся наша продукция проходит контроль в рамках комплексной системы обеспечения качества. Если, несмотря на все наши усилия, у вас возникнут претензии к качеству, обращайтесь в ваш магазин. При обнаружении дефектов не проводите ремонт своими силами, а верните чулки в магазин, в котором они приобретались. Катышки, которые могут образоваться вследствие трения о другие предметы одежды, не влияют на качество чулок.

Срок гарантии

Срок годности компрессионных чулок при надлежащих условиях хранения составляет 5,5 лет. При регулярном использовании и должном уходе мы гарантируем оптимальный компрессионный эффект в течение 6 месяцев. По истечении этого срока действие гарантии на продукцию прекращается. Принципиально гарантия не распространяется на недостатки, вызванные естественным износом или неосторожным обращением. Под неосторожным обращением также понимается внесение дополнительных изменений в изделие кем-либо помимо производителя. Изделие предназначено для использования одним пользователем. Если оно передается для повторного использования другим лицам, гарантия производителя утрачивает силу.

Принцип действия компрессионных чулок

Благодаря распределению давления с уменьшением снизу вверх увеличивается скорость оттока крови и облегчается работа венозной системы.

Показания/назначение

Чувство тяжести и усталости в ногах. Для профилактики заболеваний вен на ногах и «тромбоза путешественника» у людей со здоровыми венами. В случае сомнения относительно наличия у вас заболевания вен, которое требует лечения, проконсультируйтесь со своим врачом.

Противопоказания

- прогрессирующее облитерирующее заболевание периферических артерий;
- декомпенсированная сердечная недостаточность;
- септические флебиты;
- синий болевой флебит.

Потенциальные риски:

- выраженные мокнущие дерматозы;
- непереносимость материала компрессионных чулок;
- тяжелые расстройства чувствительности конечностей;
- прогрессирующая периферическая нейропатия (например, при сахарном диабете);
- первичные хронические полиартриты.

В случае сомнения проконсультируйтесь с врачом.

⚠ Риски и побочные действия

В случае чувствительной кожи под компрессионными чулками могут возникнуть зуд и проблемы с кожей. В связи с этим рекомендуется адекватный уход за кожей. При следующих симптомах необходимо сразу снять чулки и перед дальнейшим использованием проконсультироваться с врачом: посинение или побеление пальцев ног, дискомфорт и ощущение онемения, усиливающиеся боли, одышка и обильное потение, острые ограничения двигательных функций.

Утилизация

По окончании периода использования изделие необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Обязательное уведомление

На основании требований законодательства в рамках ЕС пациенты и пользователи обязаны немедленно уведомить производителя и национальные компетентные органы (в Германии это Институт BfArM) о любом серьезном инциденте при использовании изделия медицинского назначения.

Указания по уходу

Изделие пригодно для немедленного использования. Перед первым ношением его рекомендуется постирать. После этого стирайте его ежедневно вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки. Стирайте чулки отдельно с использованием нейтрального моющего средства без кондиционера-ополаскивателя (например, средством Ofa Clean) при температуре не выше 40 °C и хорошо полоскайте. Возможен щадящий отжим чулок в центрифуге, не допускается отжим с выкручиванием. Сушить чулки следует на открытом воздухе или в сушильной машине в щадящем режиме, не допускается сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Запрещается гладить чулки.

Для сохранения эффективности чулок не используйте химические чистящие средства, бензин или кондиционер-ополаскиватель. Эти вещества разъедают трикотажное полотно. Компрессионные чулки по большей части нечувствительны к жирам или маслам, однако следует избегать их контакта с мазями. Чулки с резинками, имеющими силиконовое покрытие, не должны контактировать с растворителями, мазями, увлажняющими моющими лосьонами и кремами для тела. В противном случае способность резинок к сцеплению может быть необратимо нарушена. Храните чулки в сухом, защищенном от солнца и жары месте, по возможности в оригинальной упаковке.

Стирать с изнанки, не использовать кондиционер-ополаскиватель!

-  Деликатная стирка.
-  Не отбеливать.
-  Щадящая сушка.
-  Не гладить.
-  Не подвергать химической чистке.

Советы по надеванию

Осторожно надевайте чулки/колготки разглаживающим движением по ноге снизу вверх, не тяните их вверх за верхний край. Страйтесь не повредить изделие украшениями или длинными ногтями на руках.

Состав материала

gilofa®

с хлопком

50 % — хлопок
40 % — полиамид
10 % — эластан

gilofa®

с алоэ вера

Чулки с уходом за кожей. Благодаря специальным микрокапсулам на кожу переносится определенное количество экстракта алоэ вера; эффект сохраняется после 100 стирок.

42 % полиамид
(микроволокно с алоэ вера)
35 % — полиамид
15 % — хлопок
8 % — эластан

gilofa® fine

52 % полиамид (с миндалевым маслом и маслом шиповника)
48 % — эластан

gilofa® style

52 % — полиамид (микроволокно)
29 % — эластан
19 % — полиамид

Вітаємо!

Компресійні панчохи Gilofa було розроблено завдяки багаторічному досвіду в галузі медичних компресійних панчіх. Ви вибрали високоякісний медичний продукт. Крім медичного аспекту, компанія Gilofa приділяє особливу увагу комфорту носіння. Панчохи Gilofa приємні на дотик, зручні й гарно виглядають. Тепер жити здоровим життям ще простіше! Неважливо, подорожуєте ви, займаєтесь спортом чи просто хочете попіклуватися про себе серед повсякденності.

Важливі вказівки

Отримати панчохи можна у дилера, який є фахівцем зі спеціальною медичною підготовкою. Дилер також порадить вам, як правильно надіти компресійні панчохи. Якщо під час носіння ви відчуваєте гострий біль у ногах або подразнення шкіри, негайно зверніться до лікаря. Реакції з боку шкіри в зоні клейких стрічок можна запобігти, якщо змінювати положення клейкої стрічки кілька разів протягом дня. Якщо панчохи потрібно надягти разом з іншими допоміжними медичними виробами, проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Ми перевіряємо нашу продукцію в межах комплексного забезпечення якості. Проте якщо ви виявили дефект, зверніться до свого дилера. Не намагайтесь усунути пошкодження самостійно, а поверніть виріб дилеру, в якого ви його придбали. Ковтунці, які можуть утворюватися внаслідок тертя об інший одяг, не знижують якість виробу.

Гарантія

Термін придатності медичних компресійних панчіх обмежується п'ятьма з половиною (5,5) роками за умови належного зберігання. За умови регулярного використання й належного догляду ми гарантуємо оптимальний компресійний ефект протягом 6 місяців. Після закінчення цього терміну гарантія на вироби втрачає чинність. Зазвичай гарантія не поширюється на дефекти через нормальне зношування або неналежне використання. До неналежного використання також відноситься подальша модифікація виробу, яка була здійснена не виробником. Товар призначено для одного користувача. У разі передавання виробу іншим особам для повторного використання виробник не несе відповідальності за виріб.

Принцип дії компресійних панчіх

Розподіл тиску, що зменшується знизу вгору, сприяє циркуляції крові й підтримує венозну систему.

Показання / цільове призначення

Відчуття важкості й утоми в ногах. Для профілактики венозних захворювань ніг і тромбозу мандрівника в людей зі здоровими венами. Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи є у вас захворювання вен, яке потребує лікування, зверніться до свого лікаря.

Протипоказання

- Прогресуюче оклюзивне захворювання периферичних артерій
- Декомпенсована серцева недостатність
- Септичний флебіт
- Флебіт синій боловий

Ризики, на які слід зважати

- Виражені вологі дерматози
- Непереносимість матеріалу компресійних панчіх
- Важкі порушення чутливості кінцівки
- Прогресуюча периферична нейропатія (наприклад, цукровий діабет)
- Ревматоїдний поліартрит

У разі виникнення запитань зверніться до лікаря.

Ризики та побічні ефекти

У разі чутливої шкіри під компресійними панчохами може виникнути свербіж і подразнення. Тому рекомендується належний догляд за шкірою. У разі появи наступних симптомів негайно зніміть панчохи та зверніться до лікаря, перш ніж використовувати їх знову: синє або біле забарвлення пальців ніг, дискомфорт і оніміння, посилення болю, задишка та надмірне потовиділення, різке обмеження рухових функцій.

Утилізація

Після закінчення терміну використання виріб слід утилізувати згідно з місцевими правилами.

Обов'язок звітування

Відповідно до законодавчих норм ЄС, пацієнти й користувачі зобов'язані повідомляти про кожен серйозний інцидент, пов'язаний з використанням виробу медичного призначення, як виробника, так і відповідальний національний орган (у Німеччині — BfArM).

Вказівки з догляду

Виріб придатний для негайногого використання. Рекомендуємо виправити його перед першим використанням. Потім прати щодня вручну або в пральній машині, у щадному режимі. Прати панчохи слід окрім мийним засобом для деликатної білизни без кондиціонера (наприклад, спеціальним мийним засобом Ofa Clean) за температури щонайвище 40 °C, після чого ретельно прополоскати. Панчохи можна сушити в центрифузі в щадному режимі, але не викручувати. Сушити компресійні панчохи слід на повітрі або в сушарці, у щадному режимі, але уникати обігрівачів і прямих сонячних променів. Прасувати панчохи заборонено.

Щоб зберегти ефективність панчіх, не використовуйте хімічні очищувачі, бензин і кондиціонери для білизни. Ці речовини негативно впливають на трикотаж. Компресійні панчохи дуже стійкі до жирів і олій, але слід уникати контакту з мазями. Панчохи із силіконовими клейкими стрічками слід берегти від контакту з розчинниками, мазями, живильними лосьйонами й кремами для тіла. У цьому разі адгезійну здатність силіконових стрічок може бути порушене. Зберігати панчохи в сухому й захищенному від сонця та високих температур місці бажано в оригінальній упаковці.

Поради щодо надівання

Обережно натягувати панчохи чи колготки по нозі знизу вгору й не тягнути за край. Уникати пошкодження прикрасами або довгими нігтями.

Склад матеріалу

gilofa®

3 бавовною

50 % бавовна
40 % поліамід
10 % еластан

gilofa®

3 аloe vera

Для догляду за шкірою. Спеціальні мікрокапсули контролювано вивільнюють екстракти алое вера в шкіру; витримують понад 100 циклів прання.
42 % поліамід (Polyamid)
(мікрофібра з алое вера)
35 % поліамід
15 % бавовна
8 % еластан

gilofa® fine

52 % поліамід (Polyamid)
(з олією мигдалю й шипшини))
48 % еластан

gilofa® style

52 % поліамід (мікрофібра)
29 % еластан
19 % поліамід

Прати навиворіт і не використовувати кондиціонер для білизни!

-  Щадне прання
-  Не відбілювати
-  Щадне сушіння
-  Не прасувати
-  Хімчистка заборонена

نصائح للرتداء

اسحب الجوارب/الجوارب اللاصقة بحذر من أسفل الساق لأعلى ولا تسحبها لأعلى من طرفها. يرجى تجنب إتلاف الجوارب بسبب المجوهرات أو الأظافر الطويلة.

تركيبة الخامة

gilofa® بالقطن
قطن %50
بولي أميد %40
إيلاستين %10

gilofa® بالصبار

يشتمل العناية بالبشرة. كبسولات دقيقة خاصة تطلق مستخلصات الصبار على الجلد بطريقة مهكمة: تدوم لأكثر من 100 غسلة.

بولي أميد (ألياف دقيقة مع الصبار) %42
بولي أميد %35
قطن %15
إيلاستين %8

gilofa® fine

بولي أميد (مع اللوز وزهرة النسرين) %52
إيلاستين %48

gilofa® style

بولي أميد (ألياف دقيقة) %52
إيلاستين %29
بولي أميد %19

ضرورة التبليغ

تنص الوائح القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي على أنه يتوجب على المرضى والمستخدمين الإبلاغ عن أي حادث خطير يتعلق باستخدام الأجهزة الطبية إلى كل من الشركة المصنعة والسلطة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا BfArM، المعهد الفيدرالي للأدوية والأجهزة الطبية).

إرشادات العناية

الم المنتج مناسب للستخدام الفوري. ننصح بفسله قبل ارتدائه لأول مرة. وبعد ذلك، يرجى الغسل يدوياً كل يوم أو بالدورات الهادائة للفسالة. أغسل الجوارب بمفردها بمنظف خفيف بدون استخدام منعم الأقمشة (مثل منظف Ofa Clean الخاص) بحد أقصى 40 درجة مئوية وقم بشطفها جيداً. يمكن عصر الجوارب بالتدوير في الغسالة برفق، لكن من فضلك لا تتعصرها بدوينا. قم بتجفيف الجوارب في الهواء على الدورة الهادائة لمدفأتك، لكن لا تضعها على المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر. ولا تقم أبداً بك الجوارب.

للحفاظ على فعالية الجوارب الخاصة بك، يرجى عدم استخدام مواد التنظيف الكيميائية أو البنزين أو منعمات الأقمشة. لأن هذه المواد تهاجم النسيج المحبوك. الجوارب الضاغطة غير حساسة تجاه الدهون والزيوت إلى حد كبير، ولكن لا ينبغي أن تتلامس مع المراهم. كقاعدة عامة، يجب ألا تتلامس الجوارب ذات الأشرطة اللاصقة المطلية بالسيليكون مع المذيبات والمراهم ومستحضرات الغسيل المرطبة وكريمات الجسم. وإلا فقد تضعف قدرة التصاق الأشرطة اللاصقة بشكل دائم. قم بتخزين الجوارب جافة مع حمايتها من الشمس والحرارة، وفي العبوة الأصلية قدر الإمكان.

يرجى الغسل بالمقلوب وعدم استخدام منعم الأقمشة!

- دوره غسيل هادئه
- لا تستعمل مبيضات
- تنظيف لطيف
- لا يُؤكي
- لا يُنطّف كيمواتنا

آلية عمل الجوارب الضاغطة

يعمل منحنى الضغط، الذي ينخفض من النصف إلى الأعلى، على تعزيز الدورة الدموية ودعم الجهاز الوريدي.

دواعي الاستعمال / الغرض من الاستخدام

الشعور بثقل وإرهاق في الساقين. للوقاية من مشكلات أوردة الساق وتحطم الدم لدى الأشخاص ذوي الأوردة السليمة. إذا كانت لديك أي شكوك حول ما إذا كان لديك مرض وريدي يتطلب العلاج، فيرجى استشارة طبيبك.

موانع الاستعمال

- مرض الشرايين المحيطية المتقدم
- قصور القلب اللامعاوض
- التهاب الوريد الإنتراني
- الدلتاهاب الوريدي المفرز المؤلم
- المخاطر التي يجب مراعاتها:**
- الأمراض الجلدية الارتشادية الحادة
- عدم توافق مواد الجوارب الضاغطة
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء السكري)
- التهاب المفاصل المزمن الأولي

في حالة الشك، يرجى استشارة طبيبك.

المخاطر والتثار الجانبي

يمكن أن يتسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث حكة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة للبشرة. في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب بخصوص استمرار الاستخدام؛ تلون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتنميل، آلام متزايدة، ضيق في التنفس وتعرق، تقييد حاد في الحركة.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يرجى التخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية.

عزيزي المستخدم،

تعتمد جوارب Gilofa الحيوية والخاصة بخبرة ممتدة لعقود في مجال تطوير الجوارب الضاغطة الطبية. لقد اخترت منتجنا صحيحاً عالي الجودة. نحن في Gilofa نولي اهتماماً خاصاً لراحة الارتداء فضلاً عن الجانب الطبي. تتميز جوارب Gilofa بأنها تمدك شعوراً ممتعاً ومريناً فضلاً عن مظهرها الجذاب. هكذا تتمتع بصحة أفضل في حياتك. سواء أثناء السفر أو ممارسة الرياضة، أو إذا كنت لا تزيد سوى تحسين اختياراتك في الحياة اليومية.

إرشادات مهمة

يجب تسليم الجوارب من قبل متخصصين مدربين طبعاً. سوف يقدم لك الموزع المتخصص النصيحة أيضاً بشأن كيفية ارتداء الجوارب بشكل صحيح. إذا كنت تعاني من ألم حاد في الساق أو تهيج في الجلد أثناء ارتدائها، فيرجى استشارة الطبيب على الفور. يمكن منع حدوث تفاعلات جلدية في منطقة الأشرطة اللاصقة عن طريق إزاحة الشريط اللاصق قليلاً عدة مرات خلال اليوم. إذا كان سبب ارتداء الجوارب مع أدوات مساعدة طبية أخرى، فيرجى مناقشة ذلك مع طبيبك. تختبر منتجاتنا في إطار برنامج شامل لضمان الجودة. وإذا كان لا يزال لديك شكاوى، فيرجى الاتصال بالموزع المتخصص. لا تقم بإصلاح التلفيات بنفسك، بل أعد الجورب إلى الموزع المتخصص الذي تم شراؤه منه. عقيبات الألياف التي يمكن أن تتشكل بسبب الاحتكاك بالملابس الأخرى لا تقلل من جودة الجورب.

الفحص

تقترن مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة على 5.5 سنوات عند التخزين بالشكل الصحيح. كما نضمن أفضل تأثير للضغط لمدة 6 أشهر مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انتهاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يغطي حالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن التأكيل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضاً التغيرات اللامحة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. المنتج مخصص لمستخدم واحد. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه، فسوف تنتهي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

עוצות לנגריבת הנגבאים

החלק בזיהירות את הנגבאים/נרבינום במעלה הרgel מלמטה כלפי מעלה, אל תמשוך אותם מהקצתה העליון. חשוב למנוע גרים נזק מותקשייטים או ציפורניים ארוכות.

חוות דעתו

בשל תקנות החוק של האיחוד האירופי, מטפלים ומשתמשים מחובבים לדוח לא דיחוי על כל אירוע חריג הכרוך בשימוש במוצר רפואי. חוות הדעת היא ליצן גם לרשות המוקומית המתאימה (בגדרניה 8fArm, המכון הפדרלי לתרופה ותרופות רפואיים).

הרכב חומרים**gilofa®**

עם כותנה
50% כותנה
40% פוליאミיד
10% אלסטן

gilofa®**עם אלורה**

כולל טיפוח העור מיקוּרוֹ קפסולות מיוחדות
משחררות את תמציות האלורה לעור בצורה
מבודקה; עמיד במלל - 100 מחזורי טיפול.

42% פוליאimid (מייקרופיבר עם אלורה)
35% פוליאimid
15% כותנה
8% אלסטן

gilofa® fine

52% פוליאimid (עם שמן שקדים ושמן ורד הבר)
48% אלסטן

gilofa® style

52% פוליאimid (מייקרופיבר)
29% אלסטן
19% פוליאimid

ה מוצר מיועד לשימוש מיידי. אם ממליצים לכבס אותו לפני השימוש הראשון. לאחר מכן, בכל יום יש לכבס ביד או בתוכנית שטיפה עדינה במכונתכביסה. יש לכבס את הנגבאים בנפרד עם חומר כביסה עדי (Ofa Clean) ללא מרך (למשל, חומר ניקוי מיוחד של Ofa Clean) בטמפרטורה של 40 מעלות ולשוטף היטב. ניתן לסחוט את הנגבאים בתוכנית סחיטה עדינה, אין לסחוט אותם ידנית. יש ליבש את הנגבאים באוויר הפתוח או בתוכנית יבוש עדין במייבש הכביסה. אין להניע אותם על תנור חימום או לחשוף אותם לאור שמש ישיר. לעומת זאת, עלולים אין לנגן את הנגבאים.

כדי לשמר על יצילות הפעולה של הנגבאים, אין להשתמש בחומר ניקוי כימיים, כגון או מרכיבי כביסה. חומרים אלה פוגעים בבד הסרוג. רבב לחץ אינטנסיבי במיוחד לשומנים ולשמנים, אך יש למנוע מגע עם משחות. ככל, יש למנוע מגע בין נגבאים עם פס' היוקק העשוים סיליקון לבין חומרם ממסים, משחות, סבון מעשר בלחות וקרם גוף. אחרת, חזק ההדבקה של פסי היוקק עלול להיפגע לצמיחות. אחסן את הנגבאים היבשים במקום המונן מפני שמש וחום, במקומות האפשר באזאה המוקנית.

יש לכבס הפור ואין להשתמש במרקם כביסתו!

- | | |
|---|---|
|    | תוכניות כביסה עדינה אין להלבי יבש עדין אין לנגן לא מיועד לניקוי יבש |
|---|---|

עקרון הפעולה של גרבី לחץ

הלחץ הולך ופוחת מלמטה כלפי מעלה ומעודד את זרימת הדם וטומך במערכת הוורידים.

התווית/שימוש מיוחד

תוחמת כבוזות ועיפות ברנליים. למניעת בעיות ורידים ברגליים ופקחת ורידים عمוקה ("תסכולת מעולה. החימם הופכים בריאות יותר. לא משנה אם אתה אהוב לטיל, לעשות ספורט או סתם בחזרה עלשوت לעצמך מההו טוב בחיי היוםים.

המטפל

התווית נגד

- מחלת עורקים היקפית מתקדמת
- אי-ספקת לב שאינה מואזנת
- דלקת וידים זהובית
- פקקת נפחים מכחילה

סיכון הדורשים תשומת לב מיוחדת:

- נניי עור בולטים עם הפרשות
- רגישות לחומרים של גרבី לחץ
- הפרעות חזיהות קשות בנפיהם
- מחלת עצביות היקפית מתקדמת (למשל סוכתת)
- דלקת מפרקים שגרונית ראשונית

במקרה של ספק יש לפנות לרופא המטפל.

סיכון ותופעות לוואי

עור רגישי עלול לנגרום לנגרד ולבעו עור מתחת לגבוי לחץ, לכן, מומלץ לבצע טיפול מתאים בעור. בתפתחות התסכולים להלן, הסר את הגירבים באופן מיידי וושוח על המשך הטיפול עם הרופא המטפל גונן כחול או לבן של הבבונות, נמלול או חוסר תחושה, כאב שהולך ומתגבר, קוצר נשימה והזעת יתר, הנבלות מחמירות על התנועה.

השלכה לאשפּה

עם סיום חי' השירות של המוצר, יש להשליך אותו בהתאם לתקנות המקומיות.

משתמש יקר,

గרביים לשימוש חיוני ולנסועות של Gilofa מבוססים על ניסיון של עשרה שנים בפיתוח גרבី לחץ רפואיים. בחרת ב מוצר בריאות איכות. לצד היבט הרפואי, אנו-ב-Gilofa שמים דגש מיוחד על נוחות הגירבה. גרבី Gilofa נעימים למגע, נוחים ונראים מעולה. החיים הופכים בריאות יותר. לא משנה אם אתה אהוב לטיל, לעשות ספורט או סתם בחזרה עלשות לעצמך מההו טוב בחיי היוםים.

הוראות חשובות

המסירה של הגירבים חייבת להתבצע על-ידי מומחים שהוכשרו לכך מבחינה רפואי. החנות המתמחה בכך תוכל גם ליעץ לך כיצד לברוב את הגירבים שלך בצוואר נכונה. אם אתה מרגיש כאבים חזקים ברגליים, או גירוי בעור בזמן שאתה גורב אותם, התיעץ מיד עם רופא. ניתן למנוע תגבות בעור המפתחת באוזור של פסי היצמדה על-ידי החזזת פסי היצמדה מספר פעמים במהלך היום. אם לבישת הגירבים נדרש תור שילוב עם עדרים רפואיים אחרים, יש לשחרף בוך את הרופא המטפל. אנו בודקים את המוצרים שלנו במסגרת אבטחת האיכות המאפיינה שלם. אם עדין יש לך תלונות, נא פנה לחנות שבה רכשת את המוצר. אל תתקן נזקים בעצמך, אלא החזר את הגירבים לחנות שבה הם נרכשו. גושי סיבים שעולים להיווצר עקב חיקוקם פרטיא לבוש אחרים אינם פוגמים באיכות הגירבים.

אחריות

חי המדף של גרבី לחץ מוגבלים ל-5.5 שנים באחסון נכון. בשימוש קבוע ובטיפול נכון אנו מבטיחים אפקט לחיצה מיטבי במשך 6 חודשים. לאחר תקופה זו המוצרים אינם מקסימים עוד במסגרת האחריות. פגמים שנייתן ליחסים אוטם לבלאי רגלי או לשימוש לא נכון נכללים במסגרת האחריות. שימוש לא נכון כולל גם שינויים במוצר לאחר הרכשה, שלא בוצעו על-ידי היצרן. המוצר מועד לשימוש אחד בלבד. אם המוצר מועבר לאדם אחר לשימוש חוזר, האחריות על המוצר תפוג.

ძვირფასო მომხმარებელო,
Gilofa სამგბავრო და კომპრესიული
ნინდების შექმნისას იყენებს სამედიცინო
კომპრესიული ნინდების შემუშავების
ათწლეულების გამოცდილებას. თქვენ
აირჩიეთ მაღალი ხარისხის პრიდექტი
ჰანმრთელობისთვის. გარდა სამედიცინო
ასპექტისა, Gilofa დიდ ყურადღებას აქცევს
ნაწარმის ჩაცმის კომფორტულობას.
Gilofa ნინდები სასიამოვნოა შეხებისას,
მოხერხებულად ერგება ფეხს და ლამაზად
გამოიყურება. თქვენი ცხოვრება უფრო
ჰანსალი გახდება. იქნება ეს მოგზაურობა,
სპორტული აქტივობა, თუ უბრალოდ
გადაწყვეტი ყოველდღიური ცხოვრების
გაუქონბესებას.

△ მინიჭნელოვანი მითითებები

ნინდები უნდა შეიძინოთ სპეციალური
სამედიცინო განათლების მქონე
გამყიდველისგან. გამყიდველი ასევე
მოგცემთ რჩევებს ნინდების სწორად
ჩაცმის შესახებ. როდესაც ნინდები გაცვიათ,
თუ ფეხის მწვავე ტკივილი იგრძენით
ან კანი გაგიღიზიანდათ, დაუყოვნებლივ
მიმართეთ ექიმს. რეზინების შეხების
ადგილებზე კანი რომ არ გაგიღიზიანდეთ,
შეგიძლიათ რეზინი იმდავ გადაანაცვლოთ
დღის განმავლობაში რამდენჯერმე. თუ
ნინდების გამოყენება სხვა სამედიცინო
საშუალებებთან ერთად გაზრდა, გაიარეთ
კონსულტაცია მკურნალ ექიმთან. ჩვენი
პროდუქტები მონმდებარებული იყო მომართებული
ხარისის უბრაზელყოფის ფარგლებში.
თუმცა, თუ მიუხედავად ამისა, რაიმე
პრეტენზია გაქვთ, მიმართეთ თქვენს
სპეციალიზტებულ მაღაზიას. დეფექტის
აღმოჩენის შემთხვევაში, ნუ დაინტებთ
თავად შეკეთებას, დააბრუნეთ ნინდები
მაღაზიაში, სადაც შეიძინეთ. ნაბურცები,
რომლებიც შეიძლება ნარმოიქმნას სხვა
ტანსაცმელთან ხახუნის გამო, ნინდების
ხარისხშე გავლენას არ მოახდენს.

გარანტია

მართებული წესით შენახვის შემთხვევაში,
კომპრესიული ნინდების ვარგისიანობის
ვადა 5,5 წელია. რეგულარული მოხმარებისა
და სათანადო მოვლის პირობებში ჩვენ
ვიძლევით ოპტიმალური კომპრესიული
ეფექტის გარანტიას ნ თვის განმავლობაში.
ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ პროდუქტები
გარანტიის მოქმედება დასრულდება.
ზოგადად, გარანტია არ ვრცელდება
ცვეთით ან დაუდევარი გამოიყენებით
გამოწვეულ დეფექტებზე. დაუდევარ
გამოყენებად ასევე ჩაითვლება პროდუქტში
რაიმე ცვლილებების შეტანა ვიზნეს
მიერ, გარდა მნარმოებლისა. პროდუქტი
განკუთვნილია ერთი მომხმარებლის მიერ

გამოყენებისთვის. თუ ის გადაეცემა სხვა
პიროვნებას მეორადი გამოყენებისთვის,
მნარმოებლის პასუხისმგებლობა
ამონტურულია.

კომპრესიული ნინდების მოქმედების პრინციპი

ქვემოდან ზემოთ წნევის განაწილების
შემცირების წყალობით, იზრდება სისხლის
ცირკულაციის სიჩქარე და ხდება ვენობრი
სისტემის მუშაობის შემსუბუქება.

ჩვენებები/დანიშნულება

სიმძიმისა და დაღლილობის
განცდა ფეხებში. ფეხებზე ვენის
დაავადებების და ჰანმრთელი ვენების
ადამიანების „მოგზაურის ტრიმბოზის“
პრიფილაქტიკისთვის. თუ არ ხართ
დარწმუნებული, გაქვთ თუ არა ვენების
დაავადება, რომელიც საჭიროებს
მკურნალობას, მიმართეთ მკურნალ ექიმს.

უკარვენება

- შორისნასული პერიფერიული არტერიის
ოკლუზი დაზიანება
- დკომპენსირებული გულის უკმარისობა
- სეპტიკი ფლებიტი
- ლურჯი მტკიცნეული ფლებიტი

გასათვალისწინებელი რისკები:

- გამოხატული სველი დერმატოზი
- კომპრესიული ნინდების ქსოვილის
აუტანობა
- კიდურების მგრძნობელობის მწვავე
დარღვევა
- პროგრესირებადი პერიფერიული
ნეიროპათია (მაგ. შაქრიანი დიაბეტი)
- პირველადი ქრონიკული პოლიართორიტი

თუ არ ხართ დარწმუნებული, მიმართეთ
ექიმს.

△ რისკები და გვერდითი მოვლენები

მგრძნობიარე კანზე გამოყენებისას
კომპრესიული ნინდების ქვეშ
შესაძლებელია კანის გაღიზანება ან
ქავილი. ამიტომ რეკომენდებულია კანის
ადეკვატური მოვლა. შემდეგი სიმპტომების
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გაიხადეთ
ნინდები და შემდეგ გამოყენებამდე
მიმართეთ ექიმს: ფეხის თითების
გალურჯება ან გაფითრება, დიკომფორტის
განცდა ან გაბუჟება, მზარდი ტკივილი,
ქოშინი და ოფლიანობა, მოძრაობის მწვავე
შეზღუდვა.

გადაგდება

გამოყენების პერიოდის დასრულების
შემდეგ პროდუქტის უტილიზაცია უნდა
მოხდეს ადგილობრივი განაწესის
მიხედვით.

მოხსენების ვალდებულება

ევროკავშირში აწებელი სამართლებრივი რეგულაციებიდან გამომდინარე, პაციენტები და მომსმარებლები ვალდებული არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინონ ნებისმიერი სერიოზული ინციდენტი სამედიცინო მოწყობილობის გამოყენებისას როგორც მნარმოებელს, ასევე პასუხისმგებელ ეროვნულ ორგანიზაციაში (გერმანიაში BfArM, ნაკომიკებისა და სამედიცინო მოწყობილობების ფედერალური ინსტიტუტი).

მოვლის ინსტრუქცია

პროდუქტი შესაფერისია დაუყოვნებელი გამოყენებისთვის. გირჩევთ, გარეცხოთ პირველად ჩაცმამდე. ამის შემდეგ, გარეცხეთ ყოველდღე, ხელით ან სარეცხ მანქანაში დელიკატური რეცხვის რეჟიმზე. წინდები გარეცხეთ ცალკე, რბილი სარეცხი საშუალებით, არ გამოიყენოთ ქსოვილის კონდიციონერი (მაგ. „სპეციალური საშუალება Ofa Clean“) ტემპერატურა არაუმეტეს 40°C და კარგად გავალეთ. შესაძლებელია ნაზად განურვა, მაგრამ არა განურვა გადაგრეხით. გააშრეთ წინდები ჰაერზე ან გამაშრობებით ნაზ ციკლზე, მაგრამ არ დადოთ გამათბობელზე ან მზის პირდაპირ სხივებზე. გაუთოვა არ შეიძლება.

წინდების ეფექტურობის შესანარჩუნებლად, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ქიმიური საწმენდი საშუალებები, ბენზინი ან ქსოვილის დამარბილებელი საშუალებები. ეს საშუალებები აზიანებს ნაქსოვ მასალას. კომპრესიული წინდები ძირითადად არ არის მეტრიზმინიარე ცხიმებისა და ზეთების მიმართ, მაგრამ არ დაუშვათ მალამოებთან შეხება. სილიკონით დაფარული რეზინების მქონე წინდებს, როგორც წესი, არ უნდა შეეხოს გამხსნელები, მალამოები, დამატენიანებელი სარეცხი ლოსიონები და ტანის კრემები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რეზინების მიკრობის უნარი შეიძლება სამუდამოდ დაიკარგოს. შეინახეთ წინდები ორიგინალურ შეფუთვაში, თუ შესაძლებელია, მშრალ, მზისა და სიცხისგან დაცულ ადგილას.

გარეცხეთ გადმობრუნებული და

არ გამოიყენოთ ქსოვილის

კონდიციონერი!

ჩაცმის რჩევები

წინდა/კოლგოტი ამოიცვით ფეხზე ფრთხილად, ქვემოდან ზემოთ თანდათან ამოსმით, არ ამოქაჩოთ ზედა ბოლოოთ. იფრთხილეთ, არ დააზიანოთ ქსოვილი სამკაულებითა და გრძელი ფრჩხილებით.

ქსოვილის შემადგენლობა

gilofa®

ბამბით

50 % ბამბა

40 % პოლიამიდი

10 % ელასტინი

gilofa®

ალოე ვერათი

ჩუღები კანის მოვლით. სპეციალური მიკროკაფსულების საშუალებით კანზე გადაის ალოე ვერას ექსტრატის გარკვეული რაოდენობა, თვისება შენარჩუნდება 100 გარეცხვა. 42 % პოლიამიდი (მიკრობოჭკო ალოე ვერათი)

35 % პოლიამიდი

15 % ბამბა

8 % ელასტინი

gilofa® fine

52 % პოლიამიდი (ნუშის ზეთით და ველური ვარდის ზეთით)

48 % ელასტინი

gilofa® style

52 % პოლიამილი (მიკრობოჭკო)

29 % ელასტინი

19 % პოლიამიდი




დელიკატური რეცხვა



არ გამოიყენოთ მათეთრებელი



ნაზი გაშრობა

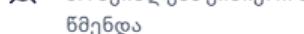

გაუთოვა არ შეიძლება



არ შეიძლება ქიმიური მშრალი ნმენდა

ユーザーの皆様、

Gilofaサポートおよびトラベルストッキングは、医療用圧縮ストッキング開発に長年携わってきた当社の経験から生まれました。本製品は高品質の健康管理用品です。Gilofaは、医療的側面だけではなく、とりわけ履き心地にこだわって開発されました。肌触りがよく、快適で、見た目にも美しいGilofaストッキングは、より健康的な生活を皆様にお届けします。旅行でも、スポーツでも、あるいは単に快適な日常を願う方のためのものです。

△ 重要な説明

ストッキングは医学的な訓練を受けた専門家が提供する必要があります。専門の販売員が、ストッキングを正しく装着する方法についてもアドバイスします。着用中に急性下肢痛やお肌の異変を感じた場合は、直ちに医師の診察を受けてください。粘着テープの領域での肌あれば粘着テープを1日のうちに数回ずらすことで防ぐことができます。その他の医療用品と組み合わせてストッキングを使用したい場合は、担当の医師に相談してください。包括的な品質保証の一環として、製品テストを行っています。さらに質問がある場合は専門の販売店にお問い合わせください。損傷した製品は修理せず、ストッキングを購入した小売店に返品してください。他の衣服との摩擦によって形成された小さな毛玉はストッキングの品質を低下させることはできません。

保証

正しく保管されている場合、圧縮ストッキングの耐用年数は5.5年です。定期的に使用し、正しいお手入れ方法でお使いいただく場合、最適な加圧効果が6ヶ月間保証されます。この期間を過ぎると、製品は保証の対象になりません。通常の摩耗または不適切な使用にまでさかのぼることができる欠陥は保証の対象外です。不適切な使用にはメーカーが製品に加えなかったその後の変更も含まれます。本製品は、お一人の使用者を想定して作られています。再使用するために他人に譲渡された場合、メーカーの製造物責任は終了します。

圧縮ストッキングの有効原理

ストッキングの圧迫圧を下から上へ徐々に緩めていく加工により、血行を促進し、静脈系をサポートします。

適応症/使用目的

脚部のだるさや疲労感。健康な静脈をもつ人の静脈性の脚の痛みや旅行時の血栓症の予防。治療が必要な静脈疾患があるかどうか分からない場合は、医師にご相談ください。

禁忌

- 進行性末梢動脈疾患
- 慢性心不全
- 敗血症性静脈炎
- 有痛性青股腫

考慮すべきリスク:

- 著しい滲出性皮膚病
- 圧縮ストッキング素材に対する不耐性
- 手足の重度の感覚障害
- 進行性末梢神経障害(例:糖尿病)
- 慢性多発性関節炎

疑問がある場合は、医師にご相談ください。

△ リスクおよび副作用

敏感肌は圧縮ストッキングの下でかゆみや皮膚の問題を引き起こす可能性があります。したがって、適切なスキンケアが推奨されます。次のような症状が出た場合はすぐにストッキングを脱いで、使用を続けるかどうか医師にご相談ください: つま先が青または白く変色する、知覚異常としびれ、痛みの増加、息切れや発汗、急性の運動障害。

廃棄

耐用年数が切れた場合は地域の規制に従って廃棄してください。

報告要件

EUでの法令に基づき、患者と使用者には医療製品使用時の重大なすべてのインシデントをメーカーおよび国の管轄当局（ドイツではBfArM（ドイツ連邦医薬品医療機器庁））に速やかに報告する義務があります。

お手入れ方法

この製品はすぐに使用するのに適しています。初めて着用する前に洗うことをお勧めします。その後、手洗いまたは洗濯機のデリケートモードで毎日洗濯してください。柔軟剤を含まない中性洗剤（例：「Ofa Clean専用洗剤」）で最大40°Cでストッキングを個別に洗い、よくすすいでください。ストッキングは低速での脱水はできますが、絞らないでください。ストッキングは自然乾燥させるか、乾燥機のデリケートモードを使用して乾燥させます。ヒーターや直射日光の当たる場所にはストッキングを置かないでください。ストッキングにアイロンをかけないでください。

ストッキングの効果を維持するために化学洗浄剤、ベンジン、柔軟仕上げ剤は使用しないでください。これらの物質はニット生地を傷めます。圧縮ストッキングは油脂の影響をほとんど受けませんが、軟膏と接触しないようにしてください。シリコーンでコーティングされた粘着テープを使用したストッキングは、溶剤、軟膏、保湿ローション、ボディクリームと接触しないようにしてください。接触すると、粘着テープの粘着力が永久に損なわれる可能性があります。ストッキングは乾いた状態で保管し、可能であればご購入時のパッケージで日光や熱から保護してください。

裏返して洗ってください

柔軟剤は使用しないでください！

-  デリケートモード
-  漂白しないでください
-  やさしく乾かしてください
-  アイロンがけはしないでください
-  ドライクリーニングはできません

着用時のコツ

ストッキング/パンティストッキングを脚の下から慎重に引き上げます。その際、ストッキングの先端を持って引っ張り上げないようにしてください。装飾品や長い爪でストッキングを傷めないようにしてください。

材料組成

gilofa®

コットン入り

コットン50 %
ナイロン40 %
ポリウレタン10 %

gilofa®

アロエベラ入り

スキンケアを含む。特殊なマイクロカプセルがアロエベラエキスを適切に肌に浸透させます。100回以上洗濯可能。
42% ポリアミド（アロエベラを含むマイクロファイバー）
ナイロン35 %
コットン15 %
ポリウレタン8 %

gilofa® fine

ナイロン（アーモンドオイルおよびローズオイル配合）52 %
ポリウレタン48 %

gilofa® style

ナイロン（マイクロファイバー）52 %
ポリウレタン29 %
ナイロン19 %

親愛的用戶：

Gilofa 日用休閒和靜脈曲張襪基於數十年醫療壓縮襪開發經驗開發而成。除了醫療功能方面，我們的 Gilofa 還格外注重穿戴舒適性。Gilofa 長襪質感優質，舒適且美觀。讓人們的生活更加健康。無論是旅途、運動還是日常美觀起見而穿戴，都非常合適。

⚠️ 重要提示

壓力襪必須經由受過醫學相關培訓之專業人員出售。您的專業銷售人員也為您提供諮詢，幫助您如何正確穿著長襪。穿著時腿部如有疼痛感或出現皮膚刺激狀況，請立即就醫診治。可在穿著過程中多次輕微移動黏性帶位置，避免該部位出現皮膚刺激狀況。若要與其他醫療輔具一同穿戴，請先與您的主治醫師討論。我們依據全面的品質保證規定檢測此款產品。如您有任何投訴意見，請與您的專業銷售人員聯絡。產品出現破損時請勿自行修補，請將壓力襪送回至購買時所聯絡的專業銷售人員。經與其他衣物摩擦而出現的毛毬，並不會降低壓力襪的品質。

保固

只要保存適當，壓力襪可保存 5.5 年。透過定期使用和適當的保養，我們可以保證 6 個月內具有最佳壓力效果。超出此期限後，產品即不在保固範圍內。針對由於正常磨損或使用不正確而導致的缺陷，一般不包含在保固範圍內。使用不正確也指，後期未經過製造公司同意擅自更改產品特性。該產品僅適用於一位用戶。如將本產品交由其他用戶使用，則製造商不對此產品承擔任何責任。

壓力襪作用原理

壓力分佈從下往上遞減，能促進血液循環，支持靜脈系統。

適應症/應用領域

腿部感到沉重和疲倦。用於預防具有健康靜脈的人出現靜脈腿問題和形成深靜脈血栓。如果您對是否患有需要治療的靜脈疾病有任何疑問，請諮詢您的醫生。

禁忌症

- 晚期動脈末梢阻塞疾病
- 失償心臟衰竭
- 腫毒性靜脈炎
- 疼痛性骨青腫

需要注意的風險：

- 明顯潮濕的皮膚病
- 不適應壓力襪材料
- 四肢出現嚴重的感知功能故障
- 晚期神經末梢疾病（比如糖尿病）
- 原發性類風濕關節炎

如有疑問，請諮詢您的醫生。

⚠️ 風險和副作用

皮膚敏感的用戶穿著壓力襪時可能會出現瘙癢和皮膚症狀。因此建議先進行適當皮膚護理。如出現以下症狀，請立即脫下壓力襪，繼續使用前請諮詢醫生：腳趾發紫或蒼白、感覺異常或麻木、疼痛、呼吸短促或出汗、急性活動機能不全。

廢棄處置

達到使用期限後，請依據當地法律條例廢棄處置本產品。

告知義務

根據歐盟的法律規定，患者和用戶有義務立即向製造商和國家主管部門（德國的機構為聯邦藥物和醫療器械管理局（BfArM））。報告使用醫療設備過程中的任何嚴重事故。

保養提示

產品即拆即用。建議第一次穿著前請先清洗。之後請每日手洗，或使用洗衣機的柔洗程序洗滌。使用不含衣物柔軟精的溫和洗滌劑（比如 Ofa Clean 專用洗滌劑）在不超過 40°C 的水溫中洗滌壓力襪並沖洗乾淨。可溫和烘乾壓力襪，請不要擰乾。將長襪晾在陰涼通風處或在烘乾機的溫和程序中烘乾，請不要將壓力襪放在加熱器上或直接曝曬於陽光下。不得熨燙壓力襪。

為了保證壓力襪的產品功效，請不要使用任何化學洗滌劑、汽油或衣物柔軟精。這些物質會對壓力襪的織物面料造成破壞。壓力襪一般耐油耐脂，但請不要接觸藥膏。壓力襪的黏性帶含有機硅塗料，一般不得接觸溶劑、藥膏、保溼清洗液和身體乳。否則，膠粘帶的粘合力可能會永久受損。請將壓力襪存放於乾燥處，避免陽光直射和高溫，如有可能請將壓力襪放入原裝包裝中。

請從內往外清洗並且 且勿使用柔軟精！

-  柔洗程序
-  請勿漂白
-  溫和烘乾
-  請勿熨燙
-  請勿使用化學清潔劑

穿著提示

小心地將長襪/襪褲從腿部下部往上拉，不要拉到收口處。請避免用首飾或長指甲將其刮壞。

材質成份

gilofa®

含棉

50% 棉
40% 聚醯胺
10% 彈性纖維

gilofa®

含蘆薈

包括皮膚護理。特殊的微膠囊以受控方式將蘆薈提取物釋放到皮膚上。可承受超過 100 次清洗。
42% 聚酰胺（含芦荟的超细纤维）
35% 聚醯胺
15% 棉
8% 彈性纖維

gilofa® fine

52% 聚醯胺（含杏仁油和野玫瑰精油）
48% 彈性纖維

gilofa® style

52% 聚醯胺（超細纖維）
29% 彈性纖維
19% 聚醯胺

사용자 여러분, 안녕하세요.

Gilofa 건강 및 여행용 스타킹은 수십 년간 의료용 압박 스타킹을 제조해온 당사의 노하우를 기반으로 만들어졌습니다. 당사의 고급 건강 제품을 선택해주셔서 감사합니다. Gilofa는 의료적 효과뿐 아니라 특히 편안한 착용감을 중시하여 제작되었습니다. Gilofa 스타킹은 촉감이 좋고 편안하며, 보기도 좋습니다. 편안하고 멋진 모습으로 건강까지 관리하세요. 여행할 때도, 운동할 때도, 혹은 일상생활에서 편안하면서도 멋진 모습을 연출하고 싶을 때에도 안성맞춤입니다.

주의 사항

본 제품은 의학 교육을 받은 전문 인력이 제공해야 합니다. 스타킹의 올바른 착용법은 판매자가 설명해 드립니다. 착용 시 갑자기 다리에 통증이 느껴지거나 피부 자극이 발생하는 경우 즉시 의사에게 진료를 받으세요. 일과 중 접착 테이프의 위치를 조금씩 이동하면 접착 테이프와 닿는 부분의 피부 반응을 예방할 수 있습니다. 본 제품을 기타 의료 보조 기구와 함께 착용해야 하는 경우, 담당 의사와 상담하세요. 당사는 종합적인 품질 보증의 범위 내에서 당사 제품을 점검합니다. 그럼에도 불구하고 불만 사항이 있는 경우, 담당 판매자에게 문의하시기 바랍니다. 손상을 직접 수리하지 말고, 스타킹을 지참하여 구매한 판매점을 방문하세요. 다른 의류와의 마찰로 인해 발생한 보풀은 스타킹의 품질에 영향을 주지 않습니다.

보증

압박스타킹의 유통기한은 적절한 보관 시 5.5년입니다. 정기적인 사용 및 지침에 따른 관리 시 6개월 간 최적의 압박 효과를 보장합니다. 이 기간이 경과한 후에는 제품이 보증 대상에서 제외됩니다. 일반적인 마모와 부적절한 사용으로 인한 결함은 보증 대상에서 제외됩니다. 제조사가 수행하지 않은 사후 제품 변경 또한 부적절한 사용에 해당합니다. 본 제품은 1인용입니다. 재사용을 위해 다른 사람에게 양도하는 경우, 제품에 대한 제조사 책임이 소멸됩니다.

압박스타킹의 원리

아래쪽에서 위쪽으로 갈수록 압력이 감소하는 압력 차이로 인해 혈액순환이 증진되고 정맥계의 작용을 뒷받침합니다.

정후/용도

다리가 무거운 느낌/피로감 정맥 질환이 없는 건강한 사람의 하지정맥 문제 및 심부정맥혈전증 예방용. 본인에게 치료가 필요한 정맥 질환이 있는지 잘 모르는 경우, 주치의에게 문의하세요.

금기 사항

- 종종 말초동맥질환
- 비대상성 심장마비
- 패혈성정맥염
- 유통성청고종

유의해야 할 위험:

- 진물이 흐르는 돌출성 피부염
- 압박스타킹 소재에 대한 알레르기 증상
- 손발의 심한 감각 장애
- 종종 말초신경증(예: 진성 당뇨병)
- 원발성 만성 다발성 관절염

궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우, 의사에게 문의하세요.

위험 및 부작용

피부가 민감한 경우, 압박스타킹 착용 시 가려움증과 피부 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 피부 관리가 필요합니다. 다음 증상이 있는 경우 즉시 스타킹을 벗고, 의사와 상담한 후 다시 착용하세요. 발가락이 푸르스름하거나 하얗게 변하는 경우, 불편감 및 무감각, 심해지는 통증, 숨가쁨 및 진땀, 급성 동작 곤란.

폐기

사용 기한이 만료된 제품은 현지 규정에 따라 폐기하시기 바랍니다.

신고 의무

유럽연합 내 법적 규정에 의거하여 환자와 사용자는 의료 제품 사용 시 발생한 심각한 사건을 제조사와 관련 당국에(독일: BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte(연방의약품안전처)) 즉시 신고할 의무가 있습니다.

관리 방법

본 제품은 즉시 사용하는 것이 좋습니다. 최초 착용 전에 제품을 세탁할 것을 권장합니다. 이후에는 매일 손세탁하거나 세탁기의 섬세 세탁 코스로 세탁하세요. 스타킹을 다른 세탁물과 별도로 순한 세제를 사용하여 섬유유연제 없이(예: Ofa Clean 특수세제) 40°C 이하에서 세탁하고 깨끗하게 헹구세요. 약한 탈수는 허용됩니다. 단, 스타킹을 비틀어 짜지 마세요. 스타킹은 자연 건조하거나 건조기의 섬세 건조 코스로 건조하세요. 단, 난방용 라디에이터 위에 올리거나 직사광선에 건조하면 안 됩니다. 스타킹을 절대 다리지 마세요.

스타킹의 효과를 유지하려면 화학 세제, 벤젠 또는 섬유유연제는 사용하지 마세요. 이러한 제제는 스타킹의 편직을 손상시킵니다. 압박스타킹은 그리스와 오일에 민감하지 않으나, 연고와 접촉해서는 안 됩니다. 실리콘 코팅된 밴드가 있는 스타킹은 용제, 연고 및 보습 바디워시와 바디로션과 접촉해서는 안 됩니다. 이러한 물질에 장기적으로 노출되면 밴드의 접착력이 저하될 수 있습니다. 스타킹은 직사광선과 열기를 피해 가급적 원래의 포장에 넣어 건조한 곳에 보관하세요.

뒤집어 세탁

섬유유연제 사용 금지!

-  섬세 세탁
-  표백 금지
-  섬세하게 건조
-  다림질 금지
-  화학 세척 금지

착용 팁

스타킹/팬티스타킹을 다리 아래쪽에서부터 위쪽으로 조심스럽게 말아올려 착용하세요. 스타킹/팬티스타킹의 끝부분을 잡고 위로 당기지 마세요. 액세서리나 긴 손톱으로 인한 손상을 방지하세요.

소재 혼합율

gilofa®

면 함유

50% 면
40% 폴리아미드
10% 엘라스테인

gilofa®

알로에베라 함유

스킨케어 성분 포함. 100회 이상 세탁할 때까지 특수 마이크로캡슐이 피부에 일정량의 알로에베라 추출물을 전달합니다.
42% 폴리아미드(초극세사, 알로에베라 함유)
35% 폴리아미드
15% 면
8% 엘라스테인

gilofa® fine

52% 폴리아미드(아몬드 오일 및 로즈힙 오일 함유)
48% 엘라스테인

gilofa® style

52% 폴리아미드(초극세사)
29% 엘라스테인
19% 폴리아미드

Хүндэт Хэрэглэгч минь,

Gilofa дэмжигч болон аяллын урт оймс нь эмнэлгийн баруу оймсны хөгжлийн хэдэн арван жилийн туршлагын үр бүтээл байгаа юм. Та эрүүл мэндийн өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг сонгохоор шийдлээ. Бид Gilofa-н хувьд эмчилгээнээс гадна өмсөхөд тав тухтай байлгах тал дээр онцгой анхаарал хандуулдаг. Таатай мэдрэмж бүхий Gilofa урт оймс нь өмсөхөд эвтэйхэн, үзэмжтэй харагддаг. Эрүүл амьдрахад хялбар боллоо. Аяллаар явахад, спортоор хичээллэхэд эсвэл зүгээр өдөр тутмын амьдралдаа сайн хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ өөрөө хийх гээд аль ч тохиолдолд.

⚠ Чухал мэдээлэл

Үг урт оймсыг анагаах ухаанаар бэлтгэгдсэн мэргэжлийн борлуулагчаас авах ёстай. Борлуулагч тань урт оймсоо хэрхэн зөв өмсөхийг танд мөн зөвлөх болно. Энэ урт оймсыг хэрэглэхэд хөл өвдөх юм уу арьс цочроо тохиолдол гарвал эмчээсээ нэн даруй зөвлөгөө авна уу. Та өдөрт хэд хэдэн удаа оймсны дээд талаас бага багаар татааж биедээ эвтэйхэн болгож өмссөнөөр арьс загатнах, харшлахаас сэргийлэх боломжтой. Триког бусад төрлийн эмчилгээний төхөөрөмжтэй хослуулан ашиглах талаар эмчтэйгээ холбогдож лавлана уу. Бид бүтээгдэхүүнээ чанарын цогц баталгаажуулалтын хүрээнд шалгадаг. Гэсн хэдий ч танд санал гомдол байвал мэргэжлийн борлуулагчтайгаа холбогдоорой. Өөрөө засвар хийх гэж битгий оролдоорой. Урт оймсыг танд худалдсан мэргэжлийн борлуулагчид буцааж өгөөрэй. Бусад хувцастай үрэлдсэнээс үүсэх материалын аливаа цооролт нь урт оймсны чанарыг алдагдуулахгүй.

Баталгаа

Судас бүдүүрлийн эсрэг триког зөв хадгалсан нөхцөлд 5,5 жил ашиглах боломжтой. Байнгын ашиглалт болон зүй зохистой арчилгаагаар б сар тохирох хэмжээнд баруу байна гэдгийг бид баталж байна. Энэ хугацаанаас цааш бүтээгдэхүүн баталгаат хугацаанаас хасагдана. Гэмтэл нь хэвийн өмссөн тохиолдолд тооцогдоно, урах юм уу зохисгүй хэрэглэвэл нь баталгаанд орохгүй. Зохисгүй хэрэглээ гэдэгт мөн үйлдвэрлэгчийн зүгээс хийгээгүй бүтээгдэхүүний аливаа нэмэлт өөрчлөлт тооцогдоно. Бүтээгдэхүүн нь зөвхөн нэг хүний хэрэглээнд зориулагдсан болно.

Хэрэв бусад хүмүүст дахин ашиглуулахаар шилжүүлсэн бол үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүний хариуцлага хүчин төгөлдөр бус болно.

Баруу урт оймсны үр дүнтэй зарчим

Дараах байдал нь доороосоо дээшээ буурдаг бөгөөд цусны эргэлтийг сайжруулж, вений тогтолцоог дэмждэг.

Зааварчилгаа / Зориулалт

Хөл хүнд оргих, ядрах мэдрэмж. Удаан хугацаагаар аялснаас болж эрүүл вентэй хүмүүст тохиолдох вений өвчлөл болон гүн судлын тромбозийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх нөлөөтэй. Эмчилгээ шаардагдах вений өвчлөл байгаа эсэх талаар эргэлзэж байгаа бол эмчтэйгээ зөвлөөрэй.

Эсрэг заалтууд

- хүндэрсэн захын arterийн бөглөрөл өвчин.
 - зүрхний архаг дутагдал
 - судасны үрэвсэл
 - Өвдөлт бүхий хөх хаван
- Эрсдэлтэй тохиолдлууд:
- илэрхий нойтон дерматоз
 - баруу урт оймсны материалаас харшлах
 - үе мөчний мэдрэхүйн ноцтой эмгэгүүд
 - захын мэдрэлийн архаг невропати (жишээ нь: чихрийн шижин)
 - эхэн үеийн архаг полиартрит

Хэрэв танд ямар нэг асуулт байвал эмчээсээ асууна уу.

⚠ Эрсдэл ба гаж нөлөө

Эмзэг арьстай хүмүүст баригч урт оймсыг ашиглах үед загатнах, арьс цочроо шинж илрэч болзошгүй. Тиймээс арьсаа сайтар арчлахыг зөвлж байна. Хэрэв танд дараах шинж тэмдгүүд илрвэл урт оймсыг даруй тайлж үргэлжлүүлж ашиглахаасаа өмнө эмчтэйгээ зөвлөөрэй: хөлийн хуруу хөхрөх эсвэл цайрах, эвгүй мэдрэгдэх болон мэдээ алдах, өвдөлт нэмэгдэх, амьсгал давчдах болон хөлрөх, хөдөлгөөнийн цочмог хязгаарлалт.

Устгал

Ашиглах хугацаа дууссанаас хойш орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу тус бүтээгдэхүүнийг устгана уу.

Заавал мэдэгдэх

EX-н хууль тогтоомжийн дагуу, өвчтөн болон хэрэглэгч нь эмнэлгийн төхөөрөмж, хэрэгслийн ашиглалтын явц дахь аливаа ноцтой тохиолдлыг үйлдвэрлэгч болон үндэсний эрх бүхий байгууллагад (Германда BfArM) хоёуланд нь цаг алдалгүй мэдэгдэх үүрэгтэй.

Арчилгааны заавар

Бүтээгдэхүүнийг шууд ашиглаж болно. Бүтээгдэхүүнийг анх удаа хэрэглэхээс өмнө угаахыг бид зөвлөж байна. Дараа нь гараар эсвэл мэдрэмтгийн материалын горимоор өдөр бүр угаагаарай. Урт оймсыг хувцас зөвлрүүлэгч (ж нь "Ofa Тусгай цэвэрлэгээний угаалгын нунтаг") хийхгүйгээр тусад нь зөвлөн угаалгын нунтгаар хамгийн ихдээ 40°C-р угааж, сайтар зайлаарай. Урт оймсыг зөвлнөөр мушгиж болох ч битгий чанга мушгиарай. Урт оймсоо агаарт эсвэл хатаагчид зөвлөн эргэлтээр хатаагаарай. Халаагуур дээр эсвэл шууд нарны гэрэлд бүү тавиарай. Урт оймсыг индүүдэж огт болохгүй.

Урт оймсныхоо үр нөлөөтэй байдлыг хадгалах үүднээс хими цэвэрлэгээний бодис, бензин эсвэл даавуу зөвлрүүлэгч битгий ашиглаарай. Эдгээр бодисууд нь нэхмэл даавууг гэмтээдэг. Баруут оймс нь өөх тосонд нэлээд тэсвэртэй хэдий ч тосон түрхлэг хүргэхгүй байх хэрэгтэй. Силикон бүрэлттэй баригч дээд хэсэгтэй баруут оймсыг ерөнхийдөө уусгагч, тос, чийгшүүлэгч угаалгын лосьон, биеийн тосонд хүргэхгүй байх хэрэгтэй. Үгүй бол баригч дээд хэсгийн наалдамхай хэсэг байнга муудах болно. Урт оймсыг нар, халуунаас хол хуурай газар, хэрэв боломжтой бол анхны савлагаанд нь хадгалаарай.

Дотрыг нь гадагш нь гаргаж угаанаа мөн даавуу зөвлрүүлэгч битгий хэрэглээрэй!

-  Мэдрэмтгийн эсвэл зөвлөн гэсэн эргэлтээр угаанаа
-  Цайруулагч ашиглаж болохгүй
-  Зөвлөн, болгоомжтой хатаанаа
-  Индүүдэж болохгүй
-  Хуурай хими цэвэрлэгээ хийхгүй

Урт оймсыг өмсөхөд зориулсан зөвлөгөөнүүд

Урт оймс/трикогоо хөлийхөө доороос нь дээш болгоомжтой татаарай, дээд талаас нь битгий татаарай. Үнэт эдлэл эсвэл урт хумсаар гэмтээхээс зайлсхийгээрэй.

Материалын найрлага

gilofa®

даавуун

50% даавуун
40% полиамид
10% эластан

gilofa®

алоэтой

Арьсны байнгын арчилгаа. Тусгай бичил капсулууд нь 100-с олон удаагийн угаалтад алое веран охийг арьсанд хяналттайгаар хүргэж өгдөг.
42% полиамид (Алое вератай синтетик утас)
35% полиамид
15% даавуун
8% эластан

gilofa® fine

52% полиамид (бүйлс самрын тос ба зэрлэг сарнайн тостой)
48% эластан

gilofa® style

52% полиамид (бичил утас)
29% эластан
19% полиамид

Größentabelle¹

gilofa® Kniestrümpfe²

| Umfang ³ (cm) | small | medium | large | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| cC | 29 – 39 | 34 – 44 | 39 – 49 | | | |
| cB | 18 – 21 | 21,1 – 25 | 25,1 – 30 | | | |
| Schuhgröße ⁴ | I – V | I – V | I – V | | | |
| Schuhgröße ⁴ | I | II | III | IV | V | |
| EU |  | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 | 48 – 50 |

1 Größentabelle

Table of sizes

Tableau des tailles

Maattabel

Tabella delle dimensioni

Tabla de tallas

Tabela de tamanhos

Πίνακας μεγεθών

Ölçü tablosu

Tabulka velikosti

Tabela wielkości

Izmēru tabula

Suuruste tabel

Dydžių lentelė

Tabel de mărimi

Tabela velikosti

Mérettáblázat

Таблица с размери

Størrelsestabell

Storlekstabell

Kokotaulukko

Stærðatafla

Tablica veličina

Tabela veličina

Tabela veličina

Таблица размеров

Таблиця розмірів

جدول المقاسات

تаблицه مقاييس

טבלה מידות

ମାତ୍ରାବାଦୀ

サイズ表

尺碼表

사이즈표

Хэмжээний хүснэгт

2 Kniestrümpfe

Knee high stockings

Mi-bas

Kniekousen

Gambaletti

Medias cortas

Meias pelo joelho

Κάλτσες μέχρι το γόνατο

Diz altı çoraplar

Podkolenkы

Podkolanówki

Garäs zeķes

Põlvikud

Kojinės iki kelių

Ciorapi până la genunchi

Dokolenke

Térdharisnya

Чорапи до коляно

Knæstromper

Knästrumpor

Polvisukat

Hnésokkar

Dokoljenke

Dokoljenke

Dokolnice

Гольфы

Гольфи

الدوارب المرتفعة للركبة

גרב ברכ

მუხლადუ ნინდები

膝丈ストッキング

齊膝襪

니삭스

Өвдөг хүрсэн урт оймс

3 Umfangmaße (cm)

Circumference dimensions (cm)

Circonference (cm)

Omvangmaten (cm)

Circonferenza (cm)

Dimensiones de circunferencia (cm)

Perímetro (cm)

Περίμετρος (cm)

Çevre ölçüler (cm)

Obvod (cm)

Obwód (cm)

Apărțmărs (cm)

Circumferinčā (cm)

Obseg (cm)

Körmérét (cm)

Обуколка (cm)

Omfangsmål (cm)

Omkrets (cm)

Ympärysmitta (cm)

Ummál (cm)

Mjere opsega (cm)

Obim (cm)

Obim (cm)

Обхватные мерки (см)

Обхват кінцівки (см)

مدحیط الجورب (سم)

(מ"ס) היקף (מ)


გარშემონერილობა (სმ)

円周 (cm)

周長 (cm)

둘레(cm)

Тойргийн хэмжээ (см)

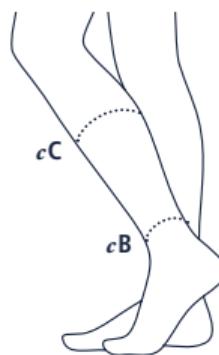

4 Schuhgröße

Shoe size

Taille de la chaussure

Schoenmaat

Numeri di scarpe

Talla de calzado

Tamanho do sapato

Μέγεθος παπουτσιού

Ayakkabı numarası

Velikost boty

Rozmiar obuwia

Apavu izmērs

Kinga suurus

Batų dydis

Määrime pantofli

Velikost čevlja

Cípóméret

Номер обуви

Skostørrelse

Skostorlek

Kengän koko

Skóstærð

Veličina cipela

Veličina obuće

Veličina cipela

Размер обуви

Розмір взуття

مقاس الحذاء

מִידַת נעלים

ფეხსაცმლის ზომა

靴サイズ

鞋尺寸

신발 치수

Гутлын хэмжээ

Größentabelle¹

gilofa°fine / gilofa°style

Halterlose³, Strumpfhosen⁴

| Umfang ² (cm) | small | medium | large |
|---|----------|-----------|-----------|
| cT/U | 75 – 110 | 80 – 115 | 85 – 120 |
| cT | 70 – 100 | 75 – 105 | 80 – 110 |
| cH/U | 85 – 125 | 95 – 135 | 105 – 145 |
| cH | 80 – 115 | 90 – 125 | 100 – 135 |
| cG Strumpfhosen ⁴ | 43 – 68 | 49 – 74 | 55 – 80 |
| cG Halterlose ³ , weite Ausführung ⁵ | 56 – 68 | 62 – 74 | 68 – 80 |
| cG Halterlose ³ | 43 – 55 | 49 – 61 | 55 – 67 |
| cC | 29 – 39 | 34 – 44 | 39 – 49 |
| cB | 18 – 21 | 21,1 – 25 | 25,1 – 30 |


Kniestrümpfe⁶

| Umfang ² (cm) | small | medium | large |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| cC | 29 – 39 | 34 – 44 | 39 – 49 |
| cB | 18 – 21 | 21,1 – 25 | 25,1 – 30 |

1 Größentabelle
Table of sizes
Tableau des tailles
Maattabel
Tabella delle dimensioni
Tabla de tallas
Tabela de tamanhos
Πίνακας μεγεθών
Ölçü tablosu
Tabulka velikosti
Tabela wielkości
Izmēru tabula
Suuruste tabel
Dydžių lentelė
Tabel de mārimi
Tabela velikosti
Mérettáblázat
Таблица с размерами
Størrelsestabell
Storlekstabell
Kokotaulukko
Stærðatafla
Tablica veličina
Tabela veličina
Tabela veličina
Таблица размеров
Таблиця розмірів
جداول المقاسات
جدول المقاسات
טבלת מידות
ମାତ୍ରାବଳୀ
サ イ ズ 表
尺碼表
사이즈표
Хэмжээний хүснэгт

2 Umfangmaße (cm)
Circumference dimensions (cm)
Circconférence (cm)
Omvangsmaten (cm)
Circonference (cm)
Dimensiones de circunferencia (cm)
Perímetro (cm)
Περιμετρος (cm)
Çevre ölçüler (cm)
Obvod (cm)
Obwód (cm)
Apkārtmērs (cm)
Ümbermōöt (cm)
Skersmuo (cm)
Circumferinčia (cm)
Obseg (cm)
Köröméret (cm)
Обиколка (cm)
Omfangsmål (cm)
Omkrets (cm)
Ympärysmitta (cm)
Ummál (cm)
Mjere opseg (cm)
Obim (cm)
Obim (cm)
Обхватные мерки (см)
Обхват (см)
(مديط الجورب (سم)
(מִזְבֵּחַ הַגּוֹרֶב)
gaříšejemněříroloňda (სმ)
円周 (cm)
周長 (cm)
둘레(cm)
Тойргийн хэмжээ (см)

3 Halterlose
Thigh
Sans maintien
Stay-upkousen
Autoreggenti
Medias largas
Até à coxa
Κάλτσες ριζομηρίου
Jartiyersiz
Samodržicí
Pończochy
Turētāji
Sukad
Klijuojamos kojinės
Cu bandă adezivă
Prosto stojče
Combfix-
Със силиконова лента
Selvsiddende
Utan hållare
Stay up -sukat
Læri
Samostoječe
Samostoječe čarape
Samostoječe
Чулки
Без резинки
الدوارب ذات التثبيت الذاتي
ללא מחזק
ნინფები
ガーターレス
無支架
밴드스타킹
Гуяны

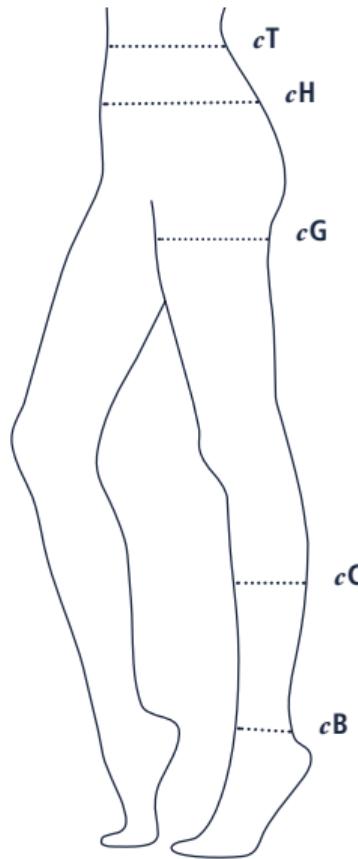

| | |
|----------|---|
| 4 | Strumpfhosen Tights Collants Panty Collant Pantis Collants Καλσόν Külotlu çoraplar Punčocháče samonošne Zékbikses Sukkpuksid Pédkelnés Dresuri Hlačne nogavice ek Чорапогащи Strømpebukser Strumpbyxor Sukkahousut Sokkabuxur Hulahopke Štrample Hulahopke Колготки Панчохи الجوارب اللاصقة نربونيم კოლგოტები パンティストッキング 襪褲 팬티스타킹 Трико |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| 5 | weite Ausführung wide design modèle large brede uitvoering modello ampio modelo ancho modelo largo φαρδύ μοντέλο geniş model šíroký model wersja szeroka plata lai variant platus modelis model larg Široka izvedba széles kivitel широко изъяснение bred udførelse bred modell leveä malli vítí módél šíroka izvedba šírok dizajn šírok kroj широкая модель обхват найширшої частини تصميم واسع يعزّب راحب ფართო ゆったりタイプ 其他規格 와이드 타입 өргөн загвар |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| 6 | Kniestrümpfe Knee high stockings Mi-bas Kniekousen Gambaletti Medias cortas Meias pelo joelho Κάλτσες μέχρι το γόνατο Diz altı çoraplar Podkolenky Podkolanówki Garäs zeķes Põlvikud Kojinés iki kelių Ciorapi până la genunchi Dokolenke Térdharisnya Чорапи до коляного Knæstrømper Knästrumpor Polvisukat Hnésokkar Dokoljenke Dokoljenke Гольфы Гольфи الجوارب المرتفعة للركبة نربى برك მუხლამდე ნინფები 膝丈ストッキング 齊膝襪 니삭스 Өвдөг хүрсэн оймс |
|----------|---|

Notizen.

Notes.

Notities.

Note.

Haben Sie Fragen zu Ihrem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf: 0951 6047 - 333

Sie finden uns
auch auf:



Vital- und Reisestrümpfe

Support and travel stockings

Bas de maintien et de voyage

Steun- en reiskousen

Calze di sostegno e da viaggio

Medias de descanso y viaje

Meias de viagem e utilização diária

Κάλτσες υποστήριξης και ταξιδιού

Destek ve seyahat çorapları

Podpůrné a cestovní punčochy

Pończochy z serii Vital i pończochy podrózne

Ārstnieciskās zeķes un zeķes ceļojumiem

Vitaal- ja reisisukad

Kompresinēs ir kelioninēs kojinēs

Ciorapi de susținere și de călătorie

Podporne in potovalne nogavice

Vital és Travel harisnyák

Чорапи с витализиращ ефект и за пътуване

Støtte- og rejsestrømper

Stöd- och resestrumpor

Tuki- ja matkasukat

Stuðnings- og ferðasokkar

Čarape za potporu i putovanja

Vitalne čarape i čarape za putovanje

Potporne i putne čarape

Компрессионные и дорожные чулки

Компресійні панчохи

جوارب الدعم والرذاالت

גרבי תמיכה ונסיעה

სამგზავრო და კომპრესიული ნინფების

サポートおよびトラベルストッキング

日用休闲静脉曲张袜

Дэмжигч болон аяллын урт оймс нь

Дэмжигч болон аяллын урт оймс



Kompetenz
in medizinischer
seit Kompression
1928 made
in Germany

545103012 | Rev.2/11/22

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH
 Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. +49 951 6047-333
Fax +49 951 6047-180
vertriebsinnendienst@ofa.de
www.ofa.de

ofa austria

Ofa Austria
Wasserfeldstr. 20
A-5020 Salzburg
Tel. +43 662 848707
Fax +43 662 849514
[kundenservice@ofaaustria.
at](mailto:kundenservice@ofaaustria.at)
www.ofaaustria.at