

Voor een eenvoudige en moeiteloze nabestelling vindt u aan de linkerkant uw **persoonlijke kousenpaspoort** met daarin alle benodigde informatie. Gewoon lostrekken, op elkaar plakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groet,
Ofa Bamberg

ofa bamberg

Het memoblad voor uw wasmachine:



**Compressiekousen
Op de juiste
manier wassen**

Lastofa Forte niet binnenstebuiten en Lastofa Extra binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!



- Fijne was
- Niet bleken
- Voorzichtig drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen

Wassen

- Geschikt voor onmiddellijk gebruik
- Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt
- Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met het machinewasprogramma voor fijne was
- Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. "Speciaal wasmiddel Ofa Clean"), geen wasverzachter gebruiken
- Goed uitspoelen, voorzichtig centrifugeren, maar niet uitwringen
- Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling

Er wordt gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan), katoen (Baumwolle) of merinowol (Merinowolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud

- Droog en het liefst in de originele verpakking opbergen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
- Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een siliconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de hechting hierdoor permanent kan worden aangetast
- Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de juiste schoenen draagt
- Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij textiel en geen reden voor reclamatie
- Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik

Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipoedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische compressiekousen

Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de terugstroom van het bloed versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

Belangrijke informatie

- Draag alleen compressiekousen na overleg met uw arts
- Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen voor een optimaal effect van de behandeling
- De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold personeel, dat ook advies geeft over de juiste manier waarop de kousen moeten worden aangetrokken
- Neem bij acute pijn uw in benen of bij huidreacties direct contact op met uw arts
- Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen
- Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten contact op met de dealer

Voor de dealer: Gegevens van de compressiekousen voor uw archief

www.ofa.de
export@ofa.de
Fax + 49 951 6047-186
Tel. + 49 951 6047-777

D-96052 Bamberg
Labanger 20
Ofa Bamberg GmbH

ofa bamberg

Rev. 01-04-2021

Garantie
De houdbaarheid van medische compressiekousen is beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage resp. onigenschappelijk gebruik zijn principieel uitgesloten van de garantie. Onder onigenschappelijk gebruik vallen ook latere wijzigingen aan het product die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor de verzorging van één patiënt. Als het voor hergebruik wordt doorgegeven aan andere personen, vervalt de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Verwijdering
Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht
Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product en die tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of tot de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, omiddelbaar te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

Indicaties (zie ook richtlijn medische compressietherapie AWMF 037/005, stand 17/18)
– Verbetering van veneuze symptomen en kwaliteit van leven bij chronische veneuze aandoeningen
– Preventie en behandeling van veneuze huidveranderingen
– Eczeem en pigmentatie
– Dermatitidoposclerose en atrofie blanche
– Behandeling en pijnvermindering bij ulcus cruris
– Venosum, ook recidiefrofylaxie
– Behandeling van artériële en veneuze ulcus cruris (zie contra-indicaties)
– Spataderen
– Eerste fase na behandeling van spataderen
– Functieel veneuze insufficiëntie
– Veneuze malformaties
– Veneuze trombose
– Toestand na trombose
– Posttrombotisch syndroom
– Tromboseprofylaxe bij mobiele patiënten
– Lymfoedeem
– Oedeem tijdens de zwangerschap
– Posttraumatisch postoperatief oedeem
– Cyclich-idiopathisch oedeem
– Lipoedeem vanaf stadium II
– Congestie door immobiliteit (afrtoegen congesstiesyndroom, parse en gedeeltelijke parse van de ledematen)
– Werkgeleerd oedeem (staand, zittend werk)
– Geneesmiddelgeleerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
– Oestras met functionele veneuze insufficiëntie
– Inflammatoire dermatosen van de benen

Contra-indicaties
– Behandeling van littekens
– Toestand na brandwonden
– Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap

Absolute contra-indicaties:
– Gevoerd perifeer artreeel vaalijden
– Gedecompeniseerd hartfalen
– Rhesusasie coenuea dolens
– Spetische fibitis
– Rhesusasie coenuea dolens

Relatieve contra-indicaties:
– Onverdraagzaamheid tegen compressiekousmateriaal (contra-indicaties)
– Voortdurende dermatosen
– Ernstige sensibilliteitsstoornissen van de ledematen
– Gevoerde periferie neuropathie (bijv. diabetes mellitus)
– Chronische polyartritis

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

Risico's en bijwerkingen
Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen.

Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voorzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibilliteitsstoornissen, een doof gevoel, toemenende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Topkwaliteit
van Ofa Bamberg


Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en gecontroleerd door het gebruik van de modernste techniek. Regelmatige certificeringen door onafhankelijke testinstellingen documenteren de verantwoordelijke omdring met onze producten.

Uw op maat gemaakte compressiekousen van Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en gecontroleerd door het gebruik van de modernste techniek. Regelmatige certificeringen door onafhankelijke testinstellingen documenteren de verantwoordelijke omdring met onze producten.


Uw op maat gemaakte product van Ofa voldoet bijvoorbeeld aan de strengste kwaliteits- en productvereisten ter wereld (RAL-GZ 387/1). Ook voldoet het product aan de Ofo-Standard 100, de norm die het gebruik van veilige materialen en kleurstoffen voorschrijft.

Wij doen onze uiterste best – om u op de been te houden!

ofa bamberg

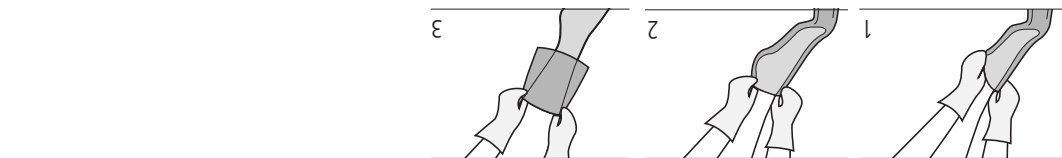

Instucties voor aantrekken, gesloten teen

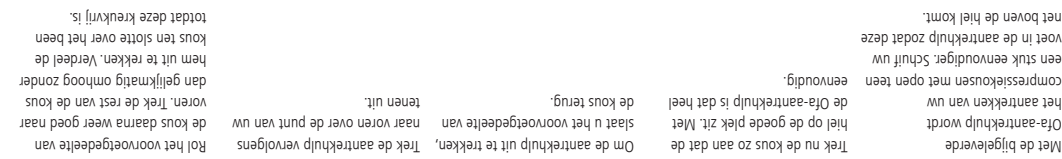

Instucties voor aantrekken, open teen

