

ofa bamberg

➡ Aby vaše příští objednávka probíhala jednoduše a bez komplikací, najdete vlevo **svůj personalizovaný pas k punčochám** se všemi informacemi o rozměrech. Jednoduše jej odejměte, nalepte a náležitě uchovejte.

S nejlepšími doporučeními
Vaše Ofa Bamberg

⬇️ Poznámka pro vaši pračku:



**Kompresní punčochy
správné praní**

Lastofa Forte perte lícem nahoru, příp. Lastofa Extra perte naruby a nepoužívejte aviváž!

- Program na jemné látky
- Nepoužívejte bělidlo
- Sušte šetrně
- Nežehlete
- Nečistěte chemicky

Praní

- vhodné k okamžitému nošení
- doporučení: před prvním použitím vyperte
- běžné praní (max. 40°C), v ruce nebo v pračce v režimu jemného praní
- samostatně s pracími prostředky na jemné praní (např. „speciální prací prostředek Ofa Clean“), nepoužívejte aviváž
- pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčochu při tom nekrutěte
- rozložte punčochu na ručník a sušte ji na vzduchu nebo v sušičce v režimu šetrného sušení, nikdy ji nežehlete a nesušte na topení nebo na slunci

Materiálové složení

Vyrobeno z polyamidu (Polyamid), elastanu (Elastan) a bavlny (Baumwolle) nebo vlny merino (Merinowolle). Konkrétní informace naleznete na textilním štítku vřítém do punčochy.

Péče

- skladujte v suchu, nejlépe v originálním obalu, chraňte před přímým slunečním zářením a teplem
- nedopustte, aby punčochy se silikonovým povrchem přišly do styku s rozpouštědly, mastími, krémy a zvlhčujícími pleťovými vodami, protože tak může dojít k trvalému zhoršení přilnavosti
- je bezpodmínečně nutné, abyste pravidelně pečovali o své nohy a nosili nezávadnou obuv
- tvorba uzlíků ve tkanině je u textilu zcela běžná a nepředstavuje důvod k reklamaci
- poškození punčochy nikdy neopravujte sami, ale přineste ji zpět ke specializovanému prodejci, u kterého byla punčocha zakoupena

Účel

Kompresivní punčochy se používají k terapii flebologických a lymfologických onemocnění horních a dolních končetin a také u lippedému. Volba různých produktů závisí na indikaci.

Princip funkce zdravotních kompresivních punčoch

Produkty určené k dané indikaci a kontrolovaný tlak brání zpětnému toku krve, čímž zlepšují tkáňovou mikrocirkulaci a odtok lymfy.

⚠️ Důležité pokyny

- kompresivní punčochy noste pouze po konzultaci se svým lékařem
- předpokladem pro úspěšnou léčbu je každodenní nošení a pravidelné kontroly
- prodej a poradenství může poskytovat pouze lékařsky vyskolený personál
- v případě akutní bolesti nohou nebo kožních reakcí okamžitě vyhledejte lékaře
- okraj punčochy můžete pravidelně mírně posouvat, čímž předejdete podráždění pokožky
- máte-li problémy s kvalitou nebo chcete-li punčochu reklamovat, obraťte se na svého specializovaného prodejce

⬇️ pro specializovaného prodejce: Údaje o punčochách pro archívaci

www.ofa.de
export@ofa.de
Fax + 49 951 6047-186
Tel. + 49 951 6047-777

Labanger 20
D-96052 Bamberg
Ofa Bamberg GmbH

ofa bamberg



Děláme maximum pro to, abyste mohli stát pevně na nohou!

Například výrobky na míru Ofa dodržují nejprůšnější předpisy o kvalitě a testování na vzteře pro zdravotnické kompresivní punčochy (RAL-GZ 387/1) a splňují normu Oeko-Tex Standard 100, která stanovuje použití nezavádných materiálů a barviv. Spolu s provedením na míru nosíte výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje. Pečlivě zpracování a vysoká kvalita jsou zajištěny a kontrolovány pomocí nejnovějších technologií. Pravidelná certifikace nezávislymi kontrolními institucemi dokumentuje odpovědné zacházení s našimi produkty.

od firmy Ofa Bamberg

Špičková kvalita

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní kompresivní terapii AMWF 037/005, pol. 12/18)

- Zlepšení žilních příznaků a kvality života u chronických žilních onemocnění!
- Prevence a terapie žilních kožních onemocnění!
- Ekzém a pigmentace
- Terapie a tlumení bolesti a atropie bílanche
- Dermatojiposkleróza a atropie bílanche
- Terapie a tlumení bolesti u žilních bécových vrédu a prevence recidiv
- Terapie arteriálních a venózních bécových vrédu (viz kontaindikace)
- Úvodní fáze terapie křečových žil
- Křečové žily
- Edém v těhotenství
- Posttraumatický/pooperativní edém
- Cyklický idiopatický edém
- Městání v distálda II
- Městání v distálda imobility (arterogenní městání, pářezy a částečné pářezy koncetivy)
- Farmakogenní edémy, když není možná změna
- Edémy spojené s povláním (stání, sezenni)
- Terapie
- Zanětlivé dermatózy dolních koncetin

Kontaindikace

- Nevlnost, zvláste a podle s městáním v těhotenství
- Stav po pálením
- Terapie žilzev
- Kontraindikace
- Absolutní kontraindikace:
- Pokročilé periferní cévní onemocnění!
- Dekompzovaná srdeční nedostatečnost
- Rhegmasia corvilea dolens
- Šeprická fibritida
- Relativní kontraindikace:
- Intolerance materiálů kompresivních punčoch
- Těžké poruchy citlivosti koncetivy
- Pokročilé periferní neuropatie (např. diabetés mellitus)
- Chronická polyartitida

Pokud nebudou dotrženy tyto kontraindikace, výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

⚠️ Rizika a vedlejší účinky
U citlivé pokožky se může pod kompresivními punčochami objevit svědění a kožní problémy. V takovém případě je doporučována adekvátní kožní terapie.
U následujících příznaků je nutné punčochy ihned sejmout a domluvit se s lékařem na pokračování terapie.
– Zanětlivé dermatózy dolních koncetin

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a přisluším národním úřadům (v Německu BfArM).


Lividace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
Ohlašovací povinnost
Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a přisluším národním úřadům (v Německu BfArM).


Závěrka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky. K tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá závěrce a je nutné je vyřadit.
Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.
Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Pokyny k nasazení – uzavřená špička

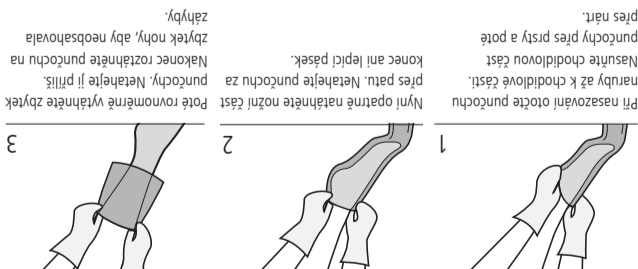

Pokyny k nasazení – otevřená špička

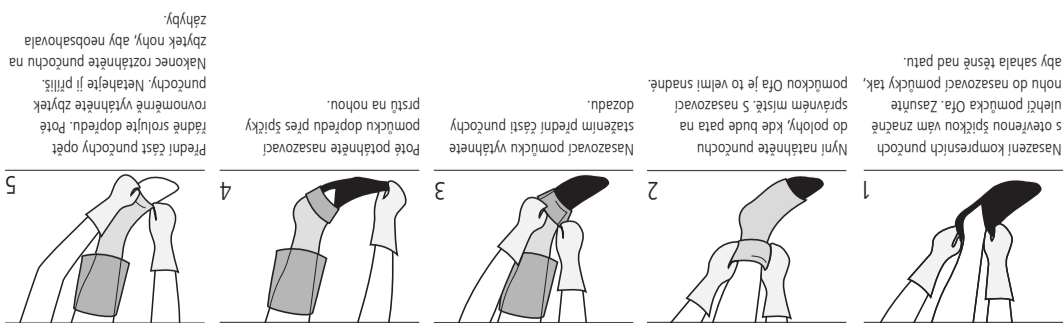

ofa bamberg