

Καρτέλα προϊόντος

Καρτέλα προϊόντος

Το επί παραγγελία προϊόν σας έφτασε!

Για να είναι απλή και εύκολη η εκ νέου παραγγελία σας για την επόμενη συνταγή, θα βρείτε **την προσωπική σας καρτέλα προϊόντος** στα αριστερά με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ξεκολλήστε, κολλήστε μαζί και φυλάξτε με ασφάλεια.

Φιλικά, Η ομάδα Ofa Bamberg

ofa bamberg

Σημείωμα για το πλυτήριο ρούχων σας:



Κάλτσες συμπίεσης σωστό πλύσιμο

Πλένετε το Lastofa Forte από τη σωστή πλευρά και το Lastofa Extra από την ανάποδη και μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό!



Λειτουργία πλύσης ευαίσθητων ρούχων



Μην λευκαίνετε



Στεγνώνετε απαλά



Μην σιδερώνετε



Μην εκτελείτε χημικό καθαρισμό

Πλύσιμο

- κατάλληλες για άμεση χρήση
- σύσταση: πλένετε το προϊόν προτού το φορέσετε για πρώτη φορά
- πλένετε καθημερινά (μέγ. 40°C), στο χέρι ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του πλυτηρίου
- ξεχωριστά με απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα (π.χ. «ειδικό απορρυπαντικό Ofa Clean»), μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό
- ξεπλύνετε καλά, στύβετε απαλά, αλλά όχι τελείως
- στεγνώνετε πάνω σε πετσέτα στον αέρα ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του στεγνωτηρίου, μην τις σιδερώνετε και μην τις τοποθετείτε πάνω σε καλοριφέρ ή στον ήλιο

Σύνθεση υλικού

Χρησιμοποιείται πολυαμιδίο (Polyamid), ίνες ελαστομερούς (Elastan) και βαμβάκι (Baumwolle) ή μαλλι μερίνο (Merinowolle). Για τα ακριβή στοιχεία, παρακαλούμε ανατρέξτε στην υφασμάτινη ετικέτα που είναι ραμμένη επάνω στις κάλτσες.

Φροντίδα

- Φυλάσσετε σε στεγνό μέρος, το οποίο προστατεύεται από τον ήλιο και τη ζέση, και ιδανικά στην αρχική συσκευασία τους
- Οι κάλτσες με πλαίσια επικόλλησης με επίστρωση σιλικόνης δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με διαλυτικά μέσα, αλοιφές, κρέμες και ενυδατικές λοσιόν καθαρισμού, διαφορετικά, η ικανότητα πρόσφυσης των πλαισίων επικόλλησης μπορεί να μειωθεί ανεπανόρθωτα
- Να φροντίζετε τακτικά τα πόδια σας και να φοράτε παπούτσια χωρίς ελαττώματα
- Οι κόμποι των ινών (pilling) είναι μια φυσιολογική διαδικασία στα υφάσματα και δεν συνιστούν λόγο εκδήλωσης παραπόνων
- Ποτέ μην επιδιωχνάτε τις ζημιές στις κάλτσες μόνοι σας, αλλά να τις επιστρέψετε στο κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο τις αγοράσατε

Σκοπός χρήσης

Οι κάλτσες συμπίεσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των φλεβολογικών και λεμφικών παθήσεων των χεριών και των ποδιών, καθώς και σε περίπτωση λιποδημάτων. Ανάλογα με την εκάστοτε ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προϊόντα.

Τρόπος δράσης των ιατρικών καλτών συμπίεσης

Χάρη στα προϊόντα που έχουν προσαρμοστεί στις εκάστοτε ενδείξεις και λόγω της ελεγχόμενης πίεσης, η επιστροφή του αίματος επιταχύνεται, η μικροκυκλοφορία στον ιστό βελτιώνεται και η λεμφική ροή αυξάνεται.

Σημαντικές υποδείξεις

- Φοράτε τις κάλτσες συμπίεσης μόνο κατόπιν συνενόησης με τον γιατρό σας
- Η επιτυχής θεραπεία διασφαλίζεται μέσω της καθημερινής χρήσης, καθώς και μέσω των τακτικών ελέγχων
- Η διάθεση του προϊόντος και οι συμβουλές σχετικά με τον ορθό τρόπο τοποθέτησης των καλτών πρέπει να παρέχονται από ιατρικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
- Σε περίπτωση έντονων πόνων στα πόδια ή δερματικών ερεθισμών, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό
- Η ελαφριά μετατόπιση του πλαισίου επικόλλησης μπορεί να αποτρέψει τους ερεθισμούς του δέρματος
- Σε περίπτωση προβλημάτων ποιότητας και παραπόνων, απευθυνθείτε στον τοπικό έμπορο

Για τον τοπικό έμπορο: Στοιχεία κατάλογου για αρχιτεκτονική

www.ofa.de
export@ofa.de
Fax + 49 951 6047-186
Tel. + 49 951 6047-777

D-96052 Bamberg
Labanger 20
Ofa Bamberg GmbH

ofa bamberg

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στεκεστε καλά στα πόδια σας!

Χρησιμοποιώντας σωστά τη μέθοδο συμπίεσης, οι κάλτσες συμπίεσης Ofa βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Αριστή ποιότητα από τον οικο Ofa Bamberg

Ευλέξτε (βλέπε επίσης Κατευθυντήρια Οδηγία Ofa) με την ίδια μεθοδολογία συμπίεσης που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των κάλτσων συμπίεσης Ofa. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Κατευθυντήρια Οδηγία συμπίεσης

Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η μέθοδος συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Αντένες συμπίεσης

Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Χειρουργική συμπίεση

Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Προσοχή επιλογή

Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αντένες συμπίεσης

Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Οι αντένες συμπίεσης Ofa είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.


Χειρουργική συμπίεση

Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο. Η χειρουργική συμπίεση Ofa είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, όπως πόνος, βαρύτητα και πρήξιμο.

Προσοχή επιλογή

Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η επιλογή της σωστής μέθοδου συμπίεσης Ofa είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

ofa bamberg

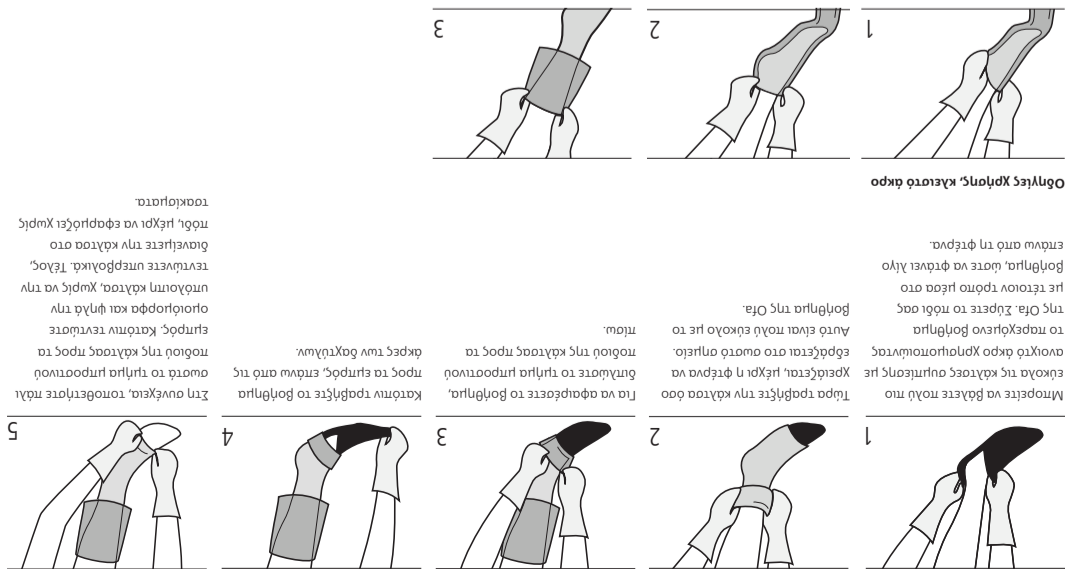

Οδηγίες χρήσης, κλείσιμο δικρο

Οδηγίες χρήσης, ανοίξιμο δικρο