

memory[®] men

Sportive medizinische Kompression

— **Gebrauchsanleitung** —
Instructions for use



GÜTEZEICHEN



STANDARD
100

95.0.1594
Hohenstein

DE	deutsch	06 – 07
EN	english	08 – 09
FR	français	10 – 11
NL	nederlands	12 – 13
IT	italiano	14 – 15
ES	español	16 – 17
PT	português	18 – 19
EL	ελληνικά	20 – 21
TR	türkçe	22 – 23
CS	česky	24 – 25
PL	polski	26 – 27
LV	latviešu	28 – 29
ET	eesti	30 – 31
LT	lietuvių	32 – 33
SL	slovenski	34 – 35
HU	magyar	36 – 37
BG	български	38 – 39
DA	dansk	40 – 41
SV	svenska	42 – 43
FI	suomi	44 – 45
HR	hrvatski	46 – 47
BS	bosanski	48 – 49
SR	srpski	50 – 51
RU	русский	52 – 53
UK	українська	54 – 55
AR	العربية	56 – 57
ZH	中文	58 – 59
KO	한국어	60 – 61
MN	монгол	62 – 63
UZ	o'zbek	64 – 65

DE	Memory Men Sportlich, elegant und medizinisch wirksam: Memory Men – der Kompressionsstrumpf für den Mann. Dank seines hohen Baumwollanteils ist der Kniestrumpf besonders weich und angenehm zu tragen. Sein dezenter Look macht ihn businesstauglich. Auch zum Sport-Outfit passt er perfekt. Die Farbpalette bilden zwei Standard- sowie zwei melierte Töne. Erhältlich als Serienstrumpf oder Maßanfertigung.
EN	Memory Men Sporty, elegant, and medically effective: Memory Men – the compression stocking for men. Thanks to the high cotton content, the knee high stocking is particularly soft and comfortable to wear. Its subtle look makes it suitable for business. It also goes perfectly with a sports outfit. The colour palette consists of two standard and two mottled shades. Available in standard or made-to-measure.
IT	Memory Men Sportiva, elegante ed efficace dal punto di vista medico: Memory Men - la calza a compressione graduata per uomo. Grazie al suo alto contenuto di cotone, il calzino è particolarmente morbido e comodo da indossare. Il suo look discreto lo rende adatto ad un outfit lavorativo. Si abbina perfettamente anche a un abbigliamento sportivo. La tavolozza dei colori è composta da due tonalità standard e due tonalità melange. Disponibile come calza standard o su misura.
LT	„Memory Men“ Sportinės, elegantiškos ir mediciniškai veiksmingos: „Memory Men“ – kompresinės kojinės vyrams. Dėl didelio medvilnės kiekio kojinės yra ypač minkštos, jas patogų mėvėti. Dėl subtilios išvaizdos kojinės tinamos mėvėti prie dalykinio stiliaus drabužių. Jos taip pat puikiai dera su sportine apranga. Spalvų paletę sudaro du standartiniai ir du margi atspalviai. Galima įsigyti serijines kojines arba specialiai pagamintas pagal dydį.

Das Memory-Kompressionsstrumpfprogramm

Memory – die eleganten Kompressionsstrümpfe mit zarter Transparenz und leichtem Glanz – perfekt für die modebewusste Frau.

Memory Aloe Vera verbindet elegantes Aussehen mit integrierter Hautpflege. Die innovativen Kompressionsstrümpfe versorgen die Haut beim Tragen mit Aloe Vera-Extrakten und Vitamin-E.

Memory ist als Serienstrumpf oder Maßanfertigung erhältlich.

The Memory compression stocking program

Memory – the elegant compression stockings with delicate transparency and a light sheen – perfect for the fashion-conscious woman.

Memory Aloe Vera combines an elegant look with integrated skin care. The innovative compression stockings nourish the skin during wear with aloe vera extracts and vitamin E.

Memory is available in standard or made-to-measure.

Il programma di calze compressive Memory

Memory – le eleganti calze compressive dalla delicata trasparenza e leggermente lucido: perfetto per la donna attenta alla moda.

Memory Aloe Vera unisce un look elegante alla cura della pelle integrata. Queste innovative calze compressive nutrono la pelle con estratti di aloe vera e vitamina E.

Memory è disponibile come calza standard o su misura.

„Memory“ kompresinių kojinių programa

„Memory“ – elegantiškos kompresinės kojinės, pasižyminčios švelniu skaidrumu ir švelniu blizgesiu – puikiai tinka madai neabejingai moteriai.

„Memory Aloe Vera“ suderina elegantišką išvaizdą ir integruotą odos priežiūrą. Inovatyvios kompresinės kojinės, jas nešiojant, oda aprūpinama alavijo ekstraktais ir vitaminu E.

Kojines „Memory“ galima įsigyti kaip serijines kojines arba pagamintas pagal užsakymą.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
wir freuen uns, dass Sie sich für Kompressionsstrümpfe von Ofa entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Produktinformationen sorgfältig durch. Für eine optimale Wirksamkeit Ihrer Kompressionstherapie!

Zweckbestimmung

Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödemen eingesetzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

Wirkprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

 Wichtige Hinweise

Tragen Sie medizinische Kompressionsstrümpfe nur nach ärztlicher Rücksprache. Durch tägliches Tragen und regelmäßige ärztliche Kontrollen sichern Sie den Erfolg Ihrer Behandlung! Die Abgabe der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen. Ihr Fachhändler berät Sie auch, wie Sie Ihre Kompressionsstrümpfe richtig anziehen. Sollten beim Tragen akute Beinschmerzen oder Hautirritationen auftreten, holen Sie sich bitte unverzüglich ärztlichen Rat ein. Hautreaktionen im Bereich von Haftbändern kann vorgebeugt werden, indem das Haftband im Laufe eines Tages mehrmals leicht versetzt wird. Sollen die Strümpfe in Kombination mit anderen medizinischen Hilfsmitteln getragen werden, klären Sie dies bitte ärztlich ab. Wir prüfen unsere Produkte im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung. Sollten Sie dennoch Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Reparieren Sie Schäden nicht selbst, sondern bringen Sie den Strumpf zu dem Fachhändler zurück, bei dem er gekauft wurde. Faserknötchen, die sich durch Reibung an anderen Kleidungsstücken bilden können, mindern die Qualität des Strumpfes nicht.

Anziehanleitung

1. Zum Anziehen wenden Sie den Strumpf bis zum Fuß auf Links. Streifen Sie das Fußteil über die Zehen und anschließend über den Spann.

2. Ziehen Sie nun das Beinteil vorsichtig über die Ferse. Bitte vermeiden Sie es dabei, den Strumpf am Abschluss- oder Hafrand hochzuziehen.

3. Streifen Sie den restlichen Strumpf gleichmäßig hoch, ohne ihn zu überdehnen. Zum Schluss verteilen Sie den Strumpf am Bein, bis er faltenfrei anliegt.

Pflegehinweise

Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch geeignet. Wir empfehlen, es vor dem ersten Tragen zu waschen. Danach bitte täglich von Hand oder im Schonwaschgang Ihrer Maschine waschen. Waschen Sie die Strümpfe separat mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler (z. B. Ofa Clean Spezialwaschmittel) bei maximal 40° C und spülen Sie sie gut aus. Die Strümpfe können schonend geschleudert werden, bitte wringen Sie sie aber nicht aus. Trocknen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners, aber legen Sie sie nicht auf die Heizung oder in direktes Sonnenlicht. Bügeln Sie die Strümpfe niemals. Um die Wirksamkeit Ihrer Strümpfe zu erhalten, verwenden Sie bitte keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin oder Weichspüler. Diese Substanzen greifen das Gestrick an. Kompressionsstrümpfe sind weitgehend unempfindlich gegen Fette und Öle, sollten aber nicht mit Salben in Kontakt kommen. Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern sollten generell nicht mit Lösungsmitteln, Salben, rückfettenden Waschlotionen und Körpercremes in Berührung kommen. Die Haftfähigkeit der Haftbänder kann sonst dauerhaft beeinträchtigt werden (auch Beinbehaarung und trockene Haut können die Funktion der Haftbänder einschränken). Lagern Sie die Strümpfe trocken und geschützt vor Sonne und Hitze, möglichst in der Originalverpackung.

Bitte auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

-  Schonwaschgang
-  Nicht bleichen
-  Schonend trocknen
-  Nicht bügeln
-  Nicht chemisch reinigen

Materialzusammensetzung

Verwendet werden Polyamid, Elasthan und bei einigen Produkten Baumwolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingenähten Textiletikett.

Anziehtipps

Ziehen Sie die Strümpfe gleich frühmorgens nach dem Aufstehen an, solange Ihre Beine noch frei von Schwellungen sind. Bitte ziehen Sie den Kompressionsstrumpf nicht am Abschluss- oder Hafrand nach oben, sondern streifen Sie ihn mit den Händen von unten nach oben. Um das Anziehen zu erleichtern und das Gestrick zu schonen, empfiehlt es sich, Haushalts-Gummihandschuhe zu tragen. Schmuck und lange Fingernägel können den Strumpf beschädigen.

Achten Sie bitte auch auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk. Fragen Sie in Ihrem medizinischen Fachhandel nach den Ofa Grip Spezial-Handschuhen und den praktischen Ofa An- und Ausziehhilfen für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Spitze.

Indikationen (siehe auch Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, Stand 12/18)

- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Ekzem und Pigmentierung
- Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
- Therapie und Schmerzreduktion bei Ulcus cruris venosum, auch Rezidivprophylaxe
- Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
- Venöse Malformationen
- Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Lymphödem
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatische/postoperative Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödeme ab Stadium II
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
- Medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist
- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen:

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft: ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO₂ < 20 mmHg Fußrücken)
 - Dekompensierte Herzinsuffizienz
 - Septische Phlebitis
 - Phlegmasia coerulea dolens
- #### Zu beachtende Risiken (Therapieentscheidung unter Nutzen/ Risiko-Abwägung)
- Nässende Dermatosen
 - Unverträglichkeiten auf Kompressionsstrumpfmaterialien
 - Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
 - Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)
 - Chronische Polyarthrit

Bei Nichtbefolgung dieser Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.

Risiken und Nebenwirkungen

Medizinische Kompressionsstrümpfe können Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen. Eine Abpolsterung gefährdeter Bereiche wird empfohlen. Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie ärztlich abklären: Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Nicht als Mangel gelten leichte Farbabweichungen, die aufgrund des individuellen Färbeprozesses entstehen können. Entsprechende Ware ist somit von Umtausch und Rücksendungen ausgeschlossen. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Dear User,

We are delighted that you have chosen Ofa compression stockings and thank you for putting your trust in us. Please take a moment to read through this product information carefully. For optimal compression therapy effectiveness!

Intended use

Compression stockings are used to treat phlebological and lymphological arm and leg conditions, as well as lipoeedema. Different products are used depending on the indication.

Effective principle of medical compression stockings

Products tailored to the respective indication and controlled pressure accelerate blood reflux, improve microcirculation in the tissue and increase lymph flow.

 Important information

Only wear compression stockings after consultation with your doctor. Wearing your stockings daily and holding regular consultations with your doctor will ensure successful treatment! The stockings must be obtained from a medically trained specialist retailer. Your specialist retailer will also advise you on how to put the compression stockings on correctly. If you experience leg pain or skin irritation while wearing these stockings, please consult your doctor immediately. You can prevent skin reactions in the area around the grip tops by slightly adjusting the grip tops several times during the day. Please contact your doctor about wearing the stockings in combination with using other medical devices. We test our products within the scope of a comprehensive quality assurance. However, if you still have cause for complaint, please contact your specialist retailer. Do not attempt to perform repairs yourself. Return stockings to the specialist retailer who sold them to you. Any pilling of the material that may arise due to friction with other garments will not reduce the stocking's quality.

Care instructions

The product is suitable for immediate use. We recommend washing the product before wearing it for the first time. Then wash daily by hand or on a delicate fabric programme. Wash the stockings separately with mild detergent without fabric softener (e.g. Ofa Clean special detergent) at a maximum temperature of 40 °C and rinse them well. The stockings can be spun gently, but do not wring them out. Dry your compression stockings in air or in a dryer on a gentle cycle. Do not place them on a heater or in direct sunlight. Never iron the stockings. To maintain the effectiveness of your stockings, please do not use chemical cleaning agents, petrol, or fabric softeners. These substances damage the knitted fabric. Compression stockings are largely resistant to fats and oils, but should not come into contact with ointments. Stockings with silicone-coated grip tops should generally not come into contact with solvents, ointments, re-greasing washing lotions and body creams. Otherwise, the adhesive strength of the grip tops could be permanently impaired (leg hair and dry skin can also limit the function of the grip tops). Store the stockings in a dry place away from sun and heat, in the original packaging if possible.

Wash inside out and do not use fabric softener!

-  Wash on a delicate or gentle cycle
-  Do not bleach
-  Dry gently and carefully
-  Do not iron
-  No chemical dry cleaning

Material composition

Polyamide (Polyamid), elastane (Elastan) and, for some products, cotton (Baumwolle) is used. Please refer to the textile label sewn into your stocking for the precise details.

How to put them on

- 1.** To put the stockings on, turn it inside out as far as the foot. Slip the foot section over your toes and then over the instep.
- 2.** Now carefully pull the leg section over your heel. Please avoid pulling up the stockings at the end or grip top.
- 3.** Pull the rest of the stockings up evenly without overstretching it. Finally, adjust the stockings on the leg until there are no wrinkles.

Tips for donning the stockings

Put on the stockings first thing in the morning after getting up, as long as your legs are free from swelling. Please do not pull the compression stockings up by the edge or the grip top, instead, slide it upwards with your hands. We recommend wearing household rubber gloves to make it easier to put on the stockings and to protect the knitted fabric.

Jewellery and long fingernails can damage the stockings. Please also pay attention to regular foot care and proper footwear. Ask your medical retailer about Ofa Grip special gloves and the practical donning and doffing aids for open and closed toe compression stockings.

Indications (see also AWMF Medical Compression Therapy Guideline 037/005, Version 12/18)

- Improvement of venous symptoms and quality of life with chronic venous diseases
- Prevention and treatment of venous oedema
- Prevention and treatment of venous skin alterations
- Eczema and pigmentation
- Lipodermatosclerosis and atrophie blanche
- Therapy and pain reduction for venous leg ulcers, including relapse prevention
- Treatment of arterial and venous leg ulcers (see contraindications!)
- Varicose veins
- Initial phase after treatment for varicose veins
- Functional venous insufficiency
- Venous malformations
- Venous thrombosis
- Condition after thrombosis
- Post-thrombotic syndrome
- Thrombosis prophylaxis in mobile patients
- Lymphoedema
- Oedema in pregnancy
- Post-traumatic/post-operative oedema
- Cyclic idiopathic oedema
- Stage II lipoedema and above
- Venous stasis resulting from immobility (arthrogenic congestive syndrome, paresis, and partial paresis of the extremity)
- Occupation-related oedema (occupations involving long periods of standing and sitting)
- Medication-related oedema, if change of medication not possible
- Obesity with functional venous insufficiency
- Inflammatory dermatoses of the legs
- Nausea, dizziness, and congestion complaints during pregnancy
- Condition after burns
- Scar treatment

Contraindications

Absolute contraindications:

- Advanced peripheral arterial occlusive disease (if any of these parameters apply: ABPI < 0.5, ankle artery pressure < 60 mmHg, toe pressure < 30 mmHg, or TcPO₂ < 20 mmHg arch)
- Congestive heart failure
- Septic phlebitis
- Phlegmasia cerulea dolens
- Risks to be considered (therapy decision based on benefit/risk assessment)**
- Weeping dermatoses
- Allergies to compression stocking materials
- Severe sensitivity disorders of the extremity
- Advanced peripheral neuropathy (e.g. diabetes mellitus)
- Chronic polyarthritis

No liability is accepted if these contraindications are not observed.

Risks and side effects

Medical compression stockings can cause skin necrosis and pressure damage to peripheral nerves. Padding of vulnerable areas is recommended. Patients with sensitive skin may experience itching and skin irritation when using compression stockings. Adequate skin care is therefore recommended.

If you suffer the following symptoms, please take off the stockings immediately and discuss further treatment with your doctor: Blue or white coloration of the toes, sensations of discomfort and numbness, increasing pain, shortness of breath and sweating, acute movement restrictions.

Warranty

The shelf life of medical compression stockings is limited to 3 years when properly stored. Added to this is the wearing time, which is a maximum of 6 months with regular use and proper care. After this period, the products are excluded from the warranty. Defects attributable to normal wear and tear or improper use are not covered by the guarantee. Improper use also includes any subsequent modification to the product that has not been carried out by the manufacturer. The product is intended for use by a single patient. If it is passed on to other persons for reuse, the manufacturer's product liability is no longer valid.

Disposal

After the end of the usage period, please dispose of the product in accordance with local regulations.

Mandatory reporting

Due to legal requirements, patients and users are obliged to report immediately any serious incidents which have occurred in connection with the product and which have resulted in, or could have led to a significant deterioration in the state of health or to death to the manufacturer and the competent national authority (in Germany BfArM).

Chère utilisatrice, cher utilisateur,

Nous sommes ravis que vous ayez choisi les bas de contention Ofa et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Merci de prendre un moment pour lire attentivement ces informations produit. Pour une efficacité optimale de votre thérapie de compression !

Usage prévu

Les bas de contention s'utilisent pour le traitement de maladies phlébologiques et lymphologiques des bras et des jambes ainsi qu'en cas de lipœdèmes. En fonction de l'indication, on utilise différents produits.

Principe de fonctionnement des bas médicaux de contention

Du fait des produits adaptés à chaque indication et du contrôle de la pression, le retour sanguin est accéléré, la microcirculation est améliorée dans les tissus et le flux lymphatique augmente.

Remarques importantes

Ne portez des bas de contention médicaux qu'après avoir consulté votre médecin. En portant vos appareils quotidiennement et en vous rendant régulièrement à des contrôles médicaux, vous garantisiez le succès de votre traitement ! La remise des bas doit être effectuée par du personnel médical qualifié. Votre revendeur spécialisé vous conseillera également sur la manière d'enfiler correctement vos bas de contention. Si vous ressentez des douleurs aiguës aux jambes ou des irritations cutanées apparaissent pendant le port, consultez immédiatement un médecin. Les réactions cutanées au niveau des bandes de maintien peuvent être évitées en déplaçant légèrement la bande de maintien plusieurs fois au cours de la journée. Si les bas doivent être portés en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin. Nous soumettons nos produits à des mesures d'assurance qualité approfondies. Si vous avez des réclamations à formuler malgré tout, veuillez contacter votre revendeur. Ne réparez pas vous-même des dommages, mais rapportez le bas au revendeur spécialisé chez qui vous l'avez acheté. Les bouloches qui peuvent se former par frottement contre certains vêtements ne nuisent pas à la qualité des bas.

Instructions pour enfiler les bas

1. Pour enfiler vos bas, retournez-les à l'envers sur le pied. Enflez la partie couvrant le pied par-dessus les orteils puis la cheville.

2. Tirez avec précaution la partie couvrant la jambe sur le talon. Évitez de tirer le bas de contention vers le haut par la bordure adhésive ou de raccordement.

3. Enflez le reste du bas de façon régulière, sans l'étirer. Enfin, répartissez le bas sur la jambe jusqu'à ce qu'il ne fasse plus de pli.

Conseils d'entretien

Le produit convient à une utilisation immédiate. Nous recommandons de les laver avant la première utilisation. Ensuite, laver quotidiennement à la main ou en utilisant le programme lavage délicat de votre machine. Lavez les bas séparément avec un détergent spécifique sans adoucissant (ex. produit de lavage spécial Ofa Clean) à 40 °C maximum, et rincez-les bien. Vous pouvez essorer doucement les bas mais veillez à ne pas les tordre. Séchez vos bas de contention à l'air ou en utilisant le programme doux de votre sèche-linge mais ne les exposez pas à la chaleur ni à la lumière directe du soleil. Ne repassez jamais les bas. Pour préserver l'efficacité de vos bas, n'utilisez jamais de produit nettoyant chimique, essence ou adoucissant. Ces substances attaquent la trame. Les bas de contention sont dans une large mesure insensibles aux huiles et aux graisses, mais ils ne doivent pas entrer en contact avec des pommades. Les bas avec bandes adhésives recouvertes de silicone ne doivent généralement pas entrer en contact avec des solvants, des pommades, des lotions nettoyantes nourrissantes ni des crèmes corporelles. Sinon, l'adhérence des bandes adhésives peut s'en trouver durablement détériorée (même une épilation et une peau sèche peuvent limiter la fonction des bandes adhésives). Stockez les bas au sec et à l'abri du soleil et de la chaleur, de préférence dans leur emballage d'origine.

Veillez laver à l'envers et ne pas utiliser d'assouplissant !

-  Lavage délicat
-  Pas d'agent blanchissant
-  Séchage délicat
-  Pas de repassage
-  Pas de nettoyage à sec

Composition de la matière

Les bas de contention sont composés de polyamide (Polyamid), d'élasthanne (Elastan) et, pour certains, de coton (Baumwolle). Vous trouverez les indications concrètes sur l'étiquette cousue dans vos bas.

Conseils pour l'enfilage des bas de contention

Enfilez les bas dès le matin au réveil, tant que vos jambes ne sont pas encore gonflées. Ne tirez pas le bas de contention vers le haut par le bord ou la bande de maintien mais enfiler-le avec les mains en remontant de bas en haut. Pour faciliter l'enfilage et ménager le tricot, il est recommandé de porter des gants ménagers en caoutchouc à cette fin.

Les bijoux et les ongles longs peuvent endommager les bas. Veillez également à prendre régulièrement soin de vos pieds et à porter des chaussures en bon état. Demandez dans votre magasin spécialisé médical les gants spéciaux Ofa Grip et les aides pratiques Ofa pour enfiler et retirer les bas de contention à bout ouvert et fermé.

Indications (reportez-vous aussi à la directive Thérapie de compression médicale AWMF 037/005, version 12/18)

- Amélioration des symptômes veineux et de la qualité de vie en cas de maladies veineuses
- Prévention et thérapie de l'œdème veineux
- Prévention et thérapie des atteintes veineuses cutanées
- Eczéma et pigmentation
- Dermatoliposclérose et atrophie blanche
- Thérapie et réduction de la douleur en cas d'ulcère veineux de la jambe, y compris prophylaxie de la récurrence
- Thérapie de l'ulcère veineux et artériel (cf. contre-indications !)
- Veines variqueuses
- Phase initiale après traitement des varices
- Insuffisance veineuse fonctionnelle
- Malformations veineuses
- Thrombose veineuse
- État après thrombose
- Syndrome post-thrombotique
- Prophylaxie de la thrombose sur patients mobiles
- Lymphœdème
- Œdème au cours de la grossesse
- Œdème post-traumatique/post-opératoire
- Œdème idiopathique cyclique
- Lipœdème à partir du stade II
- États congestifs par suite d'immobilité (syndrome congestif arthrogène, parésies et parésies partielles des extrémités)
- Œdèmes professionnels (travail en position debout, en position assise)
- Œdèmes médicamenteux, lorsqu'aucun changement n'est possible
- Adiposité avec insuffisance veineuse fonctionnelle
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges et douleurs congestives au cours de la grossesse
- État après inflammations
- Traitement des cicatrices

Contre-indications

Contre-indications absolues :

- Artériopathie périphérique avancée (si l'un de ces paramètres s'applique : IPTB < 0,5, pression artérielle à la cheville < 60 mmHg, pression à l'orteil < 30 mmHg ou TcPO₂ < 20 mmHg au dos du pied)
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Phlébite septique
- Phlébite bleue
- Risques à prendre en compte (choix du traitement selon le rapport bénéfice-risque) :**
- Dermatoses suintantes
- Intolérances aux matériaux des bas de contention
- Graves troubles sensoriels des extrémités
- Neuropathie périphérique avancée (ex. diabète sucré)
- Polyarthrite chronique

Aucune responsabilité ne saurait être engagée de notre part en cas de non-respect de ces contre-indications.

Risques et effets secondaires

Les bas de contention médicaux peuvent provoquer une nécrose cutanée et des lésions causées par la pression exercée sur les nerfs périphériques. Il est recommandé de rembourser les zones à risques. En cas de peau sensible, des démangeaisons et des problèmes de peau peuvent survenir sous les bas de contention. C'est pourquoi il est recommandé de prodiguer des soins cutanés adéquats.

En cas d'apparition des symptômes suivants, retirez immédiatement les bas et consultez votre médecin pour savoir si vous pouvez poursuivre le traitement : coloration bleue ou blanche des orteils, sensations anormales et engourdissements, douleurs croissantes, essoufflement et sueurs, limitations aiguës des mouvements.

Garantie

La durée de conservation des bas de contention médicaux est limitée à 3 ans lorsqu'ils sont stockés dans des conditions appropriées. À cela s'ajoute la durée de port, qui est de 6 mois maximum en cas d'utilisation régulière et d'entretien correct. Passé ce délai, les produits ne sont plus couverts par la garantie.

Sont généralement exclus de la garantie les défauts résultant d'une usure normale ou d'une utilisation inappropriée. Une utilisation inappropriée comprend également toute modification ultérieure du produit qui n'a pas été effectuée par le fabricant. Les légères différences de couleur susceptibles d'apparaître en raison du procédé de teinture individuel ne sont pas considérées comme des défauts. Les marchandises concernées ne peuvent donc pas être échangées ou retournées.

Le produit est destiné à être utilisé par un seul patient. Si le produit est remis à d'autres personnes en vue d'une réutilisation, la responsabilité du fabricant en matière de produit expire.

Élimination

À l'issue de la durée d'utilisation, veuillez éliminer le produit selon les réglementations locales.

Obligation de déclaration

En raison de réglementations légales, les patients et utilisateurs sont obligés de communiquer immédiatement au fabricant ou à l'administration nationale compétente (BfArM en Allemagne) tout fait grave ayant ou pouvant avoir entraîné la mort ou une aggravation significative de l'état de santé.

Beste gebruiker,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor compressiekousen van Ofa en danken u voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld. Neem even de tijd om deze productinformatie aandachtig door te lezen. Voor een maximaal effect van uw compressie-therapie!

Beoogd gebruik

Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipoeedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische compressiekousen

Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de terugstroom van het bloed versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

Belangrijke informatie

Draag medische compressiekousen alleen na overleg met uw arts. Als u dagelijks compressiekousen draagt en regelmatig naar medische controles gaat, draagt u bij aan het succes van uw behandeling! De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold vakpersoneel. Uw vakhandelaar zal u ook instructies geven over hoe u de compressiekousen moet aantrekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u tijdens het dragen last krijgt van acute pijn in de benen of van huidirritatie. Huidreacties in het gebied van de antislipboorden kunnen worden voorkomen door de antislipboord in de loop van de dag meerdere keren iets te verschuiven. preek het met uw behandelend arts als u de kousen wilt gebruiken in combinatie met andere medische hulpmiddelen. We testen onze producten als onderdeel van een uitgebreide kwaliteitsborging. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar. Herstel eventuele schade niet zelf, maar breng de kous terug naar de vakhandelaar waar u hem hebt gekocht. Als de stof gaat pillen, bijvoorbeeld door wrijving tegen andere kledingstukken, wordt de kwaliteit van de kous niet minder.

Instructies voor aantrekken

1. Om de kous aan te trekken, keert u de kous binnenstebuiten tot aan de voet. Schuif het voetgedeelte over uw tenen en vervolgens over de wreef.

2. Trek nu het beengedeelte voorzichtig over de hiel. Zorg ervoor dat u de kous niet aan de bovenkant of antislipboord omhoog trekt.

3. Schuif de rest van de kous gelijkmatig omhoog zonder hem uit te rekken. Verdeel de kous ten slotte over het been totdat deze kreukvrij is.

Verzorgingsinstructies

Het product is geschikt voor direct gebruik. We raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt. Was ze daarna dagelijks met de hand of op het fijnwasprogramma van uw wasmachine. Was de kousen apart met een wasmiddel voor de fijne was zonder wasverzachter (bijv. Ofa Clean speciaal wasmiddel) op maximaal 40 °C en spoel ze goed uit. De kousen kunnen voorzichtig worden gecentrifugeerd, maar wring ze niet uit. Laat uw compressiekousen aan de lucht drogen of gebruik het programma voor de fijne was van uw droger, maar plaats ze niet op de verwarming en stel ze niet bloot aan direct zonlicht. U mag de kousen nooit strijken. Om de effectiviteit van uw kousen te behouden, mag u geen chemische reinigingsmiddelen, benzine of wasverzachter gebruiken. Deze stoffen tasten het materiaal van de kousen aan. Compressiekousen zijn grotendeels ongevoelig voor vetten en oliën, maar mogen niet in aanraking komen met zalven. Kousen met siliconen-antislipboorden mogen over het algemeen niet in aanraking komen met oplosmiddelen, zalven, vochtinbrengende waslotions en lichaamscrèmes. Anders kan de grip van de antislipboorden blijvend worden aangetast (ook beenhaar en een droge huid kunnen de werking van de antislipboorden verminderen). Bewaar de kousen droog en beschermd tegen zon en hitte, indien mogelijk in de originele verpakking.

Binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

-  Fijne was
-  Niet bleken
-  Voorzichtig drogen
-  Niet strijken
-  Niet chemisch reinigen

Materiaalsamenstelling

Er is gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan) en bij sommige producten van katoen (Baumwolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Aantrektips

Trek de kousen 's morgens na het opstaan als eerste aan, zolang uw benen nog niet gezwollen zijn. Trek de compressiekous niet omhoog aan de bovenkant of antislipboord, maar schuif hem met uw handen van beneden naar boven. Om het aantrekken te vergemakkelijken en om het materiaal van de kous te beschermen, raden we het dragen van rubberen huishoudhandschoenen aan.

Sieraden en lange nagels kunnen de kous beschadigen. Zorg ook voor regelmatige voetverzorging en goed schoeisel. Vraag uw medische vakhandel naar de speciale Ofa Grip-handschoenen en de praktische Ofa aan- en uittrek hulpmiddelen voor compressiekousen met open en gesloten teentstuk.

Indicaties (zie ook richtlijn medische compressietherapie AWMF 037/005, stand 12/18)

- Verbetering van veneuze symptomen en kwaliteit van leven bij chronische veneuze aandoeningen
- Preventie en behandeling van veneus oedeem
- Preventie en behandeling van veneuze huidveranderingen
- Eczeem en pigmentatie
- Dermatoliposclerose en atrofie blanche
- Behandeling en pijnvermindering bij ulcus cruris venosum, ook recidiefprofylaxe
- Behandeling van arteriële en veneuze ulcus cruris (zie contra-indicaties!)
- Spataderen
- Eerste fase na behandeling van spataderen
- Functionele veneuze insufficiëntie
- Veneuze malformaties
- Veneuze trombose
- Toestand na trombose
- Posttrombotisch syndroom
- Tromboseprofylaxe bij mobiele patiënten
- Lymfoedeem
- Oedeem tijdens de zwangerschap
- Posttraumatisch/postoperatief oedeem
- Cyclisch-idiopathisch oedeem
- Lipoeedeem vanaf stadium II
- Congestie door immobiliteit (artrogeen congestiesyndroom, parese en gedeeltelijke parese van de ledematen)
- Werkgerelateerd oedeem (staand, zittend werk)
- Geneesmiddelgerelateerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
- Obesitas met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflamatoire dermatosen van de benen
- Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de zwangerschap
- Toestand na brandwonden
- Behandeling van littekens

Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties:

- Gevorderd perifeer arterieel vaatlijden (als een van deze parameters van toepassing is: EAI < 0,5, enkelbloeddruk < 60 mmHg, teendruk < 30 mmHg of TcPO₂ < 20 mmHg wreef)
- Gedecompenseerd hartfalen
- Septische flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Te overwegen risico's (therapiebesluit onder afweging van de voordelen ten opzichte van de risico's)**
- Vochtige dermatosen
- Onverdraagzaamheid tegen compressiekousmaterialen
- Ernstige sensibiliteitsstoornissen van de ledematen
- Gevorderde perifere neuropathie (bijv. diabetes mellitus)
- Chronische polyartritis

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

⚠ Risico's en bijwerkingen

Medische compressiekousen kunnen huidnecrose en drukschade aan de perifere zenuwen veroorzaken. Afdekken van risicoplekken wordt aanbevolen. Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen.

Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voortzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibiliteitsstoornissen, een doof gevoel, toenemende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Garantie

De houdbaarheid van medische compressiekousen is beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage resp. oneigenlijk gebruik zijn principieel uitgesloten van de garantie. Onder oneigenlijk gebruik vallen ook latere wijzigingen aan het product die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor de verzorging van één patiënt. Als het voor hergebruik wordt doorgegeven aan andere personen, vervalt de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht

Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product en die tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of tot de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, onmiddellijk te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

Gentile utente,

siamo lieti che abbia scelto le calze a compressione graduata di Ofa e La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in noi. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per un'efficacia ottimale della terapia compressiva!

Destinazione d'uso

Le calze a compressione graduata sono utilizzate nel trattamento delle malattie flebologiche e linfologiche delle braccia e delle gambe, nonché del lipedema. A seconda dell'indicazione vengono utilizzati prodotti diversi.

Principio di funzionamento delle calze a compressione graduata per uso medico

Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva indicazione e alla pressione controllata si accelera il ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.

Note importanti

Indossare le calze a compressione graduata per uso medico solo dopo aver consultato il medico. Attraverso l'uso quotidiano e controlli medici regolari il successo del Suo trattamento sarà garantito! Le calze devono essere fornite da personale specializzato. Il Suo rivenditore La consiglierà anche su come indossare correttamente le calze a compressione graduata. Se durante l'uso di questo prodotto dovessero manifestarsi dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, consulti immediatamente il medico. Le reazioni cutanee nella zona delle balze elastiche possono essere evitate spostando leggermente la balza più volte nel corso della giornata. Consulti il medico se le calze devono essere indossate in combinazione con altri dispositivi medici. Testiamo i nostri prodotti come parte di un sistema completo di garanzia della qualità. Nonostante ciò, qualora si verificassero problemi, contatti il Suo rivenditore. Non tenti di riparare eventuali danni, restituisca le calze al rivenditore presso cui sono state acquistate. I nodini di fibre che potrebbero formarsi a causa dell'attrito con altri capi non riducono la qualità della calza.

Istruzioni per la cura

Il prodotto è adatto per un uso immediato. Si consiglia di lavarlo prima di indossarlo per la prima volta. In seguito lavare ogni giorno a mano o in lavatrice con ciclo di lavaggio delicato. Lavare le calze separatamente con un detersivo delicato senza ammorbidente (ad es. detersivo speciale Ofa Clean) ad una temperatura massima di 40 °C e risciacquare bene. Le calze possono essere centrifugate delicatamente, ma non strizzarle. Asciugare le calze a compressione all'aria o in asciugatrice con ciclo delicato, ma non metterle sul termosifone né esporle alla luce diretta del sole. Non stirare mai le calze. Per mantenere l'efficacia delle calze, non utilizzare detergenti chimici, benzina o ammorbidente per tessuti. Queste sostanze attaccano il tessuto a maglia. Le calze a compressione sono in gran parte indifferenti ai grassi e agli oli, ma non devono entrare in contatto con gli unguenti. Le calze con balza elastica siliconata devono in genere non entrare in contatto con solventi, unguenti, lozioni detergenti sebo-restitutive e creme per il corpo.

In caso contrario, il potere adesivo delle balze elastiche può essere permanentemente compromesso (anche i peli delle gambe e la pelle secca possono limitare la funzione delle balze elastiche). Conservare le calze asciutte e protette dal sole e dal calore, se possibile nella confezione originale.

Lavare al rovescio e non utilizzare ammorbidente!

-  Ciclo di lavaggio delicato
-  Non candeggiare
-  Asciugare delicatamente
-  Non stirare
-  Non lavare a secco

Composizione del materiale

Poliammide (Polyamid), elastan (Elastan) e, per alcuni prodotti, cotone (Baumwolle). Per i dettagli specifici consultare l'etichetta in tessuto cucita all'interno della calza.

Istruzioni per indossare le calze

1. Per indossare la calza, capovolgere la calza fino al piede. Far scivolare la parte del piede sulle dita dei piedi e successivamente sul collo del piede.

2. Quindi tirare con attenzione la sezione della gamba sopra il tallone. Evitare di tirare la calza dal bordo superiore o dalla balza elastica.

3. Tirare il resto della calza in modo uniforme senza allungarla. Infine, stendere la calza sulla gamba fino a quando non presenti più grinze.

Consigli per indossare le calze

Indossare le calze la mattina presto dopo essersi alzati, quando le gambe non presentano ancora alcun gonfiore. Non tirare la calza a compressione verso l'alto in corrispondenza del bordo superiore o dalla balza elastica, ma piuttosto tirarla su con le mani dal basso verso l'alto. Per facilitare l'operazione e proteggere il tessuto a maglia, indossare guanti di gomma per la casa.

I gioielli e le unghie lunghe possono danneggiare la calza. Prendersi cura regolarmente dei piedi e assicurarsi che le scarpe siano in perfette condizioni. Informarsi presso il proprio rivenditore specializzato in campo medico sui guanti speciali Ofa Grip e sul pratico ausilio infilacalze Ofa per indossare e togliere le calze a compressione graduata con punta aperta e chiusa.

Indicazioni (vedere anche le linee guida per la terapia compressiva medica AWMF 037/005, vers. 12/18)

- Miglioramento dei sintomi venosi e della qualità della vita nelle malattie venose croniche
- Prevenzione e terapia dell'edema venoso
- Prevenzione e terapia delle alterazioni cutanee venose
- Eczema e pigmentazione
- Dermatoliposclerosi e atrofia bianca
- Terapia e riduzione del dolore per le ulcere venose del piede, anche per la profilassi delle recidive
- Terapia delle ulcere del piede correlate ad arterie e vene (vedere controindicazioni!)
- Varici
- Fase iniziale dopo la terapia delle varici
- Insufficienza venosa funzionale
- Malformazioni venose
- Trombosi venosa
- Condizione post-trombosi
- Sindrome post trombotica
- Profilassi della trombosi per pazienti deambulanti
- Linfedema
- Edema durante la gravidanza
- Edema post-traumatico/postoperatorio
- Edema idiopatico ciclico
- Lipedema a partire dalla fase II
- Congestione dovuta all'immobilità (sindrome da congestione artrogenica, paresi e paresi parziale dell'arto)
- Edema occupazionale (occupazioni che richiedono lo stare in piedi, seduti)
- Edema indotto da farmaci, se non è possibile una modifica della terapia
- Adiposità con insufficienza venosa funzionale
- Dermatosi infiammatorie delle gambe
- Nausea, vertigine e fastidi da congestione durante la gravidanza
- Condizione post-ustione
- Trattamento delle cicatrici

Controindicazioni

Controindicazioni assolute:

- malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata (se si verifica uno di questi parametri: ABPI < 0,5, pressione arteriosa della caviglia < 60°mmHg, pressione dell'alluce < 30 mmHg o tcpO2 < 20 mmHg sul dorso del piede)
- insufficienza cardiaca scompensata
- flebite settica
- flegmasia cerulea dolens
- Rischi da tenere in considerazione (assegnazione della terapia previa valutazione del rapporto rischio/beneficio)**
- dermatosi essudante
- incompatibilità con i materiali delle calze a compressione
- gravi disturbi della sensibilità dell'arto
- neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete mellito)
- poliartrite cronica

Si declina ogni responsabilità se queste controindicazioni non vengono rispettate.

Rischi ed effetti collaterali

Le calze a compressione graduata per uso medico possono causare necrosi cutanea e danni da pressione sui nervi periferici. Si consiglia un'imbottitura per le zone a rischio. In caso di pelle sensibile, le calze a compressione graduata possono causare prurito e problemi cutanei. Quindi si raccomanda un'adeguata cura della pelle.

In caso dei seguenti sintomi, rimuova immediatamente le calze e discuta con il Suo medico il proseguimento della terapia: Colorazione blu o bianca delle dita dei piedi, sensazioni di disestesia e intorpidimento, aumento del dolore, dispnea e attacchi di sudorazione, compromissione acuta del movimento.

Garanzia

La durata di conservazione delle calze a compressione per uso medico è limitata a 3 anni, se conservate correttamente. A ciò si aggiunge il tempo di utilizzo delle calze che, se indossate regolarmente e trattate con cura, è al massimo di 6 mesi. Dopo questo periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti alla normale usura o all'uso improprio. L'uso improprio comprende anche eventuali successive modifiche del prodotto che non siano state effettuate dal produttore. Il prodotto è destinato a un singolo paziente. Se viene trasmessa ad altre persone per il riutilizzo, la responsabilità del produttore decade.

Smaltimento

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.

Obbligo di notifica

A causa delle norme di legge, i pazienti e gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente al produttore e all'autorità nazionale competente (in Germania BfArM) qualsiasi incidente grave in relazione al prodotto e che abbia portato o possa aver portato a un significativo deterioramento dello stato di salute o alla morte.

Estimada usuaria, estimado usuario:

Gracias por haber elegido las medias de compresión de Ofa y por la confianza que ha depositado en nosotros. Le recomendamos que dedique un momento para leer detenidamente toda la información del producto. ¡Para que la eficacia de su terapia de compresión sea óptima!

Finalidad

Las medias de compresión se utilizan para el tratamiento de afecciones flebológicas y linfológicas de los brazos y las piernas, así como para casos de lipedema. Dependiendo de la indicación, se usan diferentes productos.

Principio de funcionamiento de las medias de compresión medicinales

Mediante productos adaptados a la indicación correspondiente y con presión controlada, se acelera el reflujo sanguíneo, se mejora la microcirculación del tejido y aumenta el flujo linfático.

 Notas importantes

Utilice medias de compresión médicas solo tras consultar con su médico. ¡El uso diario y los controles médicos regulares garantizan el éxito de su tratamiento! Las medias deben ser suministradas por personal médico cualificado. Su distribuidor especializado también le asesorará sobre cómo ponerse correctamente las medias de compresión. Si al llevar las medias puestas aparecen dolores agudos en las piernas o irritaciones cutáneas, consulte inmediatamente a un médico. Las reacciones cutáneas en la zona de las bandas adhesivas pueden prevenirse desplazando ligeramente la banda adhesiva varias veces a lo largo del día. Si desea utilizar las medias en combinación con otros productos médicos, consulte a su médico. Sometemos nuestros productos a un exhaustivo control de calidad. No obstante, si desea realizar alguna reclamación, póngase en contacto con su distribuidor especializado. No repare los daños usted mismo, sino devuelva las medias al distribuidor especializado donde las compró. Los nudos de fibra que pueden formarse por el roce con otras prendas no reducen la calidad de las medias.

Instrucciones de cuidado

El producto está preparado para usarse directamente. Sin embargo, se recomienda lavar el producto antes de usarlo por primera vez. Luego, lávelo todos los días a mano o en el ciclo de lavado delicado de la lavadora. Lave las medias por separado con un detergente suave, pero sin suavizante (por ejemplo, el detergente especial Ofa Clean), a una temperatura máxima de 40 °C, y aclárelas bien. Las medias se pueden centrifugar suavemente, pero no se pueden retorcer para escurrirlas. Seque sus medias de compresión al aire o en el ciclo de ropa delicada de su secadora, pero no las coloque sobre la calefacción ni las exponga a luz solar directa. Nunca planche las medias. Para mantener la eficacia de sus medias, no utilice detergentes químicos, gasolina ni suavizante. Estas sustancias debilitan la tela de punto. Las medias de compresión soportan bastante bien grasas y aceites, pero no deben entrar en contacto con ungüentos. En general, las medias con bandas adherentes recubiertas de silicona no deben entrar en contacto con disolventes, ungüentos, lociones de lavado hidratantes ni cremas corporales. De lo contrario, la adherencia de las bandas adherentes puede perderse permanentemente (también el vello de las piernas y la piel seca pueden limitar el funcionamiento de las bandas adherentes). Almacene las medias secas y protegidas del sol y del calor, en el envase original si es posible.

¡Lavar del revés y sin suavizante!

-  Ciclo de lavado delicado
-  No usar lejía
-  Secar a baja temperatura
-  No planchar
-  No lavar en seco

Composición de los materiales

Se utiliza poliamida (Polyamid), elastano (Elastan) y, en algunos productos, algodón (Baumwolle). Puede obtener los datos concretos en la etiqueta textil que va cosida en la media.

Instrucciones para ponerse las medias

- 1.** Para ponerse las medias, póngalas del revés hasta el pie. Deslice la parte del pie sobre los dedos y luego sobre el empeine.
- 2.** A continuación, pase con cuidado la parte correspondiente a la pierna sobre el talón. Evite subir las medias tirando del borde superior o del borde de la banda adherente.
- 3.** Póngase el resto de la media de forma uniforme, hacia arriba, sin estirla en exceso. Por último, extienda la media por toda la pierna hasta que no queden arrugas.

Recomendaciones de uso

Póngase las medias a primera hora de la mañana, nada más levantarse, mientras sus piernas aún no estén hinchadas. No tire de la media de compresión hacia arriba por el borde inferior o adhesivo, sino deslícela con las manos de abajo hacia arriba. Para facilitar su colocación y proteger el tejido, se recomienda utilizar guantes de goma domésticos. Las joyas y las uñas largas pueden dañar las medias.

Preste atención también al cuidado regular de los pies y al uso de calzado adecuado. Pregunte en su tienda especializada en productos médicos por los guantes especiales Ofa Grip y las prácticas ayudas para la colocación y la retirada de las medias de compresión con puntera abierta y cerrada de Ofa.

Indicaciones (consulte también la guía Terapia de compresión medicinal AWMF 037/005, de 12/18)

- Mejora de los síntomas venosos y la calidad de vida en las enfermedades venosas crónicas
- Prevención y tratamiento de edemas venosos
- Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas venosas
- Eccema y pigmentación
- Dermatoliposclerosis y atrofia blanca
- Tratamiento y reducción del dolor en Ulcus cruris venosum; también prevención de recaídas
- Tratamiento de Ulcus cruris de origen arterioso y venoso (¡consulte las contraindicaciones!)
- Varices
- Fase inicial después del tratamiento de varices
- Insuficiencia venosa funcional
- Malformaciones venosas
- Trombosis venosa
- Estado posterior a la trombosis
- Síndrome posttrombótico
- Profilaxis de la trombosis en pacientes móviles
- Linfedema
- Edema durante el embarazo
- Edema postraumático/postoperatorio
- Edema idiopático cíclico
- Lipedema a partir del estadio II
- Estados congestivos a causa de la inmovilidad (síndrome congestivo artrógeno, parestias y parestias parciales de la extremidad)
- Edema causado por el trabajo (empleos que exijan estar mucho tiempo de pie o sentado)
- Edema por medicamentos si no es posible el cambio
- Obesidad con insuficiencia venosa funcional
- Dermatitis inflamatoria en las piernas
- Náuseas, mareos y problemas de congestión durante el embarazo
- Estado posterior a quemaduras
- Tratamiento de cicatrices

Contraindicaciones

Contraindicaciones absolutas:

- Enfermedad obstructiva arterial periférica avanzada (si se cumple alguno de estos parámetros: ITB < 0,5, presión arterial en el tobillo < 60 mmHg, presión en el dedo del pie < 30 mmHg o TcPO2 < 20 mmHg en el empeine)
- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Flebitis séptica
- Flegmasia cerúlea dolens

Riesgos que se deben tener en cuenta (decisión terapéutica tras evaluar el balance de beneficios-riesgos)

- Dermatitis húmeda
- Intolerancia a los materiales de las medias de compresión
- Trastornos graves de la sensibilidad en la extremidad
- Neuropatía periférica avanzada (por ejemplo, diabetes mellitus)
- Poliartritis crónica

En caso de incumplimiento de estas contraindicaciones, la empresa declina cualquier responsabilidad.

Riesgos y efectos secundarios

Las medias de compresión médicas pueden causar necrosis de la piel y daños en los nervios periféricos derivados de la presión. Se recomienda proteger las zonas más sensibles con material acolchado. En caso de piel sensible, las medias de compresión pueden causar picor y problemas cutáneos. Por lo tanto, se recomienda un cuidado adecuado de la piel.

Si se presentan los siguientes síntomas, quítese inmediatamente las medias y consulte con su médico si debe continuar con el tratamiento: coloración azulada o blanquecina en los dedos de los pies, sensaciones anormales y entu-

mecimiento, aumento del dolor, dificultad para respirar y sudoración profusa, restricciones agudas del movimiento.

Garantía

La vida útil de las medias de compresión médicas es de 3 años si se almacenan correctamente. A esto hay que añadir el tiempo de uso, correspondiente a un máximo de 6 meses con un uso regular y un cuidado adecuado. Una vez transcurrido este plazo, los productos quedarán excluidos de la garantía.

Quedan excluidos de la garantía los defectos que se deban al desgaste normal o al uso inadecuado. También se considera uso inadecuado cualquier modificación posterior del producto que no haya sido realizada por el fabricante. No se consideran defectos las ligeras desviaciones de color que puedan producirse debido al proceso individual de teñido. Por tanto, dichos productos quedan excluidos de cambios y devoluciones.

El producto está destinado al uso por un solo paciente. Si se transfiere a otras personas para su reutilización, se extinguirá la responsabilidad del fabricante por el producto.

Eliminación

Al final de su vida útil, deseche el producto de acuerdo con la normativa local.

Declaración obligatoria

La legislación obliga a los pacientes y a los usuarios a notificar rápidamente al fabricante y a la autoridad nacional competente (BfArM en Alemania) cualquier incidente grave relacionado con el producto que haya causado o pudiera haber causado un deterioro significativo del estado de salud o la muerte.

Cara utilizadora, caro utilizador,

É uma alegria para nós que tenha escolhido as meias de compressão da Ofa e agradecemos-lhe a sua confiança. Tome um momento para ler atentamente estas informações do produto. Para a máxima eficácia da sua terapia de compressão!

Finalidade

As meias de compressão são utilizadas para a terapia de doenças flebogénicas e linfológicas dos braços e das pernas, bem como em caso de linfedemas. Consoante as indicações, são utilizados diferentes produtos.

Princípio de atuação das meias clínicas de compressão

Através dos produtos correspondentes à indicação específica e de uma pressão controlada, o retorno venoso é acelerado, a microcirculação nos tecidos é melhorada e o fluxo linfático é aumentado.

 Instruções importantes

Use meias clínicas de compressão apenas depois de falar com o seu médico. Com uma utilização diária e controlos médicos regulares assegurará o êxito do seu tratamento! A distribuição das meias tem de ser feita por pessoal especializado com formação clínica. O seu revendedor especializado também o aconselhará sobre a maneira correta de calçar as meias de compressão. Caso ocorram dores agudas nas pernas ou irritação cutânea durante a utilização, consulte imediatamente o médico. Reações cutâneas na área das faixas adesivas podem ser evitadas deslocando ligeiramente a faixa adesiva várias vezes ao longo do dia. Caso seja necessário usar as meias em conjunto com outros dispositivos médicos, aconselhe-se com o seu médico. Testamos os nossos produtos no âmbito de um controlo de qualidade abrangente. Caso, apesar de tudo, tenha alguma reclamação, dirija-se ao seu revendedor especializado. Não tente reparar quaisquer danos; devolva a meia ao revendedor especializado a quem a comprou. Pequenos borbotos, resultantes da fricção com outras peças de roupa, não afetam a qualidade das meias.

Instruções de manutenção

O produto destina-se a uma utilização cuidada. É recomendável lavá-lo antes da primeira utilização. Em seguida, lavar diariamente à mão ou à máquina no ciclo para roupa delicada. Lave as meias separadamente com um detergente suave e sem amaciador (p.ex. detergente especial Ofa Clean), a uma temperatura máxima de 40°C e enxague bem. As meias podem ser centrifugadas com cuidado, mas não devem ser torcidas. Seque as suas meias de compressão ao ar ou no ciclo para roupa delicada da máquina de secar, mas não as coloque sobre um aquecimento, nem exponha à luz solar direta. Nunca passe as meias a ferro. Para preservar a eficácia das suas meias, não utilize produtos químicos de limpeza, benzina ou amaciador. Essas substâncias danificam a malha. As meias de compressão são geralmente resistentes a gorduras e óleos, mas não devem entrar em contacto com cremes. Meias com faixas adesivas revestidas a silicone não devem entrar em contacto com solventes, cremes, loções gordas e leites corporais. Caso contrário, a aderência das faixas adesivas pode ficar comprometida (pêlos nas pernas e pele seca também podem limitar a funcionalidade das faixas adesivas). Guarde as meias bem secas e protegidas do sol e do calor, se possível na embalagem original.

Lavar do avesso e não utilizar amaciador!

-  Ciclo para roupa delicada
-  Não branquear
-  Secar no ciclo para roupa delicada
-  Não passar a ferro
-  Não limpar com produtos químicos

Composição do material

É utilizada poliamida (Polyamid), elastano (Elastan) e, nalguns produtos, algodão (Baumwolle). A indicações concretas podem ser consultadas no rótulo têxtil pregado à meia.

Como calçar

1. Para calçar, vire a meia do avesso para a colocar no pé. Desenrole a parte do pé sobre os dedos e, depois, sobre o peito do pé.
2. Em seguida, puxe cuidadosamente a parte da perna sobre o calcanhar. Evite puxar a meia pela extremidade ou pela faixa adesiva.
3. Desenrole o resto da meia para cima de maneira uniforme, sem esticar excessivamente. Por fim, distribua a meia sobre a perna até assentar sem rugas.

Dicas para calçar as meias

Calce as meias logo de manhã, quando se levantar, enquanto as pernas ainda não estão inchadas. Não puxe as meias de compressão pela extremidade ou pela faixa adesiva, vá-as esticando com as mãos de baixo para cima. Para facilitar o ato de calçar as meias e preservar a malha, é recomendável usar luvas de borracha de uso doméstico.

Jóias e unhas compridas podem danificar a meia. Tenha atenção aos cuidados com os pés e use calçado confortável. Pergunte ao seu revendedor médico sobre as luvas especiais Ofa Grip e os práticos auxiliares Ofa para calçar e descalçar meias de compressão com biqueira aberta e fechada.

Indicações (consultar também o Guia para a Terapia de Compressão Medicinal AWMF 037/005, versão 12/18)

- Melhoria dos sintomas venosos e da qualidade de vida em doenças venosas crônicas
- Prevenção e terapia de edemas venosos
- Prevenção e terapia de alterações cutâneas de origem venosa
- Eczema e pigmentação
- Dermatolipoesclerose e atrofia branca
- Terapia e redução da dor em *Ulcus cruris venosum*, bem como profilaxia da recidiva
- Terapia da *Ulcus cruris* arterial e venosa (ver contraindicações!)
- Varicose
- Fase inicial após terapia da varicose
- Insuficiência venosa funcional
- Malformações venosas
- Trombose venosa
- Estado após trombose
- Síndrome pós-trombótica
- Profilaxia da trombose em doentes com mobilidade
- Linfedema
- Edema na gravidez
- Edema pós-traumático/pós-operatório
- Edema idiopático cíclico
- Lipedema a partir do estágio II
- Estados de congestionamento na sequência de imobilidade (síndrome de congestionamento artrogênico, parestias e parestias parciais da extremidade)
- Edema de origem ocupacional (profissões que implicam longos períodos em pé ou sentado)
- Edema de origem medicamentosa, quando não é possível substituir o fármaco
- Adiposidade com insuficiência venosa funcional
- Dermatoses inflamatórias das pernas
- Náuseas, tonturas e congestionamento na gravidez
- Estado após queimaduras
- Tratamento de cicatrizes

Contraindicações

Contraindicações absolutas:

- Doença arterial periférica avançada (caso se aplique algum destes parâmetros: ABPI < 0,5, pressão arterial no calcanhar < 60 mmHg, pressão no dedo do pé < 30 mmHg ou TcPO₂ < 20 mmHg no arco do pé)
- Insuficiência cardíaca descompensada
- Flebite séptica
- Flegmasia cerulea dolens

Riscos a tomar a consideração (decisão sobre a terapia com base na ponderação risco-benefício)

- Dermatoses húmidas
- Intolerância aos materiais das meias de compressão
- Perturbações severas de sensibilidade da extremidade
- Neuropatia periférica avançada (p.ex., Diabetes mellitus)
- Poliartrite crônica

Caso estas contraindicações não sejam respeitadas, declinamos qualquer responsabilidade.

Riscos e efeitos secundários

As meias de compressão médicas podem causar necrose na pele e danos de pressão nos nervos periféricos. Recomenda-se proteger as zonas vulneráveis com material acolchoado. Em caso de pele sensível, pode ocorrer comichão e problemas de pele por baixo das meias de compressão. Por isso são recomendados cuidados de pele adequados.

Caso ocorram os sintomas seguintes, descalçar imediatamente as meias e consultar o médico para decidir sobre a continuidade da terapia:
Dedos arroxeados ou brancos, sensações anormais e de dormência, dores crescentes, falta de ar e suores, limitações agudas dos movimentos.

Garantia

O prazo de validade das meias clínicas de compressão, em condições de armazenamento corretas, é de 3 anos. O período de utilização, em condições de uso regular e cuidados adequados, é de 6 meses, no máximo. No fim deste prazo os produtos deixam de estar abrangidos pela garantia. Essencialmente, são excluídos da garantia defeitos resultantes do desgaste normal ou de uma utilização incorreta. A utilização incorreta inclui também alterações posteriores ao produto, que não tenham sido realizadas pelo fabricante. O produto destina-se ao cuidado de um único doente. Caso seja transmitido a outra pessoa para reutilização, a responsabilidade do fabricante caduca.

Eliminação

Após o fim do prazo de utilização, elimine o produto em conformidade com as normas locais.

Dever de notificação

Tal como exigido por lei, os doentes e utilizadores têm o dever de comunicar imediatamente, ao fabricante ou às autoridades nacionais competentes (na Alemanha, a BfArM) quaisquer ocorrências graves relacionadas com o produto, que tenham levado, ou possam levar, a um agravamento do estado de saúde ou à morte.

Αγαπητοί χρήστες,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τις κάλτσες συμπίεσης της εταιρείας Ofa. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε επιμελώς τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος. Οι κάλτσες έχουν σχεδιαστεί ώστε η προσωπική σας θεραπεία συμπίεσης να έχει βέλτιστη αποτελεσματικότητα!

Σκοπός χρήσης

Οι κάλτσες συμπίεσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των φλεβικών και λεμφικών παθήσεων των χεριών και των ποδιών, καθώς και σε περίπτωση λιποειδωμάτων. Ανάλογα με την εκάστοτε ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προϊόντα.

Τρόπος δράσης των ιατρικών καλτσών συμπίεσης

Χάρη στα προϊόντα που έχουν προσαρμοστεί στις εκάστοτε ενδείξεις και λόγω της ελεγχόμενης πίεσης, η επιστροφή του αίματος επιταχύνεται, η μικροκυκλοφορία στον ιστό βελτιώνεται και η λεμφική ροή αυξάνεται.

 Σημαντικές υποδείξεις

Φοράτε τις ιατρικές κάλτσες συμπίεσης μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό σας. Η επιτυχής θεραπεία διασφαλίζεται μέσω της καθημερινής χρήσης των καλτσών συμπίεσης, καθώς και μέσω των τακτικών ιατρικών ελέγχων! Οι κάλτσες πρέπει να παρέχονται από ιατρικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο τοπικός έμπορος θα σας δείξει επίσης πώς να φοράτε σωστά τις κάλτσες συμπίεσης. Αν κατά τη χρήση παρουσιαστούν οξείες πόνοι στα πόδια ή δερματικοί ερεθισμοί, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. Μπορείτε να μετατοπίσετε ελαφρώς το πλαίσιο επικόλλησης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την πρόληψη ενδεχόμενων δερματικών αντιδράσεων στην περιοχή των πλαισίων επικόλλησης. Εάν θα πρέπει να φορέσετε τις κάλτσες σε συνδυασμό με άλλα ιατρικά βοηθήματα, παρακαλούμε να το συζητήσετε με τον θεράποντα ιατρό. Ελέγχουμε τα παρεχόμενα προϊόντα μας στα πλαίσια ενός εκτενούς ελέγχου ποιότητας. Ωστόσο, αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα, απευθυνθείτε στον τοπικό έμπορο. Μην επισκευάζετε τις ζημιές μόνοι σας. Σε περίπτωση ζημιών επιστρέψτε τις κάλτσες στον τοπικό έμπορο, από τον οποίο τις αγοράσατε. Οι κόμποι των ινών που μπορούν να δημιουργηθούν από την τριβή με άλλα ρούχα δεν μειώνουν την ποιότητα των καλτσών.

Οδηγίες χρήσης

1. Για να φορέσετε την κάλτσα, γυρίστε την ανάποδα μέχρι το πέλμα. Τεντώστε το τμήμα του πέλματος επάνω από τα δάχτυλα και, στη συνέχεια, επάνω από τον τارسό.

2. Τώρα τραβήξτε προσεκτικά το τμήμα ποδιού επάνω από τη φτέρνα. Κατά τη διαδικασία αυτή, μην τραβάτε την κάλτσα από το πλαίσιο κλεισίματος ή επικόλλησης.

3. Τεντώστε ομοιόμορφα και ψηλά την υπόλοιπη κάλτσα, χωρίς να την τεντώνετε υπερβολικά. Τέλος, διανείμετε την κάλτσα στο πόδι, μέχρι να εφαρμόζει χωρίς τσακίσματα.

Υποδείξεις φροντίδας

Το προϊόν ενδείκνυται για άμεση χρήση. Σας συνιστούμε να πλύνετε το προϊόν προτού το φορέσετε για πρώτη φορά. Κατόπιν πρέπει να το πλένετε καθημερινά με το χέρι ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του πλυντηρίου σας. Οι κάλτσες πρέπει να πλένονται ξεχωριστά με απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα και χωρίς μαλακτικό (π.χ. με το ειδικό απορρυπαντικό Ofa Clean) σε έως 40°C, ενώ πρέπει να ξεπλένονται καλά. Μπορείτε να στύβετε απαλά τις κάλτσες, αλλά όχι τελείως. Στεγνώνετε τις κάλτσες συμπίεσης σε εξωτερικό χώρο ή στη λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του στεγνωτηρίου σας, αλλά μην τις τοποθετείτε πάνω σε θερμαντικά σώματα και μην τις εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Απαγορεύεται ρητά να σιδερώνετε τις κάλτσες. Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των καλτσών, μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μέσα, βενζίνη ή μαλακτικό. Αυτές οι ουσίες διαβρώνουν το πλεχτό ύφασμα. Οι κάλτσες συμπίεσης δεν είναι ευαίσθητες σε λίπη και λάδια, αλλά δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με αλοιφές. Οι κάλτσες με πλαίσια επικόλλησης με επίστρωση σιλικόνης δεν θα πρέπει, γενικά, να έρχονται σε επαφή με διαλυτικά μέσα, αλοιφές, ενυδατικές λοσιόν καθαρισμού και κρέμες σώματος. Σε διαφορετική περίπτωση, η ικανότητα πρόσφυσης των πλαισίων επικόλλησης μπορεί να μειωθεί ανεπανόρθωτα (η τριχοφυΐα στα πόδια και το ξηρό δέρμα μπορούν επίσης να περιορίσουν τη λειτουργία των πλαισίων επικόλλησης). Αποθηκεύετε τις κάλτσες σε στεγνό μέρος, το οποίο προστατεύεται από τον ήλιο και τη ζέστη, και ιδανικά στην αρχική συσκευασία τους.

Παρακαλούμε πλένετε τις κάλτσες γυρισμένες ανάποδα και μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό!

-  Λειτουργία πλύσης ευαίσθητων ρούχων
-  Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
-  Στεγνώνετε απαλά
-  Μην σιδερώνετε
-  Μην εκτελείτε χημικό καθαρισμό

Σύνθεση υλικού

Χρησιμοποιείται πολυαμίδιο (Polyamid), ίνες ελαστομερούς (Elastan) και σε ορισμένα προϊόντα, βαμβάκι (Baumwolle). Για τα ακριβή ανατρέξτε στην υφασμάτινη ετικέτα που είναι ραμμένη επάνω στις κάλτσες.

Συμβουλές πώς να φορέσετε τις κάλτσες

Φοράτε τις κάλτσες νωρίς το πρωί μετά το ξύπνημα, όσο τα πόδια σας δεν είναι ακόμη πρησμένα. Απαγορεύεται να τραβάτε τις κάλτσες συμπίεσης προς τα επάνω από το πλαίσιο κλεισίματος ή επικόλλησης, αλλά πρέπει να τις τεντώνετε με τα χέρια από κάτω προς τα επάνω. Για να τις βάλετε πιο εύκολα και για να προστατεύσετε το πλεχτό ύφασμα, σας συνιστούμε να φοράτε ελαστικά γάντια οικιακής χρήσης.

Τα κοσμήματα και τα μακριά νύχια των χεριών μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις κάλτσες. Επιπλέον πρέπει να φροντίζετε τακτικά τα πόδια σας και να φοράτε παπούτσια χωρίς ελαττώματα. Ρωτήστε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα ιατρικών ειδών για τα ειδικά γάντια Ofa Grip καθώς και για τα βοηθήματα εφαρμογής και αφαίρεσης καλτσών συμπίεσης με ανοιχτά ή κλειστά δάχτυλα.

Ενδείξεις (βλέπε επίσης Κατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με την Ιατρική Θεραπεία Συμπίεσης AWMF 037/005, Έκδοση 12/18)

- Βελτίωση φλεβικών συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε περίπτωση χρόνιων φλεβικών παθήσεων
- Πρόληψη και θεραπεία φλεβικών οιδημάτων
- Πρόληψη και θεραπεία φλεβικών αλλαγών του δέρματος
- Εκζεμα με μείζονα χρώση
- Δερματολογική υποκλήρωση και λευκή ατροφία
- Θεραπεία και μείωση πόνου σε περίπτωση φλεβικού έλκους ποδιών, καθώς και προφύλαξη από υποτροπή
- Θεραπεία του αρτηριακού και φλεβικού έλκους ποδιών (βλέπε “Αντενδείξεις”.)
- Κιρσοί
- Αρχικό στάδιο μετά τη θεραπεία κιρσών
- Λειτουργική φλεβική ανεπάρκεια
- Φλεβικές δυσμορφίες
- Φλεβική θρόμβωση
- Κατάσταση κατόπιν θρόμβωσης
- Μεταθρομβωτικό σύνδρομο
- Θρομβοπροφύλαξη σε μετακινούμενους ασθενείς
- Λεμφοίδημα
- Οίδημα κατά την εγκυμοσύνη
- Μετατραυματικό/μετεγχειρητικό οίδημα
- Ιδιοπαθές κυκλικό οίδημα
- Λιποίδημα σταδίου II και πάνω
- Συμφορητικές καταστάσεις που προκαλούνται από ακινησία (αρθρογενές συμφορητικό σύνδρομο, πάρεση και μερική πάρεση στο άκρο)
- Οιδήματα λόγω επαγγέλματος (εργασία σε όρθια ή καθιστή στάση)
- Οιδήματα λόγω φαρμάκων, όταν δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θεραπείας
- Παχυσαρκία με λειτουργική φλεβική ανεπάρκεια
- Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες των ποδιών
- Ναυτία, ίλιγγοι και παράπονα συμφορητικά κατά την εγκυμοσύνη
- Κατάσταση μετά από εγκαύματα
- Θεραπεία ουλών

Αντενδείξεις

Απόλυτες αντενδείξεις:

- Προχωρημένη περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσος (εάν ισχύει κάποια από αυτές τις παραμέτρους: Δείκτης πίεσης αστράγαλου - βραχιονίου (ABPI) < 0,5, Αρτηριακή πίεση στον αστράγαλο < 60 mmHg, Πίεση στο δάκτυλο του ποδιού < 30 mmHg ή Διαδερμική μέτρηση πίεσης οξυγόνου (TCPO₂) < 20 mmHg Ταρσός ποδιού)
- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- Σηπτική φλεβίτιδα
- Phlegmasia coerulea dolens (κυανή επώδυνη φλεγμονή)
- Κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη (Επιλογή κατάλληλης θεραπείας με βάση την εκτίμηση του οφέλους έναντι του κινδύνου)**
- Υδαρείς δερματοπάθειες
- Δυσανεξίες σε υλικά καλτσών συμπίεσης
- Βαρείς αισθητηριακές διαταραχές στο άκρο
- Προχωρημένη περιφερική νευροπάθεια (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης)
- Χρόνια πολυαρθρίτιδα

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων αντενδείξεων.

Κίνδυνοι και παρενέργειες

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης μπορούν να προκαλέσουν νέκρωση του δέρματος και βλάβες στα περιφερικά νεύρα λόγω υπερβολικής συμπίεσης. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μαλακό υλικό στις ευάλωτες περιοχές. Σε περίπτωση ευαισθησίας του δέρματος, μπορεί να προκληθεί κνησμός και δερματικά προβλήματα κάτω από τις κάλτσες συμπίεσης. Για αυτόν το λόγο, συνιστούμε την επαρκή φροντίδα του δέρματος.

Αν εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα, βγάλτε αμέσως τις κάλτσες και συζητήστε τη συνέχιση της θεραπείας με τον γιατρό σας: Μπλε ή λευκές αποχρώσεις στα δάχτυλα, παραισθησία και

αίσθηση μούδιασματος, πόνοι αυξανόμενης έντασης, δύσπνοια και εφίδρωση, σημαντικοί περιορισμοί στην κίνηση.

Παροχή εγγύησης

Η δυνατότητα αποθήκευσης των ιατρικών καλτσών συμπίεσης περιορίζεται σε 3 χρόνια, εφόσον η αποθήκευση γίνεται με σωστό τρόπο. Σε αυτά προστίθεται το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης το οποίο ανέρχεται σε 6 μήνες με τακτική χρήση και σωστή φροντίδα. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η εγγύηση των προϊόντων παύει να ισχύει. Κατά κανόνα, από την εγγύηση εξαιρούνται τα ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή σε λανθασμένη χρήση. Η λανθασμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης τη μεταγενέστερη τροποποίηση του προϊόντος, η οποία δεν έχει διεξαχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το προϊόν προβλέπεται για χρήση από έναν μόνο ασθενή. Αν το προϊόν δοθεί σε άλλα άτομα και επαναχρησιμοποιηθεί, τότε η εγγύηση του κατασκευαστή παύει να ισχύει.

Απορρίψη

Μετά το τέλος της διάρκειας χρήσης, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Υποχρέωση δήλωσης

Λόγω των νομικών διατάξεων, οι ασθενείς και οι χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν αμέσως στον κατασκευαστή και στους αρμόδιους εθνικούς φορείς (στη Γερμανία BfArM) τα σοβαρά περιστατικά που παρουσιάζονται και έχουν προκαλέσει ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση της υγείας ή θάνατο από τη χρήση του προϊόντος.

Sayın kullanıcı,

Ofa kompresyon çoraplarını tercih ettiğiniz ve bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Kompresyon tedavinizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen bu ürün bilgilerini dikkatle okuyun.

Kullanım amacı

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklardaki flebolojik ve lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

Tıbbi kompresyon çoraplarının etki şekli

İlgili endikasyona ve kontrollü basınca göre ayarlanmış ürünlerle kan dolaşımı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artar.

⚠️ Önemli bilgiler

Tıbbi kompresyon çoraplarını mutlaka doktorunuza danıştıktan sonra kullanın. Kompresyon çoraplarınızı her gün giymeniz ve düzenli tıbbi kontroller yaptırmanız, tedavinizin başarılı olmasını sağlar! Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmelidir. Medikal ürün satıcınız, kompresyon çoraplarınızı nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede de bulunacaktır. Çoraplarınızı giydiğinizde akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın. Yapışkan bantların temas ettiği bölgelerde cilt reaksiyonlarını önlemek için bantları gün boyunca birkaç kez hafifçe hareket ettirin. Çorapların diğer medikal yardımcı araçlarla birlikte giyilmesi gerekiyorsa lütfen bu konuda tedaviyi uygulayan doktora danışın. Ürünlerimizi, kapsamlı kalite güvence sürecimiz dahilinde test ederiz. Şikayetiniz olursa lütfen medikal ürün satıcınızla iletişime geçin. Hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız medikal ürün satıcısına geri götürün. Diğer giysilerle sürtünmeden dolayı oluşabilecek lif topakları, çorabın kalitesini olumsuz yönde etkilemez.

Bakım

Ürün hemen kullanıma uygundur. İlk kullanımdan önce yıkamanızı tavsiye ederiz. Ardından her gün elle veya makinenizin hassas ayarında yıkayın. Çorapları yumuşatıcı içermeyen bir hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin Ofa Clean özel deterjan) maksimum 40 °C'de ayrı yıkayın ve iyice durulayın. Çoraplar makinenin hassas sıkma ayarıyla sıkılabilir, ancak elle burularak sıkılmamalıdır. Kompresyon çoraplarınızı kurutucunuzun hassas ayarında havayla kurutabilirsiniz, ancak bir ısıtıcının üzerine koymayın veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Çorapları asla ütölemeyin. Çoraplarınızın etkisini korumak için lütfen hiçbir kimyasal temizlik maddesi, benzin veya yumuşatıcı kullanmayın. Bu maddeler örme kumaşa zarar verir. Kompresyon çorapları katı ve sıvı yağlardan büyük ölçüde etkilenmez, ancak merhemlerle temas etmemelidir. Genel bir kural olarak, silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar çözücüler, merhemler, nemlendirici yıkama losyonları ve vücut kremleri ile temas etmemelidir.

Lütfen ters yüz ederek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

-  Hassas ayarda yıkayın
-  Ağartıcı kullanmayın
-  Nazıkçe kurutun
-  Ütölemeyin
-  Kuru temizleme yapmayın

Malzeme bileşimi

Poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı ürünlerde pamuk (Baumwolle) kullanılmaktadır. Spesifik bilgiler, çorabınızın dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

Giyme talimatları

1. Giymek için çorabı ayak kısmına kadar ters çevirin. Ayak bölümünü ayak parmaklarınızın ve ardından ayağınızın üstüne çekin.
2. Bacak bölümünü dikkatlice topuğunuzun üzerinden çekin. Lütfen çorabı ucundan veya yapışkan kenardan yukarı çekmeyin.
3. Çorabın kalan kısmını germeden eşit bir şekilde çekin. Son olarak çorabı kırışsız hale gelinceye kadar bacağınızın üzerinde dağıtın.

Giyme önerileri

Çorapları sabah kalktığınızda, bacaklarınız henüz şişmemişken giyin. Lütfen kompresyon çorabını üst kısımdan veya yapışkan kenarından çekmeyin, ellerinizle aşağıdan yukarıya doğru kaydırın. Örne kumaşı kolayca giymek ve korumak için ev tipi lastik eldiven giymenizi tavsiye ederiz.

Takı ve uzun tırnaklar çoraba zarar verebilir. Lütfen düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye de dikkat edin. Medikal ürün satıcınızdan, Ofa Grip özel eldivenler ile açık ve kapalı burunlu kompresyon çorapları için Ofa pratik giyme ve çıkarma yardımcısı hakkında bilgi alın.

Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tıbbi Kompresyon Tedavisi yönergesine de bakın)

- Venöz semptomların ve kronik venöz hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
- Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
- Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve tedavisi
- Egzama ve pigmentasyon
- Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi
- Nüksün önlenmesi dahil olmak üzere venöz bacak ülserlerinde tedavi ve ağrı azaltma
- Arteriyel ve venöz bacak ülserlerinin tedavisi (bkz. Kontrendikasyonlar!)
- Varis
- Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
- Fonksiyonel venöz yetmezlik
- Venöz malformasyonlar
- Venöz tromboz
- Tromboz sonrası durum
- Posttrombotik sendrom
- Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
- Lenfödem
- Hamilelikte ödem
- Travma sonrası/ameliyat sonrası ödem
- Sıklık idiyopatik ödem
- 2. evreden itibaren lipödem
- Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan konjesyon durumları (artrojenik konjesyon sendromu, ekstremitelerde parez ve kısmi parez)
- Meslek kaynaklı ödem (ayakta, oturarak yapılan işler)
- Değişiklik mümkün değilse ilaca bağlı ödem
- Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde adipozite
- Bacaklarda iltihaplı dermatoz
- Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve konjesyon şikayetleri
- Yanık sonrası durum
- Yara izi tedavisi

Kontrendikasyonlar

Mutlak kontrendikasyonlar:

- İleri periferik arter hastalığı (bu parametrelerden biri görüldüğünde: ABPI < 0,5, ayak bileği damar basıncı < 60 mmHg, ayak parmağı basıncı < 30 mmHg veya TcPO₂ < 20 mmHg ayak sırtı)
- Dekompanse kalp yetmezliği
- Septik flebit
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dikkate alınacak riskler**
- (Terapiye fayda/risk değerlendirme-sinden sonra karar verilecektir)**
- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemelerine karşı intolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Riskler ve yan etkiler

Medikal kompresyon çorapları deri nekrozu ve periferik sinirlerde baskı hasarına yol açabilir. Tehlike altında olan bölümlere koruyucu tampon koyulması tavsiye edilir. Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir.

Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorapları hemen çıkarın ve tedaviye devam edip edilemeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Garanti

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Buna ek olarak kullanım süresi, düzenli kullanım ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonradan yapılan değişiklikler de usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. Bireysel boyama işlemi nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif renk sapmaları bir kusur olarak kabul edilmez. Bu nedenle ilgili mallar borsalardan ve iadelerden hariç tutulur. Ürün, tek bir hastanın tedavisi için tasarlanmıştır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölgenizdeki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Bildirim zorunluluğu

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuca veya ölüme yol açan ya da yol açabilecek, ürüne ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle yükümlüdür.

Vážená uživatelko, vážený uživateli,

děkujeme, že jste se rozhodli pro kompresivní punčochy od společnosti Ofa, a za vaši důvěru. Pečlivě si prosím prostudujte tyto informace o produktu. Dosáhnete tak optimálního účinku kompresivní terapie.

Účel

Kompresivní punčochy se používají k terapii flebo-
logických a lyfologických onemocnění horních
a dolních končetin a u lipedému. Volba různých
produktů závisí na indikaci.

Princip funkce zdravotních kompresivních punčoch

Produkty určené k dané indikaci a kontrolovaný
tlak brání zpětnému toku krve, čímž zlepšují
tkáňovou mikrocirkulaci a odtok lymfy.

⚠ Důležité pokyny

Používejte zdravotní kompresivní punčochy pouze
podle doporučení vašeho lékaře. Denní používání
a pravidelné lékařské kontroly zajistí úspěšnost
vaší léčby. Punčochy musí vydávat odborný
personál se zdravotnickým vzděláním. Odborný
prodejce vám také vysvětlí, jak se kompresivní
punčochy správně nasazují. Pokud se během pou-
žívání objeví akutní bolesti dolních končetin nebo
podráždění kůže, ihned vyhledejte lékaře. Kožním
reakcím v oblasti lepicích pásků lze zabránit
jejich opakovaným přesouváním během dne. Bu-
dete-li chtít punčochy nosit v kombinaci s jinými
zdravotnickými pomůckami, poraďte se o tom s
ošetřujícím lékařem. Své produkty testujeme v
rámci komplexního zajištění kvality. Pokud byste i
přesto narazili na problémy vyžadující reklamaci,
obratte se prosím na odborného prodejce. Po-
škození neopravujte sami, ale přineste punčochu
odbornému prodejci, u kterého jste ji koupili.
Otírání o jiné oděvy může vést ke žmolkovatění,
které však nenarušuje kvalitu punčochy.

Pokyny k nasazení

1. Při nasazování otočte pun-
čochu naruby až k chodidlové
části. Nasuňte chodidlovou
část punčochy přes prsty a poté
přes nárt.

2. Nyní opatrně natáhněte nožní
část přes patu. Netahejte punčo-
chu za konec ani lepicí pásek.

3. Poté rovnoměrně vytáhněte
zbytek punčochy. Netahejte
ji příliš. Nakonec roztáhněte
punčochu na zbytek nohy, aby
neobsahovala záhyby.

Pokyny k péči

Produkt je určen k okamžitému použití.
Doporučujeme jej před prvním použitím vyprat.
Poté jej denně perte ručně nebo v pračce pomocí
programu na jemné látky. Punčochy perte samo-
statně v jemném pracím prášku bez aviváže (např.
speciální prací prášek Ofa Clean) v teplotě do
40 °C. Dobře je vypláchněte. Punčochy lze nechat
opatrně vyždímat v pračce, neždímejte je však
ručně. Vysušte je na vzduchu nebo použijte šetrný
program sušičky. Nedávejte je však na topení
ani na přímé sluneční světlo. Nikdy punčochy
nežehlete. Nepoužívejte žádné chemické čisticí
prostředky, benzín ani aviváž, abyste udrželi
účinnost punčoch. Tyto látky poškozují pleteninu.
Kompresivní punčochy jsou odolné vůči tukům
a olejům, nesmí však přijít do kontaktu s mastmi.
Punčochy se silikonem potaženými lepicími pásky
nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly, mastmi,
hydratačními mýdly a tělovými krémy. Může to
trvale snížit účinnost lepicích pásků (jejich funkci
mohou omezovat také ochlupení a příliš suchá
kůže). Punčochy uchovávejte v suchu, chraňte
je před slunečním světlem a horkem, ideálně
v původním obalu.

Perte prosím naruby a nepoužívejte aviváž.

-  Program na jemné látky
-  Nepoužívejte bělidlo
-  Sušte šetrně
-  Nežehlete
-  Nečistěte chemicky

Materiálové složení

Produkt obsahuje polyamid (Poly-
amid), elastan (Elastan) a některé
produkty bavlnu (Baumwolle). Kon-
krétní informace naleznete na textil-
ním štítku všítem do punčochy.

Typy pro nasazení

Nasaďte si punčochy hned ráno po probuzení, dokud se vám na nohou ještě nerozvine otok. Nechte kompresivní punčochu za uzávěr ani okraj pásku, ale postupně ji potahujte rukama zespodu nahoru. Použitím domácích gumových rukavic si ulehčíte nasazování a ochráníte pleteninu. Šperky a dlouhé nehty mohou punčochu poškodit.

Věnujte také pozornost pravidelné péči o nohy a správné obuvi. Zeptejte se ve specializované prodejně se zdravotními pomůckami na speciální rukavice Ofa Grip a na praktickou pomůcku Ofa pro svlékání a natahování kompresních punčoch s otevřenou a uzavřenou špičkou.

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní kompresivní terapii AWMF 037/005, pol. 12/18)

- Zlepšení žilních příznaků a kvality života u chronických žilních onemocnění
- Prevence a terapie žilních edémů
- Prevence a terapie žilních kožních onemocnění
- Ekzém a pigmentace
- Dermatoliposkleróza a atrophie blanche
- Terapie a tlumení bolesti u žilních bérkových vředů a prevence recidiv
- Terapie arteriálních a žilních bérkových vředů (viz kontraindikace)
- Křečové žíly
- Úvodní fáze terapie křečových žil
- Funkční žilní nedostatečnost
- Žilní malformace
- Žilní trombóza
- Stav po trombóze
- Posttrombotický syndrom
- Profylaxie trombózy u mobilních pacientů
- Lymfédém
- Edém v těhotenství
- Posttraumatický/pooperační edém
- Cyklický idiopatický edém
- Lipedém od stádia II
- Městnání v důsledku imobility (artrogenní městnání, parézy a částečné parézy končetiny)
- Edémy spojené s povoláním (stání, sezení)
- Farmakogenní edémy, když není možná změna terapie
- Obezita s funkční žilní nedostatečností
- Zánětlivé dermatózy dolních končetin
- Nevolnost, závrať a potíže s městnáním v těhotenství
- Stav po popáleninách
- Terapie jizev

Kontraindikace

Absolutní kontraindikace:

- Pokročilá periferní cévní onemocnění (když platí některý z těchto parametrů: ABPI < 0,5, tepenný tlak v oblasti kotníku < 60 mmHg, palcový tlak < 30 mmHg nebo TcPO₂ < 20 mmHg na nártu)
- Dekompenzovaná srdeční nedostatečnost
- Septická flebitida
- Phlegmasia coerulea dolens

Rizika ke zvážení

(Rozhodování o léčbě při zvážení prospěchu a rizika):

- Mokvavé dermatózy
- Intolerance materiálů kompresivních punčoch
- Těžké poruchy citlivosti končetiny
- Pokročilá periferní neuropatie (např. diabetes mellitus)
- Chronická polyartritis

Pokud nebudou dodrženy tyto kontraindikace, výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

Rizika a vedlejší účinky

Zdravotní kompresivní punčochy mohou způsobit nekrózu kůže a poškození periferních nervů tlakem. Doporučuje se podložení ohrožených oblastí. U citlivé pokožky se může pod kompresivními punčochami objevit svědění a kožní problémy. V takovém případě je doporučována adekvátní kožní terapie.

U následujících příznaků je nutné punčochy ihned sejmout a domluvit se s lékařem na pokračování terapie: modré nebo bílé zbarvení nehtů, brnění a necitlivost, zhoršující se bolesti, dýchavičnost a pocení, akutní omezení pohybu.

Záruka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky. K tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné je vyřadit. Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem. Drobné barevné odchylky nelze považovat za vady. Mohou být způsobeny individuálním procesem barvení. Takové zboží nebude vyměněno ani nemůže být vráceno. Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Likvidace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobci a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

Drodzy Użytkownicy!

Cieszymy się, że zdecydowaliście się na zakup pończoch uciskowych marki Ofa i dziękujemy Wam za okazane nam zaufanie. Prosimy o poświęcenie czasu na uważne zapoznanie się z niniejszymi informacjami o produkcie. Chodzi przecież o jak największą skuteczność terapii uciskowej!

Przeznaczenie

Pończochy uciskowe są stosowane w terapii schorzeń układu żylnego i limfatycznego w obrębie ramion i nóg, a także w przypadku obrzęków tłuszczowych. Zależnie od wskazania mogą być stosowane różnego typu produkty.

Zasada działania medycznych pończoch uciskowych

Przez zastosowanie odpowiednio dobranych produktów i kontrolowany ucisk przyspieszony zostaje przepływ krwi żyłnej, poprawia się mikrokrążenie w tkankach i zwiększa się przepływ limfy.

⚠ Ważne wskazówki

Medyczne pończochy uciskowe należy nosić wyłącznie po konsultacji lekarskiej. Codzienne noszenie i regularne kontrole lekarskie są warunkiem udanego leczenia! Pończochy powinny być wydawane przez specjalistyczny personel dysponujący przeszkoleniem medycznym. Sprzedawca doradzi również, jak prawidłowo zakładać pończochy uciskowe. Jeżeli podczas noszenia wystąpią ostre bóle nóg lub podrażnienia skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Reakcjom skórnyom w okolicach taśm podtrzymujących można zapobiec, nieznacznie zmieniając położenie taśmy podtrzymującej kilka razy w ciągu dnia. Jeśli pończochy mają być noszone w połączeniu z innymi akcesoriami medycznymi, należy omówić to z lekarzem prowadzącym. Nasze produkty są kontrolowane w ramach kompleksowego procesu zapewniania jakości. Jeśli jednak mimo to pojawi się powód do reklamacji, prosimy zwrócić się do sprzedawcy. Uszkodzeń nie należy naprawiać samodzielnie; pończochę należy odnieść do sprzedawcy, u którego została zakupiona. Drobne kuleczki, które powstają wskutek ocierania o inne części garderoby, nie mają wpływu na jakość pończoch.

Instrukcja zakładania

1. Przed założeniem pończochę należy wywrócić na lewą stronę aż do stopy. Wciągnąć stopę pończochy przez palce, a następnie przez grzbiet stopy.

2. Ostrożnie wciągnąć górną część pończochy przez piętę. Unikać przy tym pociągania za koniec pończochy z taśmą podtrzymującą.

3. Resztę pończochy przesuwając równomiernie do góry, nie naciągając jej. Na koniec wygładzić pończochę na nodze, aż będzie pozbawiona fałd.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Produkt nadaje się do użycia natychmiast po rozpakowaniu. Zalecamy jednak wypranie przed założeniem po raz pierwszy. Następnie prać codziennie – ręcznie lub w pralce automatycznej, nastawiając cykl do tkanin delikatnych. Pończochy należy prać osobno, używając środków piorących do tkanin delikatnych (np. Ofa Clean) w temperaturze maks. 40°C. Nie używać płynu do płukania. Starannie wypłukać po praniu. Można nastawić wirowanie z niewielką prędkością, ale nie wolno wyżymać pończoch. Pończochy uciskowe należy suszyć na powietrzu albo w suszarce bębnowej, stosując program do tkanin delikatnych. Nie wolno suszyć na kaloryferze lub w pełnym słońcu. Pończoch nie wolno prasować. Aby pończochy zachowały swoją skuteczność, nie wolno stosować chemicznych środków piorących, benzyny ani płynu do płukania tkanin. Zawarte w nich substancje niszczą włókna tkaniny. Pończochy uciskowe są w dużej mierze niewrażliwe na działanie tłuszczu i olejów, nie powinny mieć jednak styczności z wszelkiego rodzaju maściami. Ogólnie rzecz biorąc, pończochy z taśmami podtrzymującymi pokrytymi warstwą silikonu nie powinny mieć styczności z rozpuszczalnikami, maściami, natłuszczającymi tonikami do mycia i kremami do ciała. Mogą one trwale wpłynąć na przyczepność taśm podtrzymujących (funkcję taśm podtrzymujących mogą ograniczyć także owłosienie na nogach i sucha skóra). Pończochy należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed światłem słonecznym i wysokimi temperaturami, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Pracę po wywróceniu na lewą stronę. Nie używać płynu do płukania!

-  Cykl prania do tkanin delikatnych
-  Nie stosować wybielaczy
-  Suszenie jak w przypadku tkanin delikatnych
-  Nie prasować
-  Nie czyścić chemicznie

Skład materiałowy

Stosowane materiały to poliamid (Polyamid), elastan (Elastan), a w przypadku niektórych produktów bawełna (Baumwolle). Konkretnie informacje na ten temat są podane na etykiecie wszytej w pończochę.

Przydatne wskazówki przy zakładaniu

Pończochy najlepiej zakładać wcześniej rano zaraz po wstaniu z łóżka, dopóki nogi nie są jeszcze opuchnięte. Nie wciągać pończochy uciskowej trzymając za koniec z taśmą podtrzymującą. Zamiast tego należy przesuwając pończochę, gładząc rękoma od dołu do góry. Aby ułatwić zakładanie i chronić dzianinę, zaleca się stosowanie gumowych rękawiczek podczas zakładania pończoch.

Biżuteria i długie paznokcie mogą uszkodzić pończochę. Należy również zwracać uwagę na regularną pielęgnację stóp i wygodne obuwie. W sklepach medycznych warto zapytać o specjalne rękawiczki Ofa Grip i przyrząd Ofa do zakładania i zdejmowania pończoch uciskowych z odkrytymi i zakrytymi palcami.

Wskazania (patrz również wytyczne terapii uciskowej – Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, wydanie 12/18)

- Leczenie objawów żylnych i poprawa jakości życia w przewlekłych chorobach układu żylnego
- Zapobieganie i leczenie obrzęków żylnych
- Zapobieganie i leczenie żylakowych zmian skórnych
- Egzema i zaburzenia pigmentacji
- Dermatoliposklerozia i zanik białej (atrophia alba)
- Leczenie i uśmierzanie bólu w przypadku owrzodzeń żylnych nóg (ulcus cruris venosum), a także zapobieganie nawrotom choroby
- Leczenie owrzodzeń nóg pochodzenia tętniczko-żylnego (patrz przeciwwskazania!)
- Żyłki kończyn dolnych
- Początkowa faza po leczeniu żylaków
- Czynnościowa niewydolność układu żylnego
- Malformacje żyłne
- Zakrzepica żylna
- Stany po zakrzepicy
- Zespół pozakrzepowy
- Profilaktyka zakrzepicy u pacjentów mobilnych
- Obrzęki limfatyczne
- Obrzęki w przebiegu ciąży
- Obrzęki pourazowe/pooperacyjne
- Cykliczny obrzęk idiopatyczny
- Lipodemia (obrzęk tłuszczowy) od stadium II
- Stany zastoinowe spowodowane unieruchomieniem (artrogenny zespół zastoinowy, parezy i częściowe parezy kończyn)
- Obrzęki uwarunkowane pracą zawodową (praca stojąca i siedząca)
- Obrzęki uwarunkowane lekowo, gdy nie jest możliwe zastąpienie leków innymi
- Otyłość z czynnościową niewydolnością żylną
- Zapalne schorzenia skórne nóg
- Nudności, zawroty głowy i dolegliwości zastoinowe w przebiegu ciąży
- Stany po oparzeniach
- Leczenie blizn

Przeciwwskazania

Bezwzględne przeciwwskazania:

- Zaawansowana choroba tętnic obwodowych (jeśli którykolwiek z tych parametrów ma zastosowanie: ABPI < 0,5, ciśnienie w tętnicy kostkowej < 60 mmHg, ciśnienie w palcach < 30 mmHg lub TcPO₂ < 20 mmHg na grzbiecie stopy).
- Dekompensacja niewydolności serca
- Septyczne zapalenie żył
- Bolesny obrzęk siniczny (phlegmasia coerulea dolens)

Ryzyko, które należy wziąć pod uwagę (decyzja o terapii w ramach oceny korzyści i ryzyka)

- Wysiękowe zmiany skórne
- Nadwrażliwość na materiały użyte w pończochach uciskowych
- Poważne zaburzenia czucia w obrębie kończyn
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. w przebiegu cukrzycy)
- Przewlekłe zapalenie wielostawowe

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania powyższych przeciwwskazań.

Zagrożenia i działania niepożądane

Medyczne pończochy uciskowe mogą powodować martwicę skóry i uciskowe uszkodzenie nerwów obwodowych. Zalecane jest wyścielenie miejsc szczególnie narażonych. W przypadku skóry wrażliwej stosowanie pończoch uciskowych może powodować swędzenie i problemy skórne. Zaleca się odpowiednią pielęgnację skóry.

W przypadku poniższych objawów należy niezwłocznie zdjąć pończochy i skonsultować możliwość kontynuowania terapii z lekarzem: sine lub białe zabarwienie palców stóp, uczucie dyskomfortu lub odrętwienie, narastające dolegliwości bólowe, spływanie oddechu i nadmierna potliwość, dotkliwie ograniczenie zdolności ruchowej.

Gwarancja

Okres przydatności medycznych pończoch uciskowych jest ograniczony do 3 lat, w przypadku przechowywania w odpowiednich warunkach. Zastosowanie ma również okres noszenia, który przy regularnym użytkowaniu i prawidłowej pielęgnacji wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Po upływie tego terminu gwarancja udzielana na produkt traci ważność. Zasadniczo gwarancja nie obejmuje wad, które są skutkiem normalnego zużycia lub stosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem uznaje się również samodzielne modyfikowanie cech produktu, bez skorzystania z pomocy producenta w tym zakresie. Niewielkie odchylenia barw, które mogą powstać w wyniku indywidualnego procesu barwienia, nie są uważane za wadę. Odpowiednie towary są zatem wyłączone z wymiany i zwrotów.

Produkt jest przewidziany do stosowania u jednego pacjenta. W razie przekazania do użytku innym osobom wygasa rękojmia producenta z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Utylizacja

Po upływie okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami.

Obowiązek zgłaszania niebezpiecznych przypadków

Przepisy ustawowe zobowiązują pacjentów i użytkowników do niezwłocznego zgłaszania do producenta i właściwych organów krajowych (w Niemczech BfArM) wszelkich poważnych zdarzeń w związku ze stosowaniem produktu, tj. zdarzeń, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.

Cienījamā lietotāja, godātais lietotāj!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējies Ofa kompresijas zeķes, un pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos. Lūdzu, veltiet nedaudz laika un uzmanīgi izlasiet šo informāciju par izstrādājumu. Optimālai kompresijas terapijas efektivitātei!

Paredzētais mērķis

Kompresijas zeķes izmanto, lai ārstētu flebologiskas un limfologiskas roku un kāju slimības, kā arī lipedēmu. Atkarībā no indikācijām tiek izmantoti dažādi izstrādājumi.

Medicīnisko kompresijas zeķu iedarbības princips

Ar attiecīgajai indikācijai pielāgotiem izstrādājumiem un kontrolētu spiedienu tiek paātrināta asins atplūšana, uzlabota mikrocirkulācija audos un palielināta limfas plūsma.

⚠ Svarīgas norādes

Medicīniskās kompresijas zeķes drīkst valkāt tikai pēc konsultācijas ar ārstu. Nodrošiniet veiksmīgu ārstēšanu, nēsājot izstrādājumu katru dienu un regulāri pārbaudoties pie ārsta! Zeķes jāizsniedz medicīniski apmācītam personālam. Jūsu speciālistais izplatītājs arī konsultēs Jūs par to, kā pareizi uzvilkt kompresijas zeķes. Ja valkāšanas laikā rodas akūtas sāpes kājās vai ādas kairinājums, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Ādas reakcijas saturošās lentes apvidū var novērst, vairākas reizes dienā nedaudz mainot tās atrašanās vietu. Ja zeķes ir jāvalkā kopā ar citiem medicīniskiem palīgīdzekļiem, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Mēs pārbaudām savus izstrādājumus visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas ietvaros. Ja tomēr rodas kādas sūdzības, lūdzu, vērsieties pie sava specializētā izplatītāja. Nelabojiet bojājumus pašu spēkiem – nogādājiet zeķi atpakaļ specializētājā veikalā, kurā tā tika iegādāta. Šķiedru mezgliņi, kas var veidoties, berzējoties pret citiem apģērba gabaliem, nemazina zeķu kvalitāti.

Uzvilšanas pamācība

1. Lai uzvilktu, līdz pēdai izgrieziet zeķi uz kreiso pusi. Uzrotiet pēdas daļu pāri kāju pirkstiem un pēc tam pāri pacēlumam.

2. Pēc tam uzmanīgi pārvelciet kājas daļu pāri papēdim. Pie tam, lūdzu, izvairieties no zeķes vilšanas uz augšu aiz apmales vai saturošās lentes.

Norādes par kopšanu

Izstrādājums ir piemērots tūlītējai lietošanai. Mēs iesakām to izmazgāt pirms pirmās valkāšanas reizes. Pēc tam, lūdzu, mazgājiet katru dienu ar rokām vai veļasmašīnā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas režīmu. Mazgājiet zeķes atsevišķi, izmantojot mazgāšanas līdzekli smalkveļai bez veļas mikstinātāja (piemēram, Ofa Clean speciālo mazgāšanas līdzekli), temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C, un rūpīgi izskalojiet tās. Zeķēm drīkst izmantot centrifūgas saudzējošo režīmu, bet, lūdzu, neizgrieziet tās. Žāvējiet kompresijas zeķes, izkarot tās vai izmantojot žāvētāja saudzīgo ciklu, bet nenovietojiet zeķes uz sildķermeņiem vai tiešos saules staros. Negludiniet zeķes. Lai saglabātu zeķu iedarbību, lūdzu, neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu vai veļas mikstinātājus. Šīs vielas bojā adījumu. Kopumā kompresijas zeķes neietekmē taukvielas un eļļa, tomēr tām nevajadzētu nonākt saskarē ar ziedēm. Zeķes, kurām ir ar silikonu pārklātas saturošās lentes, nedrīkst nonākt saskarē ar šķīdinātājiem, ziedēm, taukojošiem mazgāšanas losjoniem un ķermeņa krēmiem. Pretējā gadījumā saturošās lentes funkcija var tikt neatgriezeniski bojāta (saturošās lentes darbību var ierobežot arī kāju apmatojums un sausa āda). Uzglabājiet zeķes sausā vietā, kas aizsargāta no saules un karstuma iedarbības, vēlams oriģinālajā iepakojumā.

Lūdzu, mazgājiet, izgriežot uz kreiso pusi un neizmantojot veļas mikstinātāju!

-  Saudzējošs mazgāšanas režīms
-  Nebalīniet
-  Žāvējiet saudzīgi
-  Negludiniet
-  Netīriet ķīmiski

Materiāla sastāvs

Tiek izmantots poliamīds (Polyamid), elastāns (Elastan) un dažos izstrādājumos — kokvilna (Baumwolle). Lai iegūtu konkrētu informāciju, lūdzu, skatiet auduma etiķeti, kas piestiprināta jūsu zeķei.

3. Uzrotiet pārējo zeķi vienādā augstumā, to pārmērīgi nenostiepjot. Visbeidzot sakārtojiet zeķi uz kājas, līdz tajā nav kroku.

Padomi uzgērbšanā

Uzvelciet zeķes agri no rīta uzreiz pēc pamošanās, kamēr jūsu kājas vēl nav pietūkušas. Lūdzu, nevelciet kompresijas zeķi uz augšu pa apakšējo vai lipīgo malu, bet gan ar rokām uzvelciet to no apakšas uz augšu. Lai atvieglotu uzvilkšanu un saudzētu trikotāžu, ieteicams lietot māsasaimniecības gumijas cimdus.

Rotājumlietas un gari nagi var sabojāt zeķi. Lūdzu, pievērsiet uzmanību arī regulārai pēdu kopšanai un piemērotiem apaviem. Jūsu medicīnas preču veikalā jautājiēt par Ofa Grip speciālajiem cimdiem un praktiskajiem Ofa palīgīdzekļiem, kas palīdz uzvilkt un novilkt kompresijas zeķes ar atvērtu un slēgtu purnгалu.

Indikācijas (skatiet arī Medicīniskās kompresijas terapijas vadlīniju AWMF 037/005, 2018. gada decembra redakcija)

- Venozo simptomu un dzīves kvalitātes uzlabošana hronisku vēnu slimību gadījumā
- Venozu tūsku profilakse un ārstēšana
- Venozu ādas izmaiņu profilakse un ārstēšana
- Ekzēma un pigmentācija
- Ādas liposkleroze un Atrophie blanche
- Ulcus cruris venosum ārstēšana un sāpju mazināšana, arī recidīvu profilakse
- Arteriālas un venozas Ulcus cruris ārstēšana (skatiet kontraindikācijas!)
- Varikoze
- Sākotnējā fāze pēc varikozes ārstēšanas
- Funkcionāla vēnu mazspēja
- Venozas malformācijas
- Vēnu tromboze
- Stāvoklis pēc trombozes
- Pēctrombozes sindroms
- Trombozes profilakse pacientiem, kas pārvietojas
- Limfēdēma
- Tūska grūtniecības laikā
- Tūska pēc traumas/operācijas
- Cikliska idiopātiska tūska
- Lipēdēma, sākot no II stadijas
- Nekustīguma izraisīti sastrēguma stāvokļi (artrogēna sastrēguma sindroms, ekstremitātes parēzes vai daļējas parēzes)
- Ar profesiju saistītas tūsкас (stāvošs, sēdošs darbs)
- Medikamentu izraisīta tūska, ja nav iespējama to noņemšana
- Aptaukošanās ar funkcionālu vēnu mazspēju
- Iekaisīgas kāju dermatozes
- Slikta dūša, reibonis un sūdzības par nosprostojumiem grūtniecības laikā
- Stāvoklis pēc apdegumiem
- Rētu ārstēšana

Kontraindikācijas

Absolūtās kontraindikācijas:

- Progresējoša perifērās artērijas blokāžu slimība (ja attiecas kāds no šiem parametriem: ABPI < 0,5, spiediens potītēs artērijā < 60 mmHg, spiediens kāju pirkstos < 30 mmHg vai TcPO₂ < 20 mmHg pēdas virspusē)
- Dekompensēta sirds mazspēja
- Septisks flebīts
- Phlegmasia coerulea dolens
- Vērā ņemamie riski (par terapiju lemj, izvērtējot ieguvumus un riskus)**
- Sulojošas dermatozes
- Kompresijas zeķu materiālu nepanesība
- Smagi ekstremitātes jutības traucējumi
- Progresējoša perifēra neiropātija (piemēram, cukura diabēts)
- Hronisks poliartrīts

Šo kontraindikāciju neievērošana padara par neesošu jebkuru atbildības pienākumu.

Riski un blaknes

Medicīniskās kompresijas zeķes var izraisīt ādas nekrozi un nospiest perifēros nervus. Apdraudētajās vietās ieteicams uzlikt polsterējumu. Jūtīgas ādas gadījumā zem kompresijas zeķēm var rasties nieze un ādas problēmas. Tādēļ ieteicama atbilstoša ādas kopšana.

Ja rodas šādi simptomi, nekavējoties novelciet zeķes un konsultējieties ar ārstu par iespējamo terapijas turpināšanu: zila vai balta kāju pirkstu krāsa, diskomforts un nejutīgums, sāpes, kas pastiprinās, elpas trūkums un svīšana, akūti kustību ierobežojumi.

Garantija

Pareizi uzglabājot, medicīnisko kompresijas zeķu uzglabāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 3 gadus. Minētajam periodam jāpieskaita valkāšanas laiks, kas, regulāri lietojot un pareizi kopjot, ir maksimāli 6 mēneši. Pēc šī perioda beigām uz izstrādājumiem garantija neattiecas.

Garantija parasti neattiecas uz bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma vai nepareizas lietošanas dēļ. Nepareiza lietošana ietver arī turpmāku izstrādājuma pārveidošanu, ko nav veicis ražotājs. Nelielas krāsas atšķirības, kādas var rasties individuālā krāsošanas procesā, nav uzskatāmas par defektu. Tāpēc šādu preču apmaiņa un atpakaļsūtīšana ir izslēgta. Izstrādājums ir paredzēts viena pacienta aprūpei. Ja tas tiek nodots izmantošanai citām personām, izbeidzas ražotāja atbildība par izstrādājumu.

Utilizācija

Pēc izmantošanas laika beigām, lūdzu, utilizējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ziņošanas pienākums

Saskaņā ar likumā noteiktām prasībām pacientiem un lietotājiem ir pienākums ziņot ražotājam un atbildīgajai valsts iestādei (Vācijā BfArM) par nopietniem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar izstrādājumu un kas ir vai varētu būt izraisījuši būtisku veselības stāvokļa pasliktināšanos vai nāvi.

Lugupeetud kasutaja

Meil on hea meel, et olete valinud Ofa kompressioonisukad, ja täname teid meie usaldamise eest. Leidke hetk, et see tooteteave hoolikalt läbi lugeda. Teie kompressioonravi optimaalse tõhususe tagamiseks!

Sihototstarve

Kompressioonisukki kasutatakse nii käte ja jalgade fleboloogiliste ja lümfoloogiliste haiguste kui ka lipödeemi raviks. Vastavalt näidustustele kasutatakse erinevaid tooteid.

Meditšiiniliste kompressioonisukkade
tööpõhimõte

Vastava näidustuse ja kontrollitud rõhu jaoks kohandatud toodete abil kiireneb vere tagasivool, paraneb koe mikrotsirkulatsioon ja suureneb lümfivool.

 Olulised juhised

Kandke meditsiinilisi kompressioonisukki ainult pärast arstiga konsulteerimist. Igapäevane kandmine ja regulaarne arstlik kontroll tagavad ravi edukuse! Sukki tohib väljastada meditsiinilise väljaõppega spetsialist. Edasimüüja annab teile ka nõu, kuidas kompressioonisukki õigesti jalga panna. Kui kandmisel tekib äge jalgade valu või nahapõletik, pöörduge viivitamatult arsti poole. Nahareaktsioone kummiriba piirkonnas saab ennetada, nihutades päeva jooksul mitu korda veidi kummiriba. Kui sukki tuleb kanda koos muude meditsiiniliste abivahenditega, konsulteerige palun oma arstiga. Me kontrollime oma tooteid põhjaliku kvaliteedikontrolli raames. Kui teil on siiski kaebusi, pöörduge palun oma edasimüüja poole. Ärge parandage kahjustusi ise, vaid viige sukad tagasi edasimüüjale, kellelt need ostsite. Topid, mis võivad tekkida teiste riideesemete vastu hõõrdumisel, ei mõjuta sukkade kvaliteeti.

Hooldusjuhised

Toode sobib kohe kasutamiseks. Soovitame enne esmakordset kandmist pesta. Seejärel peske iga päev käsitsi või masina õrna pesu programmiga. Peske sukki eraldi ilma pesupehmentide õrnatoimelise pesuvahendiga (nt Ofa Cleani spetsiaalne pesuvahend) temperatuuril kuni 40 °C ja loputage põhjalikult. Sukki võib kergelt tsentrifuugida, kui ärge väänake neid välja. Kuivatage kompressioonisukki õhu käes või kuivatis õrna programmiga, kuid ärge asetage neid küttekehadele ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge sukki mitte kunagi triikige. Sukkade tõhususe säilitamiseks ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid, bensiini ega pesupehmentideid. Need ained kahjustavad kootud kangast. Kompressioonisukad ei ole üldiselt rasva ja õli suhtes tundlikud, kuid need ei tohiks salvidega kokku puutuda. Silikoonkattega kinnitusribadega sukad ei tohiks üldjuhul kokku puutuda lahustite, salvide, niisutavate pesemisvedelike ja kehakreemidega. Vastasel juhul võib kinnitusribade kleepumistugevus püsivalt halveneda (ka jalakarvad ja kuiv nahk võivad kinnitusribade toimivust halvendada). Hoidke sukki kuivas kohas päikese ja kuumuse eest kaitstult ja võimaluse korral originaalpakendis.

Palun peske pahempidi ja ärge kasutage pesupehmentid!

-  Õrna pesu programm
-  Mitte valgendada
-  Kuivatada õrnalt
-  Mitte triikida
-  Mitte keemiliselt puhastada

Materjali koostis

Kasutatud on polüamiidi (Polyamid), elastaani (Elastan) ja mõne toote puhul puuvilla (Baumwolle). Konkreetse teabe leiate sukale ömmeldud tekstiilsildilt.

Jalgapanemise õpetus

1. Jalgapanemiseks keerake sukk kuni jalaosani seest välja. Libistage jalaosa üle varvaste ja seejärel üle põiaselja.
2. Nüüd tõmmake jalaosa ettevaatlikult üle kanni. Vältige suka ülestõmbamist otsaservast või kinnitusservast.
3. Tõmmake ülejäänud sukk ühtlaselt ilma pingutamata ülespoole. Lõpuks tõmmake sukk jalal laiali, kuni see on kortsudeta.

Kandmise soovitused

Pange sukad jalga kohe pärast ärkamist, kui teie jalad ei ole veel paistes. Ärge tõmmake kompressioonisukki ülespoole servast või kummiribast, vaid libistage sukki kätega altpoolt ülespoole. Jalgatõmbamise hõlbustamiseks ja materjali säästmiseks on soovitatav kanda kummist majapi-damiskinda.

Ehted ja pikad küüned võivad sukki kahjustada. Pöörake tähelepanu ka regulaarsele jalgade hooldusele ja sobivate jalatsite kasutamisele. Küsige meditsiiniseadmete kauplusest Ofa Gripi spetsiaalseid kindaid ja praktilisi Ofa abivahendeid lahtise ja kinnise varbaosaga kompressioonsukkade jalgapanemiseks ja äravõtmiseks.

Näidustused (vt ka juhendit

Meditsiiniline kompressioonravi AWMF 037/005, seisuga 12/18)

- Venoossete sümptomite ja elukvaliteedi paranemine krooniliste veenihaiguste korral
- Venoossete tursete ennetamine ja ravi
- Venoossete nahamuutuste ennetamine ja ravi
- Ekseem ja pigmentatsioon
- Lipodermatoskleroos ja valge atroofia
- Venoossete jalahaavandite ravi ja valuravi ning ka retsidiveerumise profülaktika
- Arteriaalse ja venoosse jalahaavandi ravi (vt vastunäidustused)
- Varikoos
- Varikoosi ravi algfaas
- Funktsionaalne veenipuudulikkus
- Venoossed malformatsioonid
- Veenitromboos
- Tromboosijärgne seisund
- Posttrombootiline sündroom
- Liikuvate patsientide tromboosi profülaktika
- Lümfödeem
- Rasedusaegsed tursed
- Posttraumaatilised/postoperatiivsed tursed
- Tsüklilised idiopaatilised tursed
- Alates II astme lipödeem
- Immobiliseerituse tagajärjel tekkinud staasi seisundid (artrogeense staasi sündroom, parees ja jäsene osaline parees)
- Elukutsest tingitud tursed (seisvad, istuvad tööd)
- Ravimite põhjustatud tursed, kui ravivahetus pole võimalik
- Funktsionaalse veenipuudulikkusega rasvumine
- Jalgade põletikulised dermatosiidid
- liveldus, peeringlus ja kongestiivsed probleemid raseduse ajal
- Põletusjärgne seisund
- Armide ravi

Vastunäidustused

Absoluutsed vastunäidustused:

- Kaugelearenenud perifeersetes arterites haigus (kui kehtib mõni järgmistest parameetritest: ABPI < 0,5, pahkluu arteriaalne rõhk < 60 mmHg, varba rõhk < 30 mmHg või TcPO₂ < 20 mmHg põiaselg)
- Dekompenseerunud südamepuudulikkus
- Septiline flebiit
- Phlegmasia coerulea dolens
- Ohud, mida tuleb jälgida (ravitsusliku kasu/ohu hindamise alusel)**
- Märjad dermatosiidid
- Kompressioonsukkade materjali talumatuse
- Jäsemete rasked tundlikkushäired
- Kaugelearenenud perifeerne neuropaatia (nt diabetes mellitus)
- Krooniline polüartriit

Vastunäidustuste eiramise korral garantii ei kehti.

⚠ Ohud ja kõrvaltoimed

Meditsiinilised kompressioonsukad võivad põhjustada naha nekroosi ja survekahjustusi perifeersetes närvidele. Soovitatav on ohustatud piirkondade polsterdamine. Tundliku nahaga võib kompressioonsukkade all tekkida sügelus ja nahaprobleemid. Seetõttu on soovitatav adekvaatne nahahooldus.

Järgmiste sümptomite ilmnemisel võtke sukad kohe ära ja pidage arstiga nõu, kuidas ravi jätkata: varvaste värvumine siniseks või valgeks, tundlikkushäired ja tuimus, suurenev valu, õhupuudus ja higistamine, äge liikumispiirang.

Garantii

Meditsiiniliste kompressioonsukkade säilivusaeg on nõuetekohase ladustamise korral 3 aastat. Sellel lisandub kandmisaeg, mis regulaarse kasutamise ja nõuetekohase hoolduse korral on maksimaalselt 6 kuud. Pärast selle aja möödumist kaotab toote garantii kehtivuse.

Garantii ei hõlma puudusi, mis on tingitud tavalisest kulumisest või ebaõigest kasutamisest. Ebaõige kasutamise hõlmab ka toote hilisemat muutmist, mida ei ole teinud tootjafirma. Defektiks ei loeta väikesed värvimuutusi, mis võivad tekkida tulenevalt individuaalsest värvimisprotsessist. Seega ei saa vastavat toodet vahetada ega tagasi saata.

Toode on mõeldud ühe patsiendi raviks. Kui toode antakse edasi teistele isikutele taaskasutamiseks, kaotab tootja tootevastutus kehtivuse.

Kõrvaldamine

Kasutusaja lõppedes utiliseerige toode vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Aruandlusnõue

Tõsistest juhtumitest, mis on tekkinud seoses tootega ja mis on viinud või oleks võinud põhjustada tervise olulise halvenemise või surma, on patsiendid ja kasutajad määruste kohaselt kohustatud teavitama viivitamatult tootjat ja vastutavat riiklikku asutust (Saksamaal BfArM).

Gerb. naudotojau,

džiaugiamės, kad pasirinkote „Ofa“ kompresines kojines, ir dėkojame už pasitikėjimą mumis. Skirkite šiek tiek laiko ir atidžiai perskaitykite šią gaminio informaciją. Optimaliam kompresinės terapijos veiksmingumui!

Paskirtis

Kompresinės kojines naudojamos flebologinėms ir limfologinėms rankų ir kojų ligoms, taip pat lipedemai gydyti. Priklausomai nuo indikacijos, naudojami skirtingi gaminiai.

Medicinių kompresinių kojinių veikimo principas

Naudojant gaminius, pritaikytus atitinkamai indikacijai ir kontroliuojamam slėgiui, pagreitėja kraujotaka, pagerėja audinių mikrocirkuliacija ir padidėja limfos tekėjimas.

⚠ Svarbios pastabos

Medicininės kompresinės kojines dėvėkite tik pasikonsultavę su gydytoju. Kasdien dėvėdami kojines ir reguliariai lankydami pas gydytoją užtikrinsite sėkmingą gydymą! Kojines jums turi perduoti medicininį išsilavinimą turintis specialistas. Jūsų specializuotas pardavėjas taip pat patars, kaip teisingai užsimauti kompresines kojines. Jei dėvint kyla stiprus kojų skausmas ar odos sudirginimas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Odos reakcijas lipnių juostelių srityje galima išvengti keletą kartų per dieną šiek tiek perkeldinant lipnių juosteles. Jei kojines ketinate dėvėti kartu su kitomis medicininėmis priemonėmis, pasitarkite su gydytoju. Mes tikriname savo produktus pagal išsamią kokybės užtikrinimo sistemą. Jei vis dėlto turite pretenzijų, kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę. Netaisykite pažeidimų patys, o grąžinkite kojines specializuotam pardavėjui, iš kurio jas įsigijote. Pluošto mazgeliai, kurie gali susidaryti dėl trinties su kitais drabužiais, nesumažina kojinių kokybės.

Kojinių apsiovimo nurodymai

1. Norėdami apsimausti, vyniokite kojine iš vidaus ant kojos. Maukite pėdos dalį per pirštus, o po to – per keltį.

2. Dabar atsargiai traukite kojine virš kulno. Stenkitės netraukti už kojinės galo arba už lipnios krašto.

3. Tolygiai traukite likusią kojinės dalį, nepertempkite. Galiausiai kojine išlyginkite ant kojos taip, kad nebūtų raukšlų.

Priežiūros instrukcijos

Preparatas tinkamas naudoti nedelsiant.

Rekomenduojame išskalbti prieš dėvint pirmą kartą. Paskui kiekvieną dieną skalbkite rankomis arba skalbyklėje nustatę švelnaus skalbimo ciklą. Kojines skalbkite atskirai švelnių plovikliu be minkštiklio (pvz., specialiu plovikliu „Ofa Clean“) ne didesnėje kaip 40 °C temperatūroje ir gerai išskalaukite. Kojines galima švelniai susukti, tačiau nerekomenduojama jų gręžti. Kompresines kojines sausinkite oru naudodami švelnų džiovinimo ciklą, tačiau nedėkite jų ant šildytuvo ir nedžiovininkite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kojinių niekada nelyginkite. Norėdami išlaikyti kojinių efektyvumą, nenaudokite cheminių valymo priemonių, benzo ar minkštiklių. Šios medžiagos kenkia megztam audiniui. Kompresinės kojines dažniausiai atsparios riebalams ir alyvai, tačiau neturėtų liestis su tepalais. Kojinės su silikonu padengtomis lipniomis juostomis neturėtų liestis su tirpikliais, tepalais, drėkinamaisiais prausimosi losjonais ir kūno kremais.

Priešingu atveju lipnių juostų sukibimo stiprumas gali visam laikui pablogėti (kojų plaukai ir sausa oda taip pat gali trukdyti lipnioms juostoms tinkamai prisiklijuoti). Laikykite kojines sausas ir apsaugotas nuo saulės bei karščio, jei įmanoma, originalioje pakuotėje.

Skalbkite išvirkščias ir nenaudokite minkštiklio!

-  Švelnus skalbimo ciklas
-  Nebalinkite balikliu
-  Švelniai nusauskinkite
-  Negalima lyginti
-  Nevalykite sausas

Medžiagų sudėtis

Naudojamas poliamidas (Polyamid), elastanas (Elastan) ir kai kuriems gaminiams medvilnė (Baumwolle). Konkrečios informacijos ieškokite tekstilės etiketėje, prisiūtoje prie jūsų kojinių.

Patarimai, kaip apsimausti kojines

Kojines užsimaukite iš karto ryte, vos atsikėlus, kol kojos dar nėra ištinusios. Kompresinių kojinių nepatraukite už apatinės dalies ar lipniosios dalies, o užmaukite jas rankomis iš apačios į viršų. Kad būtų lengviau užmauti kojines ir nepažeisti audinio, rekomenduojama mūvėti namų ūkyje naudojamas gumines pirštines.

Papuošalai ir ilgai nagai gali pažeisti kojines. Taip pat atkreipkite dėmesį į reguliarią pėdų priežiūrą ir tinkamą avalynę. Savo medicinos prekių parduotuvėje paklauskite apie specialias „Ofa Grip“ pirštines ir praktiškas „Ofa“ pagalbos priemones, skirtas kompresinėms kojinėms su atviru ir uždaru pirštu užmauti ir nusiimti.

Indikacijos (taip pat žr. Medicinos kompresinės terapijos AWMF 037/005 gaires, nuo 12/18)

- Venų ligų simptomų ir gyvenimo kokybės gerinimas sergant lėtinėmis venų ligomis
- Venų edemos profilaktika ir gydymas
- Venų odos pokyčių prevencija ir gydymas
- Egzema ir pigmentacija
- Dermatoliposklerozė ir baltoji atrofija
- Kojų venų opų gydymas ir skausmo mažinimas, įskaitant atkryčio prevenciją
- Kojų arterijų ir venų opų gydymas (žr. kontraindikacijas!)
- Varikozė
- Pradinė fazė po venų varikozės gydymo
- Funkcinis venų nepakankamumas
- Veninė malformacija
- Venų trombozė
- Būklė po trombozės
- Posttrombozinis sindromas
- Trombozės profilaktika judantiems pacientams
- Limfedema
- Edema nėštumo metu
- Potrauminė / pooperacinė edema
- Ciklinė idiopatinė edema
- Lipedema nuo II stadijos
- Stazės būklės dėl nejudrumo (artrogeninės stazės sindromas, parėzė ir dalinė galūnių parėzė)
- Profesinė edema (stovimasis, sėdimasis darbas)
- Vaistų sukelta edema, jei negalimi pokyčiai
- Nutukimas su funkcinio venų nepakankamumu
- Uždegiminė kojų dermatozė
- Pykinimas, galvos svaigimas ir vidurių užkietėjimas nėštumo metu
- Būklė po nudegimų
- Randų gydymas

Kontraindikacijos Absoliučios kontraindikacijos:

- Progresavusi periferinių arterijų liga (jei tinka bet kuris iš šių parametrų: ABPI <0,5, slėgis čiurnos arterijoje <60 mmHg, pirštams tenkantis slėgis <30 mmHg arba TcPO₂ <20 mmHg pėdos užpakalinėje dalyje)
- Dekompensuotas širdies nepakankamumas
- Septinis flebitas
- Phlegmasia coerulea dolens
- Rizika, į kurią reikia atsižvelgti (sprendimas gydyti, pagrįstas naudos ir rizikos vertinimu)**
- Šlapis dermatitas
- Kompresinių kojinių medžiagų nesuderinamumas
- Sunkūs sensoriniai galūnių sutrikimai
- Progresavusi periferinė neuropatija (pvz., cukrinis diabetas)
- Lėtinis poliartritas

Nesilaikant šių kontraindikacijų, nebus taikoma garantija.

Rizika ir šalutiniai poveikiai

Medicininės kompresinės kojinės gali sukelti odos nekrozę ir pažeisti periferinius nervus, todėl rekomenduojama paminkštinti pažeidžiamas vietas. Mūvint kompresines kojines, jautriai odai gali būti sukeltas niežėjimas ir odos problemų. Todėl rekomenduojama tinkamai prižiūrėti odą.

Jei pasireiškia šie simptomai, nedelsiant nusiimkite kojines ir pasitarkite su gydytoju dėl tolesnio gydymo: mėlynasis arba baltasis pirštų spalvos pakitimas, diskomfortas ir tirpimas, stiprėjantis skausmas, dusulys ir prakaitavimas, staigus judėjimo apribojimas.

Garantija

Tinkamai laikomos medicininės kompresinės kojinės gali būti laikomos ne ilgiau kaip 3 metus. Prie to dar prideda dėvėjimo laikas, kuris reguliariai naudojant ir tinkamai prižiūrint yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Netinkamas naudojimas taip pat apima vėlesnius produkto pakeitimus, kurie nebuvo atlikti gamintojo. Iš esmės garantija netaikoma defektams, kurie atsirado dėl įprasto nusi-dėvėjimo arba netinkamo naudojimo. Netinkamas naudojimas taip pat apima vėlesnius produkto pakeitimus, kurie nebuvo atlikti gamintojo. Defektais nelaikomi nežymūs spalvų pokyčiai, galintys atsirasti individualaus dažymo proceso metu. Todėl atitinkamos prekės nekeičiamos ir nepriimamos grąžinimui. Produktas skirtas naudoti vienam pacientui. Jei jis perduodamas kitam asmeniui pakartotiniam naudojimui, gamintojo atsakomybė už produktą nustoja galioti.

Šalinimas

Pasibaigus naudojimo laikui, išmeskite gaminį laikydamiesi vietinių taisyklių.

Reikalavimas teikti ataskaitas

Remiantis teisiniais reglamentais, pacientai ir naudotojai yra įpareigoti pranešti gamintojui ir atsakingai nacionalinei institucijai apie rimtus su gaminiu susijusius incidentus, kurie sukėlė arba galėjo labai pabloginti sveikatos būklę ar lemti mirtį (Vokietijoje BfArM).

Dragi uporabnik/-ca,

veseli smo, da ste izbrali kompresijske nogavice Ofa, in se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje. Vzemite si trenutek in natančno preberite te informacije o izdelku. Tako boste zagotovili optimalno učinkovitost svoje kompresijske terapije!

Namenska uporaba

Kompresijske nogavice se uporabljajo za zdravljenje fleboloških in limfoloških bolezni rok in nog ter pri lipedemih. Glede na diagnozo se uporabljajo različni izdelki.

Princip učinkovanja medicinskih kompresijskih nogavic

Z izdelki, ki so prilagojeni ustreznim simptomom in zagotavljajo ustrezno kompresijo, se pospeši vračanje krvi, izboljša mikrocirkulacija v tkivu in pospeši limfna cirkulacija.

⚠ Pomembni napotki

Medicinske kompresijske nogavice nosite le po posvetovanju z zdravnikom. Vsakdanje nošenje nogavic in redni pregledi pri zdravniku bodo zagotovili uspešno zdravljenje. Nogavice nabavite v specializirani prodajalni, kjer vam bo strokovno usposobljeno osebje svetovalo glede ustreznega oblačenja. Če med nošenjem nogavic občutite akutno bolečino v nogah ali draženje kože, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Kožne reakcije na območju oprijemalnih trakov lahko preprečite tako, da večkrat dnevno spremenite položaj traka. Če boste nogavice nosili skupaj z drugim medicinskim pripomočkom, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom. Vse svoje izdelke preizkušamo v okviru celovitega zagotavljanja kakovosti. Če kljub temu niste zadovoljni z izdelkom, se obrnite na svojega prodajalca. Poškodb ne popravljajte sami, ampak nogavice vrnite prodajalcu, pri katerem ste jih kupili. Vozlički iz vlaken, do katerih lahko pride zaradi trenja z drugimi kosi oblačil, ne vplivajo na kakovost nogavic.

Navodila za oblačenje

1. Za oblačenje ga narobe obrnjenega približajte stopalu. Poveznite stopalni del čez prste in nato čez nart.

2. Zdaj previdno povlecite nožni del čez peto. Nogavice ne vlecite za rob.

3. Preostanek nogavice nato enakomerno povlecite navzgor, ne da bi jo preveč raztegnili. Na koncu razvlecite nogavico na ustreznih mestih, dokler ne odstranite vseh gub.

Navodila za nego izdelka

Izdelek je primeren za takojšnjo uporabo. Priporočamo, da ga pred prvo uporabo operete. Nato jih vsak dan umivajte ročno ali s programom za občutljivo perilo. Nogavice operite ločeno z detergentom za občutljivejše tkanine brez mehčalca (npr. posebni detergent Ofa Clean) pri največ 40 °C in jih dobro sperite. Nogavice lahko daste v stroj na nežno centrifugo, vendar jih ne ožemajte. Kompresijske nogavice sušite na zraku ali v sušilcu s programom za občutljivejše tkanine. Nogavic ne smete sušiti na grelnih napravah ali neposredni sončni svetlobi. Nogavic nikoli ne likajte. Da bi ohranili učinkovitost svojih nogavic, ne uporabljajte kemičnih čistil, bencina ali mehčalcev. Te snovi lahko poškodujejo pleteno tkanino. Kompresijske nogavice so pretežno neobčutljive na maščobe in olja, vendar ne smejo priti v stik z mazili. Nogavice z oprijemalnimi trakovi s prevleko iz silikona praviloma ne smejo priti v stik s topili, mazili, navlaženimi losjoni in kremami za telo.

Ti lahko imajo trajni vpliv na oprijemalne lastnosti trakov (tudi dlake na nogah in suha koža lahko negativno vplivajo na ustrezno delovanje trakov). Nogavice hranite na suhem mestu, ki je zaščiten pred sončno svetlobo in vročino in, če je le mogoče, v originalni embalaži.

Vedno perite obrnjeno navzven in ne uporabljajte mehčalca!

-  Program za občutljive tkanine
-  Beljenje ni dovoljeno
-  Sušenje v bobnastem sušilniku pri nižji temperaturi
-  Likanje ni dovoljeno
-  Kemično čiščenje prepovedano

Sestava materiala

Uporablja se poliamid (Polyamid) in elastan (Elastan), za nekatere izdelke tudi bombaž (Baumwolle). Podrobne informacije najdete na oznaki za vzdrževanje tekstila, ki je všita v nogavico.

Nasveti za oblačenje

Oblecite nogavice takoj zjutraj po vstajanju, ko vaše noge še niso začele zatekati. Kompresijskih nogavic ne vlecite za rob, temveč jih z rokami potiskajte od spodaj navzgor.

Za lažje oblačenje in zaščito pletenine priporočamo, da pri tem nosite gospodinjske gumijaste rokavice.

Nakit in dolgi nohti lahko poškodujejo nogavico. Bodite pozorni tudi na redno nego nog in pravilno obutev. Vprašajte svojega prodajalca medicinskih izdelkov o posebnih rokavicah Ofa Grip in praktičnem pripomočku za oblačenje in snemanje kompresijskih nogavic z odprtimi in zaprtimi konicami prstov znamke Ofa.

Simptomi (glejte tudi smernice za medicinsko kompresijsko terapijo AWMF 037/005, stanje 12/18)

- Izboljšanje venskih simptomov in kakovosti življenja pri kroničnih venskih boleznih
- Preprečevanje in zdravljenje venskega edema
- Preprečevanje in zdravljenje venskih kožnih sprememb
- Ekcem in pigmentacija
- Dermatoliposkleroza in bela atrofija
- Terapija in zmanjšanje bolečin pri venskih razjedah na nogah, vključno s preprečevanjem ponovitve
- Terapija arterijskih in venskih razjed na nogah (glejte kontraindikacije!)
- Varikoza
- Začetna faza po terapiji varikoze
- Funkcionalna venska insuficienca
- Venske malformacije
- Venska tromboza
- Stanje po trombozi
- Posttrombotični sindrom
- Profilaksa tromboze pri mobilnih bolnikih
- Limfedemi
- Edemi v nosečnosti
- Postravmatski/pooperativni edem
- Ciklični idiopatski edem
- Lipoedemi od stopnje II
- Zastajanje tekočine zaradi nepokretnosti (artrogeni zastojni sindrom, pareza in delna pareza okončin)
- Edem, povezan z delom (zaradi stanja ali sedenja)
- Edem, povezan z zdravlili, če zamenjava ni možna
- Debelost s funkcionalno vensko insuficienco
- Vnetna dermataza nog
- Težave s slabostjo, omotico in zastoji krvi med nosečnostjo
- Stanje po opeklinah
- Zdravljenje brazgotin

Kontraindikacije

Absolutne kontraindikacije:

- Napredna bolezen perifernih arterij (če velja kateri od teh parametrov: ABPI < 0,5, pritisk v arteriji gležnja < 60 mmHg, pritisk v prstih na nogah < 30 mmHg alir TcPO₂ < 20 mmHg nart)
- Dekompenzirano srčno popuščanje
- Septični flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Tveganja, ki jih je treba upoštevati**
- (Odločitev o terapiji je treba sprejeti ob upoštevanju razmerja med koristjo/tveganji)**
- Dermatoze z izcedki
- Intoleranca na kompresijske materiale nogavic
- Hude motnje občutenja okončin
- Napredna periferna nevropatija (npr. Diabetes mellitus)
- Kronični poliartritis

Pri neupoštevanju kontraindikacij ne jamčimo za posledice.

Tveganja in neželeni učinki

Medicinske kompresijske nogavice lahko povzročijo nekrozo kože in poškodbe zaradi pritiska na periferne živce. Priporočamo, da ogrožena območja dodatno oblažinite. Pri občutljivi koži lahko kompresijske nogavice povzročijo srbenje in težave s kožo. Za preprečevanje teh težav priporočamo ustrezno nego kože.

Pri naslednjih simptomih takoj odstranite nogavice in se o nadaljevanju zdravljenja pogovorite z zdravnikom: modra ali bela barva prstov na nogah, neobičajni občutki in odrevenelost, naraščajoča bolečina, težko dihanje in znojenje, akutne omejitve gibanja.

Garancija

Rok uporabnosti medicinskih kompresijskih nogavic je ob pravilnem shranjevanju omejen na 3 leta. K temu se doda čas nošenja, ki je ob redni uporabi in pravilni negi največ 6 mesecev. Ko poteče to obdobje, za izdelke ni več mogoče uveljavljati garancije. Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi običajne obrabe ali neustrezne uporabe. Kot neustrezna uporaba se upoštevajo tudi vse naknadne spremembe izdelka, ki jih ni izvedel proizvajalec. Med nepravilnosti ne sodijo manjša barvna odstopanja, ki lahko nastanejo zaradi individualnih postopkov barvanja. Zadevnega blaga zato ne moremo zamenjati in vrniti. Izdelek je namenjen oskrbi enega samega bolnika. Če se izdelek preda drugi osebi za ponovno uporabo, garancija proizvajalca preneha veljati.

Odstranjevanje

Po koncu življenjske dobe izdelek zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi.

Obveznost prijave

Zaradi zakonskih predpisov morajo bolniki in uporabniki proizvajalca in pristojne nacionalne organe (v Nemčiji BfArM) nemudoma obvestiti o vseh resnih incidentih, ki so se zgodili v povezavi z izdelkom in so znatno poslabšanje njihovega zdravja ali smrt povzročili ali bi ga lahko.

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel tölt el bennünket, hogy az Ofa kompressziós harisnya mellett döntött, köszönjük a belénk vetett bizalmat. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és olvassa el figyelmesen a termékismertetőt. A kompressziós terápia optimális hatékonyságának érdekében!

Alkalmazás

A kompressziós harisnyát a kar és a lábak flebológiai és limfológiai megbetegedésének kezelésére, valamint a lipödéma terápiaja során alkalmazzák. Javallattól függően különböző termékek alkalmazandók.

A kompressziós harisnya gyógyászati mechanizmusa

A mindenkori javallat szerint meghatározott termékek és a szabályozott nyomás felgyorsítja a véráramlást, a szövetekben javul a mikrocirkuláció, fokozódik a nyirokeringés.

 Fontos tudnivalók

Kompressziós harisnyát csak kezelőorvosa javaslatára viseljen. Kezelésének sikerét a harisnya mindennapos viselete és a rendszeres orvosi felügyelet biztosítja! A harisnya kiadásához egészségügyi szakemberre van szükség. A szakkereskedő a harisnya megfelelő felhúzásával kapcsolatban is tanácsokkal látja el Önt. Haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát, ha használat közben heveny lábfájdalom vagy bőrirritáció lép fel. A tapadószalag környékén megelőzhető a bőrreakció, ha a tapadószalagot napközben többször áthelyezi. Ha a harisnyát más orvosi segédeszközökkel együtt viselné, kérjük, konzultáljon erről a kezelőorvosával. Átfogó minőségbiztosítási ellenőrzésnek vetjük alá termékeinket. Ha ennek ellenére is panasza van, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez. Amennyiben a termék sérült, ne próbálja megjavítani, vigye vissza a harisnyát abba a szakkereskedésbe, ahol vásárolta. A más ruhadarabokhoz való súrlódás miatt kialakuló rostcsomók nem befolyásolják a harisnya minőségét.

Kezelési útmutató

A termék használatra kész állapotban található. Javasoljuk, hogy első használat előtt mossa ki a terméket. Mossa ezután naponta kézzel vagy mosógépben, kímélő programon. Mossa a harisnyát külön, finom mosószerrel, öblítőszer nélkül (pl. Ofa Clean speciális mosószerrel) legfeljebb 40 °C-on és öblítse ki alaposan. A harisnya alacsony fokozaton centrifugázható, azonban kérjük, ne csavarja ki. Hagyja megszáradni a levegőn vagy tegye a szárítógépbe kímélő programon, de ne helyezze közvetlenül a fűtőtestre és ne tegye ki közvetlen napfénynek. Soha ne vasalja ki a harisnyát. A harisnya hatékonyságának megőrzése érdekében kérjük, ne használjon kémiai vegyszereket, benzint vagy öblítőszeret. Ezek az anyagok roncsolják a szövetet. A kompressziós harisnyák nagymértékben ellenállóak a zsírokkal és olajokkal szemben, azonban a kenőcsöket kerülni kell. A szilikonnal ellátott tapadószalaggal rendelkező harisnyák alapvetően nem érintkezhetnek oldószerrel, kenőccsel, zsírpótló hatású mosakodókrémrel és testápolóval. Ellenkező esetben a tapadószalagok tapadóképessége tartósan károsodhat (a lábszövet és a bőr szárazsága is korlátozhatja a tapadószalagok hatékonyságát). A harisnyát száraz, napsütéstől és hőtől védett helyen tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásában.

Kérjük, kifordítva mossa és ne használjon öblítőt!

-  Kímélő mosás
-  Ne használjon fehérítőt
-  Kíméletesen szárítsa
-  Ne vasalja
-  Ne tisztítsa vegyi úton

Anyagösszetétel

Poliamid (Polyamid), elasztán (Elastan) és néhány termék esetében pamut (Baumwolle) került felhasználásra. A konkrét adatokat az Ön harisnyájába varrt textilcímkén találja.

Útmutató a felhúzáshoz, zárt lábujjrész

1. A harisnyát a lábra történő felhúzáshoz fordítsa ki. Csúsz-tassa a lábfejrészt a lábujjaira és a lábfejére.

2. Majd óvatosan húzza fel a lábszárrészt a sarka fölé. Ne a szélénél vagy a tapadócsíknál fogva húzza fel a harisnyát.

3. Egyenletesen húzza fel a harisnya többi részét anélkül, hogy túlfeszítené. Végül egyenssege el a harisnyát a lábszáron, amíg az ki nem simul.

Viselési tanácsok

A harisnyát mindig kora reggel felkelés után vegye fel addig, amíg a lába még nem duzzadt. Kérjük, a kompressziós harisnyát ne a szélénél vagy a tapadócsíknál fogva húzza fel, hanem csúsztassa rajta a kezét alulról felfelé. A felhúzás megkönnyítése és a szövet kímélése miatt javasoljuk, hogy használjon háztartási gumikesztyűt.

Az ékszerek és a hosszú körmök kárt tehetnek a harisnyában. Kérjük, mindig ügyeljen a rendszeres lábápolásra és arra, hogy hibátlan lábbelit viseljen. Az Ofa Grip speciális kesztyűről és az Ofa nyitott és zárt lábujjrészel rendelkező kompressziós harisnyához való praktikus fel- és lehúzást segítő segédeszközéről érdeklődjön a gyógyászati szakkereskedőnél.

Javallatok (lásd még az AWMF 037/005 orvosi kompressziós terápia iránymutatásait, 2018/12-i állapot)

- Vénás tünetek kezelése és az életminőség javítása krónikus megbetegedések esetén
- Vénás ödéma megelőzése és kezelése
- Vénás bőrelváltozások megelőzése és kezelése
- Ekcéma és pigmentáció
- Lipodermatoszklerózis és atrophie blanche
- Ulcus cruris venosum és relapszus kezelése és fájdalomenyhítése
- Artériás és vénás lábszárfekélyek kezelése (lásd ellenjavallatokat!)
- Visszér
- Kezdeti szakasz a visszeres terápia után
- Funkcionális vénás elégtelenség
- Vénás rendellenességek
- Vénás trombózis
- Trombózis után
- Posztrombotikus szindróma
- Trombózis profilaxis járóbetegknél
- Limfödéma
- Ödéma terhesség alatt
- Poszttraumas/műtét utáni ödéma
- Ciklikus idiopátiás ödéma
- Lipödéma II. stádiumtól
- Torlódás következtében kialakult mozgásképtelenség (arthrogén torlódási szindróma, parézis és a végtag részleges parézise)
- Munkavégzés miatt kialakult ödéma (álló, ülő munkák)
- Gyógyszer-indukált ödéma, ha váltás nem lehetséges
- Elhízás funkcionális vénás elégtelenséggel
- A lábak gyulladással járó dermatózisa
- Terhesség alatti hányinger, szédülés és torlódási panaszok
- Égési sérülések után
- Hegkezelés

Ellenjavallatok

Abszolút ellenjavallatok:

- Előrehaladott perifériás artériás betegség (ha ezen paraméterek egyike alkalmazható: ABPI < 0,5, boka artériás nyomás < 60 mmHg, lábujjnyomás < 30 mmHg vagy TcPO₂ < 20 mmHg lábfej hátsó része)
- Dekompenzált szívelégtelenség
- Szeptikus phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Kockázatok, amiket figyelembe kell venni**
- (Döntés a terápiáról a haszon/kockázat mérlegelésével)**
- Szívargó dermatózisok
- A kompressziós harisnya anyagával kapcsolatos összeférhetetlenség
- A végtagok súlyos érzékenységi rendellenességei
- Előrehaladott perifériás neuropátia (pl. Diabetes mellitus)
- Krónikus polyarthrit

Az ellenjavallatok be nem tartásából eredően felelősséget nem vállalunk.

Kockázatok és mellékhatások

Az orvosi kompressziós harisnyák bőrelhalást és a perifériás idegek nyomáskárosodását okozhatják. Javasolt a veszélyeztetett területek kipárnázása. Érzékeny bőr esetén a kompressziós harisnya alatt előfordulhat viszketés és egyéb bőrprobléma. Ezért megfelelő bőrápolást javasolunk. Ha az alábbi tüneteket észleli, azonnal vegye le a harisnyát és konzultáljon kezelőorvosával a terápia folytatásáról: a lábujjak kék vagy fehér elszíneződése, szokatlan érzés és zsibbadás, fokozódó fájdalom, légszomj és verejtékezés, akut mozgási nehézség.

Garancia

Megfelelő tárolás esetén a gyógyászati kompressziós harisnyák eltarthatósága 3 év. Ehhez adódik hozzá a viselési idő, amely rendszeres használat és rendeltetésszerű gondozás mellett legfeljebb 6 hónap. Ezen időszak letelte után a termékre nem vonatkozik garancia. A normál elhasználódásra vagy nem rendeltetésszerű használatra visszavezethető hibák alapvetően kizárják a garanciát. A nem rendeltetésszerű használat magában foglalja a termék utólagos átalakítását is, amelyet nem a gyártó hajtott végre. Az egyedi festési folyamatok során keletkező enyhe színelterések nem tekintendők hibának. Az érintett termékek emiatt történő cseréje vagy visszaküldési lehetősége kizárt. A termék egyetlen beteg kezelésére készült. A gyártó termékfelelősségét kizárja, ha másoknak továbbadják azt újrafelhasználás céljából.

Ártalmatlanítás

Kérjük, a helyi előírások szerint gondoskodjon a termék hasznos élettartamának lejártakor annak ártalmatlanításáról.

Bejelentési kötelezettség

A törvényi rendelkezések értelmében a betegek és a felhasználók kötelesek a termékkel kapcsolatban fellépő olyan súlyos esetekről a gyártót és az illetékes nemzeti hatóságot (Németországban BfArM) haladéktalanul értesíteni, amelyek az egészségi állapot jelentős romlásához vagy halálhoz vezetnek, vezettek vagy vezethettek volna.

Драги потребители,

радваме се, че избрахте компресивните чорапи от фирма Ofa и Ви благодарим за оказаното доверие. Молим Ви да отделите малко време и да прочетете внимателно тази информация за продукта. За оптимална ефективност на Вашата компресивна терапия!

Предназначение

Компресивните чорапи се използват за терапия на флебити и заболявания на лимфната система на ръцете и краката и при липоедеми. В зависимост от показанията се използват различни продукти.

Принцип на действие на медицинските компресивни чорапи

Чрез съгласувани със съответното показание продукти и контролиран натиск се ускорява връщането на кръвта, подобрява се микроциркулацията в тъканите и се ускорява лимфотокът.

 Важни указания

Носете медицински компресивни чорапи само по лекарска препоръка. Чрез еже-дневното носене и редовните медицински прегледи Ви осигуряваме успеха на Вашето лечение! Чорапите трябва да се предоставят от медицински обучен квалифициран персонал. Вашият специализиран търговец също ще Ви консултира как да обувате правилно Вашите компресивни чорапи. Ако при носенето се появят остри болки в краката или кожни раздразнения, незабавно потърсете лекарски съвет. Кожните реакции в зоната на придържащите ленти могат да се предотвратят чрез неколкостепенно преместване на придържащата лента в рамките на деня. Ако чорапите се носят в комбинация с други медицински помощотърсете лекарски съвет. Ние тестваме нашите продукти в рамките на обширно осигуряване на качеството. Ако въпреки това имате оплаквания, се обърнете към Вашия специализиран търговец. Не поправяйте повредите сами, а върнете чорапите на специализирания търговец, от когото сте ги закупили. Топчетата, които се образуват поради триенето в други дрехи, не намаляват качеството на чорапите.

Упътване за обуване

1. За обуване обърнете чорапа до ходилото наопаки. Прилагате частта на чорапа за стъпалото върху пръстите на краката и след това върху горната част на ходилото.

2. Внимателно издърпайте частта на чорапа за крака върху петата. При това избягвайте да дърпате чорапа за завършващата или придържащата лента.

3. Приложите останалата част от чорапа внимателно нагоре, без да го усуквате. Накрая разпределете чорапа върху крака, докато той прилепне без гънки.

Указания за поддръжка

Продуктът е подходящ за незабавна употреба. Препоръчваме да го изперете преди първата употреба. След това перете ежедневно на ръка или на щадяща програма за пране в пералня. Перете чорапите отделно с препарат за фино пране без омекотител (например специален перилен препарат Ofa Clean) на максимум 40° C и ги изплаквайте добре. Чорапите могат да се центрофужат щадящо, но не ги изцеждайте. Сушете Вашите компресивни чорапи на въздуха или с щадящата програма на Вашата сушилня, но не ги поставяйте върху парното или на директна слънчева светлина. Никога не гладете чорапите. За да се запази ефективността на Вашите чорапи, не използвайте химически почистващи препарати, бензин или омекотител. Тези субстанции увреждат тъканта. Компресивните чорапи до голяма степен са нечувствителни спрямо греси и масла, но не бива да влизат в контакт с мехлеми. Чорапите с придържащи ленти със силиконово покритие като цяло не трябва да влизат в контакт с разтворители, мехлеми, обратно омазняващи миелни лосиони и кремове за тяло.

В противен случай способността за придържане на придържащите ленти може трайно да се наруши (окосмяването на краката и сухата кожа също могат да ограничат функцията на придържащите ленти). Съхранявайте чорапите на сухо и защитено от слънце и горешина място, по възможност в оригиналната опаковка.

Да се пере наопаки и да не се използва омекотител!

-  Щадяща програма за пране
-  Да не се изгладява
-  Да се суши щадящо
-  Да не се гладят
-  Да не се дава на химическо чистене

Състав на материала

Използват се полиамид, еластан, а при някои продукти памук. Вижте конкретните данни на текстилния етикет, защит във Вашия чорап.

Съвети за обуване

Обувайте чорапите рано сутрин веднага след ставане, докато по краката Ви още няма отоци. Не дърпайте компресивните чорапи нагоре за завършващата или придържащата лента, а ги пригладете с ръце отдолу нагоре. За да се улесни обуването и да се щади тъканта, се препоръчва да се носят домакински зумени ръкавици.

Украшенията и дългите нокти на ръцете могат да повредят чорапите. Внимавайте за редовна грижа за ходилата и безупречни обувки. Попитайте във Вашия специализиран магазин за медицински изделия за специалните ръкавици Ofa Grip и практичните Ofa помощни средства за обуване и събуване на компресивни чорапи с отворени и затворени пръсти.

Показания (вижте също насоките Медицинска компресивна терапия на AWMF 037/005, редакция 12/18)

- подобряване на венозните симптоми и качеството на живота при хронични венозни заболявания
- превенция и терапия на венозни отоци
- превенция и терапия на венозни кожни промени
- екзема и пигментация
- дерматолипосклероза и ливедо Vasculum (Atrophie blanche)
- терапия и намаляване на болката при венозна язва на подбедрицата (Ulcus cruris venosum), също и профилактика на рецидиви
- терапия на артериално и венозно обусловен Ulcus cruris (вижте противопоказанията!)
- Варикоза
- начална фаза след терапия на Варикоза
- функционална венозна недостатъчност
- Венозни малформации
- Венозна тромбоза
- състояние след тромбоза
- посттромботен синдром
- профилактика на тромбози при мобилни пациенти
- лимфни отоци
- отоци по време на бременността
- посттравматични/постоперативни отоци
- циклични идиопатични отоци
- липоедеми след стадий II
- задържане на телесни течности в резултат на обездвижване (артрозен застоен синдром, парези и частични парези на крайниците)
- професионално обусловени отоци (стоящи, седящи професии)
- медикаментозно обусловени отоци, когато не може да се премине на друг медикамент
- затлъстяване с функционална венозна недостатъчност
- възпалителни дерматози на краката
- задене, виене на свят и оплаквания за задържане на телесни течности

- през бременността
- състояние след изгаряния
- лечение на белези

Противопоказания

Абсолютни противопоказания:

- напреднала периферна артериална стеноза или периферна артериална оклузивна болест (ако е налице един от следните параметри: ABPI < 0,5, артериално налягане на глезените < 60 mmHg, налягане на пръстите < 60 mmHg или TcPO₂ < 20 mmHg на горната страна на крака)
- декомпенсирана сърдечна недостатъчност
- септичен флебит
- тежка венозна тромбоза (Phlegmasia coerulea dolens)

Рискове, които трябва да се вземат предвид

(избор на терапия след преценка на ползите и рисковете)

- мокри дерматози
- непоносимост към материалите на компресивните чорапи
- тежки смущения в чувствителността на крайниците
- напреднала периферна невропатия (например Diabetes mellitus)
- хроничен полиартрит

Не поемаме никаква отговорност при неспазване на тези противопоказания.

⚠ Рискове и странични действия

Медицинските компресивни чорапи могат да причинят кожни некрози и увреждания поради натиск на периферните нерви. Препоръчва се поставянето на подложки на засегнатите участъци. При чувствителна кожа под компресивните чорапи могат да възникнат сърбеж и кожни проблеми. Затова се препоръчва адекватна грижа за кожата. При следните симптоми чорапите незабавно да се събуят и за продължаването на терапията да се

потърси лекарски съвет: посиняване или побеляване на пръстите на краката, неприятни усещания и безчувственост, засилващи се болки, учестено дишане и изпотяване, остри ограничения на движението.

Гаранция

При правилно съхранение възможността за съхранение на медицинските компресивни чорапи е ограничена на 3 години. Към това се прибавя времето за носене, което при редовна употреба и надлежна грижа е максимум 6 месеца. След изтичане на този срок продуктите се изключват от гаранцията. По принцип от гаранцията са изключени дефекти, които се дължат на индивидуално износване и неправилна употреба. Към неправилната употреба спада също допълнителната промяна на продукта, която не е извършена от фирмата производител. Леките разлики в цвета, които могат да възникнат в резултат на индивидуалното оцветяване, не се считат за дефект. В този смисъл замяната и връщането на съответната стока са. Продуктът е предначинен за използване от един единствен пациент. Ако продуктът бъде предаден за повторно използване на други хора, отговорността на производителя за продукта изгря.

Изхвърляне

След края на продължителността на използване изхвърлете продукта съгласно разпоредбите на място.

Задължение за уведомяване

Съгласно законовите разпоредби пациентите и потребителите са длъжни незабавно да уведомят производителя или компетентния национален орган (в Германия BfArM) за тежки инциденти, възникнали във връзка с продукта, които са довели или е могло да доведат до съществено влошаване на здравословното състояние или до смърт.

Kære bruger

Vi er glade for, at du har valgt kompressionsstrømper fra Ofa, og takker dig for din tillid til vores produkt. Tag dig tid et øjeblik til at læse denne produktinformation grundigt igennem. For en optimal virkning af din kompressionsterapi!

Anvendelsesformål

Kompressionsstrømper anvendes til terapeutisk behandling af flebologiske og lymfologiske sygdomme i arme og ben såvel som lipødemer. Afhængigt af indikation vil forskellige produkter tages i brug.

Sådan virker medicinske kompressionsstrømper

Ved hjælp af produkter, der er afstemt med den specifikke indikation, og ved hjælp af kontrolleret tryk bliver blodets tilbagestrømning accelereret, mikrocirkulationen i bindevævet forbedres, og lymfestrømmen stiger.

⚠️ Vigtige anvisninger

Brug kun medicinske kompressionsstrømper efter aftale med din læge. Ved daglig brug og regelmæssig kontrol hos lægen sikrer du dig, at behandlingen bliver vellykket! Udlevering af strømperne skal ske gennem medicinsk uddannet fagpersonale. Din specialforhandler vil også rådgive dig om, hvordan du tager strømperne rigtigt på. Skulle der opstå akutte smerter i benet eller hudirritationer, mens du har strømpen på, skal du straks tage kontakt til egen læge. Hudreaktioner i områder, hvor de selvstændige kanter sidder, kan forebygges ved, at kanten i løbet af en dag flere gange flyttes lidt. Hvis strømperne skal bæres i kombination med andre medicinske hjælpemidler, skal du drøfte dette med den behandlende læge. Vi tester vores produkter inden for rammerne af en omfattende kvalitetssikring. Skulle du alligevel have reklamationer, bedes du henvende dig til din specialforhandler. Forsøg ikke selv at reparere skader, men tag strømpen med tilbage til den specialforhandler, hvor du købte den. Fiberknuder, der kan opstå som følge af friktion mod andre beklædningsgenstande, forringer ikke strømpens kvalitet.

Vejledning til at tage strømpen på

1. Til påføring vendes strømpen på vrangen ned til fodstykket. Træk fodstykket over tæerne og derefter over vristen.

2. Træk nu forsigtigt bendelen over hælen. Når du trækker i strømpen, skal du undgå at holde i afslutningssømmen eller kantebåndet.

3. Stryg resten af strømpen opad i en jævn bevægelse, uden at strække den. Til slut fordeler du strømpen på benet, til den ligger tæt og uden folder.

Anvisninger til vask og pleje

Strømperne kan tages i brug med det samme. Vi anbefaler at vaske dem, før de tages på første gang. Vask det derefter i hånden eller på skånevask i vaskemaskinen. Vask strømperne separat med et mildt vaskemiddel uden skyllemiddel (f.eks. Ofa Clean specialvaskemiddel) ved maksimalt 40 °C og skyl dem grundigt. Strømperne kan centrifugeres forsigtigt, men må ikke vrides. Lad dine kompressionsstrømper lufttørre, eller tør dem på skåneprogram i tørretumbleren, men læg dem ikke på radiatoren eller i direkte sol. Strømperne må ikke stryges. For at bevare dine strømpers virkning skal du undlade at bruge kemiske rengøringsmidler, benzin eller skyllemiddel. Disse substanser skader det strikkede stof. Kompressionsstrømper er i stor udstrækning ikke sensitive over for fedt og olier, men bør dog ikke komme i kontakt med salver. Strømper med selvstændige, silikonebelagte kanter bør generelt ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, salver, fugtgivende vaskelotioner eller kropscrémer. Kanternes klæbeevne kan ellers svækkes permanent (også behåring på benene og tør hud kan hæmme kantebåndenes funktion). Strømperne bør opbevares tørt og beskyttet mod sol og varme, om muligt i originalemballagen.

Vaskes med vrangen udad, og brug ikke skyllemiddel!

-  Skånevask
-  Må ikke bleges
-  Tørres på skåneprogram
-  Må ikke stryges
-  Tåler ikke kemisk rensning

Materialesammensætning

Der er benyttet polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) og ved enkelte produkter bomuld (Baumwolle). Se venligst de konkrete specifikationer på den tekstiletiket, der er syet på strømpen.

Sådan tages strømperne på

Tag strømperne på tidligt om morgenen, efter at du er stået op, mens dine ben endnu er fri for hævelser. Undlad at trække kompressionsstrømperne op ved kantsømmen eller den selvbyggende, øverste kant, men sørg for at stryge den på med hænderne, nedefra og op. For at lette påklædningen og for at skåne strikmaterialet anbefales det at anvende husholdningshandsker.

Smykker og lange negle kan skade strømpen. Vær omhyggelig med regelmæssig pleje af fødderne og skotøj i upåklagelig stand. Kontakt din forhandler af sygeplejeartikler for at høre nærmere om Ofa Grip-specialhandsker og Ofa, den praktiske hjælp til at tage kompressionsstrømper med både åben og lukket spids af og på.

Indikationer (se også retningslinjerne for medicinsk kompressionsterapi fra AWMF 037/005, stand 12/18)

- Forbedring af venøse symptomer og livskvalitet ved kroniske venelidelser
- Forebyggelse af og terapi ved venøse ødemer
- Forebyggelse af og terapi ved venøse forandringer i huden
- Eksem og pigmentering
- Dermatoliposklerose og atrophie blanche
- Terapi og smertereducering ved Ulcus cruris venosum, også til forebyggelse af tilbagefald.
- Terapi ved arteriel og venøs betinget Ulcus cruris (se kontraindikationer!)
- Åreknuder
- Initial fase efter varikoserapi
- Funktionel venøs insufficiens
- Venøse malformationer
- Venetrombose
- Tilstand efter trombose
- Posttrombotisk syndrom
- Tromboseforebyggelse hos mobile patienter
- Lymfeknuder
- Ødemer i graviditeten
- Posttraumatiske/postoperative ødemer
- Cyklisk idiopatiske ødemer
- Lipødemer fra stadie II
- Overbelastningstilstande som følge af ubevægelighed (arthrogen overbelastningssyndrom, pareser og delpareser i ekstremiteten)
- Erhvervsbetingede ødemer (stillesiddende arbejde, stående arbejde)
- Medikamentøst betingede ødemer, hvis en stillingsforandring ikke er mulig
- Adipositas med funktionel venøs insufficiens
- Inflammatoriske dermatoser i benene
- Kvalme, svimmelhed og problemer med overbelastede blodårer i graviditeten
- Tilstand efter brandsår
- Behandling af ar

Kontraindikationer

Absolutte kontraindikationer:

- Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom (Hvis en af disse parametre gælder: ABPI < 0,5, ankelarterietyk < 60 mmHg, tåtryk < 30 mmHg eller TcPO₂ < 20 mmHg fodryg)
- Dekompenseret hjertefunktionsinsufficiens
- Septisk flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Risici at være opmærksom på (behandlingsbeslutning under brug/afvejning af risiko)**
- Løbende dermatoser
- Intolerance i forhold til materialerne i kompressionsstrømperne
- Svære sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteten
- Fremskreden perifer neuropati (f.eks. diabetes mellitus)
- Kronisk polyarthritis

Ved manglende overholdelse af disse kontraindikationer fralægger vi os ethvert ansvar.

Risici og bivirkninger

Medicinske kompressionsstrømper kan forårsage hudnekroser og trykskader på perifere nerver. Det anbefales at polstre områder, der er udsat for risiko. Ved følsom hud kan der under kompressionsstrømperne opstå kløe og hudproblemer. Derfor kan en tilstrækkelig hudpleje i høj grad anbefales.

Ved følgende symptomer bør du omgående tage strømperne af og rådføre dig med din læge angående fortsættelsen af terapien: Tæerne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedeture, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

Garanti

Opbevaringsevnen for medicinske kompressionsstrømper er ved passende opbevaring begrænset til 3 år. Hertil kommer bæretiden, der ved regelmæssig brug og korrekt pleje maksimalt er 6 måneder. Efter udløbet af denne frist er produkterne ikke længere omfattet af garantien. Som udgangspunkt er mangler ikke omfattet af garantien, hvis de kan føres tilskrives almindelige slitage eller uhensigtsmæssig brug. Under uhensigtsmæssig brug regnes også forandring af produktet efter købet, når denne ikke er foretaget af fremstillingsvirksomheden. Dette produkt er beregnet til pleje for en enkelt patient. Bliver det givet videre til andre med henblik på genbrug, ophører fabrikantens produktgaranti.

Bortskaffelse

Efter brug bør produktet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for affaldssortering.

Anmeldelsespligt

På grund af love og regler er patienter og brugere forpligtet til straks at melde det til fabrikanten og til de ansvarlige myndigheder (i Tyskland BfArM), hvis der i forbindelse med brug af produktet er optrådt alvorlige, utilsigtede hændelser, der har medført alvorlig forringelse i helbredstilstanden hos patienten eller førte til eller kunne have ført til dennes død.

Bästa användare!

Vi är glada att du har valt kompressionsstrumpor från Ofa och tackar för ditt förtroende. Ta dig gärna tid för att noga läsa igenom den här produktinformationen. Det är för att din kompressionsbehandling ska bli så effektiv som möjligt!

Avsedd användning

Kompressionsstrumpor används för att behandla venösa och lymfologiska sjukdomar i armar och ben samt vid lipödem. Beroende på indikation används olika produkter.

Effekten från medicinska kompressionsstrumpor

Beroende på produkten och det kontrollerade trycket för respektive indikation ökas blodgenomflödet, mikrocirkulationen i vävnaderna förbättras och lymfflödet ökas.

Viktig information

Använd bara medicinska kompressionsstrumpor efter att du pratat med läkare. Genom att bära dem dagligen och gå på regelbundna läkar-kontroller säkerställer du att behandlingen blir framgångsrik! Strumpbyxorna måste delas ut av medicinskt utbildad personal. Din återförsäljare kan också ge dig råd om hur du tar på dig kompressionsstrumporna på rätt sätt. Om du får akuta benvärk eller hudirritationer när du bär produkten, sök omedelbart läkarhjälp. Hudreaktioner i området kring tejpbanden kan förebyggas genom att tejpbandet flyttas något flera gånger under dagen. Om strumporna ska bäras i kombination med andra medicinska hjälpmedel, vänligen rådgör med läkare. Vi testar våra produkter inom ramen för en omfattande kvalitetssäkring. Om du ändå har några klagomål, vänligen kontakta din återförsäljare. Reparerar inte skadorna själv, utan lämna tillbaka strumpan till den återförsäljare där du köpte den. Fiberknutor, som kan bildas genom friktion mot andra klädesplagg, påverkar inte strumpans kvalitet.

Instruktion för påtagning

1. För att ta på strumpan vänder du den ut och in fram till fotdelen. Dra sedan fotdelen över tårna och därefter över vristen.

2. Dra nu försiktigt bendelen över hälen. Undvik att dra upp strumpan genom att ta tag i kanten eller häftbandet.

3. Släta ut resten av strumpan så att den är jämn utan att översträcka den. Avslutningsvis drar du upp strumpan på benet så att den ligger an utan veck.

Skötselråd

Produkten är redo att användas direkt. Vi rekommenderar att du tvättar den innan du använder den första gången. Därefter bör du tvätta den dagligen för hand eller på ett skonsamt program i tvättmaskinen. Tvätta strumporna separat med fintvättmedel utan sköljmedel (t.ex. Ofa Clean specialtvättmedel) vid max 40 °C och skölj noga. Strumporna kan centrifugeras försiktigt men vrid inte ur dem. Lufttorka kompressionsstrumporna eller i ett skonsamt program i torktumlaren, men lägg dem inte på ett värmeelement eller i direkt solljus. Använd aldrig ett strykjärn på strumporna. För att bevara strumpornas effekt får inga kemiska rengöringsmedel, bensin eller sköljmedel användas. Dessa ämnen angriper det stickade tyget. Kompressionsstrumpor tål för det mesta fetter och oljor, men ska inte komma i kontakt med salvor. Strumpor med silikonhäftband får aldrig komma i kontakt med lösningsmedel, salvor, återfettande tvättlotjoner och kroppskrämer. Fästförmågan hos häftbanden kan i så fall försämrats (hår på benen och torr hud kan också minska häftförmågan hos häftbanden). Förvara strumporna torrt och skyddade mot sol och värme, helst i originalförpackningen.

Tvätta från avigsidan och använd inget sköljmedel!

-  Skonsamt tvättprogram
-  Blek ej
-  Skonsamt torkprogram
-  Stryk ej
-  Ej kemtvätt

Materialsammansättning

Polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) samt bomull (Baumwolle) för vissa produkter används. Uppgifterna för respektive produkt finns angivna på den etikett som finns insydd i strumpan.

Så här tar du på strumporna

Ta på strumporna direkt på morgonen efter att du har stigit upp, så länge dina ben fortfarande är fria från svullnader. Dra inte upp kompressionsstrumpan i kanten eller vid fästet, utan dra den uppåt med händerna från nedanför. För att underlätta påklädningen och skona stickningen rekommenderas att man använder hushållshandskar av gummi.

Smycken och långa naglar kan skada strumpan. Se också till att regelbundet sköta dina fötter och ha bra skor. Fråga din medicintekniska återförsäljare om Ofa Grip specialhandskar och de praktiska Ofa-på- och avtagshjälpmedlen för kompressionsstrumpor med öppen och sluten tå.

Indikationer (se även riktlinjerna för Medizinische Kompressionstherapie AWMF, 037/005, version 12/18)

- Förbättring av venösa symptom och livskvalitet vid kroniska ven-sjukdomar
- Prevention och behandling av venösa ödem
- Prevention och behandling av venösa hudförändringar
- Eksem och pigmentering
- Dermatoliposkleros och atrophie blanche
- Behandling och smärtreduktion vid venösa bensår (ulcus cruris venosum), även återfallsprofilax
- Behandling av arteriellt och venöst betingade bensår (ulcus cruris) (se kontraindikationer!)
- Åderbräck
- Initial fas efter behandling av åderbräck
- Funktionell venös insufficiens
- Venösa missbildningar
- Ventrombos
- Tillstånd efter en trombos
- Posttrombotiskt syndrom
- Trombosprofilax hos resande patienter
- Lymfödem
- Ödem under graviditet
- Posttraumatiskt/postoperativt ödem
- Cykliskt idiopatiskt ödem
- Lipödem från stadie 2
- Blodstockningstillstånd på grund av orörlighet (artrogen stockningssyndrom, pareser och delvisa pareser i extremiteten)
- Yrkesbetingat ödem (yrken där man står och/eller sitter)
- Läkemedelsbetingat ödem när det inte går att byta
- Fetma med funktionell venös insufficiens
- Inflammatoriska dermatoser i benen
- Illamående, yrsel och blodstockningsbesvär under graviditet
- Tillstånd efter brännskador
- Ärrbehandling

Kontraindikationer

Absoluta kontraindikationer:

- Framskriden perifer artärsjukdom (om någon av dessa parametrar gäller: ABPI < 0,5, ankelartärtryck < 60 mmHg, tå-tryck < 30 mmHg eller TcPO₂ < 20 mmHg fottrygg)
- Dekompenserad hjärtsvikt
- Septisk flebit
- Phlegmasia cerulea dolens

Risker som skall beaktas (behandlingsbeslut med avvägning nytta/risk)

- Vätskande dermatoser
- Känslighet mot materialet i kompressionsstrumpor
- Svåra sensibilitetsstörningar i extremiteten
- Framskriden perifer neuropati (t.ex. diabetes mellitus)
- Kronisk polyartrit

Om dessa kontraindikationer inte följs fransäger vi oss allt ansvar.

Risker och biverkningar

Medicinska kompressionsstrumpor kan orsaka hudnekroser och tryckska-dor på perifera nerver. Vaddering av utsatta områden rekommenderas. Känslig hud kan reagera med klåda och hudproblem under kompressionsstrumporna. Därför rekommenderas lämplig hudvård.

Vid följande symtom, ta omedelbart av strumporna och rådfråga läkare om behandlingen ska fortsätta: blå eller vit missfärgning av tårna, känselstörningar och domningar, ökande smärta, andnöd och svettningar, akuta rörelse-begränsningar.

Garanti

Lagringstiden för medicinska kompressionsstrumpor är begränsad till 3 år vid korrekt förvaring. Därtill kommer bårtiden, som vid regelbunden användning och korrekt skötsel uppgår till maximalt 6 månader. Efter utgången av denna period omfattas produkterna inte längre av garantin.

I princip är fel som beror på normal slitage eller felaktig användning undantagna från garantin. Felaktig användning omfattar även efterhands-ändringar av produkten som inte har utförts av tillverkaren. Små färgvariationer som kan uppstå på grund av den individuella färgningen anses inte vara defekter. Sådana varor är därför undantagna från byte och returer.

Produkten är avsedd för användning på en enda patient. Om produkten vidarebefordras till andra personer för återanvändning upphör tillverkarens produktansvar.

Avfallshantering

Efter användningsperioden ska produkten avfallshanteras enligt lokala bestämmelser.

Anmälningsplikt

På grund av lagstadgade bestämmelser är patienter och användare skyldiga att omedelbart anmäla allvarliga händelser, som uppkommit i samband med produkten och som lett eller kunnat leda till en allvarlig försämring av hälsotillståndet eller till döden, till tillverkaren och ansvarig nationell myndighet (BfArM i Tyskland).

Hyvä käyttäjä,

kiitos luottamuksestasi tuotteitamme kohtaan ja siitä, että valitsit Ofa-kompressiosukat. Luethan nämä tuotetiedot huolellisesti läpi. Siten takaat kompressiohoidon parhaat tulokset.

Käyttötarkoitus

Kompressiosukkia käytetään käsivarsien ja jalkojen laskimoveren- ja lymfakiertosairauksien sekä lipedeeman hoidossa. Valittavissa on eri tuotteita käyttöaiheen mukaan.

Lääkinnällisten tukisukkien toimintaperiaate

Käyttöaiheen mukaisesti määrätty tuote ja hallittu paine nopeuttavat veren takaisinvirtausta, mikä parantaa kudosten mikroverenkiertoa ja lymfavirtausta.

 Tärkeitä ohjeita

Käytä lääkinällisiä kompressiosukkia vain lääkärin ohjeesta. Käyttämällä sukkia päivittäin ja käymällä säännöllisesti lääkärintarkastuksessa varmistat hoidon onnistumisen. Sukkien myyjän tulee olla terveydenhuollon ammattilainen. Myyjä neuvo sinua myös kompressiosukkien pukemisessa. Jos sukkaa käytettäessä ilmenee akuutteja jalkakipuja tai ihoärsytystä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Resorireunojen lähellä ilmeneviä ihereaktioita voidaan välttää siirtämällä resorireunaa päivän mittaan hieman eri kohtaan. Jos sukkaa käytetään yhdessä muiden lääkinällisten apuvälineiden kanssa, keskustele asiasta hoitavan lääkärin kanssa. Tarkastamme tuotteemme kattavin laadunvarmistustoimin. Jos sinulla on silti huomautettavaa, ota yhteys sukien myyjään. Älä korjaa vaurioita itse, vaan toimita sukat takaisin myyjälle, jolta ne ostit. Sukkien laatua eivät heikennä langansäikeet, joita voi muodostua hankauksessa muiden vaatekapaleiden kanssa.

Pukemisohje

1. Pue sukka kääntämällä se nurin jalkaterään asti. Vedä jalkateräosa varpaiden ja jalkapöydän päälle.

2. Vedä jalkateräosa sitten varovasti kantapäähän yli. Vältä vetä-mästä sukkaa resorireunasta.

3. Vedä sukka oikeaan pituuteen-sa, ei sen yli. Tasoita sukka lopuksi jalan myötäisesti niin, että siinä ei ole ryppyjä.

Huolto-ohjeet

Tuotetta voi käyttää heti. Suosittelemme pese-mään sen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese sukat sen jälkeen päivittäin käsin tai hienope-sussa. Pese sukat erillään hienopesuaineella ilman huuhteluainetta (esim. Ofa Clean -erikois-pesuaineella) enintään 40 °C:ssa ja huuhte-le huolellisesti. Linkous matalalla nopeudella sopii sukille, mutta älä väännä niitä kuivaksi. Kuivata kompressiosukat pyykkinarulla tai kuivausrummun hienoppykille tarkoitettulla ohjelmalla, mutta älä ripusta niitä lämmityslaitteen lähelle tai suoraan auringonvaloon. Älä koskaan silitä sukkaa. Jotta sukien tehokkuus säilyisi, älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, bensiiniä tai huuhteluaineita. Nämä aineet vaurioittavat neulosta. Kompres-siosukat kestävät rasvoja ja öljyjä hyvin, mutta niitä ei tulisi päästää kosketukseen salvojen kanssa. Silikonipäälysteisillä resorireunoilla varustettuja sukkaa ei tule tavallisesti päästää kosketuksiin liuottimien, salvojen, kosteuttavien suihkusaippuoiden tai kosteusvoiteiden kanssa. Ne voivat pysyvästi heikentää resorireunoja (myös jalkojen karvoitus ja kuiva iho voivat rajoittaa resorireunojen toimintaa). Säilytä sukat kuivassa sekä auringolta ja kuumuudelta suojattuina mieluiten alkuperäispakkauksessa.

Pese nurin käännettyinä, äläkä käytä huuhteluainetta!

-  Hienopesu
-  Ei saa valkaista
-  Varovainen kuivaus
-  Ei saa silittää
-  Ei kemiallista pesua

Materiaalit

Käytetty polyamidia (Polyamid), elastaania (Elastan) ja joissakin tuotteissa puuvillaa (Baumwolle). Konkreettiset tiedot näkyvät sukkaan ommellussa tekstiilitiketissä.

Pukemisvinkkejä

Pue sukat heti aamuisin vuoteesta noustuasi, kun jaloissa ei vielä ole turvotusta. Älä vedä kompressiosukkaa resorireunasta ylöspäin, vaan vedä sitä käsin alhaalta ylöspäin. Pukemisen apuna suositellaan käytettäväksi kumihihansikkaita, jotka myös suojaavat neulosta. Korut ja pitkät sormenkyynnet voivat vaurioittaa sukkaa.

Huolehdi myös säännöllisistä jalkojen hoidosta ja kunnollisista jalkineista. Kysy lääkinnällisten tuotteiden erikoismyymälästä Ofa Grip -erikoiskäsineitä ja käytännöllisiä pukemisen ja riisumisen Ofa-apuvälineitä avoimella ja suljetulla kärjellä varustetuille kompressiosukille.

Käyttöaiheet (katso myös lääkinnällisen kompressiohoidon ohjeistukset AWMF 037/005, versio 12/18)

- laskimo-oireiden ja kroonisissa laskimosairauksissa elämänlaadun parantaminen
- laskimoperäisen turvotuksen ehkäisy ja hoito
- laskimoperäisten ihomuutosten ehkäisy ja hoito
- ihottuma ja pigmentaatio
- dermatolopiskleroosi ja atrophie blanche
- ulcus cruris venosum -haavaumien hoito ja kivunlievitys, myös ehkäisy
- valtimo- ja laskimoperäisten ulcus cruris -haavaumien hoito (katso vasta-aiheet!)
- suonikohjut
- ensivaihe suonikohjuhoidon jälkeen
- toiminnallinen laskimoiden vajaatoiminta
- laskimoiden epämuodostumat
- laskimotukokset
- tukoksen jälkeinen tila
- posttromboottinen oireyhtymä
- liikuntakykyisten potilaiden tukosten ehkäisy
- lymfedeema
- raskausturvotus
- posttraumaattinen/postoperatiivinen turvotus
- syklinen idiopaattinen turvotus
- lipedeema vaiheesta II alkaen
- liikkumattomuudesta johtuvat verentungokset (artrogeeninen kongesttiivinen oireyhtymä, raajojen pareesi ja osapareesi)
- työperäiset turvotukset (seisoma-, istumatyöt)
- lääkityisperäiset turvotukset, kun lääkitystä ei voi säätää
- adipositeetti, johon liittyy toiminnallisten laskimoiden vajaatoiminta
- jalkojen tulehdukselliset dermatoosit
- raskaudenaikainen pahoinvointi, huimaus ja turvotus
- palovammojen jälkitilat
- arpien hoito

Vasta-aiheet

Ehdottomat vasta-aiheet:

- pitkälle edennyt raajojen valtimosairaus (mikäli jokin näistä ehdoista pätee: ABPI < 0,5, nilkan valtimopaine < 60 mmHg, varvaspaine < 30 mmHg tai TcPO₂ < 20 mmHg jalkapöytä)
- kompensoimaton sydämen vajaatoiminta
- septinen laskimotulehdus
- phlegmasia coerulea dolens

Huomioitavat riskit (hoitopäätös hyöty-/riskiarvion pohjalta)

- vetistävät dermatoosit
- yliherkkyys kompressiosukan materiaaleille
- raajojen vaikeat tuntohäiriöt
- pitkälle edennyt perifeerinen neuropatia (esim. diabetes mellitus)
- krooninen moniniveltulehdus

Takuu raukeaa, jos näitä vasta-aiheita ei noudateta.

Riskit ja sivuvaikutukset

Lääkinnälliset kompressiosukat voivat aiheuttaa ihonekroosia ja painevammoja ääreishermostoihin. Herkille alueille suositellaan pehmustetta. Kompressiosukkien käyttö voi aiheuttaa herkin ihon kutinaa ja iho-ongelmia. Niihin suositellaan vastaavia ihonhoitomenetelmiä.

Jos havaitaan seuraavia oireita, sukat on riisuttava heti ja hoidon jatkamisesta on keskusteltava lääkärin kanssa: varpaiden sininen tai valkoinen väri, tuntohäiriöt ja puutumisen tunne, ytyvät kivut, hengästys ja hikoilu, akuutit liikerajoitukset.

Takuu

Lääkinnällisiä kompressiosukkia voi säilyttää asianmukaisissa oloissa 3 vuotta. Siihen lisätään käyttöaika, joka on säännöllisessä käytössä ja asianmukaisella huollolla enintään 6 kuukautta. Tämän ajan kuluttua tuotteen takuu on umpeutunut. Takuu ei pääsääntöisesti kata vikoja, jotka ovat seurausta liiallisesta kulumisesta tai virheellisestä käytöstä. Virheellistä käyttöä on myös tuotteen jälkikäteinen tehty muokkaus, jota valmistaja ei ole tehnyt. Tuote on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Jos sitä halutaan käyttää toisellekin potilaalle, valmistajan tuotetakuu raukeaa.

Hävittäminen

Hävitä tuote käyttöänsä jälkeen paikallisten määräysten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus

Laki velvoittaa potilaat ja käyttäjät ilmoittamaan tuotteen yhteydessä ilmenneistä vaaratilanteista, jotka johtivat tai olisivat voineet johtaa terveydentilan merkittävään heikkenemiseen tai kuolemaan, valmistajalle ja toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle (Saksassa BfArM) välittömästi.

Draga korisnice, dragi korisniče,

drago nam je što ste se odlučili za kompresivne čarape tvrtke Ofa i zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju. Molimo uzmite malo vremena i pažljivo pročitajte ove informacije o proizvodu. Time ćete postići optimalnu učinkovitost Vaše kompresivne terapije!

Namjena

Kompresivne čarape primjenjuju se pri terapiji fleboloških i limfoloških oboljenja ruku i nogu te u slučaju lipedema. Ovisno o indikaciji mogu se koristiti različiti proizvodi.

Način djelovanja medicinskih kompresivnih čarapa

Zahvaljujući proizvodima prilagođenim dotičnoj indikaciji i kontroliranom pritisku ubrzava se povratak krvi, poboljšava se mikrocirkulacija u tkivu i povećava se limfotok.

⚠ Važne napomene

Nosite medicinske kompresivne čarape samo nakon savjetovanja s Vašim liječnikom. Svakodnevno nošenje i redovite liječničke kontrole osiguravaju uspjeh Vaše terapije! Čarape mora propisati medicinski školovano stručno osoblje. Vaš specijalizirani trgovac također će Vam dati savjet kako ćete pravilno oblačiti kompresivne čarape. Ako bi se tijekom nošenja javili akutni bolovi u nogama ili iritacije kože, molimo odmah se obratite liječniku. Kožne reakcije u području samoprianjajućih traka mogu se spriječiti tako da tijekom dana više puta malo premjestite samoprianjajuću traku. Ako čarape trebate nositi u kombinaciji s drugim medicinskim pomagalicama, zatražite savjet o tome od svojeg liječnika. Svoje proizvode provjeravamo u sklopu opsežnog osiguranja kvalitete. Ako usprkos tome imate reklamacije, molimo obratite se svom specijaliziranom trgovcu. Nemojte sami popravljati štete, nego vratite čarapu specijaliziranom trgovcu od kojeg ste je kupili. Čvorići na vlaknima, koji mogu nastati trenjem o druge odjevne predmete, ne umanjuju kvalitetu čarape.

Upute za oblačenje

1. Za oblačenje preokrenite čarapu do stopala. Navucite stopalo čarape preko prstiju i zatim preko rista.

2. Povucite sada nogavicu čarape pažljivo preko pete. Molimo pri tome izbjegavajte navlačiti čarapu držeći je za gornji rub ili samoprianjajuću traku.

3. Ravnomjerno navucite ostatak čarape, ali nemojte je previše istezati. Na kraju rasporedite čarapu po nozi tako da naliže bez nabora.

Upute za održavanje

Proizvod je prikladan za trenutnu upotrebu. Preporučujemo da ga operete prije prvog nošenja. Molimo da ga nakon toga svakodnevno perete ručno ili u perilici rublja na programu za osjetljivo rublje. Perite čarape zasebno deterdžentom za osjetljivo rublje bez omekšivača (npr. specijalni deterdžent Ofa Clean) na maksimalno 40 °C i dobro ih isperite. Čarape se mogu nježno centrifugirati, ali molimo nemojte ih cijediti žmikanjem. Sušite kompresivne čarape na zraku ili u sušilici na programu za osjetljivo rublje, ali nemojte ih odlagati na grijalicu ili na izravno Sunčevo svjetlo. Nikada nemojte glačati čarape. Kako biste sačuvali učinkovitost čarapa, molimo nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje, benzin ili omekšivač. Ove tvari nagrizaју pletivo. Kompresivne čarape uvelike su otporne na masti i ulja, ali ne bi smjele doći u kontakt s ljekovitim mastima. Čarape sa silikonskim samoprianjajućim trakama načelno ne bi smjele doći u kontakt s otapalima, ljekovitim mastima, hidratantnim losionima za pranje i kremama za tijelo. U suprotnom se može trajno umanjiti sposobnost držanja samoprianjajućih traka (dlake na nogama i suha koža također mogu ograničiti funkciju samoprianjajućih traka). Čuvajte čarape na suhom mjestu te zaštićene od sunca i topline, po mogućnosti u originalnom pakiranju.

Molimo prati preokrenuto i ne koristiti omekšivač!

-  Program za osjetljivo rublje
-  Ne izbjeljivati
-  Sušiti na programu za osjetljivo rublje
-  Ne glačati
-  Ne kemijski čistiti

Sastav materijala

Korišteni su poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) i u nekim proizvodima pamuk (Baumwolle). Točne podatke molimo potražite na tekstilnoj etiketi ušivenoj u čarapu.

Savjeti za oblačenje

Obucite čarape odmah ujutro nakon ustajanja dok na nogama još nema otekline. Molimo nemojte vući kompresivnu čarapu prema gore držeći je za gornji rub ili samoprianjajuću traku, nego je navucite rukama odozdo prema gore. Radi lakšeg oblačenja i čuvanja pletiva preporučujemo da nosite gumene rukavice za domaćinstvo. Nakit i dugi nokti mogu oštetiti čarapu.

Molimo također vodite računa o redovitoj njezi stopala i o tome da obuća bude potpuno neoštećena. Raspitajte se u svojoj specijaliziranoj trgovini medicinskih proizvoda o specijalnim rukavicama Ofa Grip praktičnom pomagalu za oblačenje i svlačenje kompresivnih čarapa s otvorenim i zatvorenim prstima tvrtke Ofa.

Indikacije (pogledajte također smjernicu za medicinsku kompresivnu terapiju AWMF 037/005, stanje 12/18)

- Poboljšanje venskih simptoma i kvalitete života kod kroničnih bolesti vena
- Prevencija i terapija venskih edema
- Prevencija i terapija venskih kožnih promjena
- Ekcem i pigmentacija
- Dermatoliposkleroza i bijela atrofija (Atrophie blanche)
- Terapija i smanjenje bolova kod venskih ulkusa na nozi (Ulcus cruris venosum), također i profilaksa recidiva
- Terapija arterijskih i venskih ulkusa na nozi (pogledajte također kontraindikacije!)
- Varikoza
- Početna faza terapije varikoze
- Funkcionalna venska insuficijencija
- Venske malformacije
- Venska tromboza
- Stanje nakon tromboze
- Posttrombotički sindrom
- Profilaksa tromboze kod mobilnih pacijenata
- Limfedemi
- Edemi u trudnoći
- Posttraumatski/postoperativni edemi
- Ciklički idiopatski edemi
- Lipedemi od stadija II
- Kongestije kao posljedica imobilizacije (artrogeni kongestivni sindrom, pareze i djelomične pareze ekstremiteta)
- Edemi uvjetovani radnim mjestom (stajajući, sjedeći poslovi)
- Edemi uvjetovani uzimanjem lijekova ako nije moguća promjena
- Gojaznost s funkcionalnom venskom insuficijencijom
- Upalne dermatoze nogu
- Mučnina, vrtoglavica i kongestivne tegobe u trudnoći
- Stanje nakon opekline
- Liječenje ožiljaka

Kontraindikacije Apsolutne kontraindikacije:

- Uznepredovala periferna arterijska okluzivna bolest (ako postoji neki od ovih parametara: ABPI < 0,5, arterijski tlak gležnja < 60 mmHg, tlak nožnih prstiju < 30 mmHg ili TcPO₂ < 20 mmHg gornja strana stopala)
- Dekompenzirana srčana insuficijencija
- Septički flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Rizici na koje se mora obratiti pozornost (odluka o terapiji ovisno o procjeni rizika)**
- Vlažne dermatoze
- Nepodnošenje materijala kompresivnih čarapa
- Teški poremećaji osjeta u ekstremitetu
- Uznepredovala periferna neuropatija (npr. diabetes mellitus)
- Kronični poliartritis

U slučaju nepoštivanja ovih kontraindikacija ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Rizici i nuspojave

Medicinske kompresijske čarape mogu prouzročiti nekrozu kože i tlačne štete na perifernim živcima. Preporuča se oblaganje ugroženih zona. Kod osjetljive kože može ispod kompresivnih čarapa doći do svrbeža i kožnih problema. Stoga preporučujemo adekvatnu njegu kože.

U slučaju sljedećih simptoma molimo odmah skinite čarape i porazgovarajte s liječnikom o nastavku terapije: Pojava plave ili bijele boje na nožnim prstima, parestezije i utrnulost, pojačavanje bolova, kratak dah i znojenje, akutna ograničenja pokreta.

Jamstvo

Rok skladištenja medicinskih kompresivnih čarapa je pri propisnom skladištenju ograničen na 3 godine. Na to se nadovezuje vrijeme nošenja, koje pri redovitoj upotrebi i pravilnom održavanju iznosi maksimalno 6 mjeseci. Nakon isteka ovog roka na proizvode se više ne primjenjuje jamstvo. Iz jamstva su načelno izuzeti nedostaci koji se mogu svesti na uobičajeno trošenje, odnosno nepropisnu upotrebu. U nepropisnu upotrebu također se ubraja naknadna izmjena proizvoda koju nije provela tvrtka proizvođača. Male varijacije u boji koje se mogu pojaviti zbog pojedinačnog procesa bojanja ne smatraju se nedostacima. Odgovarajuća roba je stoga isključena iz zamjene i povrata. Proizvod je predviđen za liječenje pojedinog pacijenta. Ako se proslijedi drugim osobama radi daljnjeg korištenja, jamstvo na proizvod proizvođača prestaje vrijediti.

Zbrinjavanje

Nakon isteka roka upotrebe molimo zbrinite proizvod u skladu s lokalnim propisima.

Obveza prijavljivanja

Temeljem zakonskih propisa, teške incidente koji su nastali u vezi s proizvodom i koji su doveli ili su mogli dovesti do bitnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili do smrti, pacijenti i korisnici dužni su odmah prijaviti proizvođaču i nadležnom službenom tijelu (u Njemačkoj BfArM).

Poštovani korisnici,

Drago nam je što ste odabrali kompresivne čarape kompanije Ofa i zahvaljujemo vam se na povjerenju koje ste nam ukazali. Odvojite trenutak vremena da pažljivo pročitate ove informacije o proizvodu. Za optimalnu efikasnost vaše kompresivne terapije!

Namjeravana upotreba

Kompresivne čarape se koriste za terapiju fleboloških i limfoloških oboljenja ruku i nogu, kao i lipoeedema. Ovisno o indikaciji koriste se različiti proizvodi.

Princip rada medicinskih kompresivnih čarapa

Sa proizvodima prilagođenim odgovarajućim indikacijama i kontrolisanim pritiskom, ubrzava se povratni tok krvi, poboljšava se mikrocirkulacija u tkivu i povećava protok limfe.

⚠ Važne preporuke

Nosite medicinske kompresivne čarape samo nakon savjetovanja sa doktorom. Svakodnevnom nošenjem i redovnim kontrolama kod doktora osiguravate uspjeh vašeg liječenja! Čarape moraju propisati medicinski obučeni stručnjaci. Vaš specijalizovani prodavač također će vas posavjetovati kako pravilno navući kompresivne čarape. Ako prilikom nošenja osjetite akutne bolove u nogama ili iritaciju kože, odmah se obratite doktoru. Reakcije kože u regiji ljepljivih traka mogu se spriječiti laganim pomicanjem ljepljive trake više puta tokom dana. Ako se čarape trebaju nositi u kombinaciji s drugim medicinskim pomagalicama, razgovarajte o tome s ordinirajućim lekarom. Naše proizvode testiramo u okviru sveobuhvatnog osiguranja kvaliteta. Ako uprkos tome imate pritužbe, obratite se svom specijalizovanom prodavaču. Ne popravljajte oštećenja sami, već odnesite čarape specijalizovanom prodavaču od kojeg su kupljene. Grudice vlakana koje se mogu stvoriti uslijed trenja sa drugim odjevnim predmetima ne smanjuju kvalitet čarapa.

Uputstva za navlačenje

1. Da biste je navukli, izvrnite čarapu naopako do stopala. Uvucite nogu u čarapu, od prstiju preko svoda stopala.

2. Sada pažljivo povucite ostatak čarape preko pete. Izbjegavajte povlačenje čarapa za gornju ivicu ili za ljepljivu traku.

3. Ravnomjerno podignite ostatak čarape uvis, bez prevelikog zatezanja. Za kraj, rasporedite lepo čarapu na nozi tako da ostane bez nabora.

Preporuke za održavanje

Proizvod je odmah pogodan za upotrebu. Preporučujemo da čarape operete prije prvog nošenja. Nakon toga perite svakodnevno ručno ili na finom programu mašine. Čarape operite odvojeno sa blagim deterdžentom bez omekšivača (npr. specijalni deterdžent Ofa Clean) na najviše 40°C i dobro isperite. Čarape se mogu lagano zavrtati, ali nemojte ih cjediti preteranim uvrtanjem. Kompresivne čarape osušite na vazduhu ili na finom programu sušilice, ali ih nemojte stavljati na radijatore ili izlagati direktnom sunčevom svjetlu. Nikada ne peglajte čarape. Kako biste održali efikasnost vaših čarapa, nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, benzin ili omekšivače. Ove supstance oštećuju pletenu tkaninu. Kompresivne čarape uglavnom nisu osjetljive na masti i ulja, ali ne bi trebale doći u kontakt sa kremama. Čarape sa ljepljivim trakama presvučenim silikonom generalno ne bi trebale doći u kontakt sa rastvaračima, kremama, hidratantnim losionima za pranje i kremama za tijelo. U suprotnom, ljepljivost traka može biti trajno oštećena (dlake na nogama i suva koža također mogu ograničiti funkciju ljepljivih traka). Čarape čuvajte suve i zaštićene od sunca i vrućine u originalnom pakovanju, ako je moguće.

Čarape perite izvrnute i nemojte koristiti omekšivač!

-  Fin program pranja
-  Ne izbjeljivati
-  Fin program sušenja
-  Ne peglati
-  Bez hemijskog čišćenja

Sastav materijala

Koriste se poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) i pamuk (Baumwolle) kod nekih proizvoda. Za konkretne informacije pogledajte tekstilnu etiketu ušivenu u vašu čarapu.

Savjeti za navlačenje

Navucite čarape rano ujutro čim ustanete, dok vam noge još uvijek ne oteknu. Nemojte povlačiti kompresivnu čarapu za gornju ivicu ili za ljepljivu traku, već je postepeno razvlačite rukama odozdo prema gore. Da bi se olakšalo navlačenje i zaštitila pletena tkanina, preporučujemo nošenje kućnih gumenih rukavica.

Nakit i dugi nokti mogu oštetiti čarapu. Takođe obratite pažnju na redovnu njegu stopala i pravilnu obuću. Raspitajte se kod svog medicinskog zastupnika o Ofa Grip specijalnim rukavicama praktičnom pomagalu za navlačenje i skidanje kompresivnih čarapa sa otvorenim i zatvorenim vrhom kompanije Ofa.

Indikacije (vidi također smernice za medicinsku kompresivnu terapiju AWMF 037/005, od 12/2018)

- Poboljšanje venskih simptoma i kvaliteta života kod hroničnih venskih oboljenja
- Prevencija i terapija venskog edema
- Prevencija i terapija venskih promjena na koži
- Ekcem i pigmentacija
- Dermatoliposkleroza i bijela atrofija
- Terapija i smanjenje bolova kod Ulcus cruris venosum, uključujući prevenciju recidiva
- Terapija Ulcus cruris-a na arterijama i venama nogu (vidi kontraindikacije!)
- Varikozе
- Inicijalna faza nakon terapije varikoze
- Funkcionalna venska insuficijencija
- Venske malformacije
- Venska tromboza
- Stanje nakon tromboze
- Posttrombotički sindrom
- Profilaksa tromboze kod mobilnih pacijenata
- Limfedem
- Edem u trudnoći
- Post-traumatični/post-operativni edem
- Ciklični idiopatski edem
- Lipoedem od stadijuma II
- Kongestivna stanja kao rezultat nepokretnosti (sindrom artrogenih kongestija, pareza i parcijalna pareza ekstremiteta)
- Profesionalni edem (stojeći, sjedeći poslovi)
- Medikamentozni edemi, kada nije moguća njihova promjena
- Gojaznost sa funkcionalnom venskom insuficijencijom
- Upalna dermatitoza nogu
- Mučnina, vrtoglavica i problemi sa kongestijom tokom trudnoće
- Stanje nakon opekotina
- Liječenje ožiljaka

Kontraindikacije

Apsolutne kontraindikacije:

- Uznapredovala periferna arterijska okluzivna bolest (ako postoji neki od ovih parametara: ABPI < 0,5, arterijski pritisak gležnja < 60 mmHg, pritisak nožnih prstiju < 30 mmHg ili TcPO₂ < 20 mmHg gornja strana stopala)
- Dekompenzovana insuficijencija srca
- Septički flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Rizici na koje se mora obratiti pažnja

(odluka o terapiji zavisi od procjene koristi/rizika)

- Vlažne dermatoze
- Intolerancija kompresivnog materijala
- Teška senzitivnost ekstremiteta
- Uznapredovala periferna neuropatija (kao npr. kod Diabetes mellitus)
- Hronični poliartritis

Svaka odgovornost je isključena u slučaju nepoštovanja ovih kontraindikacija.

⚠ Rizici i nuspojave

Medicinske kompresijske čarape mogu prouzrokovati nekrozu kože i štete od pritiska na perifernim nervima. Preporučuje se oblaganje ugroženih zona. Upotreba na osjetljivoj koži može izazvati svrabež i probleme sa kožom ispod kompresivnih čarapa. Stoga se preporučuje odgovarajuća njega kože.

U slučaju pojave sljedećih simptoma, odmah uklonite čarape i posavjetujte se sa doktorom o nastavku terapije: Plava ili bijela boja nožnih prstiju, parestezije i utrnulost, pojačani bol, otežano disanje i znojenje, akutna ograničenja kretanja.

Garancija

Rok trajanja medicinskih kompresivnih čarapa ograničen je na 3 godine ako se pravilno skladište. Ovome se dodaje i vrijeme nošenja, što je maksimalno 6 mjeseci uz redovnu upotrebu i pravilnu njegu. Po isteku ovog vremena proizvodi će biti isključeni iz garancije. Nedostaci koji mogu nastati usled uobičajenog trošenja ili nepravilne upotrebe u osnovi su isključeni iz garancije. Nepravilna upotreba uključuje i naknadne modifikacije proizvoda koje nije izvršio proizvođač. Mala odstupanja u boji, do kojih može doći zbog individualnog procesa bojenja, ne smatraju se nedostacima. Na ovaj način je isključena mogućnost zamjene i povrata za odgovarajuću robu. Proizvod je namijenjen terapiji jednog pacijenta. Ako se proizvod ustupi drugoj osobi na ponovnu upotrebu prestaje da važi proizvođačeva odgovornost za proizvod.

Odlaganje

Po završetku korištenja odložite proizvod u skladu sa lokalnim propisima.

Obaveza izvještavanja

Zbog zakonskih propisa, pacijenti i korisnici dužni su prijaviti ozbiljne incidente koji su se dogodili u vezi sa proizvodom i koji su doveli ili su mogli dovesti do značajnog pogoršanja zdravlja ili smrti proizvođaču i odgovornom nacionalnom tijelu (u Njemačkoj BfArM).

Dragi korisniče,

drago nam je što ste se odlučili za kompresivne čarape kompanije Ofa i zahvaljujemo vam se na poverenju koje ste nam ukazali. Odvojite trenutak vremena da pažljivo pročitate ove informacije o proizvodu. Za optimalnu efikasnost vaše kompresivne terapije!

Namena

Kompresivne čarape se koriste za terapiju fleboloških i limfoloških oboljenja ruku i nogu, kao i lipedema. U zavisnosti od indikacije koriste se različiti proizvodi.

Aktivni princip medicinskih kompresivnih čarapa

Sa proizvodima prilagođenim odgovarajućim indikacijama i kontrolisanim pritiskom, ubrzava se refleks krvi, poboljšava se mikrocirkulacija tkiva i povećava protok limfe.

Važna uputstva

Nošenju medicinskih kompresivnih čarapa treba prethoditi konsultacija sa lekarom. Uspeh vašeg lečenja osiguravate svakodnevnom nošenjem i redovnim kontrolama kod lekara! Terapiju kompresivnim čarapama može propisati samo medicinski obučeno osoblje. Vaš specijalizovani trgovac će vam takođe pružiti savete o pravilnom navlačenju kompresivnih čarapa. Ako tokom nošenja osetite akutne bolove u nogama ili iritaciju kože, odmah se obratite lekaru. Reakcije na koži u predelu lepljivih traka mogu se sprečiti laganim pomeranjem lepljive trake nekoliko puta u toku dana. Ako čarape treba da nosite u kombinaciji sa drugim medicinskim pomagalicama, zatražite savet o tome od svog doktora. Naše proizvode testiramo kao deo sveobuhvatnog osiguranja kvaliteta. Ako i dalje imate pritužbi, kontaktirajte vašeg specijalizovanog trgovca. Ne popravljajte oštećenja sami, već odnesite čarape vašem specijalizovanom trgovcu, kod koga su kupljene. Grudice vlakana koje se mogu stvoriti usled trenja sa drugim odevnim predmetima ne umanjuju kvalitet čarapa.

Uputstva za navlačenje

1. Za navlačenje okrenite čarapu naopako do stopala. Uvucite nogu u čarapu, od prstiju preko svoda stopala.
2. Povucite sada pažljivo čarapu preko pete. Izbegavajte povlačenje čarapa za gornju ivicu ili za lepljivu traku.

Uputstva za održavanje

Proizvod je pogodan za trenutnu upotrebu. Preporučujemo da operete čarape pre prvog nošenja. Takođe, svakodnevno perite čarape ručno ili na finom programu mašine. Čarape perite odvojeno blagim deterdžentom bez omekšivača (npr. specijalnim deterdžentom Ofa Clean) na maksimalno 40°C i dobro isperite. Čarape se mogu nežno uvrtati, ali ih nemojte previše zavrtati. Kompresivne čarape osušite na vazduhu ili na finom programu sušenja, ali ih nemojte stavljati na radijatore niti izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nikada ne peglajte čarape. Kako biste sačuvali efikasnost čarapa, nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, benzin ili omekšivače. Ove supstance napadaju pletenu tkaninu. Kompresivne čarape uglavnom nisu osetljive na masti i ulja, ali ne bi smele doći u kontakt sa kremama. Čarape sa lepljivim trakama presvučenim silikonom ne bi trebalo da dolaze u kontakt sa rastvaračima, kremama, hidratantnim losionima za pranje i kremama za telo. U suprotnom, lepljivost traka može biti trajno oštećena (dlake na nogama i suva koža takođe mogu ograničiti funkciju lepljivih traka). Čarape skladištite suve i zaštićene od sunca i toplote, ako je moguće, u originalnom pakovanju.

Čarape perite izvnutre i ne koristite omekšivač!

-  Fini program pranja
-  Ne izbeljavati
-  Fini program sušenja
-  Ne peglati
-  Bez hemijskog čišćenja

Sastav materijala

Koriste se poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) i za neke proizvode pamuk (Baumwolle). Za konkretne informacije pogledajte tekstilnu etiketu koja je ušivena u vašu čarapu.

3. Podignite ostatak čarapa ravnomerno uvis, bez preteranog istezanja. Na kraju, rasporedite čarapu na nozi tako da ostane bez neravnina.

Saveti za navlačenje

Navucite čarape ujutro odmah nakon ustajanja, dok su vam noge još uvek neotečene. Nikada nemojte povlačiti kompresivne čarape za gornju ivicu ili lepljivu traku, već postepeno razvlačite rukama odozdo prema gore. Kako biste olakšali navlačenje i zaštitili pletenu tkaninu, preporučujemo vam nošenje gumenih rukavica za domaćinstvo.

Nakit i dugi nokti mogu oštetiti čarapu. Takođe obratite pažnju na redovnu negu stopala i pravilnu obuću. Raspitajte se kod vašeg medicinskog specijalizovanog trgovca o Ofa Grip specijalnim rukavicama praktičnom pomagalu za navlačenje i skidanje kompresivnih čarapa sa otvorenim i zatvorenim vrhom kompanije Ofa.

Indikacije (vidite takođe smernice za terapiju medicinskom kompresijom AWMF 037/005, od 18.12.)

- Poboljšanje venskih simptoma i kvaliteta života kod hroničnih venskih oboljenja
- Prevencija i terapija venskog edema
- Prevencija i terapija venskih promena na koži
- Ekcem i pigmentacija
- Dermatoliposkleroza i bela atrofija (Atrophie blanche)
- Terapija i smanjenje bolova kod Ulcus cruris venosum, uključujući i prevenciju recidiva
- Terapija arterijskog i venskog Ulcus cruris-a (vidi kontraindikacije!)
- Varikozе
- Početna faza nakon terapije varikoze
- Funkcionalna venska insuficijencija
- Venske malformacije
- Venska tromboza
- Stanje nakon tromboze
- Posttrombotični sindrom
- Profilaksa tromboze kod mobilnih pacijenata
- Limfoedem
- Edem u trudnoći
- Posttraumatski/postoperativni edem
- Ciklični idiopatski edem
- Lipoedem od stadijuma II
- Kongestivno stanje usled nepokretnosti (artrogenski kongestivni sindrom, pareze i delimične pareze ekstremiteta)
- Profesionalni edemi (poslovi koji zahtevaju sedenje i stajanje)
- Edem izazvan korišćenjem lekova ako nije moguća njihova zamena
- Gojaznost sa funkcionalnom venskom insuficijencijom
- Upalna dermatoza nogu
- Mučnina, vrtoglavica i problemi sa kongestijom tokom trudnoće
- Stanje nakon opekotina
- Lečenje ožiljaka

Kontraindikacije

Apsolutne kontraindikacije:

- Uznepredovala bolest perifernog arterijskog začepljenja (ako postoji neki od ovih parametara: ABPI < 0,5, arterijski pritisak članka < 60 mmHg, pritisak prstiju na nogama < 30 mmHg ili TcPO2 < 20 mmHg gornja strana stopala)
- Dekompenzovana srčana insuficijencija
- Septični flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Rizici na koje mora da se obrati pažnja (odluka o terapiji zavisi od procene koristi/rizika)**
- Vlažne dermatoze
- Osetljivost prema kompresionom materijalu
- Teški poremećaji osetljivosti ekstremiteta
- Uznepredovala periferna neuropatija (npr. kod Diabetes mellitus)
- Hronični poliartritis

Proizvođač ne preuzima garanciju za proizvod u slučaju nepridržavanja gore navedenih kontraindikacija.

Rizici i neželjeni efekti

Medicinske kompresione čarape mogu da prouzrokuju nekrozu kože i štete od pritiska na perifernim nervima. Preporučuje se oblaganje ugroženih zona. Kod osoba sa osetljivom kožom se može javiti svrab i problemi sa kožom ispod kompresivnih čarapa. Zbog toga se preporučuje odgovarajuća nega kože.

U slučaju pojave sledećih simptoma, odmah skinite čarape i konsultujte se sa lekarom o daljem nastavku terapije: Plava ili bela boja prstiju na nogama, parestezije i utrnulost, rastući bol, otežano disanje i znojenje, akutna ograničenja u kretanju.

Garancija

Rok upotrebe medicinskih kompresivnih čarapa je ograničen na 3 godine pri pravilnom skladištenju. Ovome se dodaje vreme nošenja, koje iznosi maksimalno 6 meseci uz redovnu upotrebu i pravilno održavanje. Nakon ovog perioda će proizvod biti isključen iz garancije. Iz garancije su isključeni nedostaci koji mogu nastati usled uobičajenog habanja ili nepravilne upotrebe. U nepravilne upotrebe se ubrajaju i modifikacije proizvoda koje nije izvršio proizvođač. Neznatna odstupanja u boji, koja mogu da nastanu zbog individualnog procesa bojenja, ne smatraju se nedostacima. Na taj način je za odgovarajuću robu isključena mogućnost zamene i povraćaja. Proizvod je namenjen terapiji jednog pacijenta. Garancija proizvođača prestaje ustupanjem proizvoda drugim osobama na ponovnu upotrebu.

Odlaganje

Odložite proizvod nakon njegovog korisnog veka u otpad prema lokalnim zakonskim propisima.

Obaveza izveštavanja

Zbog zakonskih propisa, pacijenti i korisnici su dužni da ozbiljne incidente koji su se dogodili u vezi sa proizvodom, a koji su doveli ili su mogli dovesti do značajnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrti, odmah prijaviti proizvođaču i nadležnom nacionalnom telu (u Nemačkoj BfArM).

Уважаемый пользователь!

Мы рады, что вы выбрали компрессионные чулки Ofa, и благодарим вас за оказанное доверие. Уделите несколько минут для чтения и внимательно ознакомьтесь с информацией об изделии. Это позволит получить максимальный эффект от компрессионной терапии!

Назначение

Компрессионные чулки применяются для терапии флебологических и лимфатических заболеваний рук и ног, а также при липедеме. В зависимости от показаний используются различные изделия.

Принцип действия медицинских компрессионных чулок

Благодаря подбору параметров изделия под определенные показания и контролируемому давлению увеличивается скорость оттока крови, улучшается микроциркуляция в ткани, возрастает лимфообращение.

 Важные указания

Перед началом использования компрессионных чулок проконсультируйтесь со своим врачом. Ежедневное использование и регулярное врачебное наблюдение обеспечат успех лечения! Специалисты, занимающиеся продажей чулок, должны иметь медицинское образование. В специализированном магазине вас также проконсультируют, как правильно надевать компрессионные чулки. Если при ношении чулок возникнет острая боль в ногах или раздражения кожи, нужно немедленно обратиться к врачу. Кожные реакции в области резинок можно предотвратить, слегка изменяя положение резинок несколько раз в течение дня. Вся наша продукция проходит контроль в рамках комплексной системы обеспечения качества. Если, несмотря на все наши усилия, у вас возникнут претензии к качеству, обращайтесь в ваш магазин. При необходимости использования чулок вместе с другими медицинскими средствами проконсультируйтесь с лечащим врачом. При обнаружении дефектов не проводите ремонт своими силами, а верните чулки в магазин, в котором они приобретались. Узелки в волокне, которые могут образоваться вследствие трения о другие предметы одежды, не влияют на качество чулок.

Указания по уходу

Изделие пригодно для немедленного использования. Перед первым ношением его рекомендуется постирать. После этого стирайте его ежедневно вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки. Стирайте чулки отдельно с использованием нейтрального моющего средства без кондиционера-ополаскивателя (например, средством Ofa Clean) при температуре не выше 40 °C и хорошо полоскайте. Возможен щадящий отжим чулок в центрифуге, не допускается отжим с выкручиванием. Сушить чулки следует на открытом воздухе или в сушильной машине в щадящем режиме, не допускается сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Запрещается гладить чулки. Для сохранения эффективности чулок не используйте химические чистящие средства, бензин или кондиционер-ополаскиватель. Эти вещества разъедают трикотажное полотно. Компрессионные чулки по большей части нечувствительны к жирам или маслам, однако следует избегать их контакта с мазями. Чулки с резинками, имеющими силиконовое покрытие, не должны контактировать с растворителями, мазями, увлажняющими моющими лосьонами и кремами для тела. В противном случае способность резинок к сцеплению может быть необратимо нарушена (волосяной покров на ногах и сухая кожа также могут ограничить функциональные свойства резинок). Храните чулки в сухом, защищенном от солнца и жары месте, по возможности в оригинальной упаковке.

Стирать с изнанки, не использовать кондиционер-ополаскиватель!

-  Деликатная стирка.
-  Не отбеливать.
-  Щадящая сушка.
-  Не гладить.
-  Не подвергать химической чистке.

Состав материала

Использованы полиамид (Polyamid), эластан (Elastan) и, в некоторых видах изделий, хлопок (Baumwolle). Конкретная информация указана на ярлыке чулок.

Руководство по надеванию

- Для надевания выверните чулок изнанку до стопы. Наденьте носочную часть на пальцы ноги, затем — на подъем.
- Теперь осторожно натяните верхнюю часть чулка на пятку. При этом старайтесь не тянуть чулок за верхний край или за край резинки.
- Наденьте оставшийся чулок равномерно вверх, не растягивая его. В завершение расправьте чулок на ноге, чтобы он прилегал без складок.

Советы по надеванию

Надевайте чулки сразу после утреннего подъема, пока на ногах еще нет отеков. Не тяните компрессионный чулок вверх за верхний край или за край резинки, а надевайте его, ведя руками снизу вверх. Для облегчения надевания и бережного обращения с трикотажным полотном рекомендуется использовать бытовые резиновые перчатки.

Украшения и длинные ногти на руках могут повредить чулок. Также регулярно ухаживайте за стопами и носите удобную обувь. Узнайте в специализированном магазине медицинских товаров о специальных перчатках Ofa Grip и практичных приспособлениях Ofa для надевания и снятия компрессионных чулок с открытым и закрытым носком.

Показания к применению (см. также Рекомендации по медицинской компрессионной терапии AWMF 037/005, редакция 12/18):

- улучшение венозных симптомов и качества жизни при хронических заболеваниях вен;
- профилактика и терапия венозных отеков;
- профилактика и терапия венозных изменений кожи;
- экзема и пигментация;
- дерматопосклероз и белая атрофия кожи;
- терапия и уменьшение боли при венозной трофической язве, в том числе профилактика рецидивов;
- терапия артериальных и венозных трофических язв (См. «Противопоказания»!);
- варикозное расширение вен;
- начальная фаза после терапии варикозного расширения вен;
- функциональная венозная недостаточность;
- венозная мальформация;
- тромбоз вен;
- состояние после тромбоза;
- посттромботический синдром;
- профилактика тромбоза у мобильных пациентов;
- лимфедема;
- отеки при беременности;
- посттравматические/послеоперационные отеки;
- циклические идиопатические отеки;
- липедема 2-й стадии и выше;
- стойкие состояния вследствие неподвижности (артрогенный конгестивный синдром, парезы и частичные парезы конечностей);
- отеки, обусловленные родом занятий (стоячая, сидячая работа);
- медикаментозные отеки, если невозможен перевод на другие лекарственные препараты;
- ожирение с функциональной венозной недостаточностью;
- воспалительные дерматозы ног;
- тошнота, вертиго и жалобы на застой при беременности;

- состояние после ожогов;
- лечение рубцов.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания:

- прогрессирующее облитерирующее заболевание периферических артерий; (если подтверждается один из следующих параметров: ЛПВД < 0,5, лодыжечное артериальное давление < 60 мм рт.ст., давление в пальцах ног < 30 мм рт.ст. или чрескожное парциальное давление кислорода < 20 мм рт.ст. на тыльной стороне стопы)
- декомпенсированная сердечная недостаточность;
- септические флебиты;
- синий болевой флебит.

Риски, которые следует учитывать (решение по терапии с учётом оценки соотношения польза-риск)

- мокнущие дерматозы;
- непереносимость материалов, входящих в состав компрессионных чулок;
- тяжёлые расстройства чувствительности конечностей;
- прогрессирующая периферическая нейропатия (например, при сахарном диабете);
- хронические полиартриты.

В случае несоблюдения данных противопоказаний мы снимаем с себя всякую ответственность.

⚠ Риски и побочные действия

Медицинские компрессионные чулки могут вызвать некроз кожи и сдавливание периферических нервов. Рекомендуется подкладывать мягкую ткань в уязвимых местах. В случае чувствительной кожи под компрессионными чулками могут возникнуть зуд и проблемы с кожей. В связи с этим рекомендуется адекватный уход за кожей.

При следующих симптомах необходимо сразу снять чулки и обсудить продолжение терапии с врачом:

посинение или побеление пальцев ног, дискомфорт и ощущение онемения, усиливающие боли, одышка и обильное потение, острые ограничения двигательных функций.

Срок гарантии

Срок годности медицинских компрессионных чулок при надлежащих условиях хранения составляет 3 года. К нему добавляется срок службы, который при регулярном использовании и должном уходе составляет максимум 6 месяцев. По истечении этого срока действие гарантии на продукцию прекращается. Принципиально гарантия не распространяется на недостатки, вызванные естественным износом или неосторожным обращением. Под неосторожным обращением также понимается внесение дополнительных изменений в изделие кем-либо помимо производителя. Изделие предназначено для использования одним пациентом. Если оно передается для повторного использования другим лицам, гарантия производителя утрачивает силу.

Утилизация

По окончании периода использования изделие необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Обязательное уведомление

На основании требований законодательства пациенты и пользователи обязаны немедленно уведомить производителя и национальные компетентные органы (в Германии это Институт BfArM) о связанных с изделием серьезных инцидентах, которые привели к существенному ухудшению здоровья или смерти или могли бы привести к этому.

Вітаємо!

Ми раді, що ви обрали компресійні панчохи від Ofa, і дякуємо вам за довіру. Будь ласка, уважно прочитайте цю інформацію про виріб. Це важливо для оптимальної ефективності компресійної терапії!

Цільове призначення

Компресійні панчохи застосовуються для терапії флебологічних і лімфатичних захворювань рук і ніг, а також для лікування ліпеди. Залежно від показань використовуються різні вироби.

Принцип дії медичних компресійних панчіх

Завдяки виробам, адаптованим до відповідних показань, і контрольованій компресії прискорюється зворотний потік крові, покращується мікроциркуляція в тканинах і лімфообіг.

 Важливі вказівки

Носити медичні компресійні панчохи слід тільки після консультації з лікарем. Щоденне носіння та регулярні медичні огляди є запорукою успішного лікування! Отримати панчохи можна у дилера, який є фахівцем зі спеціальною медичною підготовкою. Дилер також порадить вам, як правильно надіти компресійні панчохи. Якщо під час носіння ви відчуваєте гострий біль у ногах або подразнення шкіри, негайно зверніться до лікаря. Реакції з боку шкіри в зоні клейких стрічок можна запобігти, якщо змінювати положення клейкої стрічки кілька разів протягом дня. Якщо панчохи потрібно надягти разом з іншими допоміжними медичними виробами, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Ми перевіряємо нашу продукцію в межах комплексного забезпечення якості. Проте якщо ви виявили дефект, зверніться до свого дилера. Не намагайтеся усунути пошкодження самостійно, а поверніть виріб дилеру, в якого ви його придбали. Ковтунці, які можуть утворюватися внаслідок тертя об інший одяг, не знижують якість виробу.

Вказівки з догляду

Виріб придатний для негайного використання. Рекомендуємо випрати його перед першим використанням. Потім прати щодня вручну або в пральній машині, у щадному режимі. Прати панчохи потрібно окремо мийним засобом для делікатної білизни без кондиціонера (наприклад, спеціальним мийним засобом Ofa Clean) при температурі не вище 40 °C, після чого ретельно прополоскати. Панчохи можна сушити в центрифугі в щадному режимі, але не викручувати. Сушити компресійні панчохи слід на повітрі або в сушарці, у щадному режимі, але уникати обігрівачів та прямих сонячних променів. Прасувати панчохи заборонено. Щоб зберегти ефективність панчіх, не використовуйте хімічні очищувачі, бензин і кондиціонери для білизни. Ці речовини негативно впливають на трикотаж. Компресійні панчохи дуже стійкі до жирів і олій, але слід уникати контакту з мазями. Панчохи із силіконовими клейкими стрічками слід берегти від контакту з розчинниками, мазями, живильними лосьйонами й кремами для тіла. В іншому разі адгезійна здатність клейких стрічок може бути остаточно порушена (волосся на ногах і суха шкіра також можуть погіршити функцію клейких стрічок). Зберігати панчохи в сухому та захищеному від сонця та високих температур місці, бажано в оригінальній упаковці.

Прати навиворіт і не використовувати кондиціонер для білизни!

-  Щадне прання
-  Не відбілювати
-  Щадне сушіння
-  Не прасувати
-  Хімічистка заборонена

Склад матеріалу

Використовуються поліамід (Polyamid), еластан (Elastan) і (для деяких виробів) бавовна (Baumwolle). Відповідні дані вказані на текстильній етикетці, яка пришита до панчохи.

Вказівки щодо надівання

- 1.** Щоб надіти, виверніть назовні ділянку панчохи до стопи. Натягніть панчохи на пальці ноги, на передню частину стопи, над підйомом.
- 2.** Тепер обережно натягніть панчохи на п'ятку. Не підтягуйте панчохи за край або клейку стрічку.
- 3.** Рівномірно натягніть панчохи на ногу, не розтягуючи її надмірно. Нарешті розправте панчохи на носі так, щоб не залишилися зморшок.

Поради щодо надівання

Надівайте панчохи вранці, щойно встанете, поки ноги ще не набрякли. Не тяг- ніть компресійну панчошу вгору за край або клейку стрічку, а рівномірно розпо- діляйте її руками знизу догори. Для полегшення одягання та захисту трикотажу рекомендується використовувати побутові гумові рукавички. Ювелірні вироби та довгі нігті можуть пошкодити панчошу.

Зверніть увагу також на регулярний до- гляд за ногами та зручність взуття. Дізнайтеся в спеціалізованому магазині ме- дичних товарів про спеціальні рукавички Ofa Grip і практичні пристосування Ofa для надягання й зняття компресійних панчіх з відкритим та закритим носком.

Показання (див. також Директиву щодо медичної компресійної терапії AWMF 037/005 від 12.18)

- Покращення венозних симптомів та якості життя за наявності хронічних захворювань вен.
- Профілактика та лікування венозних набряків.
- Профілактика та лікування венозних змін шкіри.
- Екзема та пігментація.
- Дерматоліпосклероз і біла атрофія шкіри.
- Лікування та зменшення болю в разі трофічної венозної виразки, а також профілактика виникнення рецидивів.
- Лікування трофічної виразки артеріального та венозного походження (див. протипоказання).
- Варикоз.
- Початкова фаза після варикозної терапії.
- Функціональна венозна недостатність.
- Венози мальформації.
- Тромбоз вен.
- Стан після тромбозу.
- Посттромботичний синдром.
- Профілактика тромбозу для мобільних пацієнтів.
- Лімфедема.
- Набряк під час вагітності.
- Посттравматичний/післяопераційний набряк.
- Циклічний ідіопатичний набряк.
- Ліпедема II-ї стадії та вище.
- Застійні явища внаслідок нерухомості (артрогенний застійний синдром, парез та частковий парез кінцівки).
- Професійний набряк (робота стоячи/сидячи).
- Набряк, спричинений лікарськими засобами, якщо неможлива зміна препарату.
- Ожиріння з функціональною венозною недостатністю.
- Запальні дерматози ніг.
- Нудота, запаморочення та запори під час вагітності.
- Стан після опіків.
- Лікування шрамів.

Протипоказання

Абсолютні протипоказання

- Прогресуюче оклюзивне захворювання периферичних артерій. (якщо підтверджується один з таких параметрів: КПІ < 0,5, кістчковий артеріальний тиск < 60 мм рт.ст., тиск у пальцях ніг < 30 мм рт.ст. або черезшкірний парціальний тиск кисню < 20 мм рт.ст. на тильній стороні стопи)
- Декомпенсована серцева недостатність.
- Септичний флебіт.
- Флебіт синій больовий.

Ризики, які слід враховувати (Рішення щодо терапії з урахуванням оцінки співвідношення користь-ризик)

- Вологі дерматози.
- Непереносимість матеріалів, з яких виготовлено компресійні панчохи.
- Важкі порушення чутливості кінцівки.
- Прогресуюча периферична нейропатія (наприклад, цукровий діабет).
- Хронічний поліартрит.

У разі недотримання цих протипоказань ми знімаємо із себе будь-яку відповідальність.

Ризики й побічні ефекти

Медичні компресійні панчохи можуть спричинити некроз шкіри та здавлювання периферичних нервів. Рекомендується підкладати м'яку тканину у вразливих місцях. У разі чутливої шкіри під компресійними панчохами може виникнути свербіж і подразнення шкіри. Тому рекомендується належний догляд за шкірою.

У разі появи цих симптомів негайно зніміть панчохи та обговоріть продовження терапії з лікарем: синє або біле забарвлення пальців ніг, дискомфорт і оніміння, посилення болю, задиха та надмірне потовиділення, різке обмеження рухових функцій.

Гарантія

Термін придатності медичних компресійних панчіх обмежується трьома (3) роками за умови належного зберігання. До цього додається період носіння, який за умови регулярного використання та належного догляду становить максимум шість (6) місяців. Після закінчення цього терміну гарантія на вироби втрачає чинність. Зазвичай гарантія не поширюється на дефекти через нормальне зношування або неналежне використання. До неналежного використання також відноситься подальша модифікація виробу, яка була здійснена не виробником. Незначні відхилення кольору, які можуть виникнути внаслідок індивідуального процесу фарбування, не вважаються дефектом. Таким чином, відповідні товари виключаються з обмінів і повернень. Виріб призначено для використання одним пацієнтом. У разі передання виробу іншим особам для повторного використання виробник не несе відповідальності за виріб.

Утилізація

Після закінчення терміну використання виріб слід утилізувати згідно з місцевими правилами.

Обов'язок звітування

Відповідно до законодавчих норм пацієнти й користувачі зобов'язані негайно повідомляти виробника й компетентний національний орган (у Німеччині BfArM) про серйозні інциденти, що сталися у зв'язку з використанням виробу, які призвели або могли призвести до значного погіршення стану здоров'я або смерті.

نصائح للارتداء

المجوهرات والأظافر الطويلة يمكن أن تتسبب في تلف الجورب. يرجى أيضًا مراعاة العناية المنتظمة بالقدم وارتداء الأحذية المناسبة. اسأل في المتجر الطبي المختص على الارتداء والخلع Ofa الخاصة وسائل المساعدة العملية من Ofa Grip بك عن قفازات يد للجوارب الضاغطة ذات الأطراف المفتوحة والمغلقة.

قم بارتداء الجوارب في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ، طالما أن ساقيك لا تزالان خاليتين من التورمات. يرجى عدم سحب الجورب الضاغط من الحافة اللاصقة أو حافة النهاية، بل قم بفرده بيدك من أسفل لأعلى. لتسهيل الارتداء والحفاظ على القماش المحبوك، نوصي بارتداء قفازات مطاطية منزلية.

دواعي الاستعمال (انظر أيضًا توجيه العلاج الطبي بالضغط رقم AWMF 037/005، إصدار 12/18)

- تحسين الأعراض الوريدية وجودة الحياة عندما يتعلق الأمر بأمراض وريدية مزمنة
- الوقاية والعلاج من الوذمة الوريدية
- الوقاية والعلاج من التغيرات الجلدية الوريدية
- الإكزيما والتصبغ
- التصلب الجلدي والضمور الأبيض
- علاج وتقليل الألم في تقرحات الساق الوريدية، والوقاية من الانتكاس أيضا
- علاج تقرحات الساق الشريانية والوريدية (انظر موانع الاستعمال!)
- الدوالي
- المرحلة الأولى بعد علاج الدوالي
- القصور الوريدي الوظيفي
- التشنجات الوريدية
- التشنج الوريدي
- الحالة بعد ثخر الدم
- متلازمة ما بعد الثخر
- الوقاية من التشنج مع المرضى المتحركين
- الوذمات اللمفية
- الوذمات في الحمل
- وذمات ما بعد الإصابة / ما بعد الجراحة
- وذمات دورية مجهولة السبب
- الوذمات الشحمية من المرحلة الثانية
- حالات الاحتقان الناتجة عن عدم الحركة (متلازمة الاحتقان المفصلي، والشلل جزئي، والشلل الجزئي في الأطراف)
- الوذمات المرتبطة بالوظيفة (وظائف تتطلب الوقوف أو الجلوس)
- الوذمات الناتجة عن استخدام الأدوية إذا لم يكن تغييرها ممكنا
- السممة مع قصور وريدي وظيفي
- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغنيان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج الندبات

موانع الاستعمال

موانع الاستعمال النهائية:

- مرض الشرايين المحيطية المتقدم (عندما تنطبق إحدى معلمات الضغط هذه: مؤشر الضغط الكاحلي العضدي ($ABPI < 0.5$)، أو ضغط الشريان الكاحلي > 60 ملليمتر زئبق، أو ضغط إصبع القدم > 30 ملليمتر زئبق، أو ضغط الأكسجين عبر الجلد ($TcPo2 < 20$) ملليمتر زئبق من منشط القدم)
- قصور القلب اللاعفاوض
- التهاب الوريد الإبتائي
- الالتهاب الوريدي الفزرق المؤلم

مخاطر تجب مراعاتها

(اتخاذ قرار العلاج على أساس تقييم الفوائد/ المخاطر)

- الالتهاب الجلدي الناز
- عدم تحمل مواد الجورب الضاغط
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- احتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء السكري)
- التهاب المفاصل المزمن

سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع موانع الاستعمال هذه.

⚠️ المخاطر والآثار الجانبية

يمكن أن تتسبب الجوارب الضاغطة الطبية في تنحّر الجلد وأضرار انضغاطية في الأعصاب المحيطية. يوصى بعزل المناطق المعزّضة للخطر. يمكن أن يتسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث حكة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة للبشرة.

في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج: تلون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتنميل، آلام متزايدة، ضيق في التنفس وتورق، تقيد حاد في الحركة.

الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة ب 3 سنوات إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت الارتداء، وهو 6 أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يعد سارثا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن التآكل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللاحقة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. لا تعتبر الانحرافات اللونية الطفيفة ، التي قد تنشأ بسبب عملية الصباغة الفردية عيبا. وبالتالي يتم استبعاد السلع المقابلة من التبادلات والعوائد. المنتج مخصص لعلاج مر يض واحد فقط. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه، فسوف تنتهي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية.

ضرورة التبليغ

يتعين على المرضى والمستخدمين، بموجب اللوائح القانونية، إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا BfArM) على الفور بالحوادث الخطيرة التي حدثت فيما يتعلق بالمنتج، والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية أو الوفاة.

عزيزي المستخدم،

يسعدنا اختيارك لجوارب Ofa الضاغطة ونشرك على ثقتك فينا. يرجى قضاء بعض الوقت لقراءة معلومات المنتج بعناية، من أجل الحصول على الفعالية المثلى للعلاج بالضغط!

الغرض من الاستخدام

تستخدم الجوارب الضاغطة في علاج أمراض الأوردة والأمراض اللمفاوية في الذراعين والساقين وكذلك الوذمات الشحمية. يتم استخدام منتجات مختلفة اعتمادًا على دواعي الاستعمال.

آلية عمل الجوارب

الضاغطة الطبية

بفضل المنتجات المصممة وفقًا لدواعي الاستعمال المعنية والضغط المحكوم، يتم تسريع عودة الدم وتحسين دوران الأنوعية الدقيقة في الأنسجة وزيادة التدفق الليمفاوي.

⚠️ إرشادات مهمة

لا تقم بارتداء الجوارب الضاغطة الطبية إلا بعد استشارة طبيبك. يمكنك ضمان نجاح علاجك من خلال ارتدائها يوميًا وإجراء فحوصات طبية منتظمة! يجب تسليم الجوارب من قبل متخصصين مُدرّبين طبيًا. سوف يقدم لك الموزع المتخصص النصيحة أيضًا بشأن كيفية ارتداء الجوارب الضاغطة بشكل صحيح. إذا كنت تعاني من ألم حاد في الساق أو تهيج في الجلد أثناء ارتدائها، فيرجى استشارة الطبيب على الفور. يمكن منع حدوث تفاعلات جلدية في منطقة الأشرطة اللاصقة عن طريق إزالة الشريط اللاصق قليلاً عدة مرات خلال اليوم. إذا كان سيتم ارتداء الجوارب مع أدوات مساعدة طبية أخرى، فيرجى مناقشة ذلك مع طبيبك. نختبر منتجاتنا في إطار برنامج شامل لضمان الجودة. وإذا كان لا يزال لديك شكاوى، فيرجى الاتصال بالموزع المتخصص. لا تقم بإصلاح التلقيات بنفسك، بل أعد الجوارب إلى الموزع المتخصص الذي تم شراؤه منه. عقيدات الألياف التي يمكن أن تتشكل بسبب الاحتكاك بالملابس الأخرى لا تقلل من جودة الجوارب.

إرشادات العناية

المنتج مناسب للاستخدام الفوري. ننصح بغسله قبل ارتدائه لأول مرة. وبعد ذلك، يرجى الغسل يدويًا كل يوم أو بالدورة الهادئة للغسالة. اغسل الجوارب بمفردها بمنظف خفيف بدون استخدام منعم الأقمشة (مثل منظف Ofa Clean الخاص) بحد أقصى 40 درجة مئوية وقم بشطفها جيدًا. يمكن عصر الجوارب بالتدوير في الغسالة برفق، لكن من فضلك لا تعصرها يدويًا. قم بتجفيف الجوارب الضاغطة في الهواء على الدورة الهادئة لمجففك، لكن لا تضعها على المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر. ولا تقم أبدًا بكي الجوارب. للحفاظ على فعالية الجوارب الخاصة بك، يرجى عدم استخدام مواد التنظيف الكيميائية أو البنزين أو منعمات الأقمشة. لأن هذه المواد تهاجم النسيج المحبوك. الجوارب الضاغطة غير حساسة تجاه الدهون والزيوت إلى حد كبير، ولكن لا ينبغي أن تتلامس مع المراهم، كقاعدة عامة، يجب ألا تتلامس الجوارب ذات الأشرطة اللاصقة المطلية بالسيليكون مع المذيبيات والمراهم ومستحضرات الغسيل المرطبة وكريمات الجسم. وإلا فيمكن أن تتضرر قوة لصق الأشرطة اللاصقة بشكل دائم (يمكن لشعر الساق والجلد الجاف أيضًا أن يحد من وظيفة الأشرطة اللاصقة). قم بتخزين الجوارب جافة مع حمايتها من الشمس والحرارة، وفي العبوة الأصلية قدر الإمكان.

يرجى الغسل بالمقلوب وعدم استخدام منعم الأقمشة!

-  دورة غسيل هادئة
-  لا تستعمل مبيضات
-  تجفيف لطيف
-  لا يكوى
-  لا ينظف كيماويًا

تركيبة الخامة

تُستخدم مواد البولي أميد (Polyamid) والإيلاستين (Elastan) والقطن (Baumwolle) في بعض المنتجات. للحصول على بيانات محددة، يرجى الرجوع إلى الملصق النسيجي المُثبت في الجورب الخاص بك.

تعليمات الارتداء

1. للارتداء، اقلب الجورب من الداخل للخارج حتى القدم. قم بفرد جزء القدم فوق أصابع قدمك ثم فوق مشط القدم.
2. قم الآن بسحب جزء الساق بعناية فوق كعبك. يرجى عندئذ تجنب شد الجورب لأعلى من الخافة اللاصقة أو خافة النهاية.
3. قم بفرد الجزء المتبقي من الجورب بالتساوي لأعلى دون الإفراط في الشد. وأخيرًا، قم بتوزيع مساحات الجورب على الساق حتى يصبح خاليًا من التجاعيد.

親愛的用戶：

很榮幸您選擇 Ofa 的壓力襪，感謝您對我們的信任。請耐心仔細閱讀本產品資訊。以發揮壓力療法之最佳功效！

應用領域

壓力襪用於治療手臂與腿部的靜脈疾病和淋巴疾病，亦或消除脂肪性水腫。視不同適應症而定，可使用各種類型的產品。

醫用壓力襪之作用原理

針對各種適應症選取產品並向相應部位的血管施壓，從而促進血液回流，改善組織的血液微循環，並提高淋巴循環量。

 重要提示

"使用壓力襪前請先諮詢醫師建議。每日穿著壓力襪及定期進行醫療檢查以確保療效！壓力襪必須經由受過醫學相關培訓之專業人員出售。您的專業銷售人員也為您提供諮詢，指引您正確穿著壓力襪。穿著時腿部如有疼痛感或出現皮膚刺激狀況，請立即就醫診治。可在穿著過程中多次輕微移動黏性帶位置，避免該部位出現皮膚刺激狀況。若要與其他醫療輔具一同穿戴，請先與您的主治醫師討論。我們依據全面的品質保證規定檢測此款產品。如您有任何投訴意見，請與您的專業銷售人員聯絡。產品出現破損時請勿自行修補，請將壓力襪送回至購買時所聯絡的專業銷售人員。經與其他衣物摩擦而出現的毛毯，並不會降低壓力襪的品質。"

保養提示

產品即拆即用。建議第一次穿著前請先清洗。之後請每日手洗，或使用洗衣機的柔洗程序洗滌。使用不含衣物柔軟精的溫和洗滌劑（比如 Ofa Clean 專用洗滌劑）在不超過 40°C 的水溫中洗滌壓力襪並沖洗乾淨。可溫和烘乾壓力襪，請不要擰乾。將壓力襪晾在陰涼通風處或在烘乾機的溫和程序中烘乾，請不要將壓力襪放在加熱器上或直接曝曬於陽光下。不得熨燙壓力襪。為了保證壓力襪的產品功效，請不要使用任何化學洗滌劑、汽油或衣物柔軟精。這些物質會對壓力襪的織物面料造成破壞。壓力襪一般耐油耐脂，但請不要接觸藥膏。壓力襪的黏性帶含有有機硅塗料，一般不得接觸溶劑、藥膏、保溼清洗液和身體乳。否則可能對黏性帶的黏性造成永久損壞（腿毛和乾燥皮膚也可能影響黏性帶的功能）。請將壓力襪存放於乾燥處，避免陽光直射和高溫，如有可能請將壓力襪放入原裝包裝中。

請從內往外清洗並且勿使用柔軟精！

-  柔洗程序
-  請勿漂白
-  溫和烘乾
-  請勿熨燙
-  請勿使用化學清潔劑

材質成份

- 53 % 聚醞胺
- 25 % 棉
- 22 % 彈性纖維

穿著指南

1. 將壓力襪內面穿入腳部。將壓力襪從腳趾穿過腳底並向上拉到腳面。
2. 小心將壓力襪拉到腳跟位置並向上拉到腿部。向上拉時注意避免拉動壓力襪的收口處或黏性帶邊緣。
3. 把剩下的壓力襪均勻向上拉，不得過分拉伸。最後將壓力襪均勻地穿在腿上，直到壓力襪沒有褶皺。

穿著提示

早晨起床後，在腿部還沒有腫脹時立即穿上壓力襪。請不要將壓力襪的收口處或黏性帶邊緣向上拉，而是用手從下往上拉起。為了方便穿上壓力襪並避免織物面料破壞，建議戴上家用橡膠手套。首飾和長指甲可能勾破壓力襪。

同時須要注意定期保養腳部並保持鞋子乾淨。請諮詢您的醫療專業銷售人員如何購買 Ofa 公司的 Ofa Grip 專用手套、以及 Ofa Fit Magnide 露趾壓力襪與不露趾壓力襪的穿著輔助腳套。

適應症 (參見醫用壓力襪指南 AWMF

037/005, 12/18 版)

- 改善靜脈症狀及靜脈慢性疾病患者的生活品質
- 預防及治療靜脈水腫
- 預防及治療靜脈皮膚變化
- 溼疹與色素沉澱
- 皮膚脂質硬化與白色萎縮症
- 治療及減緩腿部靜脈性潰瘍疼痛，也可預防復發
- 治療動脈或靜脈引起的靜脈性潰瘍 (參見禁忌症!)
- 靜脈曲張
- 靜脈曲張治療後之初始階段
- 功能性靜脈機能不全
- 靜脈畸形
- 靜脈血栓
- 血栓形成後的狀況
- 血栓後綜合症
- 就診病患的血栓預防措施
- 淋巴水腫
- 孕期水腫
- 創傷後/術後水腫
- 反覆特發性水腫
- II期以上脂肪性水腫
- 長期未活動導致的瘀血症 (關節瘀血綜合症、四肢癱瘓和局部癱瘓)
- 職業性質引起的水腫 (長期站立、坐姿)
- 無法調整的藥物治療引起的水腫
- 肥胖症伴隨功能性靜脈機能不全
- 腿部發炎引起之皮膚病
- 孕期出現之噁心、頭暈和充血症狀
- 燒傷後的情況
- 傷疤治療

禁忌症

絕對禁忌症：

- 晚期動脈末梢阻塞疾病 (如達到以下其中一項參數: ABPI < 0.5, 踝動脈壓力 < 60 mmHg, 腳趾壓力 < 30 mmHg 或 TcPO2 < 20 mmHg 腳背)
- 失償心臟衰竭
- 膿毒性靜脈炎
- 疼痛性骨青腫
- 需要留意的風險**
(在考慮到效用/風險的情況下做出治療決定)
- 溼疹性皮膚病
- 不適應壓力襪材質
- 四肢出現嚴重的感知功能故障
- 晚期神經末梢疾病 (比如糖尿病)
- 慢性多發性關節炎

如未遵照以上禁忌症規定，您必須自行承擔所有責任。

⚠ 風險和副作用

醫用壓力襪可能會導致皮膚壞死以及周圍神經的壓力損傷。建議在有風險的部位填充軟墊材料。皮膚敏感的用戶穿著壓力襪時可能會出現瘙癢和皮膚症狀。因此建議先進行適當皮膚護理。

如出現以下症狀，請立即脫下壓力襪，諮詢醫師是否繼續治療：腳趾發紫或蒼白、感覺異常或麻木、疼痛、呼吸短促或出汗、急性活動機能不全。

保固

醫用壓力襪在合適環境中可存放 3 年。當定期使用並正確保養壓力襪時，穿著時間最長為 6 個月。超出此期限後，產品即不在保固範圍內。針對由於正常磨損或使用不正確而導致的缺陷，一般不包含在保固範圍內。使用不正確也指，後期未經過製造公司同意擅自更改產品特性。輕微變色不視為缺陷，出現這種情況的原因在於染色工藝。因此相應產品不包含在退換貨的範圍內。產品僅用於治療一名病患。如將本產品交由其他用戶使用，則製造商不對此產品承擔任何責任。

廢棄處置

達到使用期限後，請依據當地法律條例廢棄處置本產品。

告知義務

法律規定病患與用戶在使用本產品過程中，如出現或可能出現導致健康狀況惡化或導致死亡的嚴重症狀，立即告知製造商或負責的國家監管機構 (德國的機構為聯邦藥物和醫療器械管理局 (BfArM))。

사용자 여러분, 안녕하세요?

오파 밤베르크(Ofa)의 압박 스타킹을 믿고 선택해주셔서 감사합니다. 잠시 시간을 내어 본 제품 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오. 이를 통해 압박 치료 시 최상의 효과를 얻을 수 있습니다!

용도

압박 스타킹은 팔과 다리에 나타나는 정맥 또는 림프 질환이나 지방 부종의 치료를 위해 사용됩니다. 증상에 따라 다양한 제품을 착용할 수 있습니다.

의료용 압박 스타킹의 작용 원리

각각의 증상에 맞게 압력을 조절한 제품으로, 혈액 순환이 빨라지고 조직 내 미세혈관 순환이 개선되며 림프 흐름도 향상됩니다.

 주요 지침

의료용 압박 스타킹은 반드시 의사와 상담한 후에만 착용하십시오. 매일 착용하고 정기적으로 의사의 진료를 받으면 성공적인 치료 효과를 얻을 수 있습니다! 본 제품은 의학 교육을 받은 전문 인력이 제공해야 합니다. 전문 매장에서도 압박 스타킹의 올바른 착용법을 알려 드립니다. 착용 중 다리에 급성 통증이나 피부 자극이 발생할 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 일과 중 접착 테이프의 위치를 조금씩 이동하면 접착 테이프와 닿는 부분의 피부 반응을 예방할 수 있습니다. 스타킹을 다른 의료용 보조 기구와 함께 착용해야 하는 경우, 반드시 의사와 상의하십시오. 당사는 종합적인 품질 보증의 범위 내에서 당사 제품을 점검합니다. 그럼에도 불구하고 불만 사항이 있는 경우, 담당 판매자에게 문의하시기 바랍니다. 손상이 발생한 경우, 직접 수선하지 말고 구입한 전문 매장을 방문해 주십시오. 다른 의류와 마찰로 인해 생길 수 있는 섬유 덩어리는 스타킹의 품질을 저하시키지 않습니다.

착용 설명서

1. 착용 시 스타킹을 왼쪽 발의 위치에 놓으십시오. 발가락부터 끼운 후 발등까지 스타킹을 당기십시오.

2. 이제 발꿈치를 지나 다리를 조심스럽게 밀어 넣으십시오. 이때 스타킹의 끝부분이나 고정 밴드 부분을 잡고 당겨 올리지 않도록 주의하십시오.

3. 스타킹의 나머지 부분을 조심스럽게 위로 잡아 당기십시오. 이때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 마지막으로 스타킹을 다리에서 적절히 당기거나 조절해 주름 없이 밀착되게 하십시오.

관리 지침

항상 주의하며 제품을 사용해야 합니다. 최초 착용 전 제품을 세탁하는 것이 좋습니다. 이후 손빨래하거나 세탁기의 울/란제리 코스로 스타킹을 세탁하십시오. 스타킹은 별도로 울샴푸(예: Ofa Clean 특수 세제)를 사용해 최고 40°C로 세탁하십시오. 이때 섬유 유연제를 사용하지 마십시오. 세탁 후 잘 행구십시오. 스타킹은 약한 세기로 탈수해야 합니다. 이때 비틀어 짜지 마십시오. 압박 스타킹을 외부에 널어 말리거나 건조기의 울/란제리 건조 단계를 이용하여 말리십시오. 히터나 직사광선에 노출시키지 마십시오. 스타킹에 다리를 사용하지 마십시오. 스타킹의 효과를 유지하려면 화학 세정제, 휘발유 또는 섬유 유연제를 사용하지 마십시오. 위 성분은 섬유를 약하게 만듭니다. 압박 스타킹은 지방이나 기름에 크게 민감하지 않지만 연고류와의 접촉은 피하십시오. 실리콘 코팅 고정 밴드가 있는 스타킹의 경우 솔벤트, 연고, 보습용 바디 로션이나 바디 크림이 묻지 않게 하십시오. 그렇지 않을 경우 고정 밴드의 성능이 지속적으로 저하될 수 있습니다(다리 털과 건조한 피부도 성능 저하의 원인이 될 수 있음). 스타킹은 건조하고 직사광선과 열이 닿지 않은 곳에 가능하면 원래 포장에 담아 보관하십시오.

안쪽으로 뒤집어 세탁하며 섬유 유연제를 사용하지 마십시오!

-  울/란제리 세탁 코스
-  표백 금지
-  울/란제리 건조 단계
-  다림질 금지
-  드라이클리닝 금지

소재 구성

폴리아미드 (Polyamid), 엘라스테인 (Elastan) 이 주요 소재이며, 일부 제품의 경우 면 (Baumwolle) 이 사용됩니다. 세부 정보는 스타킹에 부착된 섬유 라벨을 참조하십시오.

착용 팁

스타킹은 다리가 아직 붓지 않은 상태로 기상 후 착용하는 것이 좋습니다. 압박 스타킹의 끝부분이나 고정 밴드 부분을 잡고 당겨 올리면 안 되며, 손으로 아래부분에서 위로 부드럽게 굴리듯이 착용해야 합니다. 손쉬운 착용과 스타킹 원단 손상 방지를 위해 가정용 고무장갑 착용을 권장합니다.

장신구나 긴 손톱 장식은 스타킹을 손상시킬 수 있습니다. 정기적으로 발을 관리하고 올바른 신발을 착용해주시요. 의료용품 전문점에서 Ofa Grip 특수 장갑과 오픈토 및 클로즈드 압박 스타킹용 Ofa 착용 및 탈거 보조 기구에 대해 문의하시기 바랍니다.

증상(의료 압박 치료 관련 가이드라인 AWMF

037/005, 버전18/12 참조)

- 혈관 질환 증상과 만성 혈관 질환으로 고생하는 환자의 삶의 질 개선
- 혈관 부종 예방 및 치료
- 혈관 문제로 인한 피부 변화 예방 및 치료
- 습진 및 각색
- 지방경화 피부염 및 제한성 백색반
- 정맥성 하지 궤양의 치료 및 통증 완화, 재발 방지
- 동맥 및 정맥성 하지 궤양 치료(사용 금지 사유 참조!)
- 정맥류증
- 정맥류증 치료 후 초기 단계
- 기능성 정맥 부전
- 정맥 기형
- 정맥혈전증
- 혈전증 후 상태
- 혈전증 후 증상(PTS)
- 거동이 가능한 환자의 혈전증 예방
- 림프 부종
- 임신 중 부종
- 외상 후 부종/수술 후 부종
- 주기적으로 발생하는 부종
- 림프 부종, 단계 II 이후
- 움직이지 않아 발생하는 혈관 막힘(총혈성 혈액순환 장애 중후군, 사지 부전 마비 및 부분 부전 마비)
- 직업에 따른 부종(장시간 서있거나 앉아서 작업하는 경우)
- 의약품 섭취로 인한 부종, 약물 변경이 불가한 경우
- 기능성 정맥 부전이 있는 비만
- 다리에 나타나는 염증성 피부병
- 임신 중 메스꺼움, 어지러움 및 총혈성 혈액순환 장애
- 연소 후 상태
- 흉터 치료

사용 금지

절대적 사용 금지:

- 진행된 말초혈관병 (이러한 변수 중 하나가 적용되는 경우: ABPI < 0.5, 발목 동맥압 < 60mmHg, 발가락 혈압 < 30mmHg 또는 TcPO2 < 20mmHg 발등 혈압)
- 보상 심부전
- 패혈성 정맥염
- 유통(성) 정고종

조심해야 할 위험(유익성/위험성 평가에 따라 치료 결정)

- 심층성 피부염
- 압박 스타킹 소재에 대한 알레르기 반응
- 사지에서 나타나는 심각한 민감성 반응
- 진행된 말초신경병증(예: 당뇨병 제II형)
- 만성 다관절염

해당 사용 금지 지침을 따르지 않을 경우 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

위험 및 부작용

의료용 압박 스타킹은 피부 괴사 및 말초 신경의 압박 손상을 유발할 수 있습니다. 손상 위험이 있는 부위는 패드를 사용할 것을 권장합니다. 민감성 피부의 경우 압박 스타킹을 착용 시 가려움과 피부 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 피부 관리가 필요할 수 있습니다.

다음과 같은 증상이 나타나면 즉시 스타킹을 벗고 치료 지속 여부를 의사와 상담하십시오: 발가락이 푸르거나 하얗게 변하는 경우, 감각 이상 및 저림 증상, 통증 증가, 호흡 곤란 및 발한 증상, 급성적인 운동 제한.

보증

의료용 압박 스타킹은 적절한 보관 조건에서 3년 동안 보관할 수 있습니다. 또한 용도에 맞게 사용하고 적절하게 관리할 경우 최대 6개월간 착용할 수 있습니다. 이 기간이 경과한 후에는 제품이 보증 대상에서 제외됩니다. 일반적인 마모와 부적절한 사용으로 인한 결함은 보증 대상에서 제외됩니다. 제조사가 수행하지 않은 사후 제품 변경 또한 부적절한 사용에 해당합니다. 도색 공정별로 발생할 수 있는 경미한 이색은 결함으로 인정되지 않습니다. 따라서 해당 상품은 교환 및 반품 대상이 아닙니다. 제품은 한 명의 환자만 사용해야 합니다. 다른 사람이 재사용하는 경우, 제조사는 해당 제품을 책임지지 않습니다.

폐기

사용 기간이 지난 제품은 지역별 규정에 따라 폐기하십시오.

신고 의무

법적 규정에 따라 환자와 사용자는 건강 상태가 심각하게 저해되거나 사망에 이를 수 있는 제품 관련 사고를 제조사 및 해당 국가의 담당 부서(독일의 경우, BfArM)에 즉시 신고해야 합니다.

Эрхэм хэрэглэгч,

та Ofa даралтын оймс авахаар шийдсэнд баяртай байна, бидэнд итгэл хүлээлгэсэнд баярлалаа. Энэ бүтээгдэхүүний мэдээллийг анхааралтай уншина уу. Даралтын эмчилгээний хамгийн үр дүнтэй байдлын төлөө!

Ашиглах зорилго

Даралтын оймсыг гар, хөлний флебологи, лимфологийн өвчин, өөх тосны хаванг эмчлэхэд ашигладаг. Заалтаас хамааран өөр өөр бүтээгдэхүүнийг ашиглана.

Эмнэлгийн даралтын оймсны ажиллах зарчим

Тус тусын заалт, хяналттай даралтад тохирсон бүтээгдэхүүн нь цусны урсгалыг хурдасгаж, эд эсийн бичил эргэлтийг сайжруулж, лимфийн урсгалыг нэмэгдүүлдэг.

 Чухал заавар

Эмчтэй зөвлөлдсөний дараа л эмнэлгийн шахалтын оймс өмс. Та үүнийг өдөр бүр өмсөж, эмчийн үзлэгт тогтмол хамрагдсанаар эмчилгээний үр дүнг баталгаажуулдаг! Оймсыг эрүүл мэндийн боловсролтой ажилтнууд танд хүлээлгэн өгөх ёстой. Мэргэжлийн дилер даралтын оймсыг хэрхэн зөв өмсөх талаар зөвлөгөө өгөх болно. Хэрэв та бүтээгдэхүүнийг өмсөж байх үед хөлний цочмог өвдөлт, арьс цочрох шинж тэмдэг илэрвэл эмчид яаралтай хандаарай. Өдөрт хэд хэдэн удаа наалдамхай туузыг бага зэрэг хөдөлгөж, наалдамхай туузны талбайн арьсны урвалаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Хэрэв оймсыг бусад эмнэлгийн хэрэгсэлтэй хослуулан өмсөх бол эмчид хандана уу. Бид чанарын иж бүрэн баталгаажуулалтын нэг хэсэг болгон бүтээгдэхүүнээ туршиж үздэг. Хэрэв танд ямар нэгэн гомдол байгаа бол мэргэжлийн дилертэйгээ холбоо барина уу. Гэмтлийг өөрөө засч болохгүй, харин оймсыг худалдаж авсан жижиглэнгийн дэлгүүрт буцааж өгнө үү. Хувцасны бусад зүйлтэй үрэлтснээс болж үүсэх зангилаа нь оймсны чанарыг бууруулдаггүй.

Өмсөх заавар

1. Өмсөхдөө оймсыг дотор талаас нь хөл хүртэл эргүүлнэ. Хөлийн хэсгийг хөлийн хуруун дээр, дараа нь дээд өлмий дээгүүр гулсуулна.

2. Одоо хөлний доод хэсгийг өсгий дээгүүр болгоомжтой татах хэрэгтэй. Оймсыг дээд захаас эсвэл наалдамхай ирмэгээр нь дээш татахаас зайлсхий.

3. Үлдсэн оймсыг хэт сунгалгүйгээр жигд татаж ав. Эцэст нь оймсыг үрчлээсгүй болтол нь хөл дээрээ тараана.

Арчилгааны заавар

Бүтээгдэхүүн нь даруй шууд хэрэглэхэд тохиромжтой. Бид үүнийг анх удаа өмсөхөөс өмнө угаахыг зөвлөж байна. Үүний дараа өдөр бүр гараар эсвэл машиныхаа зөөлөн горимд угаана уу. Оймсыг даавуу зөөлрүүлэгчгүй зөөлөн угаалгын бодисоор (жишээ нь, Ofa Clean тусгай угаалгын нунтаг) тусад нь 40 хэмээс хэтрэхгүй температурт угааж, сайтар зайлж угаана. Оймсыг зөөлөн сэгсрэх боломжтой, гэхдээ тэдгээрийг мушгиж шахаж болохгүй. Даралтын оймсыг агаарт эсвэл хатаагчныхаа зөөлөн горимд хатаана, гэхдээ гэрийн халаалт эсвэл нарны шууд тусгалд бүү тавь. Оймсыг хэзээ ч индүүдэж болохгүй. Оймсныхоо үр нөлөөг хадгалахын тулд химийн угаалгын нунтаг, бензин, даавуу зөөлрүүлэгч хэрэглэж болохгүй. Эдгээр бодисууд нь оймсны сүлжмэлд халддаг. Даралтын оймс нь өөх тос, тосонд мэдрэмтгий биш боловч тосон түрхлэгтэй харьцах ёсгүй. Оймсны силикон бүрээстэй наалдамхай тууз уусгагч, тосон түрхлэг, чийгшүүлэгч угаалгын тос, биеийн тос зэрэгт өртөх ёсгүй. Эс тэгвэл наалдамхай туузны наалдамхай байдал нь бүрмөсөн алдагдах боломжтой (мөн хөлний үсэрхэг байдал, хуурай арьс туузны үйл ажиллагааг хязгаарлана). Оймсыг хуурай, нар, халуунаас хамгаалж, боломжтой бол анхны савлагаанд нь хадгална.

Дотроор нь эргүүлэн угааж, даавуу зөөлрүүлэгч хэрэглэж болохгүй!

-  Зөөлөн мөчлөгт угаалт
-  Цайруулагч бодисгүй бол
-  Зөөлөн хатаана
-  Индүүдэж болохгүй
-  Хуурай цэвэрлэгээ болохгүй

Материалын найрлага

Полиамид, эластан, зарим бүтээгдэхүүний хувьд хөвөнг ашигладаг. Тодорхой мэдээллийг оймсондоо оёсон нэхмэл шошгоноос харна уу.

Өмсөх зөвлөмжүүд

Өглөө босоод хөл чинь хавдаагүй байхад хамгийн түрүүнд оймс өмс. Даралтын оймсыг дээд ирмэг эсвэл наалдамхай туузнаас нь дээш татахгүй, харин доороос нь гараараа татаж аваарай. Сүлжмэл оймсыг өмсөхөд хялбар болгох, хамгаалахын тулд гэр ахуйн резинэн бээлий өмсөхийг зөвлөж байна.

Үнэт эдлэл, урт хумс нь оймсыг гэмтээж болно. Мөн тогтмол педикюр, зөв гутал өмсөж байхыг анхаараарай. Ofa Grip тусгай бээлий болон нээлттэй, битүү хуруутай шахалтын оймсны өмсөж, тайлах практик хэрэглүүрийн талаар эмнэлгийн дэлгүүрээсээ асуугаарай.

Заалтууд (мөн 12/18-ны AWMF 037/005 эмнэлгийн даралтын эмчилгээний удирдамжийг үзнэ үү)

- Архаг венийн өвчний үед венийн шинж тэмдэг, амьдралын чанарыг сайжруулах
- Венийн хаван үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх
- Венийн арьсны өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх
- Экзем ба пигментаци
- Дерматолипосклероз ба атрофи бланш
- Хөлний венийн шархлааны эмчилгээ, өвдөлтийг бууруулах, түүний дотор дахилтаас урьдчилан сэргийлэх
- Артерийн болон венийн хөлний шархлааны эмчилгээ (эсрэг заалтыг үзнэ үү) хөлийн судлууд
- Варикоз
- Варикозын эмчилгээний дараах эхний үе шат
- Венийн үйл ажиллагааны дутагдал
- Венийн гажиг
- Венийн тромбоз
- Тромбозын дараах нөхцөл байдал
- Тромбозын дараах хам шинж
- Хөдөлгөөнтэй өвчтөнг тромбозоос урьдчилан сэргийлэх
- Лимфедема
- Жирэмсэн үед хаван үүсэх
- Гэмтлийн ба мэс заслын дараах хаван
- Цикл хэлбэрийн идиопатик хаван
- 2 дахь үе шатнаас хойших өөх тосны хаван
- Хөдөлгөөнгүй байдлын үр дүнд үүссэн түгжрэл (артрогенийн түгжрэлийн синдром, мөчний парези ба хэсэгчилсэн парези)
- Мэргэжлийн хаван (зогсох, суух ажил)
- Өөрчлөлт хийх боломжгүй тохиолдолд эмтэй холбоотой хаван
- Венийн үйл ажиллагааны дутагдалтай үеийн таргалалт
- Хөлний үрэвсэлт дерматоз
- Жирэмсэн үед дотор муухайрах, толгой эргэх, түгжрэл үүсэх
- Түлэнхийн дараах байдал
- Сорви эмчилгээ

Эсрэг заалтууд

Үнэмлэхүй эсрэг заалтууд:

- Захын артерийн архаг өвчин (хэрэв эдгээр үзүүлэлтүүдийн аль нэг нь байвал: ABI<0.5, шагайны артерийн даралт<60 ммМУБ, хурууны даралт<30 ммМУБ эсвэл TcPO2<20 ммМУБ хөлний ар)
- Зүрхний декомпенсацийн дутагдал
- Септик флебит
- Phlegmasia coerulea dolens
- Харгалзах эрсдэл**
- (Үр ашиг/эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслсэн эмчилгээний шийдвэр)**
- Нойтон дерматоз
- Даралтын оймсны материалыг үл тэвчих
- Мөчний мэдрэхүйн хүнд хэлбэрийн эмгэг
- Захын мэдрэлийн эмгэг (жишээлбэл, чихрийн шижин гэх мэт)
- Архаг полиартрит

Эдгээр эсрэг заалтуудыг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд аливаа хариуцлага хүлээхгүй.

▲ Эрсдэл ба сөрөг нөлөө

Эмнэлгийн даралтын оймс нь арьсны үхжил, захын мэдрэлийн даралтыг гэмтээх шалтгаан болдог. Эмзэг газруудад жийргэвч тавихыг зөвлөж байна. Эмзэг арьс нь даралтын оймс дор загатнах, арьсны асуудал үүсгэдэг. Иймд арьс арчилгааг зохих хэмжээнд байлгахыг зөвлөж байна.

Дараах шинж тэмдэг илэрвэл оймсоо нэн даруй тайлж, эмчилгээгээ үргэлжлүүлэхийн өмнө эмчид хандана уу: хөлийн хуруунууд хөх эсвэл цагаан өнгөтэй болох, тааламжгүй болох, мэдээ алдах, өвдөлт ихсэх, амьсгал давчдах, хөлрөх, хөдөлгөөний хурц хязгаарлалт.

Баталгаа

Эмнэлгийн даралтын оймсыг зохих ёсоор хадгалсан тохиолдолд хадгалах хугацаа 3 жилээр хязгаарлагддаг. Үүн дээр байнгын хэрэглээ, зөв арчилгаатай бол хамгийн ихдээ 6 сар өмсөх хугацаа нэмэгддэг. Энэ хугацааны дараа бүтээгдэхүүнийг баталгаат хугацаанаас хасна. Үндсэндээ ердийн элэгдэл, буруу ашиглалтаас улбаатай согогуудыг баталгаат хугацаанаас хасдаг. Ердийн элэгдлээс эсвэл зохисгүй ашиглалтаас үүдэлтэй согог, түүнчлэн үйлдвэрлэгчээс хийгээгүй бүтээгдэхүүнд гарсан өөрчлөлтүүд нь үндсэндээ баталгаат хугацаанаас хасагдана. Хувь хүний будах үйл явцын улмаас үүсч болох өнгөний бага зэрэг өөрчлөлтийг согог гэж үзэхгүй. Тиймээс харгалзах барааг солилцох, буцаахаас хасдаг. Бүтээгдэхүүн нь нэг өвчтөнийг эмчлэхэд зориулагдсан. Бүтээгдэхүүн нь нэг өвчтөнийг эмчлэхэд зориулагдсан. Хэрэв үүнийг дахин ашиглахаар бусад хүмүүст шилжүүлбэл үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүний хариуцлагын хугацаа дуусна.

Устгах

Ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн дүрэм журмын дагуу устгана уу.

Мэдээлэх үүрэг

Хууль эрх зүйн зохицуулалтын дагуу өвчтөн, хэрэглэгчид тухайн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гарсан, эрүүл мэнд нь мэдэгдэхүйц доройтож, үхэлд хүргэж болзошгүй ноцтой ослын талаар үйлдвэрлэгч болон үндэсний эрх мэдэл бүхий хариуцагчдад нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй (Германд BfArM).

Hurmatli foydalanuvchilar,

biz siz Ofa kompression paypoqlarini tanlaganingizdan xursandmiz va sizdan bildirilgan ishonch uchun minnatdormiz. Iltimos, biroz vaqt ajrating va mahsulot haqidagi quyidagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Kompression muolajangizning optimal samarasi uchun!

Qo'llanilishi

Kompression paypoqlar qo'l va oyoqlarning flebologik hamda limfologik kasalliklarini davolashda, shuningdek, lipedema kasalligida qo'llaniladi. Kasallik alomatlariga qarab turli xil mahsulotlar qo'llaniladi.

Tibbiy kompression paypoqlarning ta'sir qilish prinsipi

Ko'rsatmaga binoan tanlangan mahsulotlar va nazorat qilinadigan bosim orqali qonning qaytishi tezlashadi, to'qimalarda mikrosirkulyatsiya jarayoni yaxshilanadi hamda limfa oqimi jadallashadi.

 Muhim ko'rsatmalar

Tibbiy kompression paypoqlarni faqat shifokoringiz maslahatidan keyin kiying. Har kunlik qo'llash va doimiy shifokor nazoratida bo'lish orqali siz davolanish muvaffaqiyatini ta'minlaysiz! Paypoqlarni topshirish tibbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Sizning mutaxassis dilingiz sizga kompression paypoqlarni qanday qilib to'g'ri kiyish haqida maslahat beradi. Agar uni kiyishda oyoqda o'tkir og'riq yoki terida qichishish paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Bir kun davomida yopishqoq lentani bir necha marta siljitish orqali yopishqoq lentalar sohasidagi teri reaksiyalarining oldi olinishi mumkin. Agar paypoqni boshqa tibbiy vositalar bilan birgalikda foydalanish zarur bo'lsa, buni shifokoringiz bilan maslahatlashing. Biz mahsulotlarimizni har tomonlama sifat kafolati doirasida sinovdan o'tkazamiz. Agar sizda shunda ham shikoyatlar mavjud bo'lsa, iltimos, mutaxassis dilingizga murojaat qiling. Zararlangan joylarni o'zingiz tuzatmang, balki paypoqni sotib olingan joyga olib boring. Boshqa kiyim-kechak buyumlariga ishqalanish oqibatida paydo bo'ladigan tola tugunlari paypoq sifatini pasaytirmaydi.

Kiyish bo'yicha ko'rsatma

1. Kiyish uchun paypoqni oyoqqa teskari olib boring. Keyin oyoq yuzasidagi paypoqni barmoqlar ustidan va keyin do'ngsa ustidan siljiting.

2. Endi oyoqning yuqori qismiga ehtiyotkorlik bilan tovon orqali torting. Iltimos, paypoqning oxiridan yoki yopishtiruvchi qismidan tortishdan saqlaning.

3. Paypoqning qolgan qismini cho'zmasdan tepaga siljiting. Oxirida esa paypoqni g'ijim qolmaguncha oyoqda taqsimlang.

Parvarishlash uchun ko'rsatmalar

Mahsulot darhol foydalanish uchun mo'ljallangan. Biz uni birinchi marta kiyishdan oldin yuvishni tavsiya qilamiz. Shundan so'ng har kuni qo'lda yoki kir yuvish mashinangizning yumshoq yuvish rejimida yuving. Paypoqlarni alohida yumshatuvchi yuvish vositalari bilan (masalan, Ofa Clean maxsus yuvish vositalari) maksimal 40° C da yuving va yaxshilab chayib tashlang. Paypoqlar ehtiyotkorlik bilan chiqarilishi mumkin, iltimos, ularni siqib chiqarib olmang. Kompression paypoqlaringizni havoda yoki quritgichingizning yumshoq rejimida quriting, biroq uni isitgich ustiga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga qo'ymang. Paypoqlarni hech qachon dazmollamang. Paypog'ingiz ta'sir samaradorligini saqlab qolish uchun, iltimos, kimyoviy tozalash vositalari, benzin yoki mato yumshatgichlardan foydalanmang. Ushbu moddalar trikotaj mahsulotlariga zarar yetkazadi. Kompression paypoqlar yog' va moylarga ancha chidamli, lekin mazlar bilan aloqaga kirishmasligi kerak. Silikon qoplamalga ega yopishqoq lentali paypoqlar odatda eritmalar, mazlar, namlovchi yuvish losonlari hamda tana parvarishi uchun qo'llanadigan kremlar bilan aloqaga kirishmasligi kerak. Aks holda yopishqoq lentalarining yopishqoqligi doimiy ravishda buzilishi mumkin (oyoqdagi tuklar va quruq teri ham yopishqoq lentalarining funksiyasini cheklashi mumkin). Paypoqlarni quruq va quyosh hamda issiqlikdan holi joyda, iloji bo'lsa, o'zining original qadog'ida saqlang.

Iltimos, teskari tomonini yuving va mato yumshatgichdan foydalanmang!

-  Yumshoq yuvish funksiyasi
-  Oqartirmang
-  Avaylab quriting
-  Dazmollamang
-  Kimyoviy ishlov berish orqali tozalamang

Materiallar tarkibi

Poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) va ba'zi mahsulotlar uchun paxta (Baumwolle) ishlatiladi. Batafsil ma'lumotni paypog'ingizga qo'shib tikilgan yorliqdan olishingiz mumkin.

Kiyish bo'yicha tavsiyalar

Paypoqlarni erta tongda o'randan turgandan so'ng, hali oyoqlaringiz shishlardan holi bo'lganda kiying. Iltimos, siqish paypog'ini yuqori yoki yopishtiruvchi tomondan tortmang, aksincha qo'llaringiz bilan yuqoriga siljiting. Kiyishni osonlashtirish va matoni himoya qilish uchun uy rezina qo'lqoplaridan foydalanishni tavsiya etamiz.

Taqinchoqlar va uzun tirnoqlar paypoqqa zarar yetkazishi mumkin. Iltimos, oyoqning doimiy parvarishiga va oyoq kiyimning benuqson ekanligiga ham e'tibor bering. Maxsus tibbiy do'kondan Ofa Grip maxsus qo'lqoplari va ochiq hamda yopiq uchli siquvchi paypoqlarni kiyish va yechishda yordam beruvchi ixcham Ofa moslamalari haqida so'rang.

Ko'rsatmalar (shuningdek, 12/18 holatiga ko'ra AWMF 037/005 tibbiy kompressiya terapiyasi qo'llanmasiga qarang)

- Surunkali vena kasalliklarda venoz simptomlarni va hayot sifatini yaxshilash
- Venoz shishlari profilaktikasi va davolash
- Venoz teri o'zgarishlari profilaktikasi va davolash
- Egzema va pigmentatsiya
- Dermatoliposkleroz va atrofiya
- Vena oyoq yaralarida terapiya va og'riqni kamaytirish, shu jumladan qaytalanishga qarshi profilaktika
- Arterial va venoz oyoq yaralarini davolash (qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga qarangi!)
- Varikoz
- Varikozga qarshi muolajadan keyingi dastlabki bosqich
- Funksional vena yetishmovchiligi
- Venoz malformatsiya
- Vena trambozi
- Trombozdan keyingi holat
- Post-trombotik sindrom
- Ko'chma bemorlarda tromboz profilaktikasi
- Limfedema
- Homiladorlik davridagi shish
- Jarohatdan keyingi/jarrohlik amaliyotidan keyingi shishlar
- Davriy xarakterga ega idiopatik shish
- Lipedema II bosqichdan
- Kamharakatlilik natijasida uvishish holatlari (antrogenik vena yetishmovchiligi, qo'l-oyoqlardagi falajlik yoki qisman falajlik)
- Kasbiy faoliyat bilan bog'liq shishlar (tik turib yoki o'tirib ishlanadigan kasblar uchun)
- Dori-darmon bilan bog'liq yaralarda, agar dori surtishning imkoni bo'lmasa
- Funksional vena yetishmovchiligi bilan semirish
- Oyoqlarning yallig'lanishli dermatoz
- Homiladorlik paytida ko'ngil aynishi, bosh aylanishi va uvishish muammolari
- Kuyishdan keyingi holat
- Chandiqlarni davolashda

Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar
Mutlaqo qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar:

- O'tkazib yuborilgan pereferik arterial kasallik (agar quyidagi parametrlardan biri mos kelsa: ABPI < 0,5, to'piq arteriya bosimi < 60 mmHg, oyoq panjalari bosimi < 30 mmHg yoki TcPO2 < 20 mmHg oyoqning do'ngsa qismi)
- Dekompensatsiyalashgan yurak yetishmovchiligi
- Septik flebit
- Og'riqli ko'k flegmaziya

E'tibor qilinishi kerak bo'lgan xavflar
(Foyda/xavflarni hisobga olgan holda davolanish qarori)

- Suyuqlik ajraladigan dermatoz
- Kompression paypoq materiallariga chidamsizlik
- Oyoq-qo'llar ning ta'sirchanlik faoliyatining buzilishi
- Rivojlangan periferik nevropatiya (masalan, qandli diabet)
- Surunkali poliartrit

Ushbu qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga amal qilinmagan holda, har qanday javobgarlik rad etiladi.

Xatarlar va nojo'ya ta'sirlar

Tibbiy kompression paypoqlar teri nekroziga va periferik nervlarning bosim orqali shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Xavf sohalarini to'ldirish tavsiya etiladi. Nozik terida qo'llanilganda kompression paypoqlar ostida qichishish yoki teri muammolari yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli terini yetarli darajada parvarish qilish tavsiya etiladi.

Quyidagi alomatlar paydo bo'lsa, darhol paypoqni yechib tashlang va terapiyani davom ettirish borasida shifokor bilan maslahatlashing: Oyoq barmoqlarining ko'karishi yoki oqarishi, g'ayritabiiy hislar va eshitish qobiliyatining pasayishi, kuchayayotgan og'riq, nafas qisilishi va terlash, harakatchanlikning cheklanishi.

Kafolat

Tibbiy kompression paypoqlarining saqlanish muddati, agar u to'g'ri saqlansa, 3 yilni tashkil etadi. Bunga doimiy foydalanish va to'g'ri parvarish bilan maksimal 6 oy bo'lgan kiyish vaqti qo'shilgan. Ushbu muddat tugagandan so'ng mahsulotning kafolat muddati ham tugaydi. Eskirish yoki noto'g'ri qo'llash oqibatida kelib chiqadigan kamchiliklar kafolatdan chiqariladi. Shuningdek, mahsulotga ishlab chiqaruvchi tomonidan amalga oshirilmagan keyingi o'zgarishlar ham noto'g'ri foydalanish sifatid baholanadi. Alohida bo'yash jarayoni sababli kelib chiqadigan rangning biron o'zgarishi nuqson hisoblanmaydi. Shu sababli tegishli tovarlar ayirboshlash va qaytarishdan istisno qilinadi. Mahsulot faqat bir bemorni parvarish qilish uchun mo'ljallangan. Agar u boshqa shaxslarga qayta ishlatish uchun berilsa, ishlab chiqaruvchining mahsulotga bo'lgan javobgarligi tugaydi.


Utilizatsiya qilish

Foydalanish muddati tugagandan so'ng, mahsulotni mahalliy qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ma'lumot berish majburiyati

Qonunga muvofiq, mijozlar va foydalanuvchilar ushbu mahsulot bilan bog'liq holda yuzaga kelgan, sog'lig'ining yomonlashishiga yoki o'limga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy hodisalar to'g'risida ishlab chiqaruvchiga va mas'ul davlat tashkilotiga (Germaniyada BfArM) xabar berishlari shart.

Größentabelle¹

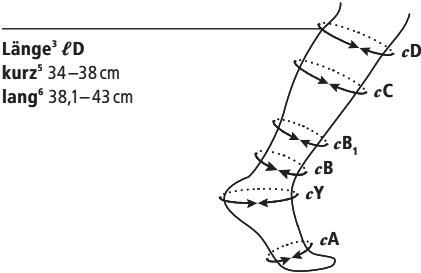

Länge³ ℓ D
kurz⁵ 34–38 cm
lang⁶ 38,1–43 cm

Fußlänge⁴ mit Spitze
kurz⁵ 22,5 – 25,9 cm (Schuhgröße 36 – 40)
lang⁶ 26 – 29,5 cm (Schuhgröße 41 – 45)

1	Größentabelle Table of sizes Tableau des tailles Maattabel Tabella delle dimensioni Tabla de tallas Tabela de tamanhos Πίνακας μεγεθών Ölçü tablosu Tabulka velikostí Tabela rozmiarów Izmëru tabula Suuruste tabel Dydzių lentelė Tabela velikosti Méret táblázat Таблица с размери Størrelsestabel Storlekstabelle Kokotaulukko Tabela velicina Tabela velicina Tabela velicina Таблица размеров Таблица розмірів جدول المقاسات 尺碼表 사이즈 표 Хэмжээний хүснэгт Ўлчам жадвали	2	Umfangmaße (cm) Circumference dimensions (cm) Circonférence (cm) Omvangmaten (cm) Circonferenza (cm) Dimensiones de circunferencia (cm) Perímetro (cm) Περίμετρος (cm) Çevre (cm) Obvod (cm) Obwód (cm) Apkārtmērs (cm) Ümbermõõt (cm) Apimtis (cm) Obseg (cm) Körméret (cm) Обхватка (cm) Omfangsmål (cm) Omkrets (cm) Ympärysmitta (cm) Mjere opsega (cm) Obim (cm) Obim (cm) Обхватные мерки (cm) Обхват (cm) محيط الجورب (سم) 周長 (cm) 둘레 (cm) Тойргийн хэмжээ (см) Айланаси (см)	3	Längenmaß (cm) Length dimensions (cm) Longueur (cm) Lengtemaat (cm) Lunghezza (cm) Dimensión de longitud (cm) Comprimento (cm) Μήκος (cm) Uzunluk (cm) Délka (cm) Długość (cm) Garums (cm) Pikimõõt (cm) Ilgis (cm) Dolžina (cm) Hosszméret (cm) Дължина (cm) Længdemål (cm) Längd (cm) Pituusmitta (cm) Mjera duljine (cm) Dužina (cm) Dužina (cm) Продольные мерки (cm) Довжина кінцівки (cm) قياس الطول (سم) 長度 (cm) 길이 (cm) Уртын хэмжээ (см) Узунлиги (см)
----------	---	----------	--	----------	---

Umfang ² (cm)	I	II	III	IV	V	VI
сD	28 – 35	30 – 38	33 – 41	35 – 44	37 – 47	39 – 51
сC	29 – 36	32 – 40	34 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 52
сB ₁	23 – 29	25 – 32	27 – 34	30 – 37	33 – 40	37 – 44
сB	19 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
сY	28 – 32	29 – 34	30 – 35	32 – 36	33 – 38	34 – 39
сA	19 – 23	20 – 24	21 – 25	22 – 26	22 – 27	24 – 28

4	Fußlänge mit Spitze (Schuhgröße) Foot length with toe (shoe size) Taille du pied avec pointe (taille de la chaussure) Voetlengte met teen (schoenmaat) Lunghezza del piede con la punta (misura della scarpa) Longitud del pie con punta (talla de calzado) Tamanho do pé com ponta (tamanho do sapato) Μήκος ποδιού με άκρο (μέγεθος παπουτσιού) Uçlu ayak uzunluğu (Ayakkabı numarası) Délka nohy se špičkou (velikost boty) Rozmiar stopy z palcami (rozmiar buta) Pēdas garums ar purngalu (apavu izmērs) Otsaga jalasuurus (kingasuurus) Kojos dydis su priekine dalimi (bato dydis) Velikost stopala pri zaprtih konicah prstov (številka čevljev)	Lábméret lábujjakkal (cipőméret) Дължина на ходилото с пръсти (номер обувки) Fodlængde med spids (skostørrelse) Fotlängd med tå (skostorlek) Jalanpituus, kärki mukaan lukien (kengänkoko) Duljina stopala s prstima (veličina cipela) Veličina stopala sa zatvorenim vrhom (veličina cipele) Dužina stopala sa zatvorenim vrhom (veličina cipele) Длина стопы, с мыском (размер обуви) Довжина стопи для панчіх із закритим миском (розмір взуття) طول القدم بالطرف (مقاس الحذاء) 不露趾壓力襪腳長 (鞋子尺寸) 끝부분 포함 발 길이(신발 치수) Хөлийн урт, үзүүртэй (гүтлэн хэмжээ) Учи билан оёк узунлиги (оёк кийим ўлчами)
---	---	---

5	kurz short court kort corta corto curta κορτή kisa krátká krótkie īsa lühike trumpas kratke	rövid къси kort kort lyhyt kratko kratko kratko короткие стандартна коротка قصير 短款 최소 Богино калта	6	lang long court long lang lunga largo comprida μακριά uzun dlouhá długie gara pikk ilgas dolge	hosszú дълъг lang lång pitkä dugo dugo dugačko длинные стандартна довга طويل 長款 최대 Урт узун
---	--	--	---	--	--

Haben Sie Fragen zu Ihrem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf: 0951 6047 - 333

Sie finden uns
auch auf:



Umfrage

Kundenzufriedenheit

Ihre persönlichen Erfahrungen mit unseren Produkten sind uns wichtig. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um den von Ihnen gekauften Artikel zu beurteilen. Ihre Rückmeldung hilft uns, unsere Produkte zu Ihrer Zufriedenheit weiter zu entwickeln.

Sie können an der Umfrage teilnehmen, indem Sie die angehängte Postkarte ausfüllen. Alternativ können Sie die Fragen online unter **kundenzufriedenheit.ofa.de** beantworten. Zur Umfrage gelangen Sie auch mit dem unten stehenden **QR-Code**. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail mit weiteren Anregungen an **kontakt@ofa.de** senden.

Vielen Dank.

Ihr Ofa Qualitätsmanagement



The logo for 'ofa' is displayed in a bold, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the letter 'a'. The logo is contained within a light beige rectangular box.

Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20

D-96052 Bamberg

Tel. + 49 951 6047-333

Fax + 49 951 6047-180

vertriebsinnendienst@ofa.de

www.ofa.de

Ofa Austria

Wasserfeldstr. 20

A-5020 Salzburg

Tel. + 43 662 848707

Fax + 43 662 849514

kundenservice@ofaaustria.at

www.ofaaustria.at